




Guardián **Mini**

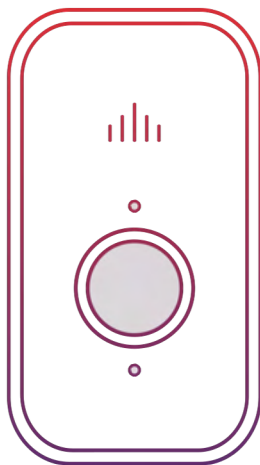

Protección elegante y sofisticada todo en uno
*Impulsado por **Verizon 4G LTE***

Qué hay en la caja



Guardián **Mini**



Base de carga



Clip para
cinturón



Enganche
para cordón

Detalles del producto

A

Altavoz

Comunícate de manera confiable con nuestros operadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de nuestro altavoz de alta definición.

B

Luz de la batería

Parpadea en rojo cuando la batería está baja. El dispositivo parpadeará en la base de carga hasta que esté completamente cargado. Un dispositivo completamente cargado se iluminará en rojo sólido.

C

Luz azul

Esta luz azul intermitente indica que tu dispositivo está completamente funcional. Se vuelve sólida durante las llamadas de emergencia.

D

Botón de ayuda

Presiona este botón para generar inmediatamente una llamada de emergencia.

E

Micrófono

Habla aquí para comunicarte con nuestros operadores atentos.

F

Base de carga

Coloca tu dispositivo aquí para cargar completamente en un período de 3 horas.



Instalación

1 Conecta tu base de carga

Elige un lugar accesible para tu base de carga. Para obtener una carga completa, coloca tu dispositivo en la base de carga durante al menos 3 horas.

2 Carga tu dispositivo

La luz roja de la batería debería parpadear cada pocos segundos mientras se carga. Si no lo hace, asegúrate de que todo esté correctamente colocado en la dirección correcta (*los pines de carga en el dispositivo deben coincidir con los pines de carga en la base*).

3 Cargar el dispositivo hasta su máxima potencia

Una vez completamente cargado, la luz de la batería de tu dispositivo se volverá roja sólida. La luz azul intermitente indica que tu dispositivo está completamente funcional. Carga diariamente para una vida útil óptima de la batería.

NOTA: No conectes el cable de alimentación de la base de carga a una toma de corriente controlada por un interruptor de luz o una regleta de enchufes para evitar cortes accidentales de energía.

NOTA: Limpia periódicamente el interior de tu base de carga y los pines en la parte posterior de tu dispositivo para asegurar una carga adecuada.

Características clave



Ducha segura

El Mini Guardian es resistente al agua y es seguro usarlo en la ducha. Por favor, séquelo inmediatamente al terminar y evite el agua salada, cloro y sumersiones prolongadas.



Cargas más largas

Con hasta 5 días de duración de la batería antes de necesitar una recarga, puedes hacer más y *preocuparte menos*. La luz roja de la batería indicará cuando esté baja parpadeando cada 30 segundos.



Accesorios intercambiables

¡Úsalo a tu manera! El Mini Guardian viene con un cordón magnético y un clip para cinturón que se engancha.



Protección máxima

El Mini Guardian tiene un alcance ilimitado y puede ser llevado a cualquier lugar dentro de los Estados Unidos con cobertura celular suficiente. Está alimentado por Verizon 4G LTE con monitoreo avanzado de ubicación y respaldo WiFi.

Uso en caso de emergencia



Presiona el botón de ayuda de emergencia de tu dispositivo durante 3 segundos.



Habla con un operador de emergencias a través de tu dispositivo.



Enviaremos ayuda a tu ubicación exacta.


Prueba de tu dispositivo



Presiona y mantén presionado el botón de ayuda de emergencia hasta que la luz en tu dispositivo se vuelva azul sólido.



Después de una breve pausa, escucharás un mensaje de voz y luego tonos o timbres.

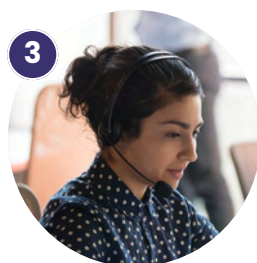

Dile al operador que solo estás haciendo **una prueba**.

Detección de caídas

Cómo funciona la detección de caídas

Cuando la detección de caídas incorporada detecta una caída, llamará automáticamente al Centro de Monitoreo, incluso si no puedes presionar el botón de ayuda. Primero escucharás la grabación: **"Fall detected, hold the Help Button to cancel."**

POR FAVOR, TEN EN CUENTA: Si estás experimentando una emergencia médica, permanece en la línea para ser conectado con un operador. Si no necesitas asistencia o si fue una falsa alarma, simplemente mantén presionado el botón de ayuda hasta que escuches **"Fall detection canceled"** para activar la función de cancelación de la detección de caídas.

Información importante de seguridad

- 1 El Mini Guardian debe llevarse alrededor del cuello, sobre el hueso del pecho, para aumentar la precisión en la detección de caídas. Úsalo por fuera de tu camisa, ya que usarlo por dentro puede reducir el porcentaje de caídas detectadas. No recomendamos usar dispositivos con detección de caídas mientras duermes o en situaciones similares.
- 2 La detección de caídas es un servicio adicional que debe incluirse en tu paquete de protección para poder utilizarse. El acceso a esta función requiere un complemento.

La detección de caídas no detecta el 100% de las caídas. Si puedes, siempre debes presionar el botón de ayuda cuando necesites ayuda. Esto no se puede probar con precisión en casa. El dispositivo utiliza un acelerómetro y un algoritmo propietario para reconocer una caída basada en su velocidad, dirección e impacto.

Reemplazando el cordón con el clip para cinturón

- 1 Quita el cordón de tu dispositivo girando y tirando del clip plateado.
- 2 Tira del clip plateado hacia afuera de tu dispositivo para separarlo del cordón.
- 3 Para asegurar tu dispositivo dentro del clip para cinturón, colócalo dentro del espacio posterior y deslízalo hasta escuchar un clic.

Limpieza y cuidado

Recomendamos limpiar tu dispositivo semanalmente para garantizar una carga adecuada. Toma un paño suave, como uno para limpiar lentes, y frota suavemente los contactos dorados en el dispositivo y la base de carga para eliminar suciedad, aceite y residuos. También puedes rociar limpiador doméstico sobre el paño de limpieza (*sin rociar directamente sobre el dispositivo o la base de carga*) y limpiar para eliminar los residuos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo durará la batería del dispositivo?

La batería recargable de tu dispositivo puede durar hasta 5 días por carga, dependiendo del uso. El tiempo típico de carga es de 3 horas. La luz roja de la batería parpadea mientras se carga y permanece sólida cuando está completamente cargada. Se recomienda encarecidamente cargar diariamente para una vida útil óptima de la batería.

¿Necesito tener WiFi para que funcione el dispositivo?

No. Tu hogar no necesita WiFi para que el dispositivo funcione. Nuestros operadores de emergencia podrán localizar tu posición utilizando las capacidades de GPS, WiFi y triangulación celular del dispositivo, en caso de que alguna vez necesites asistencia de emergencia o no urgente.

¿Puedo usar mi dispositivo en la ducha?

Tu dispositivo de alerta médica es altamente resistente al agua con clasificación IP67, por lo que puedes usarlo en la ducha; no debe sumergirse y no debe utilizarse en agua salada o cloro.