


Euphoria[®]

medical

producing health for the world

Medical Packaging & Sterilization Control Products Catalogue

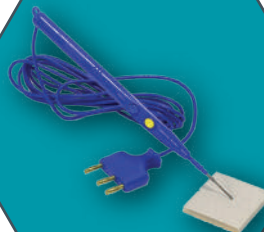

Paketleme Ürünleri

06

Packaging Products

Sterilizasyon Kontrol Ürünleri

16

Sterilization Control Products

Yıkama Makinesi Kontrol Ürünleri

30

Washer Control Products

Konteyner Aksesuarları

36

Containers Accessories





Dren Ürünleri

40

Drainage Systems

PAKETLEME ÜRÜNLERİ

PACKAGING PRODUCTS

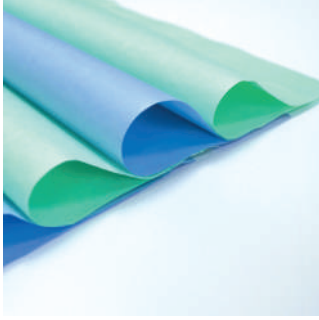

Paketleme Ürünleri Packaging Products

Euphoria Sterilizasyon Ruloları, steril olacak malzemelerin içerisine konulduğu paketleme poşetleri olup 6 ay boyunca ürünün steril olarak saklanması sağlayan, poşet içerisine hiçbir mikroorganizmanın girmesine izin vermeyen ürünlerdir.

Euphoria Sterilizasyon Rulolarının kenarında bulunan işlem indikatörleri su bazlı olup ISO 11140-1 standardını karşılar.

Euphoria Sterilizasyon Ruloları buhar, etilen oksit, formaldehit sterilizasyon yöntemleri için kullanılmaktadır. Sterilizasyon koşulları, sterilize edilecek malzeme ile ilgili olarak son kullanıcı tarafından belirlenmelidir.

Euphoria Sterilizasyon Ruloları ISO 11607 standartlarını karşılayan ürünler olup, en yüksek kalite ve son teknoloji ile üretilmektedir.

OEM üretim yapılabilir.

Euphoria Sterilization Reels provide sterile storage in packages and keep package sterile for 6 months and do not permit microorganisms to enter inside the package after sterilization cycle.

The process indicators that are printed on the side of the Sterilization Reels are water based and conforms with ISO 11140.

Euphoria Sterilization Reels are used for steam, ethylene oxide, formaldehyde sterilization methods. The sterilization conditions should be determined by the end user regarding to material to be sterilized.

Euphoria Sterilization Reels meet ISO 11607 standards and they are manufactured using state-of-art technology with the highest quality.

Products can be produced with your trademark

Sterilizasyon Düz Ruloları Sterilization Flat Reels

Euphoria Sterilizasyon Düz Ruloları medikal kâğıttan 60gr/m² veya 70gr /m² ve 52 mikron, PP+PET yeşil renkli filminden üretilmektedir. 5 cm ile 60 cm arası herhangi bir ölçü için özel üretim yapılabilir. Talep üzerine 100 m uzunlukta da üretilmektedir.

Euphoria Sterilization Flat Reels can be produced from medical paper as 60gr/m2 veya 70gr /m2 and 52 micron, PP+PET green film. Any dimension between 5cm - 60cm can be made on request. On request, 100 m length can be produced as well.



4AFR

Euphoria®

medicall

producing health for the world

Sterilizasyon Körüklü Ruloları Sterilization Gusset Reels



4AGR

Euphoria Sterilizasyon Körüklü Ruloları medikal kâğıttan 60gr/m² veya 70gr /m² ve 52 mikron, PP+PET yeşil renkli filminden üretilmektedir. 7,5 cm ile 50 cm arası herhangi bir ölçü için özel üretim yapılabilmektedir. Körüklü Rulolara hacimsel malzemeler konulabilmektedir ve körüklü rulolar düz rulolara kıyasla daha fazla iç hacme sahiptir.

Euphoria Sterilization Gusset Reels can be produced from medical paper as 60gr/m² or 70gr /m² and 52 micron, PP+PET green film. Any dimension between 7,5cm - 50cm can be made on request. Gusset Reels has increased filling volume and can hold an increased amount of volume in comparison with Flat Reels.

Sterilizasyon Zarfları Sterilization Pouches

Euphoria Sterilizasyon Zarfları tıbbi kâğıttan 60gr/m² veya 70gr / m² ve 52 mikron, PP+PET yeşil renkli filminden üretilmektedir. 4A Sterilizasyon Zarfları kullanıcının isteğine bağlı olarak, istenilen ölçülerde en boy olarak üretilip kullanıma hazır bir şekilde sunulmaktadır.

Euphoria Sterilizasyon Zarfları ISO 11607 standartlarına uygun olup işlem indikatörleri ISO 11140-1 standartlarını karşılamaktadır.

OEM üretim yapılabilmektedir

Euphoria Sterilization Flat Pouches can be produced from medical paper as 60gr/m² or 70gr /m² and 52 micron, PP+PET green film. 4A Sterilization Pouches are customized with regards to their width and length and they are ready-to-use.

Euphoria products comply with ISO 11607 standards while process indicators meet ISO 11140 standards.

Products can be produced with your trademark.

Euphoria®

medicall

producing health for the world

Sterilizasyon Düz Zarfları Sterilization Flat Pouches



4AFP

Euphoria Sterilizasyon Düz Zarfları'nın üç tarafı kapatılmış olup ağız kısmının sterilizasyon işleminden önce son kullanıcı tarafından kapatma makinesi kullanılarak kapatılması gerekmektedir. Euphoria Sterilizasyon Düz Zarfları istenilen boyuta göre kesilip 100'er adet ve film ile sarılı olarak paketlenmektedir.

Euphoria Sterilization Flat Pouches are products in which three sides are closed and one side needs to be closed by final user using closing machine before sterilization process. Euphoria Sterilization Flat Pouches are cut and packed as 100 pieces wrapped in film according to requested dimension.

Sterilizasyon Körüklü Zarfları Sterilization Gusset Pouches

Euphoria Sterilizasyon Körüklü Zarfları'nın üç tarafı kapatılmış olup ağız kısmının sterilizasyon işleminden önce son kullanıcı tarafından kapatma makinesi kullanılarak kapatılması gerekmektedir. Körüklü Zarflar hacimli malzemelerin paketlenmesi için elverişlidir ve istenilen boyuta göre kesilip 100'er adet ve film ile sarılı olarak paketlenmektedir.

Euphoria Sterilization Gusset Pouches are products in which three sides are closed and one side needs to be closed by final user using closing machine before sterilization process. Gusset Pouches are suitable for materials with increased filling volume and they are cut and packed as 100 pieces wrapped in film according to requested dimension.



4AGP

Euphoria®
medical®
producing health for the world

Kendinden Yapışkanlı Sterilizasyon Zarfları *Sterilization Self Sealing Pouches*

Euphoria Kendinden Yapışkanlı Sterilizasyon Zarfları; ağız kapama kısmında kendiliğinden yapışkanlı bulunan, içerisine malzeme konulduktan sonra kapatma makinesine gerek duymadan kendi yapışkanlı ile poşet ağızları kapanabilen ürünlerdir.

Euphoria Kendinden Yapışkanlı Sterilizasyon Zarfları istenilen boyuta göre kesilip 100'er adet ve film ile sarılı olarak paketlenmektedir.

Euphoria Sterilization Self Sealing Pouches are the products which can be sealed with their self-adhesive feature on the closing part of pouch without need of sealer.

Euphoria Sterilization Self Sealing Pouches are cut and packed as 100 pieces wrapped in film according to requested dimension.



4ASSP

Euphoria®

medicall

producing health for the world

Sterilizasyon Reinforced Ruloları *Sterilization Reinforced Reels*



4ARFR

Euphoria Sterilizasyon Reinforced Ruloları normal rulolara göre daha fazla dayanıklılık gösterir ve 60 gr non-woven kağıt ve 52 mikron filminden üretilmektedir. Bu tür rulolar yüksek yırtılma direnci ve yüksek geçirgenlik sunmaktadır.

Euphoria Sterilizasyon Reinforced Ruloları bir tarafı non-woven, bir tarafı film olacak şekilde üretilmektedir. Tek kullanımlık bir ürün olarak kabul edilir ve sterilizasyon işleminde buhar, etilen oksit ve formaldehit ile kullanılabilir. Her işlem için indikatörler rulo üzerinde basılıdır.

Euphoria Sterilization Reinforced Reels has more resistance than normal reels and they are produced from 60g non-woven paper and 52 micron film. This kind of reels offer a high tearing resistance and high permeability.

Euphoria Sterilization Reinforced Reels are manufactured with one side non-woven and one side film. It is considered a single use product and can be used in sterilization process with steam, ethylene oxide and formaldehyde. Indicators for each process are printed on reels.

Reinforced Sterilizasyon Düz Zarfları

Sterilization Reinforced Pouches

Kendinden Yapışkanlı Reinforced Sterilizasyon Zarfları

Sterilization Self Sealing Reinforced Pouches

Euphoria Kendinden Yapışkanlı Reinforced Sterilizasyon Zarfları; ağız kapatma kısmında kendiliğinden yapışkanı bulunan, içerisinde malzeme konulduktan sonra kapatma makinesine gerek duymadan kendi yapışkanı ile poşet ağızları kapanabilen ürünlerdir. Yüksek direnç ve yüksek geçirgenlik ile ağır ve hacimli ürünler için özel olarak üretilmiştir.

Euphoria Sterilization Self Sealing Reinforced Pouches are the products which can be sealed with their self-adhesive feature without need of sealer. With high resistance and high permeability it is specially produced for heavy and bulky product.

4ASSRP

Euphoria Reinforced Sterilizasyon Düz Zarfları'nın üç tarafı kapatılmış olup ağız kısmının sterilizasyon işleminden önce son kullanıcı tarafından kapatma makinesi kullanılarak kapatılması gerekmektedir. Yüksek direnç ve yüksek geçirgenlik ile ağır ve hacimli ürünler için özel olarak üretilmiştir. Euphoria Reinforced Sterilizasyon Düz Zarfları istenilen boyuta göre kesilip paketlenmektedir.

Euphoria Sterilization Reinforced Pouches are products in which three sides are closed and one side needs to be closed by final user using closing machine before sterilization process. With high resistance and high permeability it is specially produced for heavy and bulky product. Euphoria Sterilization Reinforced Pouches are cut and packed according to requested dimension.

Euphoria®

medical

producing health for the world

Tyvek Ruloları Tyvek Reels



4ATR

Euphoria Tyvek Ruloları plazma ile sterilizasyonda kullanılmak üzere 60 gr tyvek kâğıt ve 52 mikron beyaz (şeffaf) (PET+PE) filminden üretilen yüksek kaliteli ürünlerdir.

Euphoria Tyvek Ruloları düşük ısıli gaz plazma sterilizasyonlarında kullanıldığı gibi istenildiği takdirde etilen oksit ve gama sterilizasyonu için de kullanılabilir.

5 cm ile 50 cm arası herhangi bir ölçü için özel üretim yapılabilir. Talep üzerine 100 m uzunlukla da üretilebilir.

OEM üretim yapılabilir.

Euphoria Tyvek Reels are high quality products manufactured from tyvek paper and 52 micron white (transparent) (PET+PE) film to be used in plasma sterilization.

While Euphoria Tyvek Reels are suitable for low temperature gas plasma sterilization, they can be also used for ethylene oxide and gamma sterilization if needed.

Any dimension between 5cm – 50cm can be made on request. 100m length can be produced as well on request.

Products can be produced with your trademark.

Tyvek Zarfları Tyvek Pouches

Euphoria Tyvek Zarfları'nın üç tarafı kapatılmış olup ağız kısmının sterilizasyon işleminden önce son kullanıcı tarafından kapatma makinesi kullanılarak kapatılması gerekmektedir. Euphoria Tyvek Zarfları istenilen boyuta göre kesilmekte ve paketlenmektedir.

Euphoria Tyvek Pouches are products in which three sides are closed and one side needs to be closed by final user using closing machine before sterilization process. Euphoria Tyvek Pouches are cut and packed according to requested dimension.



4ATP

Euphoria

medical

producing health for the world

Krep Kağıtları Crepe Papers



4ACP

Euphoria Krep Kağıtları buhar, etilen oksit ve formaldehit sterilizasyonunda kullanılabilen ürünlerdir.

Kullanıcının isteğine göre farklı boylarda ve 60 gr olarak üretilen ürünlerimiz sterilizasyon ünitelerinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Euphoria Krep Kağıtları mavi ve yeşil renk olarak üretilmektedir. OEM üretim yapılabilir.

Euphoria Crepe Paper is product that can be used for wrapping materials to be sterilized in steam, ethylene oxide and formaldehyde.

Our products which are manufactured with different length and 60gr on the demands of users, provide significant convenience for the users in the sterilization units.

Euphoria Crepe Papers can be produced in blue and green colors. Products can be produced with your trademark.

SMS Kağıtları SMS Wrapping Papers

SMS Kağıtları plazma ile sterilizasyonda kullanılan pakitleme örtüleridir. 43 gr olarak mevcuttur.

Kullanıcının isteğine göre farklı boylarda üretilmektedir. Sadece mavi renk mevcuttur.

OEM üretim yapılabilir.

SMS Wrapping Papers are packing covers used in the sterilization with plasma. It is available as 43 gr.

They can be manufactured with different length according to demand of the user. Only blue color is available.

Products can be produced with your trademark.



4ASMS

Euphoria®

medicall

producing health for the world

Euphoria®


medical

producing health for the world



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

STERILIZATION CONTROL PRODUCTS

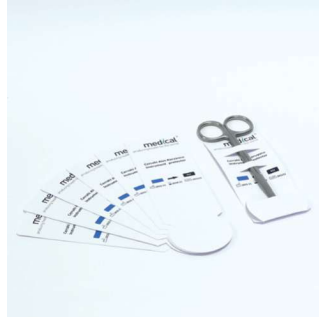

Sterilizasyon Kontrol Ürünleri *Sterilization Control Products*

Euphoria Sterilizasyon Kontrol Ürünleri sterilizasyon sürecini denetlemek için kullanılmaktadır.

Euphoria Sterilizasyon Kontrol Ürünleri su bazlı toksik olmayan boya ile üretilmektedir. ISO 11140-1 sertifikalarına uygun üretilen indikatörlerimiz, kullanıcılara sterilizasyon süreci ve sonucunu değerlendirmede kolaylık sağlayan ürünlerdir. Tüm ürünlerin OEM üretimi yapılabilmektedir.

Euphoria Sterilization Control Products are used to supervise sterilisation process.

Euphoria Sterilization Control products are produced with water based non toxic paint. Our indicators that conform with ISO 11140-1 certificates are products that provide convenience to users to evaluate the sterilization process and result.

All products can be produced with your trademark.

Euphoria®
medical
producing health for the world

Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü *Type 4 Steam Chemical Indicator*

Euphoria Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü, buhar sterilizasyonunda paket içi olarak kullanılan indikatör olup multi parametrenin sağlanmasıyla referans rengine dönen indikatördür. Euphoria Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü, son kullanıcının yanlış paketleme, yükleme sorunları ve sterilizasyon arızalarını değerlendirmesine izin vermektedir. Standart Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörünün yanı sıra daha kolay dokümantasyon için arka kısımda kendinden yapışkan özelliği olan Kendinden Yapışkanlı Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü ve Perforeli Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü seçeneklerimiz mevcuttur.

Euphoria Type 4 Steam Chemical Indicators are the indicators used inside sterilization packages during the steam sterilization and when multi parameters are obtained, the color turns into its reference color. Euphoria Type 4 Steam Chemical Indicators allow the end user to identify incorrect packaging, loading problems and sterilization failures.

Besides standard Type 4 Steam Chemical Indicator we also have Self Adhesive Type 4 Steam Chemical Indicator with self adhesive feature on the back for easier documentation as well as Perforated Type 4 Steam Chemical Indicator



4AC4

Type 5 Buhar Kimyasal Entegratör

Type 5 Steam Chemical Integrator



4AC5INT

Euphoria Type 5 Kimyasal Entegratörleri biyolojik indikatöre en yakın sonucu veren indikatörler olup, biyolojik ölümle doğru orantılı olarak çalışmaktadır.

Buhar sterilizasyonunda paket içi indikatör olarak kullanılan bu ürün, sterilizasyon başarılı ise kabul bölgesinde, başarısız ise ret bölgesinde kalan kimyasal karışımdan oluşmaktadır.

Entegratörlerde referans rengi bulunmamakta, pencereden ilerleyen karışımın bölgesine göre sonuçlar yorumlanabilmektedir.

Euphoria Type 5 Chemical Integrators are the indicators which give proximate result to the biological indicator and they operate in direct proportion to biological death.

This product that is used in a package during steam sterilization process consists of the chemical mixture on the part of the acceptance area if the sterilization is successful and on the part of reject area if the sterilization fails.

There is no reference color in integrators, and the results can be interpreted according to the mixture migrating through the window.

Type 5 Buhar Kimyasal İndikatör


Type 5 Steam Chemical Indicator

Euphoria Type 5 Kimyasal İndikatörleri, bir döngü sırasında zaman ve sıcaklık parametrelerinin varlığını veya yokluğunu onaylayan döngü doğrulama göstergeleridir. Ürünler son kullanıcının yanlış paketleme, yük problemleri ve sterilizasyon arızalarını tanımlamasına izin vermektedir. Euphoria Type 5 Kimyasal İndikatörleri 121 °C ve 134 °C buhar koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Standart Type 5 Buhar Kimyasal İndikatörünün yanı sıra daha kolay dokümantasyon için arka kısımda kendinden yapışkan özelliği olan Kendinden Yapışkanlı Type 5 Buhar Kimyasal İndikatörü seçeneğimiz de mevcuttur.

Euphoria Type 5 Chemical Indicators are cycle verification indicators that confirm the presence or absence of specific time and temperature parameters during a cycle. The products allow the end user to identify incorrect packaging, load problems and sterilization failures. Euphoria Type 5 Chemical Indicators are designed to operate at steam cycle 121°C and 134°C operation conditions.

Besides standard Type 5 Steam Chemical Indicator we also have Self Adhesive Type 5 Steam Chemical Indicator with self adhesive feature on the back for easier documentation.



4AC5

Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü

Type 6 Steam Chemical Indicator

Euphoria Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörleri buhar sterilizasyonunda her paket içerisine konulan, sterilizasyon başarısını gösteren ürünlerdir. Euphoria Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörleri, döngü sırasında belirli zaman, sıcaklık ve basınç parametrelerinin varlığını veya yokluğunu onaylayan doğrulama indikatörleridir.

Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika çeşitleri 121°C'de 15 dakika 134°C'de 3,5 dakikaya uyumlu çalışırken Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakika 121°C'de 20 dakika 134°C'de 7 dakikaya uyumlu çalışmaktadır.

Aşağıdaki Euphoria Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü çeşitlerimiz mevcuttur:

Standart Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakikanın yanı sıra Kendinden Yapışkanlı Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika ve Perforeli Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika mevcuttur.

Standart Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakikanın yanı sıra, Kendinden Yapışkanlı Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakika ve Perforeli Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakika mevcuttur.



Euphoria Type 6 Steam Chemical Indicators are the products that are put into each sterilization package and that indicate success of the sterilization. Euphoria Type 6 Steam Chemical Indicators are cycle verification indicators that confirm the presence or absence of specific time, temperature and pressure parameters during a cycle.

While Type 6 Steam Chemical Indicator 3,5 minutes operates up to 15 minutes at 121°C, up to 3,5 minutes at 134°C, Type 6 Steam Chemical Indicator 7 minutes operates up to 20

minutes at 121°C, up to 7 minutes at 134°C.

We have the following Euphoria Type 6 Steam Chemical Indicator types:

Besides standart Type 6 Steam Chemical Indicator 3,5 minutes we have Self - Adhesive Type 6 Steam Chemical Indicator 3,5 minutes and Perforated Type 6 Steam Chemical Indicator 3,5 minutes.

Besides standart Type 6 Steam Chemical Indicator 7 minutes we have Self - Adhesive Type 6 Steam Chemical Indicator 7 minutes and Perforated Type 6 Steam Chemical Indicator 7 minutes.

Euphoria®
medical
producing health for the world

Type (Class) 6 Kayıt Kartı Type (Class) 6 Registration Card

Euphoria Type 6 Kayıt Kartı buhar sterilizasyonunda her paket içerisine konulan, sterilizasyon başarısını gösteren ürünlerdir. Euphoria Type 6 Kayıt Kartları, döngü sırasında belirli zaman, sıcaklık ve basınç parametrelerinin varlığını veya yokluğunu onaylayan doğrulama indikatörleridir.

Type 6 Kayıt Kartları 3,5 dakika 121°C'de 15 dakika 134°C'de 3,5 dakikaya uyumlu çalışmaktadır. Not eklemek için ek alana sahiptir. Kendinden yapışkanlı olması sayesinde sterilizasyon sonuçlarını belgelemek çok kolay olmaktadır.

Euphoria Type 6 Registration Cards are the products that are put into each sterilization package and that indicate success of the sterilization. Euphoria Type 6 Registration Cards are cycle verification indicators that confirm the presence or absence of specific time, temperature and pressure parameters during a cycle.

Type 6 Steam Chemical Indicator Registration Card 3,5 minutes operates up to 15 minutes at 121°C, up to 3,5 minutes at 134°C. It has additional space for adding notes. Thanks to its self adhesive property it is easy for documentary sterilization results.



4ARC

Bowie Dick Test Paketi Bowie Dick Test Pack



Euphoria Bowie Dick Test Paketlerimiz buhar sterilizasyon cihazlarında, günlük makine sterilizasyon işlemine başlamadan önce kullanılması gereken test paketleridir. Bowie Dick Test Paketi, buhar sterilizatörlerinde hava kaçağı olup olmadığını ve verimli buhar penetrasyonunu test etmek için kullanılmaktadır.

Euphoria Bowie Dick Test Paketinin renk dönüşümü ile buhar sterilizatörlerinin sterilizasyona hazır olup olmadığı anlaşılabilir.

Üretimde farklı Bowie Dick Test Paketi çeşitleri mevcuttur. Bunlar Euphoria Bowie Dick Test Paketi 200 (medikal kâğıda sarılı, krep kâğıda sarılı veya kutulu) ve Euphoria Bowie Dick Test Paketi 400 (medikal kâğıda sarılı ve krep kâğıda sarılı). ve Euphoria Bowie Dick Test Paketi EWS (Erken Uyarı Sayfası)

Not: Ürünler markanızla üretilmektedir.

Euphoria Bowie Dick Test Packs are the testing packages that should be used before starting daily machine sterilization process for steam sterilization devices. Bowie Dick Test Pack is used for the purpose of testing whether there is air leakage and efficient steam penetration in the steam sterilizers.

Euphoria Bowie Dick Test Packs color change allows assurance of whether the steam sterilizers are ready for the sterilization or not.

Different kinds of Bowie Dick Test Packs are available in Euphoria production. These are Euphoria Bowie Dick Test Pack 200 (wrapped in medical paper, wrapped in crepe paper and BD in box) and Euphoria Bowie Dick Test Pack 400 (wrapped in medical paper and wrapped in crepe paper) and Euphoria Bowie Dick Test Pack EWS (Early Warning Test Sheet)

Note: Products can be produced with your trademark

PCD – Helix Yük Kontrol Testi

PCD - Helix Load Control Test

Euphoria PCD – Helix Yük Kontrol Testinin en uç tarafında kendinden yapışkanlı indikatör bulunmaktadır. PCD test kiti 1 m uzunluğunda hortuma sahip olup, Helix test kiti 1,5 m uzunluğunda hortuma sahiptir. Her pakette 100 indikatör bulunmaktadır.

Yük kontrolü için kullanılan bu üründe yapışkanlı indikatör test aparatının en uç kısmına yerleştirilir, hortumun en başından sadece buhar girişi olabilmekte ve hortumun sonunda tek bir noktadan geçerek kimyasal indikatöre ulaşabilmektedir.

Kimyasal indikatörün renk değiştirmesi, şartların zorlaştırılmasına rağmen sağlanıyorsa, o yükteki sterilizasyon işlemi için önemli bir referans olup yükün sterilizasyon başarısı için kayıt olarak saklanmalıdır.

Euphoria PCD – Helix Yük Kontrol Testlerin çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Bowie Dick İndikatörlü PCD - Helix Yük Kontrol Testi

Type 6 İndikatörlü PCD - Helix Yük Kontrol Testi

Etilen Oksit İndikatörlü PCD - Helix Yük Kontrol Testi

Plazma İndikatörlü PCD - Helix Yük Kontrol Testi



Euphorai PCD- Helix Load Control Test has a self adhesive indicator on the far end. The PCD test kit has a 1 m long hose, and the Helix test kit has a 1.5 m long hose. There are 100 indicators in each package.

In this product used for load control, the adhesive indicator is placed at the far end of the test apparatus, steam inlet only can be at the beginning of the hose and it can reach the chemical indicator at the end of the hose by passing at a single point.

4APCD / 4AHLX

If the chemical indicator color change is achieved despite the difficult conditions, it is an important reference for the sterilization process in that load and should be recorded as a record for the successful sterilization of the load.

Types of Euphoria PCD - Helix Load Control Tests are as follows: PCD - Helix Load Control Test with Bowie Dick Indicator PCD - Helix Load Control Test with Type 6 Indicator

PCD - Helix Load Control Test with Ethylene Oxide Indicator

PCD - Helix Load Control Test with Plasma Indicator

Euphoria®

medical

producing health for the world

Biyolojik İndikatörler Biological Indicators

Biyolojik indikatörler, belirli sterilizasyon işlemine tanımlanmış direnç sağlayan canlı mikroorganizmalar içeren test sistemleridir.

Biyolojik indikatörler, belirli sterilizasyon işleminde 106 sayıda mikroorganizmayı öldürmek için gerekli koşulların karşılanıp karşılanmadığı hakkında bilgi sağlar ve bununla sürece güven sağlanmaktadır.


Spesifik tipe bağlı olarak biyolojik indikatörler, buhar, hidrojen peroksit veya etilen oksit sterilizasyon işlemleri için kullanılabilir.

Aşağıdaki 4A Biyolojik İndikatör çeşitlerimiz mevcuttur:

Euphoria Buhar Biyolojik İndikatörü 121- 134 ° C'de buhar sterilizasyon işlemlerini izlemek için tasarlanmıştır. İşlenmiş biyolojik indikatörün çeşite göre son okuma 60 +/- 2 ° C'de 3 saatlik (4ARSBI) veya 24 saatlik (4ASBI) inkübasyondan sonra yapılmalıdır.

Euphoria Etilen Oksit Biyolojik İndikatör (4AEObI) özellikle etilen oksit (EO) sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi için tasarlanmıştır. Son okuma, 37 +/- 2 ° C'de 48 saatlik inkübasyondan sonra yapılmalıdır.

Euphoria Plazma Biyolojik İndikatörü (4APBI), Hidrojen Peroksit sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Son okuma, 60 +/- 2 ° C'de 24 saatlik inkübasyondan sonra yapılmalıdır.



4ABI

Biological indicators are test systems containing viable microorganisms providing a defined resistance to a specific sterilization process.

A biological indicator provides information on whether necessary conditions were met to kill a specified number of microorganisms for a given sterilization process, providing a level of confidence in the process.

Biological indicators, depending on the specific type, can be used for various sterilization processes using steam, hydrogen peroxide gas or

ethylene oxide.

We have the following Euphoria Biological Indicator types:

Euphoria Steam Biological Indicator (3h) is specifically designed for the monitoring steam sterilization processes at 121 – 134 °C. The final readout of a processed biological indicator with respect to the indicator type should be made after 3 hours (4ARSBI) or 24h (4ASBI) of incubation at 60+/- 2 °C.

Euphoria Ethylene Oxide Biological Indicator (4AEObI) is specifically designed for the monitoring of ethylene oxide (EO) sterilization processes. The final readout should be made after 48 hours of incubation at 37+/- 2 °C.

Euphoria Plasma Biological Indicator (4APBI) is specifically designed for the monitoring of Hydrogen Peroxide sterilization processes. The final readout should be made after 24hours of incubation at 60+/- 2 °C.

Euphoria®

medicall

producing health for the world

Etilen Oksit Kimyasal İndikatörü

Ethylene Oxide Chemical Indicator



4AEOI

4A Etilen Oksit Kimyasal İndikatörleri, Type 5 indikatörler olup etilen oksit ile sterilizasyonda paket içi indikatör olarak kullanılan ve sterilizasyonun başarısı ile ilgili kullanıcıya bilgi veren kimyasal indikatörlerdir.

4A Ethylene Oxide Indicators which are Type 5 indicators are chemical indicators which gives information about success of sterilization by using inside sterilization pouches together with ethylene oxide.

Formaldehit İndikatörü

Formaldehyde Chemical Indicator

Euphoria Formaldehit İndikatörleri formaldehit ile sterilizasyonda kullanılan paket içi indikatörlerdir.

ISO 11140-1 standartlarına göre Type 4 grubuna giren indikatörler, paket içi malzemelerin steril olup olmadığı ile ilgili kullanıcıya bilgi vermektedir.

Euphoria Formaldehyde Indicators are indicators used inside sterilization pouch in formaldehyde sterilization.

These indicators which are included in Type 4 according to ISO 11140-1 standards give information to user whether material inside the package is sterile or not.



4AFOI

Euphoria®

medical

producing health for the world

Hidrojen Peroksit (Plazma) Kimyasal İndikatörü

Hydrogen Peroxide (Plasma) Chemical Indicators

Euphoria Plazma İndikatörleri, Type 4 indikatörler olup hidrojen peroksit ile sterilizasyonda paket içi olarak kullanılan kimyasal indikatörlerdir.

Euphoria Plasma Indicators which are Type 4 indicators are chemical indicators which are used in sterilization inside package for sterilization with hydrogen peroxide.



4API

Dokümantasyon Etiketi ve Etiket Tabancası

Documentation Labels and Label Gun

Buhar Dokümantasyon Etiketi

Steam Documentation Labels



4ASDL

Euphoria Buhar Dokümantasyon Etiketleri buhar sterilizasyonunda dokümantasyon için kullanılan, çift taraflı kendinden yapışkanlı ve indikatörlü etiketlerdir. Her rulo 500 adet çift taraflı kendinden yapışkanlı etiket içermektedir. Etikete basılmış indikatör Type 1 indikatördür.

Euphoria Steam Documentation Labels are labels with double adhesive support and process indicator for steam sterilization. Each roll contains 500 pieces of double self adhesive stickers. The indicator printed on the sticker is indicator Type 1.

Etilen Oksit Dokümantasyon Etiketi

Ethylene Oxide Documentation Labels



Euphoria EO Dokümantasyon Etiketi, indikatör mürekkebi ile basılmış ve Etilen Oksit sterilizasyonunda dokümantasyon için kullanılan çift taraflı kendinden yapışkanlı etiket olarak tasarlanmıştır. Her rulo 500 adet çift taraflı kendinden yapışkanlı etiket içermektedir.

Euphoria EO Documentation Label is designed as double self-adhesive label printed with indicator ink and used for documentation in Ethylene Oxide sterilization. Each roll contains 500 pieces of double self adhesive stickers.

Plazma Dokümantasyon Etiketi

Plasma Documentation Label

Euphoria Plazma Dokümantasyon Etiketleri, plazma sterilizasyonunda dokümantasyon için kullanılan çift taraflı kendinden yapışkanlı ve indikatörlü etiketlerdir. Her rulo 400 adet çift taraflı kendinden yapışkanlı etiket içermektedir.

Euphoria Plasma Documentation Labels are labels with double adhesive support and process indicator for plasma sterilization. Each roll contains 400 pieces of double self adhesive stickers.



Euphoria®
medicall
producing health for the world

Dokümantasyon Etiket Tabancası

Documentation Label Gun

Buhar Dokümantasyon Etiketi
Steam Documentation Labels

Etilen Oksit Dokümantasyon Etiketi
Ethylene Oxide Documentation Labels

Plazma Dokümantasyon Etiketi
Plasma Documentation Label

Dokümantasyon Etiket Tabancası
Documentation Label Gun



Euphoria Dokümantasyon Etiket Tabancası 3 satırlı Euphoria Dokümantasyon Etiketleri ile kullanım içindir. Euphoria Dokümantasyon Etiket Tabancası, kayıt amacıyla kullanılan indikatör etiketleri için kolay kullanım ve baskı çözümü sağlamaktadır. Etiket tabancası, etikette sterilizasyon / son kullanma tarihi, operatör kodu ve otoklav / döngü no gibi önemli izlenebilirlik verilerini yazdırmak için kullanılabilir. Tabanca kartuşları değiştirilebilir.

Euphoria Documentation Label Gun with 3 line is for use with the Euphoria Documentation Labels. Euphoria Documentation Label Gun provides an easy handling and printing solution for indicator labels used for recording purpose. The label gun can be used to print important traceability data on the label such as sterilization/expiry date, operator code and autoclave/cycle no on the label. The ink cartridges can be replaced.

Euphoria
medical
producing health for the world

Sterilizasyon Bantları Autoclave Tapes

Euphoria Sterilizasyon Bandı, belirli bir sıcaklığa ulaşıp ulaşılmadığını göstermek için sterilizasyon işlemlerinde kullanılan yapışkan bir banttır. Euphoria Sterilizasyon Bandı Type 1 indikatöre sahiptir.

Euphoria Sterilizasyon Bantları sterilizasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılan ürünlerdir. Sıcaklığa maruz kaldıktan sonra renk değiştirerek çalışmaktadır. Paketleme malzemelerini kapatmak için güvenli bir çözümdür.

Euphoria Sterilizasyon Bant çeşitleri aşağıdaki gibidir

Buhar Sterilizasyon Bantı: 19mm x 50m (4ASAT1950) ve 25mm x 50m (4ASAT2550);

Etilen Oksit Sterilizasyon Bantı: 19mm x 50m (4AEOT1950) ve 25mm x 50m (4AEOT2550);

Formaldehit Sterilizasyon Bantı: 19mm x 50m (4AFOT1950) ve 25mm x 50m (4AFOT2550);

Hidrojen Peroksit (Plazma) Sterilizasyon Bantı : 19mm x 25m (4APT).

İndikatörsüz Sterilizasyon Bantı: 19mm x 50m (4AAT1950) ve 25mm x 50m (4AAT2550);

*Not: İsteğe bağlı olarak özel boylarda üretim yapılabilmektedir.



Euphoria Autoclave Tape is an adhesive tape used in autoclaving to indicate whether a specific temperature has been reached. Euphoria Autoclave Tapes has a Type 1 indicator. Euphoria Autoclave Tape works by changing color after exposure to temperatures commonly used in sterilization processes. Tape also features a chemical indicator to verify that it has gone through the sterilization process.

They are a safe solution for closing wrapping materials.

Euphoria Autoclave Tape

assortments are as follows:

Steam Autoclave Tape: 19mm x 50m (4ASAT1950) and 25mm x 50m (4ASAT2550);

Ethylene Oxide Autoclave Tape: 19mm x 50m (4AEOT1950) and 25mm x 50m (4AEOT2550);

Formaldehyde Autoclave Tape: 19mm x 50m (4AFOT1950) and 25mm x 50m (4AFOT2550);

Hydrogen Peroxide (Plasma) Autoclave Tape: 19mm x 25m (4APT).

Autoclave Tape without indicators: 19mm x 50m (4AAT1950) and 25mm x 50m (4AAT2550);

*Note: Optional sizes are available upon request.

Euphoria
medical
producing health for the world

Cerrahi Alet Koruyucu Instrument Protector

Cerrahi Alet Koruyucu, sivri uçlu cerrahi aletleri hasara karşı korur ve sterilizasyon sırasında poşetin delinme olasılığını azaltmaktadır.

Her aletin görüntülenmesini ve kolayca tanımlanmasını sağlamak ve buhar girişine izin vermek için cihazları açık tutmaktadır. İndikatörlü ve indikatörsüz olmak üzere iki çeşit cerrahi alet koruyucusu bulunmaktadır.

Euphoria Cerrahi Alet Koruyucu ölçüleri : 50mm x 125mm (4AIP50125) ve 75mm x 150mm (4AIP75150)


Not: Ürünler markanızla üretilebilmektedir.

Instrument Protectors protect sharp pointed surgical instruments from damage and reduces possibility of pouch puncture during sterilization.

It allows for viewing and easy identification of each instrument and keeps instruments open to permit steam penetration.

Euphoria Instrument Protector assortments: 50mm x 125mm (4AIP50125) and 75mm x 150mm (4AIP75150)

Note: Products can be produced with your trademark

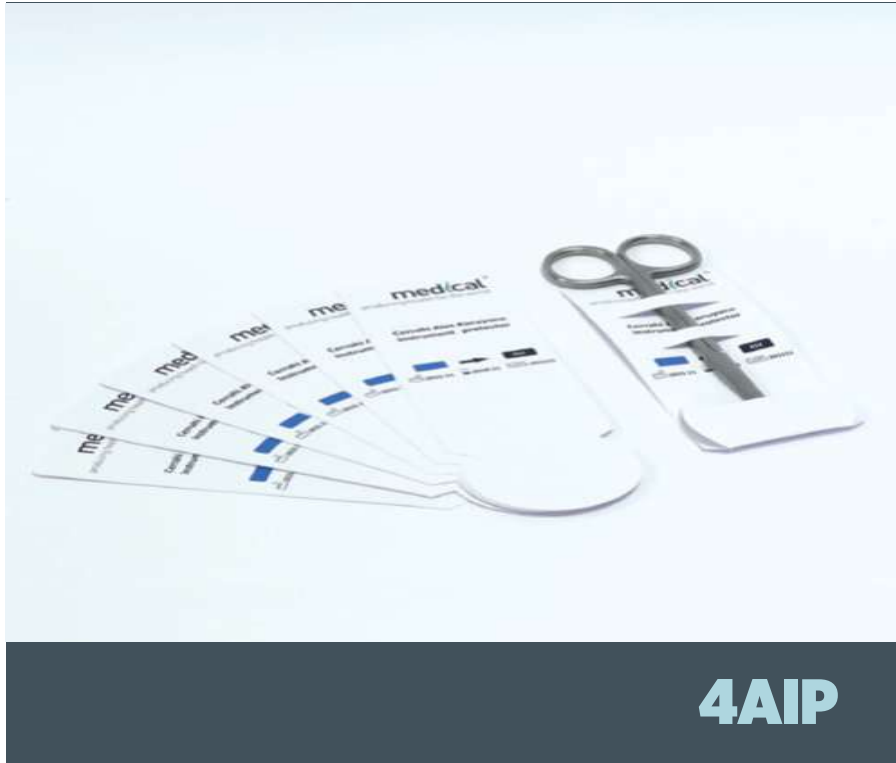

4AIP





Euphoria

medcal

producing health for the world

**YIKAMA CİHAZI
KONTROL
ÜRÜNLERİ**

**WASHER
CONTROL
PRODUCTS**



Pro Test - Protein Kalıntı Tespiti İçin Test Kiti

Detection Test for Protein Residue



4APRO

Firmamız tarafından geliştiren Euphoria Pro Test, sterilizasyon öncesi yıkama dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğini belirlemek amaçlı, hastanelerde güvenle kullanılabilen bir indikatördür. Cerrahi aletler üzerindeki protein kalıntıları bakteriler tarafından kullanılır ve bu durum bakterilerin hızlı üremesini sağlar, bakteri üremesi de sağlıklı bir sterilizasyona engeldir. Aynı zamanda cerrahi aletler üzerinde rastlanan protein kalıntıları enfeksiyon ve hastalıkları bulaştırma riski taşıyan yaşam formlarının bir göstergesidir. Hastane ortamında gerçekleşebilecek enfeksiyon risklerini ve hastalık bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için cerrahi aletler üzerindeki protein kalıntılarının belirlenmesi ve tamamen temizlenmesi gerekmektedir. ProTest ile yıkama sonucu aletler üzerinde kalan kalıntıların protein mi yoksa başka bir kalıntı mı olduğu sorusuna yanıt alınmış olur.

Euphoria Pro Test which is developed by our company, is an indicator which can be used safely at hospitals to determine the effectiveness of the washing disinfection operations before sterilization. Protein residues on medical equipment are used by bacteria which results with an increase in the number of bacteria that causes a drawback for a proper sterilization. In addition, these kind of residues on these medical equipment are the sign of life forms that causes the risk for infection. To prevent these kind of infections, identification and cleaning of protein residues are obligatory. After washing with protest the question that residues on medical equipment are whether protein or not will be answered.

Euphoria®

medical

producing health for the world

HEMO Testi / HEMO Test



4AHEMO

Tıbbi ekipman ve cerrahi aletlerin sterilizasyon işleminden önce bir ön yıkama prosedürü vardır. Bu işlem sayesinde özellikle cerrahi aletlerin üzerinde kalan ve çapraz enfeksiyona neden olan kan kalıntıları mutlaka temizlenmektedir. Yıkama/Dezenfeksiyon işlemlerinden sonra, çeşitli renklerde bazı kalıntılar veya atıklar gözlemlenebilir. Sterilizasyonu düzgün bir şekilde gerçekleştirmek veya aksi durumda ekipmanı imha etmek için kalıntının kan mı yoksa korozyon mu olduğunu belirlemek çok önemlidir.

Laboratuvarlarımızda geliştirilen bu kan kalıntı testi, kanda sadece belirli bir enzim ile renk değiştiren bir indikatördür. Bu testi kullanarak, eser miktarda kanı tanımlamak çok kolaydır. Testimiz uzun inkübasyon süresine ihtiyaç duymadan, diğer test yöntemlerinden daha hızlı, sadece 10 saniye gibi bir sürede, kalıntıdaki ~ 0.1 mikrogram kadar kanı tespit edebilmektedir.


Before the sterilization process of medical equipment and surgical instruments, there is a prewashing procedure. By the means of this procedure, blood residues remaining on especially surgical instruments that cause cross infection is surely cleaned. After Washing/Disinfection steps, there might be some residues or contaminants left in varying colors that can be observed. It is very essential to identify if the residue is of blood or corrosion, in order to carry out sterilization properly or otherwise to dispose the equipment.

This blood residue test developed in our laboratories is an indicator which changes color only with a specific enzyme in the blood. By using this test, it is very easy to identify trace amounts of blood. Without a need of long incubation time, our test is able to identify up to-0.1micrograms of blood in residue, faster than any other test methods, that is as short as 10 seconds.

Yıkama Testi / Washer Test



Yıkama ve dezenfeksiyon, cerrahi aletlerin işlem döngüsünün kritik yönleridir. Bu nedenle Euphoria Yıkama Testi, cerrahi aletlerin yıkama ve dezenfektörlerinde temizlenme sürecindeki temizlik etkinliğini rutin olarak görüntülemek ve validasyonu için dizayn edilmiştir.



4AWT

Euphoria Yıkama Testi temizlik sonucunun hızlı ve temiz şekilde görsel değerlendirilmesini sağlar. Her yıkama testi tek kullanımlıktır.

Euphoria 3 farklı yıkama test çeşidi sunmaktadır:

Euphoria Yıkama Testi: Bu Yıkama Testinin kendi plastik çerçevesi yoktur, bu nedenle diğer çerçeve veya kutuları kullanmak gerekmektedir. Euphoria ayrıca, bu Yıkama Testi için Euphoria Yıkama Test Aparatı da üretmektedir.

Euphoria Camlı Yıkama Testi: Camlı Yıkama Testinin kendi çerçevesi mevcut olup başka çerçeve veya kutuya ihtiyacı yoktur.

Euphoria PLS Yıkama Testi (4APLS): PLS Yıkama Test İndikatörü yıkama dezenfektan makineleri için gerçekçi ve çok yönlü bir mücadele sağlar, 'test indikatörü' eşit oranda test etmek için dikkatli bir şekilde dizayn edilmiştir. 4A PLS Yıkama Testi için PLS Yıkama Testi Aparatı üretilmektedir.

Cleaning and disinfection are critical aspects of the instruments reprocessing loop. That is why Euphoria Washer Test is designed for validation and the routine monitoring of the cleaning efficiency of cleaning processes in washer disinfectors for surgical instruments.

Euphoria Washer Test is

for fast and clear visual assessment of cleaning results. Each washer test is single use only.

Euphoria offers 3 different types of washing tests:

Euphoria Washer Test: This Washing Test does not have its own plastic frame, so it is necessary to use other frames or boxes. For this Wash Test 4A is also manufacturing 4A Wash Test Holder.

Euphoria Washer Test with Glass: Washer Test with Glass has its own frame and does not need any other frame or box.

PLS Washer Test Indicator (4APLS): PLS Washer Test Indicator has been carefully designed to perform in an equivalent manner to 'test soils' by providing a realistic multiple challenge for the washer disinfectant machine. Euphoria is also producing PLS Washing Test Holder for 4A PLS Washing Test.

Euphoria®

medical

producing health for the world

Kanula Kontrol Cannula Control

Kanula kontrol lümenli aletlerin simülasyonu olarak yıkama cihazlarının etkinliğini test etmektedir.

Kanula Kontrol ürünü sayesinde lümenli aletlerin iç kısımlarının temizliği hakkında öngörü (bilgi) alınmaktadır. Kirlilik testi indikatörü yıkama cihazının performansını test etmek için kullanılmaktadır. Test indikatörünün üzerinde kan lekesi kalması durumunda lümenli aletlerin iç kısımlarının temizlenmediği anlaşılmaktadır.

Cannula Control tests the effectiveness of washing devices as simulations of cannulated control lumen instruments.

Thanks to the Cannula Control product, foresight (information) about the cleaning of the interior of lumen instruments is obtained. Washer Test Indicator is used to test the performance of the washing device. It is understood that the inner parts of lumen instruments are not cleaned if there is a blood stain on the test indicator.



4AC

Soni kontrol Soni Control



4ASC

Soni kontrol ultrasonik yıkama cihazlarının performansını test eden üründür. Yeşil renkten sarı renge dönerek sonuç vermektedir. Renk değişimi yoksa yıkama cihazında problem olduğunu göstermektedir.

Sonicontrol is a product which evaluates the performance of Ultrasonic Washer Machines.







It gives instant results by changing from green to yellow. If there is no color change, it indicates that there is a problem in the washing device. The liquid inside the tubes shows that the machine is working successfully. The final control color change occurs with the energy given by the ultrasonic device.

Euphoria®
medical

producing health for the world

KONTEYNER AKSESUARLARI

CONTAINER ACCESSORIES



Konteyner Kilidi Security Seal



4ASS

Euphoria Konteyner Kilitleri, konteyneri yetkili olmayan personel tarafından açılmamak üzere sabitlemek için kullanılır. Konteyner sadece kilidi kırılarak açılabilir. Konteyner kilitleri, sterilizasyon anından gerçek kullanıma kadar malzemelerin sterilitesini garanti eder.

Euphoria indikatörlü ve indikatörsüz Konteyner Kilitleri sunmaktadır.


Euphoria Security Seals are used in order to secure that container is not opened by un-authorized staff. Container can be opened only by breaking the seal. Security seals are guaranteeing the sterility of materials from the moment of sterilization till the actual use.

Euphoria is offering Security Seals with and without indicators.

Konteyner Etiketi Container Label

Euphoria Konteyner Etiketleri konteyneri etiketlemek ve işaretlemek için önemli bir yardımcı üründür. Euphoria İndikatörlü Konteyner Etiketi, içeriğin kolayca tanımlanması için her bir konteynerin dışına yerleştirilir. Sterilizasyon tarihi, sterilizasyon son kullanma tarihi, operatörün adı, lot numarası, otoklav ayrıntıları gibi detaylar etikete yazılabilmektedir. Etiket üzerindeki kimyasal indikatör sterilizasyon hakkında bilgi verir.

Euphoria Container Labels are an important aid to label and mark the container. Euphoria Container Label with process indicator is used to place outside each container for an easy identification of the content. Details like sterilization date, sterilization expiry date, operator's name, lot number, autoclave details can be written down on the label. The chemical process indicator is giving the indication whether it has been sterilized or not.

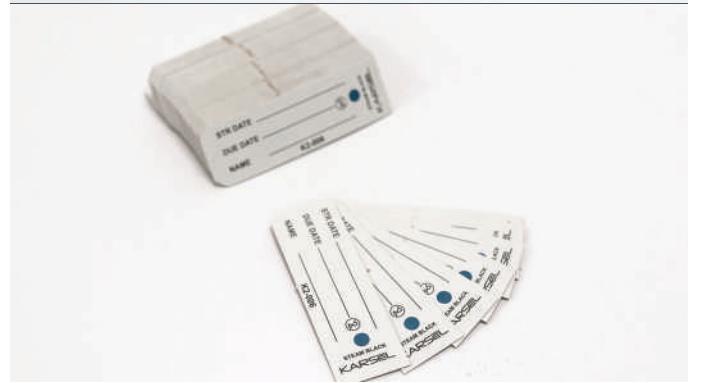

4ACL

Konteyner Filtresi / Container Filter



Euphoria Konteyner Filtreleri, klinik ve hastanelerde sterilizasyon konteynerleri ile birlikte ve cerrahi kullanım malzemelerinin sterilizasyonunda kullanılan yumuşak ve gözenekli tek kullanımlık tıbbi kâğıt filtrelerdir. Her çeşit konteyner ve sepete uygundur.

Euphoria Konteyner Filtreleri, sterilizasyon sırasında buhar geçişini sağlamak ve sterilizasyon sonrası steriliteyi korumak için sterilizasyon konteynerinin kapağına ve gövdesine yerleştirilmektedir.

Euphoria Medical yuvarlak ve dikdörtgen şeklinde konteyner filtreleri sunmaktadır. Dikdörtgen konteyner filtrelerinin ölçüleri: 120mm x 230mm ve 165mm x 230mm.

Not: Ürünler markanızla üretilebilmektedir.

Euphoria Container Filters are soft and porous single use medical grade paper filters used with sterilization containers in clinics and hospitals for sterilization by autoclaving of instruments and other materials for surgical use. They are suitable with all types of containers and baskets.

Euphoria Container Filters are placed in the lid and body of the sterilization container to allow steam penetration during sterilization and to maintain sterility post sterilization.





Euphoria Medical provides circular shape container filters and rectangular shape container filters. Rectangular shape container filters have assortments of 120mm x 230mm and 165mm x 230mm.

Note: Products can be produced with your trademark

Euphoria
medical
producing health for the world

DREN ÜRÜNLERİ

DRAINAGE SYSTEMS

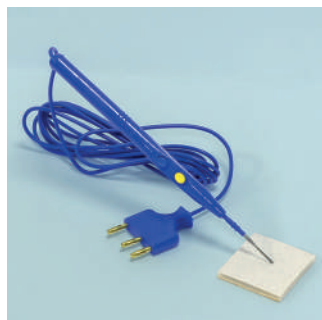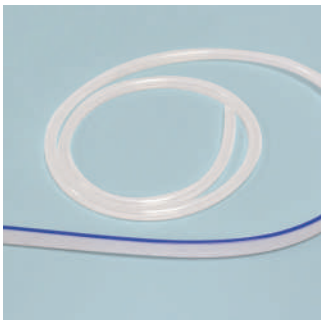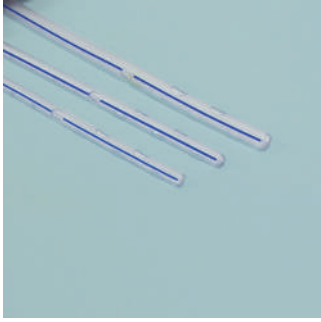

Göğüs Drenaj Şişesi Under Water Chest Drainage Bottle



4ACB2000

2000 ml toplam kapasitesine sahip olan ürün, hava kaçağı olasılığını sıfıra indirmek için tek parça (monoblok) gövde olarak üretilmiştir. Ürün kesinlikle kırılmayan hammaddeden üretilmiş olup, devrilmeyi önleyen geniş tabak üstüne konumlandırılmıştır.

Kesinlikle kink yapmayan esnek hortum ve spiral özelliği kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Tarafımızca geliştirilmiş olan özel hava kaçak kontrol testleri ile ürünlerin hava kaçak kontrolleri yapılmaktadır. Taşımayı kolaylaştırmak için askı bulunmaktadır. Su doldurmak için huni mevcuttur.

The product, which has a collection capacity of 2000 ml has been produced as a mono block body to cancel out the possibility of air bubbles. The product has definitely been produced from a non breakable raw material and is positioned on a wide plate to prevent tilting over.

With the flexible hose and spiral property, it is easy to use. Air leakage controls of the products are made with special air leakage control tests developed by us. There is a hanger to make it easier to carry. There is a funnel for water filling.

Hemovak Dren Hemovac Drain

200cc, 400cc, 600cc veya 800cc toplama hazneli körükten oluşan hemovak dren 10,12,14 veya 16 F trokarla kullanılmaktadır.


İsteğe bağlı olarak tekli veya çiftli trokar içermektedir. Dren boyutuna göre kesilebilen konnektör içermekte, isteğe bağlı askılık takılabilmektedir.

Yapılan özel testler sonrası sevk edilen ürünlerimizde hava kaçırma problemi yaşanmamaktadır.

It consists of a catch pit of 200cc, 400cc, 600cc or 800cc and a blower and it is used with 10, 12, 14 or 16F trocars.

It includes a single or double trocar optionally. It includes a connector that can be cut according to the drain size and an optional hanger can be attached to the drain.

After the special tests made, there is no deflation problem in the transferred products.



4AHD

Aspirasyon Seti Yanquer Set

Aspirasyon seti ürünlerimiz isteğe bağlı olarak vakumlu aspirasyon seti ve vakumsuz aspirasyon seti olarak üretilmektedir.

Aspirasyon ucu 4 yan delikten, tek parça ve sert yapıdan meydana gelmektedir.

Aspirasyon hortumu 210 cm uzunluğunda olup, özel isteğe bağlı ölçülerde de üretebilmektedir.

Our aspiration set products are produced as with vacuum or without vacuum upon request.

Aspiration tips consist of four side holes, one part and hard structure.

Aspiration hose is 210 cm long and could be produced in requested sizes as well.



4AYS

Toraks Dren Thorax Drain



4ATRX

Toraks Dren göğüs cerrahisinde kullanılan, göğüs şişesi ürünleriyle uyumlu kullanılan ürünlerdir. 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F ve 36F ölçülerde üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak PVC veya silikon olarak üretilmektedir. Ürünün üstünde X ray çizgisi mevcuttur.


Thorax drains are the products used in the thoracic surgery along with the chest bottle products in accordance. They could be produced in sizes 22F, 24F, 26F, 28f, 30F, 32F, 34F and 36F. There is X ray line on the product.

Depending on the request, they could be produced as PVC or silicon.

Euphoria
medical

producing health for the world

Flat Dren Flat Drain

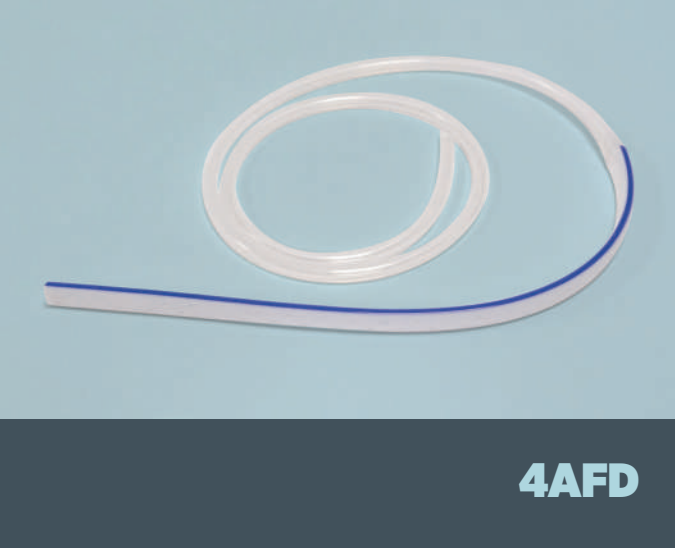


%100 silikon hammaddeden yapılan flat drenler 5mm, 7mm, 10mm ve 13mm ölçülerde olup isteğe bağlı olarak 125cc, 200cc, 250cc, 400cc PVC bomba rezervuar ile kullanılabilir. Ürünün üstünde X ray çizgisi mevcuttur.

Made of 100% silicon material, flat drains are in the sizes of 5mm, 7mm, 10mm and 13mm and used with 125CC, 200CC, 250CC, 400CC PVC bomb reservoir upon request. There is X ray line on the product.

Silikon Pernoz Dren Silicone Penrose Drain

Silikon Pernoz Dren tek parçadan meydana gelmektedir. Silikon Pernoz Dren %100 silikondan üretilmektedir. Dren uzunluğu 30 cm'dir. 6 mm, 8 mm, 10 mm ve 12 mm ölçüleri mevcuttur. Ürünün üstünde X ray çizgisi mevcuttur

Silicone Penrose Drain is single piece. Silicone Penrose Drain is made from 100% silicone. Length of drain is 30 cm. Available sizes are 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm. There is X ray line on the product.

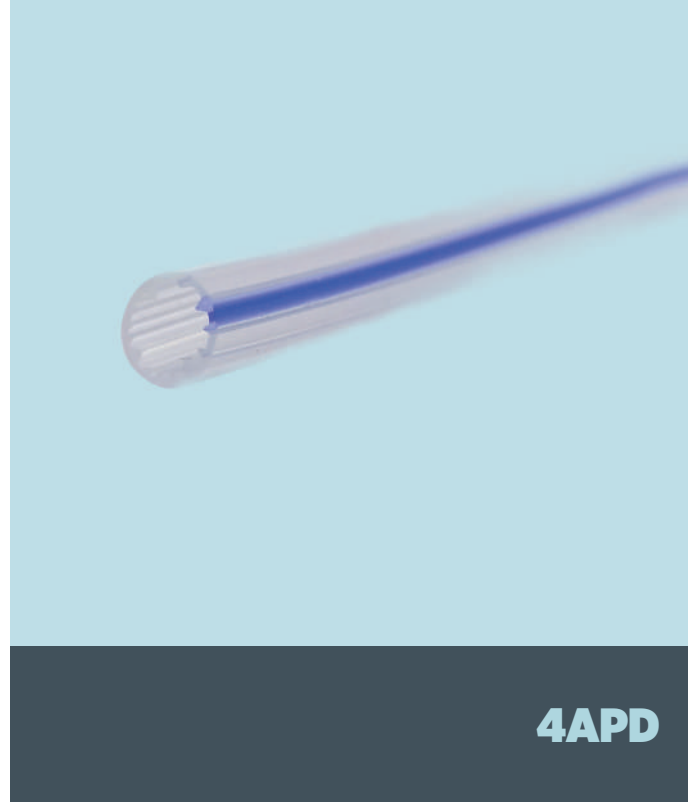

Euphoria


medical

producing health for the world

T Dren T Drain

T Dren tek parçadan meydana gelmektedir. T dren %100 silikondan üretilmektedir. Dren uzunluğu 30 cm ve 50 cm'dir. 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F ve 24F olmak üzere 9 ölçü mevcuttur. Ürünün üstünde X ray çizgisi mevcuttur.

T Drain is single piece. T Drain is made from %100 silicone. Lengths of drain are 30 cm and 50 cm. There are 9 dimensions and the dimensions of product are 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F and 24F. There is X ray line on the product.

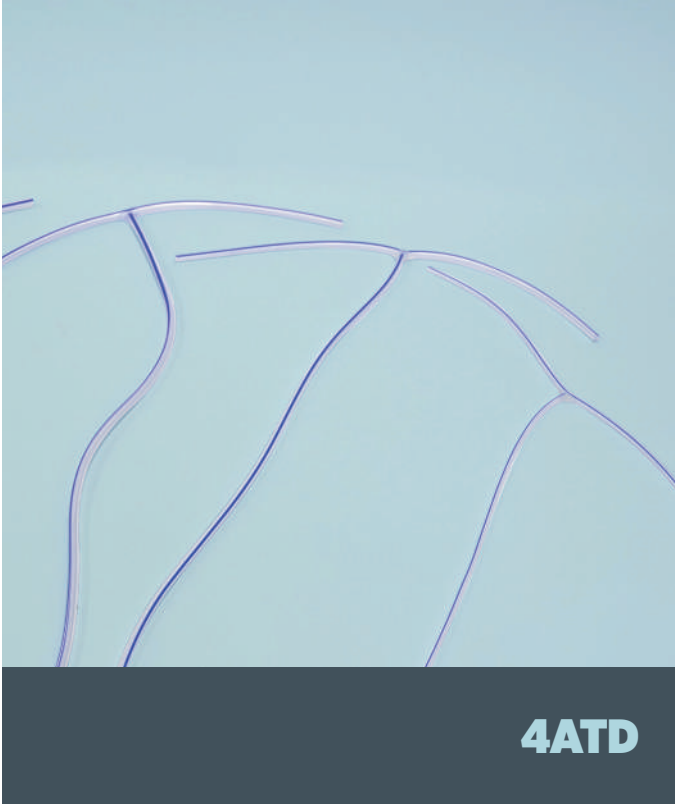

4ATD

PVC Bomba Rezervuar PVC Bomb Reservoir



4APVC-BR

PVC Bomba Rezervuar geri kaçış valflidir. PVC Bomba Rezervuar tek parçadan meydana gelmektedir. 125cc, 200cc, 250cc ve 400 cc ebatları bulunmaktadır.

PVC Bomb Reservoir has stopping valve. Bomb reservoir is single piece. Part of reservoir is made from Medical Grade PVC. Part of lid is made from Moblen. Part of pin is made from ABS. Available sizes are 125cc, 200cc, 250cc and 400cc.

Euphoria®

medical

producing health for the world

Silikon Yuvarlak Kanallı Dren Trokar ve Bomba Rezervuar *Silicone Flouted Drain With Trocac and Bomb Reservoir*



1. Medikal grade silikondan üretilmiştir.
2. X-ray çizgileri ile kapalı yara drene işlemler için uygundur.
3. Kanalları sayesinde kolay drene etmeyi sağlar.
4. Tüpün göbeği, cihazın çıkarılmasıyla ilişkili ağrıyı en aza indirir.
5. Trokarlı ya da trokarsız olarak mevcuttur.
6. 400cc bomba mevcuttur.
7. 10FR, 15FR, 19FR, 24FR, 28FR ölçüler mevcuttur.

1. Made of medical grade silicone.
2. With X-Ray opaque line, used for closed wound suction draining.
3. These internal four channels, or flutes, are utilized to quickly remove exudates.
4. Hub of the tube minimizes pain associated with device removal.
5. With or Without Trocar.
6. 400cc bomb reservoir.
7. Available sizes, 10 FR, 15 FR, 19 FR, 24 FR, 28 FR.

Koter Kalemi *ESU Pencil*

Euphoria Koter kalemi tek kullanımlıktır ve el ile kontrol edilmektedir. Cerrahi işlemlerde kanama olmaksızın kesmek için sarı tuş, yakmak için mavi tuş kullanılmaktadır. 3 girişli olması ile tüm koter cihazlarıyla uyumludur.

Euphoria Koter Kalemi, cerrahi uygulamada elektro cihazlardan üretilen ani yüksek frekans ile canlı hücrelerin kesilmesi ve fraksiyonlanması için kullanılmaktadır.

Euphoria Esu Pencil is for one time use and hand controlled. In surgical procedures yellow button is used to burn and blue button is used to cut coagulation process. With 3 inputs, it is compatible with all cautery devices.

Euphoria Esu Pencil is used for cutting and fractionation living cell with sudden high frequency which is produced from electro devices in the surgery application.



Euphoria®

medicall

producing health for the world

Straight Dren Torbalı / Torbasız

Straight Drain With / Without Bag



Straight dren ürünü torbalı ve torbasız olarak 15F,18F,21F, 24F,27F,30F,32F,33F,36F,40F ölçülerinde 50cm,90cm ve 100cm uzunluğunda üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak Pvc veya silikon olarak üretilmektedir. Ürün üzerinde X-ray çizgisi mevcuttur.

The straight drain product can be produced with or without bag in the dimensions of 15F,18F,21F,24F,27F,30F,32F,33F, 36F,40F in 50cm, 90cm and 100cm lengths. It is produced optionally as PVC or silicone. There is an X-ray line on the product.

Euphoria
medical
producing health for the world