


eMove

Handleiding

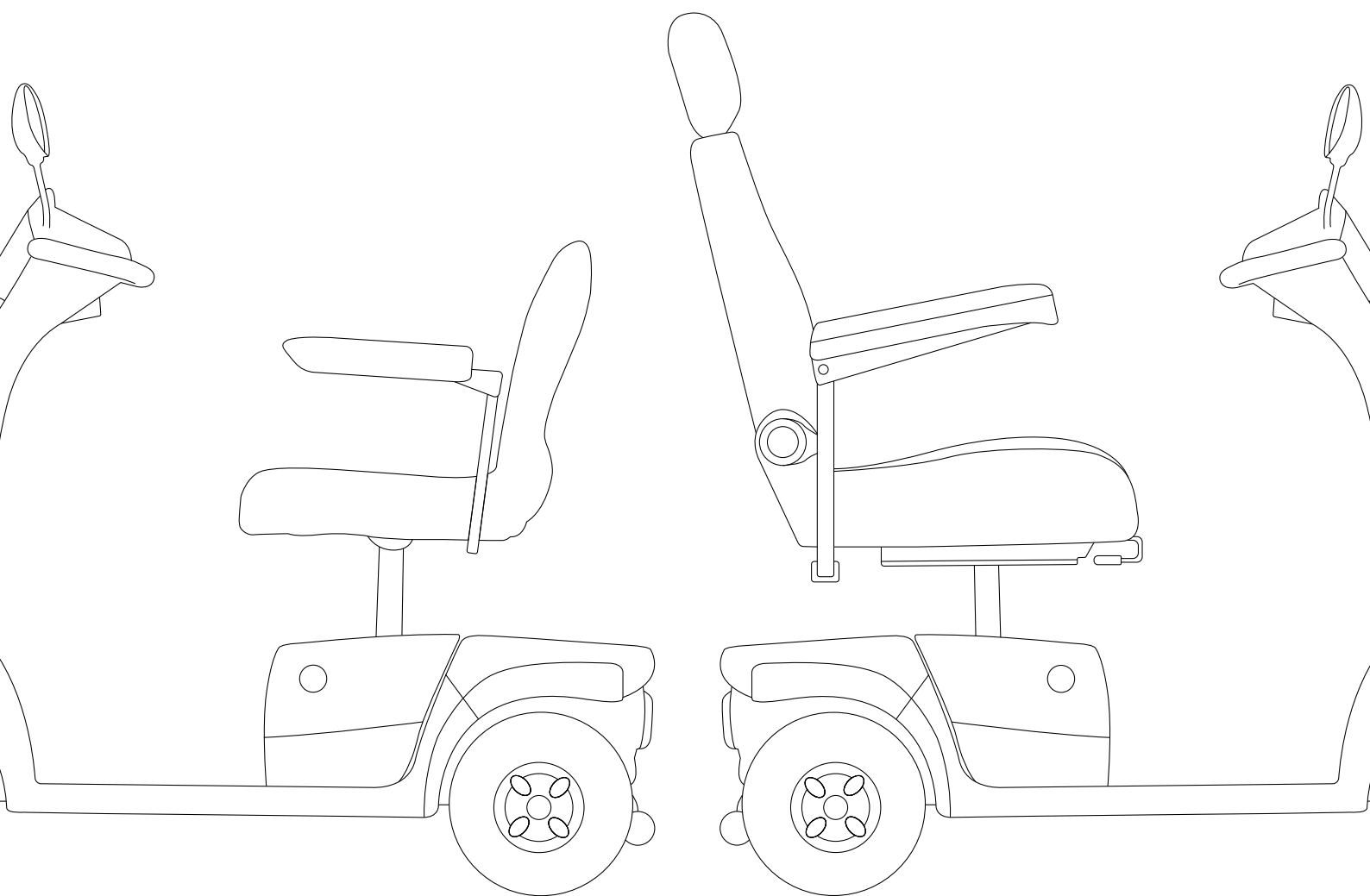

Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare eMove scootmobiel.


Uw nieuwe apparaat is ontworpen om vervoer binnens- en buitenshuis te bieden aan een persoon wiens vermogen om te lopen is beperkt, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat is om het apparaat veilig te bedienen.


Wij zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele producten van hoge kwaliteit en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen, we hopen van harte dat we daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat heeft gekocht.

2. Je scooter leren kennen

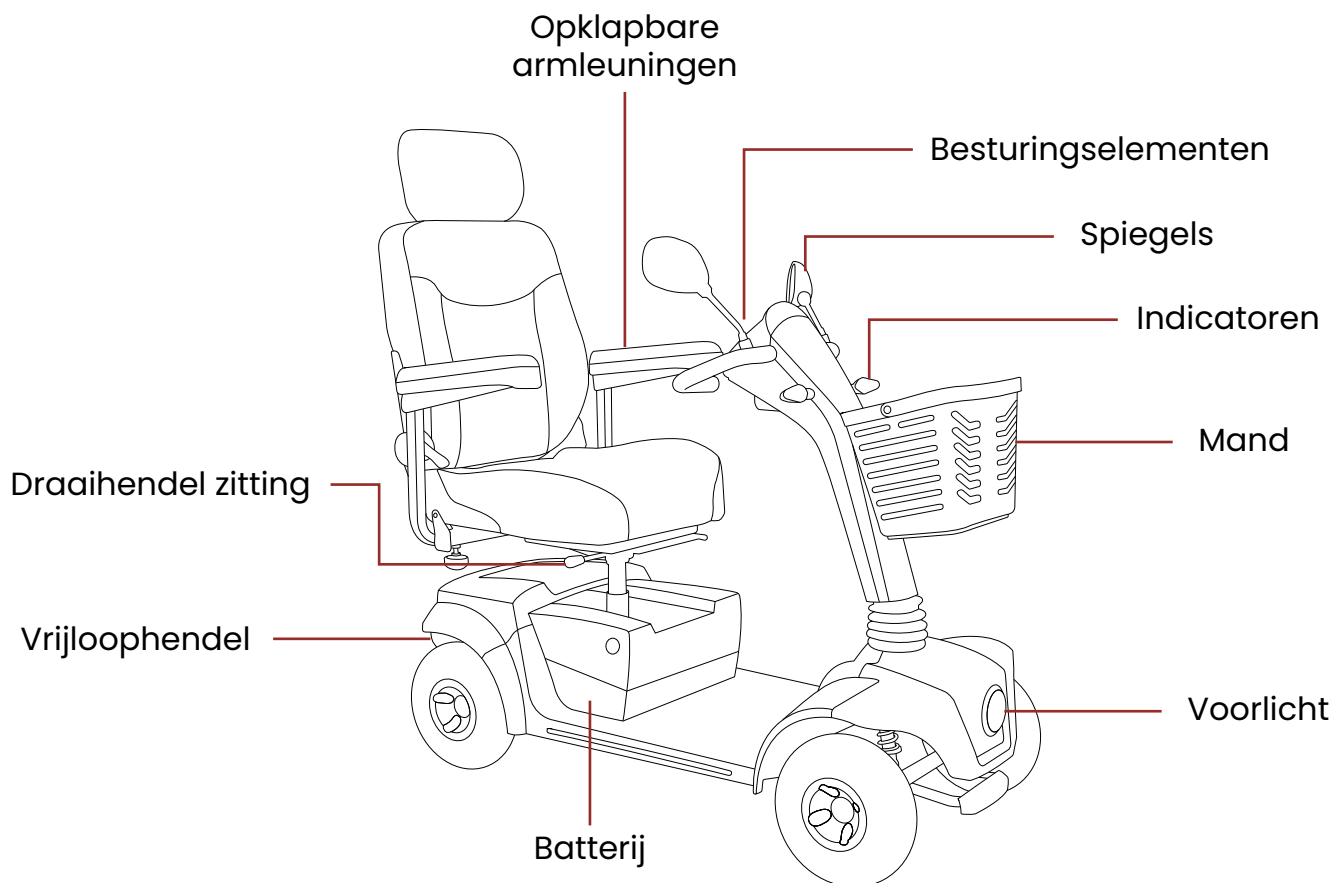

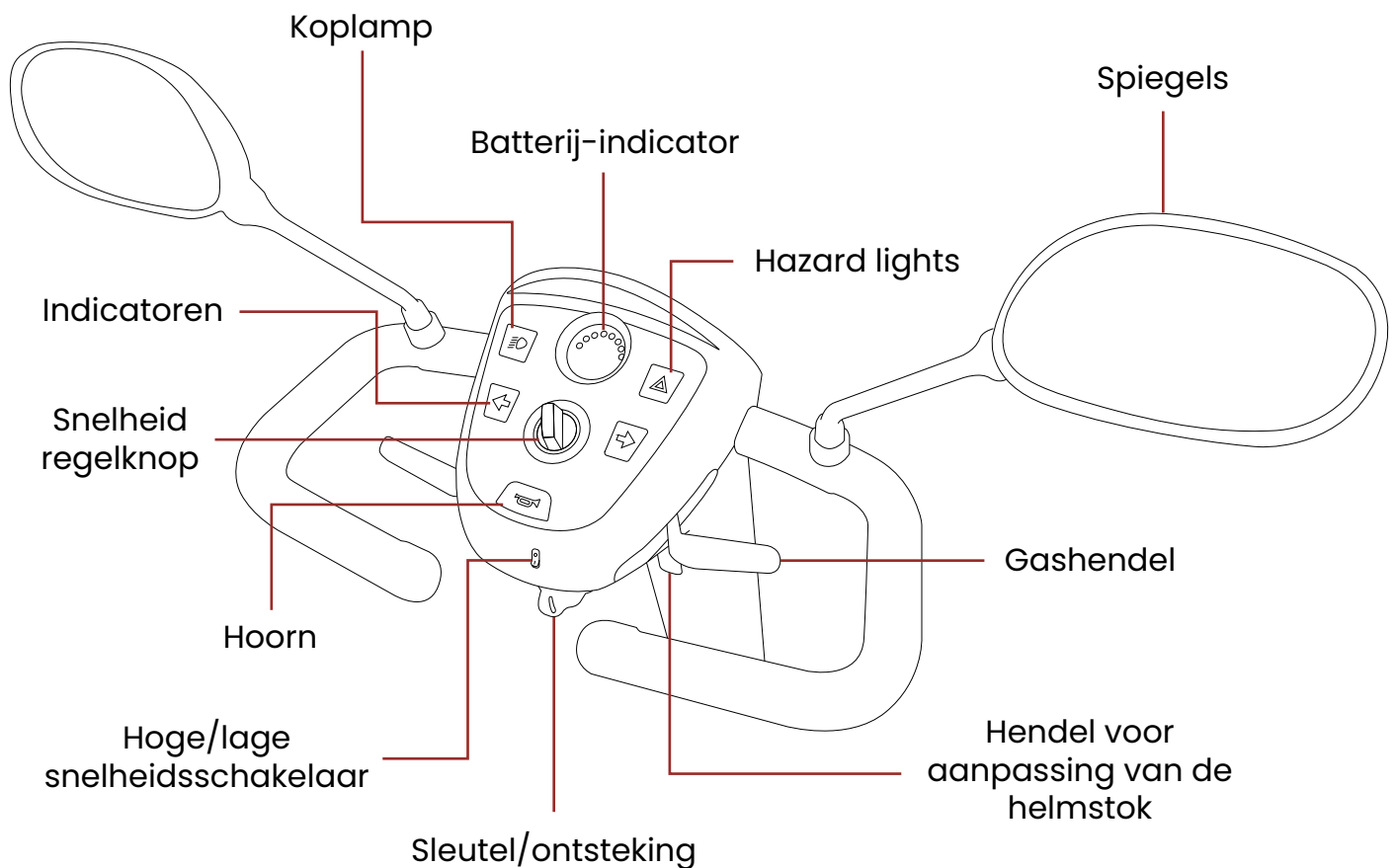

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig opletten tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheids- of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Raadpleeg uw arts als u geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, omdat dit uw vermogen om het veilig te bedienen kan aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichtstraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.
- We raden u ten zeerste af om sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.

- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer de elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, indien aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht om deze zo snel mogelijk te vervangen.
- Breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door de toevoeging van accessoires aan uw apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u zuurstof gebruikt in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de regelaar niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat uw vermogen om het apparaat te bedienen verandert.
- Zet het apparaat niet in de "freewheel"-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de modus "vrijloop" inschakelt of uitschakelt.
- Schakel het apparaat uit als u verwacht langere tijd stil te zitten. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om iets anders dan het apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd uit zichzelf gaat rollen, zet de step nooit in de "freewheel" modus op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koordjes, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het apparaat bedient, verstrikt kunnen raken rond de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat geen voorwerpen achter het apparaat slepen tijdens het rijden. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen komen.
- Wanneer je het apparaat gebruikt met een takel/takel, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de "freewheel" modus staat en ga NIET op het apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.
- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk omvallen te voorkomen, mag u nooit iets vervoeren of de tas/mand vullen met een inhoud van meer dan 6,8 kg.
- Gebruik de armleuningen (indien aanwezig) niet om het gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.

4. Veilig monteren en demonteren

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwacht in beweging komt. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl je op- of afstapt. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt en stap zo ver mogelijk naar achteren op de stoel.

De volledig juiste transfermethode varieert afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een transfer.

We raden je ook aan om iemand je te laten helpen totdat je zeker weet dat je zelf veilig kunt overstappen.

5. Veilig rijden

Let bij het besturen van je apparaat altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle plaatselijke regels voor voetgangers en verkeer. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot je pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe het apparaat aanvoelt voordat je gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je van plan bent het apparaat te gebruiken. Kijk uit naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Gebruik je toestel nooit om over trappen of roltrappen te rijden.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid bij het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd gewichtsverplaatsing in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het nemen van een helling of stoeprand.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden bedekt met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer bij het beklimmen van een helling het apparaat in beweging te houden. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef daarna voorzichtig gas.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan u wilt, laat u de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.
- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van het apparaat om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waarin u de helling nadert.

- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Rijd niet achteruit een helling of helling af om kantelen te voorkomen.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is.
- Houd er rekening mee dat een gevallen stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling de voorwielen kan tegenhouden en ervoor kan zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig vervoer

Let bij het vervoeren van je apparaat altijd op het volgende:

- Gebruik het apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast als het wordt vervoerd. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheid overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Vliegereizen

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door niet-verspreidbare zure of alkalibatterijen. Zie onze opmerkingen in het VET om je te helpen met je apparaat:

Vóór de reis moeten passagiers de vervoerder op de hoogte stellen van het type accu dat in het mobiliteitshulpmiddel is gemonteerd en hoe het apparaat kan worden beschermd tegen onbedoeld gebruik. – **De accu's in uw apparaat zijn verzegelde loodaccu's. Om te beschermen tegen onbedoeld gebruik moet u de scootmobiel uitzetten, de sleutel uit het contact halen en ervoor zorgen dat de scootmobiel niet in vrijloop staat (zie hoofdstuk 13 voor meer instructies).**

Op de luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij controleren of de:

- de accu moet worden verwijderd en vervoerd in een stevige, stevige verpakking en worden opgeborgen in de laadruimte.
- De accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijv. door blootliggende polen af te plakken).
- de accu moet worden beschermd tegen beschadiging (bijv. door elke accu in een beschermende zak te plaatsen).
- Verwijder de accu van het scootmobiel volgens de instructies van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat. – De accu kan eenvoudig omhoog worden getild en van de eMove bodemplaat worden verwijderd (zie hoofdstuk 9 voor meer instructies).
- de accu mag niet groter zijn dan 300 Wh – **de 12ah accu is 456Wh (12v x 38ah = 456 Wh)**
- er mag maximaal één reserveaccu van maximaal 300 Wh of twee reserveaccu's van elk maximaal 160 Wh worden meegenomen.

Passagiers wordt aangeraden om ten minste 48 uur voor vertrek regelingen te treffen met hun luchtvaartmaatschappij.

8. Batterij opladen en onderhoud

Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren.

De levensduur van batterijen kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het gebruikte oplaadregime.

Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op als je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat je de batterijen in een droge, goed geventileerde omgeving bewaart en ze niet voor langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) laat liggen.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er bestaan explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van accupolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- Batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem voor het weggooien of recyclen van uw batterijen contact op met het erkende bedrijf waar u de batterijen hebt gekocht.
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het batterijniveau voordat u aan een reis begint om te voorkomen dat u strandt.
- Probeer de batterijen niet uit hun doosje te halen. Dit mag alleen door een erkend bedrijf worden gedaan.

Je batterijen opladen

- Zet de sleutel in de uit-stand.
- Steek de stekker van de acculader in het stopcontact in de muur.
- Steek de stekker van de oplader in het oplaadcontact.
- Het LED-lampje op de acculader wordt rood om aan te geven dat de accu's worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de acculader wordt groen wanneer de accu's volledig zijn opgeladen.

9. Demontage en montage

Demontage

1. Trek aan de stoeldraaihendel en til het zadel omhoog om het te verwijderen.
2. Til de accu omhoog om deze te verwijderen. Houd er rekening mee dat de accu misschien met klittenband op zijn plaats is bevestigd, dus als je moeite hebt om hem te verwijderen, druk je de zadelpen omlaag om het gemakkelijker te maken.
3. Klap de helmstok omlaag door eerst de hendel voor de aanpassing van de helmstok te gebruiken en de helmstok vervolgens langzaam omlaag te duwen in de richting van de bodemplaat. Zodra de helmstok op de vloer rust, laat je de hendel los om de helmstok op zijn plaats te houden.
4. Til de verwijderingshendel van het achterste gedeelte met één hand op en trek het achterste gedeelte met de hendel omlaag om het voorste en achterste gedeelte van elkaar te scheiden. Til het voorste deel op en verwijder het.

Montage

1. Gebruik één hand om het achterste deel met de handgreep naar beneden te trekken en til het voorste deel op met behulp van de zadelpen of de verwijderingshendel voor het achterste deel. Laat het voorste deel in het achterste deel vallen en druk het omlaag tot je een klik hoort. Controleer altijd of de delen correct zijn aangesloten voordat je verder gaat met de volgende stap.
2. Til de dissel op door eerst de stelhendel voor de dissel te gebruiken en de dissel dan langzaam van de bodemplaat op te tillen. Zodra de dissel rechtop staat, laat u de stelhendel los om de dissel op zijn plaats te houden.
3. Plaats de accu in de bodemplaat. Duw naar beneden om te zorgen dat hij goed vastzit.
4. Trek de stoelverstelhendel omhoog en plaats het zadel op de zadelpen.

10. Besturingselementen

In- en uitschakelen

Om het apparaat aan te zetten, steekt u de sleutel in het contact totdat de lampjes op het batterijdisplay branden.

Om het apparaat uit te schakelen, haalt u de sleutel uit het contact totdat de lampjes op het batterijdisplay niet meer branden.

De snelheid aanpassen

Om de snelheid van je apparaat aan te passen, moet je altijd stilstaan en aan de knop voor het aanpassen van de snelheid draaien. Om de snelheid te verhogen draai je de knop met de klok mee (in de richting van de haas) en om de snelheid te verlagen draai je de knop tegen de klok in (in de richting van de schildpad). Druk op de schakelaar onder de snelheidsknop op de dissel om te schakelen tussen snelheid op de stoep en snelheid op de weg.

Vooruit & achteruit rijden

Om vooruit te rijden trek je langzaam aan de rechter gashendel in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de linker gashendel van de disselboom af duwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

De hoorn blazen

Druk op de knop op de helmstok om de claxon te laten klinken.

11. Veiligheidsgordels monteren en afstellen

De eMove heeft geen veiligheidsgordel.

De eMove Pro heeft een veiligheidsgordel die kan worden versteld.

12. Tiller afstellen

Om de dissel te verstellen, houdt u de dissel in de ene hand en trekt u met de andere hand aan de disselafstelhendel totdat de dissel vrij kan bewegen.

Als de helmstok zich in de gewenste stand bevindt, laat je de hendel voor de aanpassing van de helmstok los totdat deze weer op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat de helmstok niet beweegt.

13. Vrijloophodus

De vrijloophendels bevinden zich aan de achterkant van de step bij het achterwiel. De hendel heeft twee standen:

Naar boven - Drive Mode (het apparaat beweegt alleen met behulp van de bedieningsknoppen)

Naar beneden - Neutrale stand (het apparaat kan met de hand worden geduwd of getrokken)

14. Dagelijkse controles

Controleer de volgende items voordat u het apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de frees

- Zorg dat hij niet te los zit.
- Controleer of het soepel en volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Besturingselementen

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Controleer of het apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de knoppen trekt.

Snelheidsaanpassing

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Controleer of de snelheid van het apparaat naar behoren verandert wanneer de knoppen worden aangepast.

Batterijmeter

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

Hoorn

- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

Sleutel

- Controleer of de sleutel gemakkelijk in en uit de contactslotcilinder beweegt.
- Zorg ervoor dat de sleutel stevig in het contactslot zit.
- Controleer of het apparaat aan en uit gaat wanneer de sleutel in het contactslot wordt gestoken en eruit wordt gehaald.

Motor, transmissie en elektromagnetische rem

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit het apparaat komen.
- Controleer of er geen ongewone geuren uit het apparaat komen.

Wielen

- Controleer of de banden van je toestel geen scheuren of vervormingen vertonen.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten.
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is.
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je toestel komen.

Batterijhouder

- Controleer of de batterijhouder geen barsten of vervormingen vertoont.
- Controleer of de batterijhouder correct geplaatst en verwijderd kan worden.

Stoel

- Controleer of er geen ongebruikelijke beweging is wanneer de stoel vergrendeld is.
- Controleer of de stoel beweegt zoals het hoort.

Vrijloophendel

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) in- en uitschakelt zoals het hoort.

15. Reiniging, onderhoud en afvoer

Reiniging

Om je apparaat schoon te maken, gebruik je een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik je een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het reinigen.
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen slang, straal of sproei geen water rechtstreeks op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het schoonmaken.

Onderhoud

Zorg ervoor dat je apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om je apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

Afvoer

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

16. Elektromagnetische compatibiliteit

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, zenders van radioamateurs (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van radiogolfbronnen) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuïteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuïteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuïteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg worden ingedeeld in drie typen:

1. Draagbare handzenders (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: citizen band (CB) of draagbare radio's, (veiligheids-, brandweer- en politiezendontvangers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Middellange afstand mobiele zendontvangers, zoals die gebruikt worden in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Zenders en zendontvangers met groot bereik, zoals commerciële zendontvangers (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten handapparatuur, zoals draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken op je elektrische scooter.

Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolfbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals citizen band (CB) radio's, en schakel geen persoonlijke communicatiemiddelen in, zoals mobiele telefoons, terwijl uw apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-zenders, en probeer te voorkomen dat u in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als er een onbedoelde beweging wordt gemaakt of de rem wordt losgelaten.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Rapporteer alle incidenten van onbedoelde beweging of loslaten van de rem aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

17. Problemen oplossen

Als er een fout optreedt met je step, kijk dan naar het lampje op je bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. Het aantal knipperingen beschrijft de fout. Op de volgende pagina laat de tabel alle problemen zien die de step kan melden en leidt je naar een mogelijke oplossing.

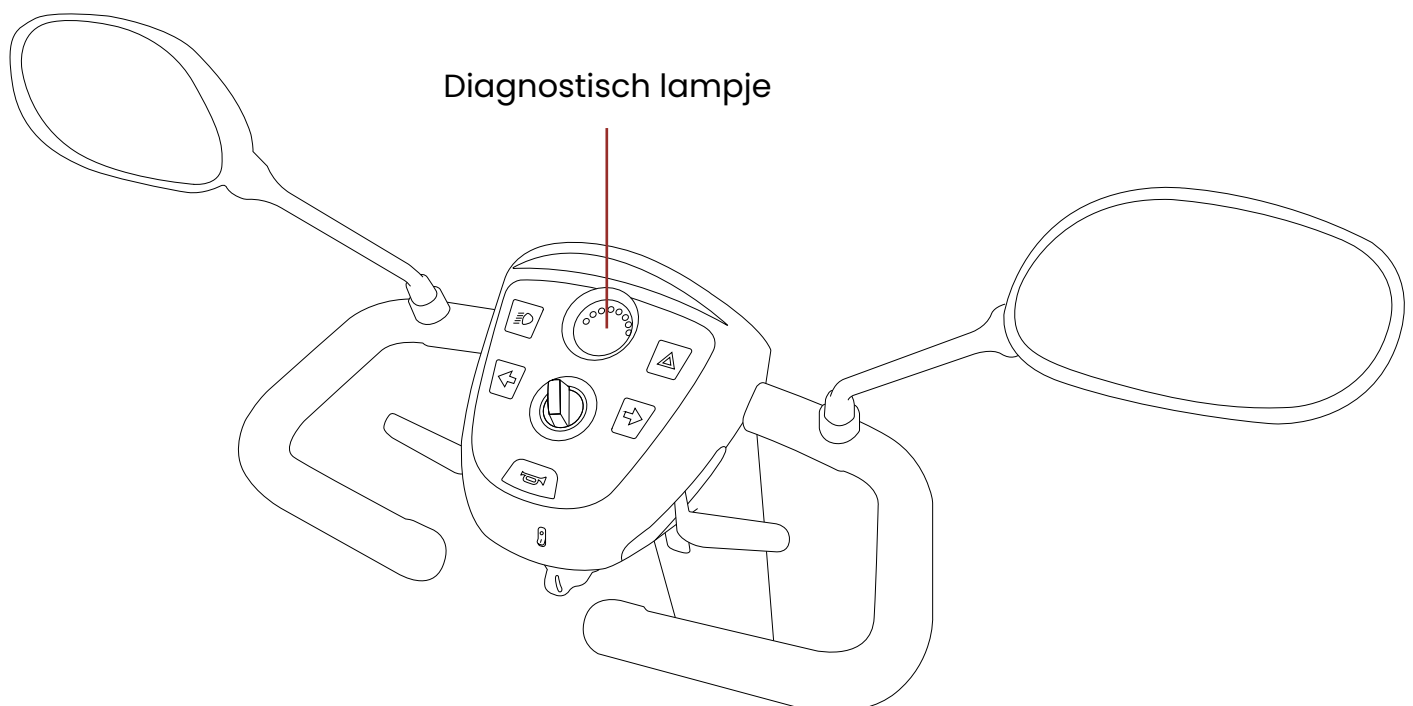

Flash-code	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing(en)
1	Batterij bijna leeg	Laad de batterijen op.
2	Storing door lege batterij	Laad de batterijen op. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
3	Fout bij hoge accuspanning	Verlaag je snelheid op lange hellingen.
4	Regelaar oververhit	Zet de scooter uit, laat hem een paar minuten staan en zet hem weer aan. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
5	Storing parkeerrem	Controleer of de parkeerrem ingeschakeld is. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
6	Fout in aandrijving	Controleer of het zadel correct is geïnstalleerd. Koppel eventuele opladers los. Controleer of de gashendel niet is ingeschakeld wanneer de scooter wordt aangezet. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
7	Fout in snelheidspot	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
8	Fout in motorspanning	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
9	Andere fout	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.

18. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij op hun beurt verkopen het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die u ontvangt of om een claim in te dienen kunt u contact opnemen met het bedrijf waar u het product heeft gekocht.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Intco Medical (HK) Co., Ltd

Flat/RM 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong, China



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany



FM Hulpmiddelen BV

Argonweg 127
1362AD Almere
Nederland

19. Specificaties

	eMove	eMove Pro
Lengte	127 cm	127 cm
Breedte	59 cm	59 cm
Hoogte	115 cm	140 cm
Wielmaat voor	25.4 cm	25.4 cm
Wielmaat achter	25.4 cm	25.4 cm
Totaal gewicht	77.6 kg	89.28 kg
Zwaarste onderdeel	26.21 kg	26.21 kg
Gewicht batterij	24.5 kg	24.5 kg
Accucapaciteit	12v 38ah SLA	12v 38ah SLA
Wattuur batterij	456 wh	456 wh
Bereik	42 km	38 km
Snelheid	8 km/u	12 km/u
Maximaal gewicht gebruiker	150 kg	150 kg
Breedte zitting	43.5 cm	45 cm
Afmeting motor	270w	340w
Maximale helling	9°	9°
Bodemvrijheid	8 cm	8 cm
Draaicirkel	140 cm	140 cm



www.motionhealthcare.nl

085-2129445