

eDrive

Handleiding



Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Bedankt en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare eDrive Scootmobiel.


Uw nieuwe apparaat is ontworpen om binnen en buiten te zorgen voor transport voor een persoon wiens vermogen om te lopen beperkt is, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vermogens in staat is om het apparaat veilig te bedienen.


Wij zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele en hoogwaardige producten en ons doel is om uw volledige tevredenheid te waarborgen. We hopen oprecht dat we daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare-apparaat.

Lees alstublieft alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient, en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bedrijf waar u het product heeft gekocht.

2. Kennismaken Met Je Scooter

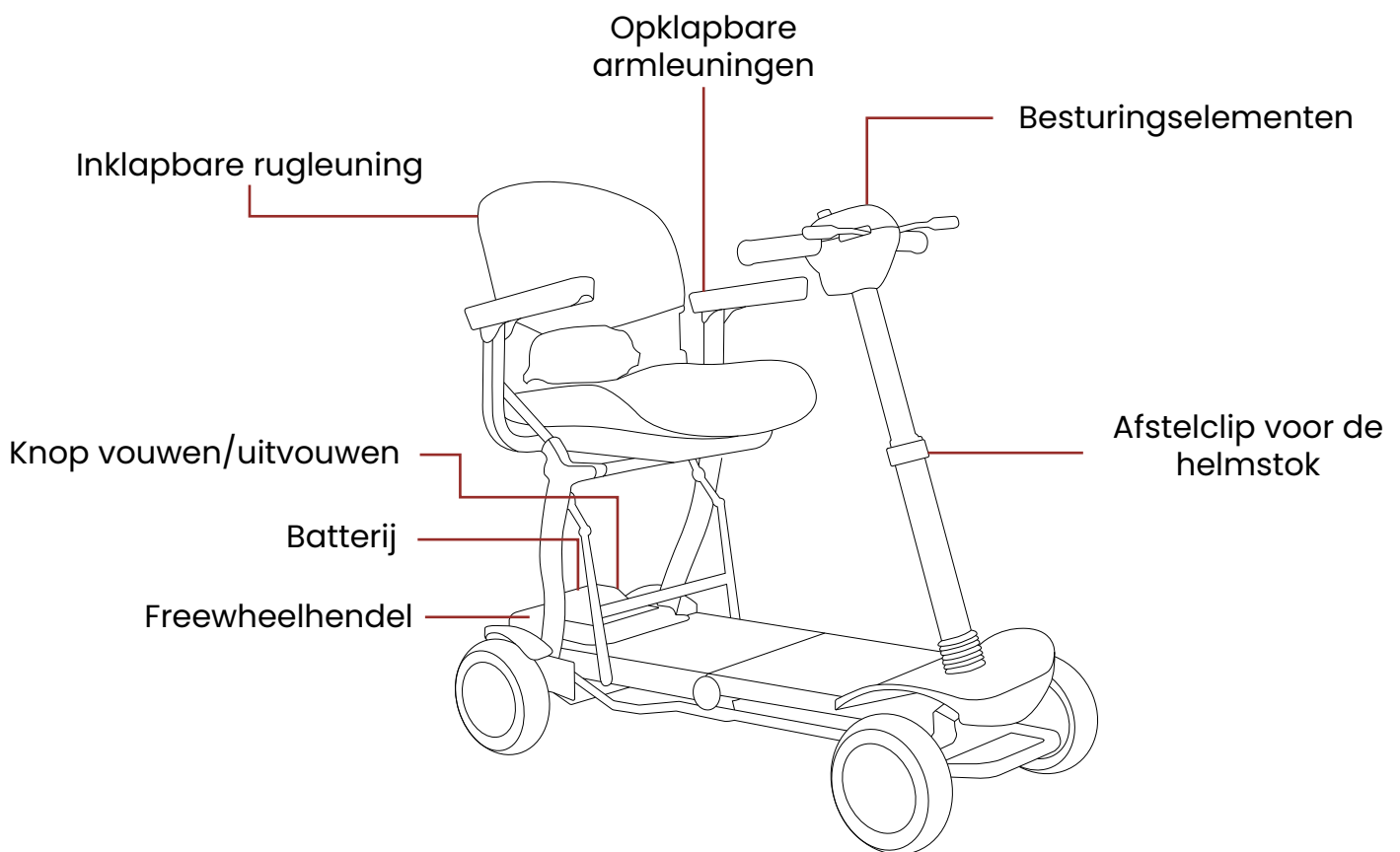

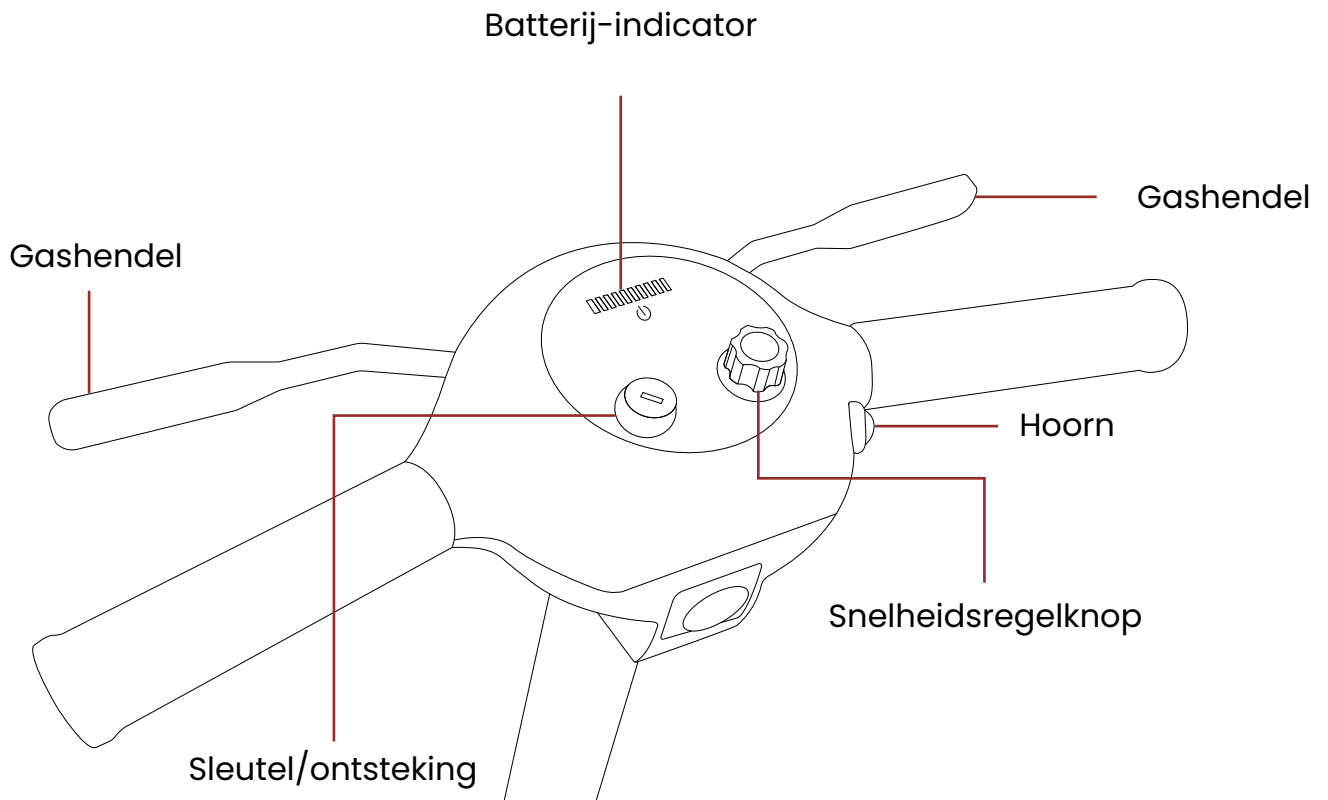

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat in gebruik neemt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig oplettend zijn tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheids- of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te gebruiken kunnen beperken of aantasten.
- Raadpleeg uw arts als u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, omdat dit uw vermogen om het veilig te bedienen kan aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichtstraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.
- We raden u ten zeerste af om sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.

- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer de elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, indien aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht om deze zo snel mogelijk te vervangen.
- Breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door de toevoeging van accessoires aan uw apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u zuurstof gebruikt in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
Wijzig de instellingen van de regelaar niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat uw vermogen om het apparaat te bedienen verandert.
- Zet het apparaat niet in de "freewheel"-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de modus "vrijloop" inschakelt of uitschakelt.
- Schakel het apparaat uit als u verwacht langere tijd stil te zitten. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om iets anders dan het apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd uit zichzelf gaat rollen, zet de step nooit in de "freewheel" modus op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koordjes, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het apparaat bedient, verstrikt kunnen raken rond de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat geen voorwerpen achter het apparaat slepen tijdens het rijden. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen komen.
- Wanneer je het apparaat gebruikt met een takel/takel, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de "freewheel" modus staat en ga NIET op het apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.
- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk omvallen te voorkomen, mag u nooit iets vervoeren of de tas/mand vullen met een inhoud van meer dan 6,8 kg. Gebruik de armleuningen (indien aanwezig) niet om het gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.

4. Veilig monteren en demonteren

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwachts gaat bewegen. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl je op- of afstapt. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel staan, dit verkleint het risico dat je de stoel mist of valt.

De volledig juiste overdrachtsmethode varieert op basis van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een overdracht. We raden je ook aan om iemand je te laten helpen totdat je zeker weet dat je de transfer veilig zelf kunt doen.

5. Veilig rijden

Let bij het besturen van je toestel altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle plaatselijke regels voor voetgangers en verkeer. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot je pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe het apparaat aanvoelt voordat je gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je van plan bent het apparaat te gebruiken. Kijk uit naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Gebruik je toestel nooit om over trappen of roltrappen te rijden.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid bij het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd gewichtsverplaatsing in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het nemen van een helling of stoeprand.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden bedekt met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer bij het beklimmen van een helling het apparaat in beweging te houden. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef daarna voorzichtig gas.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan u wilt, laat u de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.
- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van het apparaat om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waarin u de helling nadert.

- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Rijd niet achteruit een helling of helling af om kantelen te voorkomen.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is.
- Houd er rekening mee dat een gevallen stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling de voorwielen kan tegenhouden en ervoor kan zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig transport

Houd bij het vervoeren van uw apparaat altijd rekening met het volgende:

- Gebruik uw apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast als het wordt vervoerd. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheid overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Vlieg reizen

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door lithium-ionbatterijen. Zie onze opmerkingen in VET om u te helpen met uw apparaat:

LET OP: Alleen de 10ah-batterij voor de eDrive valt onder de voorschriften van de burgerluchtvaartautoriteit voor veilig reizen door de lucht.

Vóór de reis moeten passagiers de vervoerder op de hoogte stellen van het type accu dat in het mobiliteitshulpmiddel is geplaatst en hoe het apparaat kan worden beschermd tegen onbedoeld gebruik. – **De batterijen in uw apparaat zijn Lithium-Ion. Om te beschermen tegen onbedoeld gebruik moet u de scootmobiel uitzetten, de sleutel uit het contact halen en ervoor zorgen dat de scootmobiel niet in vrijloop staat (zie hoofdstuk 13 voor meer instructies).**

Op het vliegveld moet de luchtvaartmaatschappij controleren dat de:

- de accu moet worden verwijderd en vervoerd in de passagierscabine;
- de accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijvoorbeeld door blootliggende polen af te plakken); – **er geen blootliggende polen op de accu van uw scooter zitten.**
- de accu moet worden beschermd tegen beschadiging (bijv. door elke accu in een beschermhoes te plaatsen);
- het verwijderen van de accu uit het scootmobiel moet gebeuren volgens de instructies van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat. – **De accu kan eenvoudig omhoog worden getild en van de eDrive worden verwijderd.**
- de accu mag niet groter zijn dan 300 Wh – **de 10ah accu is 240Wh (24v x 10ah = 240 Wh)**

- er mag maximaal één reserveaccu van maximaal 300 Wh of twee reserveaccu's van elk maximaal 160 Wh worden vervoerd.
- **8. Opladen en onderhoud van batterijen**
 Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren.
 De levensduur van batterijen kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het gebruikte oplaadregime.
 Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op als je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.
 Zorg er altijd voor dat je de batterijen in een droge, goed geventileerde omgeving bewaart en ze niet voor langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) laat liggen.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er bestaan explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van accupolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- Batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem voor het weggooien of recyclen van uw batterijen contact op met het erkende bedrijf waar u de batterijen hebt gekocht.
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het batterijniveau voordat u aan een reis begint om te voorkomen dat u strandt.
- Probeer batterijen niet uit hun doosje te halen. Dit mag alleen door een erkend bedrijf worden gedaan.

Uw batterijen opladen

- Zet de sleutel in de uit-stand.
- Steek de stekker van de acculader in het stopcontact in de muur.
- Steek de oplader in het oplaadcontact.
- Het LED-lampje op de acculader wordt rood om aan te geven dat de accu's worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de acculader wordt groen wanneer de accu's volledig zijn opgeladen.

9. In- en uitvouwen

Uw eDrive wordt automatisch in- en uitgeklaapt met behulp van de sleutelhanger.

Om in te klappen houdt u de knop met het vergrendelde hangslot ingedrukt totdat het product begint in te klappen.

Om uit te klappen houdt u de knop met het ontgrendelde hangslot ingedrukt tot het product begint uit te klappen.

10. Bedieningselementen

In- en uitschakelen

Om uw apparaat aan te zetten steekt u de sleutel in het contact totdat de lampjes op de batterij-indicator branden.

Om het apparaat uit te schakelen, haalt u de sleutel uit het contact totdat de lampjes op de accudisplay niet meer branden.

De snelheid aanpassen

Om de snelheid van je apparaat aan te passen, moet je altijd stilstaan en aan de knop voor het aanpassen van de snelheid draaien. Om de snelheid te verhogen, draai je de knop met de klok mee (in de richting van de haas) en om de snelheid te verlagen, draai je de knop tegen de klok in (in de richting van de schildpad).

Vooruit en achteruit rijden

Om vooruit te rijden, trek je langzaam aan de rechter gashendel (aangeduid met F) in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer u aan de hendel trekt, hoe sneller u rijdt. Je kunt ook met je hand de linker gashendel (gemarkeerd met R) van de disselboom af duwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

Om achteruit te rijden, trekt u langzaam aan de linker gashendel (gemarkeerd met R) in de richting van de stuurhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de rechter gashendel (aangeduid met F) van de stuurhendel wegduwen. Laat de hendel los om te stoppen met bewegen.

De hoorn laten klinken

Druk op de knop op de helmstok om de claxon te laten klinken.

11. Veiligheidsgordel monteren en afstellen

Dit model heeft geen veiligheidsgordel.

12. Afstelling helmstok

Om de helmstok te verstellen, houd je de helmstok in één hand en trek je aan de verstelclip van de helmstok, waarna de helmstok vrij op en neer kan bewegen.

13. Vrijloopstand

De Freewheel hendels bevinden zich aan de achterkant van de step bij het achterwiel.

De hendel heeft twee standen:

Naar voren – Neutrale stand (het apparaat kan met de hand worden geduwd of getrokken)

Achteruit – aandrijfmodus (het apparaat beweegt alleen met de knoppen)

14. Dagelijkse controles

Controleer de volgende punten voordat u het apparaat gebruikt. Als je iets abnormaals vindt of iets waar je niet zeker van bent, neem dan contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat je het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de molen

- Controleer of hij niet te los zit.
- Controleer of het soepel en volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Bedieningselementen

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de bedieningselementen volledig kunnen worden bewogen.
- Controleer of het apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de bedieningselementen trekt.

Snelheidsaanpassing

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig vrij kunnen bewegen.
- Zorg ervoor dat de snelheid van het apparaat naar wens verandert wanneer je aan de knoppen trekt.

Batterijmeter

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.
Claxon
- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

Sleutel

- Controleer of de sleutel gemakkelijk in en uit het contactslot kan worden geschoven.
- Zorg ervoor dat de sleutel stevig in het contactslot zit.
- Controleer of het apparaat in- en uitschakelt wanneer de sleutel in de cilinder wordt gestoken en eruit wordt gehaald.

Motor, transmissie en elektromagnetische rem

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit het apparaat komen.
- Controleer of er geen ongewone geuren uit het apparaat komen.

Wielen

- Controleer of er geen scheuren of vervormingen zijn op de banden van je apparaat.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen.
Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de loopvlakken van de banden zitten.
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is.
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je toestel komen.

Batterijhouder

- Controleer of de batterijhouder geen barsten of vervormingen vertoont.
- Controleer of de batterijhouder correct geplaatst en verwijderd kan worden.

Zitting

- Controleer of er geen ongebruikelijke bewegingen zijn wanneer het zadel op zijn plaats wordt vergrendeld.
- Controleer of het zadel beweegt zoals het hoort.

Vrijloophendel

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) naar behoren in- en uitschakelt.

15. Reiniging, onderhoud en afvoer

Reinigen

Gebruik een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het reinigen.
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen slang, straal of spatwater direct op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het schoonmaken.

Onderhoud

Zorg ervoor dat het apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om uw apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

16. Elektromagnetische compatibiliteit

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, zenders van radioamateurs (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van radiogolfbronnen) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuïteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuïteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuïteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg in drie soorten worden ingedeeld:

1. Draagbare handzenders (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: citizen band (CB) of draagbare radio's, (veiligheids-, brandweer- en politiezendontvangers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Middellange afstand mobiele zendontvangers, zoals die gebruikt worden in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Zenders en zendontvangers met groot bereik, zoals commerciële zendontvangers (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten handapparatuur, zoals draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken op je elektrische scooter.

Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolfbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals CB-radio's (citizen band), en schakel geen persoonlijke communicatiemiddelen in, zoals mobiele telefoons, terwijl je apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-zenders, en probeer te voorkomen dat je in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als er een onbedoelde beweging wordt gemaakt of de rem wordt losgelaten.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Rapporteer alle incidenten van onbedoelde beweging of loslaten van de rem aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

17. Problemen oplossen

In het geval van een fout met je step, raadpleeg het lampje op je bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. Raadpleeg de tabel op de volgende pagina, de tabel toont alle problemen die de step kan melden en leidt je naar een mogelijke oplossing.

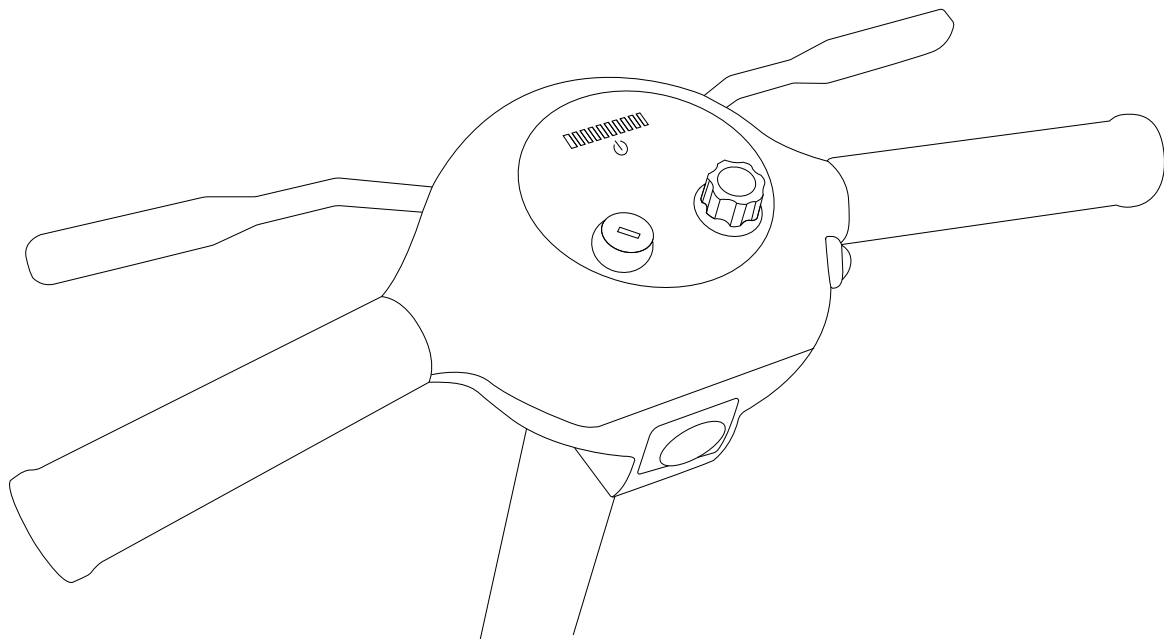

Code	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing(en)
1	De batterij heeft geen stroom of is niet goed aangesloten.	Controleer of de accu goed op de bodemplaat zit. Controleer de aansluiting in de bodem van de accu. Probeer de accu volledig op te laden.
2	De motor is defect of niet goed aangesloten.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
3	De bedrading is kortgesloten.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
4	Storing in elektromagnetische rem.	N/A
5	Fout in controller.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
6	Storing in gashendel.	Zorg ervoor dat de gashendel niet naar binnen wordt getrokken wanneer u de scooter aanzet.
7	Storing in gaskleppot.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
8	Fout in hoofdregelaar.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
9	Storing in elektromagnetische rem.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
10	De hoofdcontroller heeft een te hoge spanning ontvangen.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.

18. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij verkopen op hun beurt het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die u ontvangt of om een claim in te dienen kunt u contact opnemen met het bedrijf waar u heeft gekocht.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Suzhou Master Machinery Manufacturing Co.,Ltd

No.48, Binjiang Road, Zhangpu Town
Jiangsu
Kunshan
215321
China



Riomavix S.L.

Calle de Almansa 55, 1D
Madrid
28039
Spain



Motion Mobility

Noordeinde 136
1121AL Landsmeer
Netherlands

19. Specificaties

Lengte	102 cm
Breedte	55 cm
Hoogte	92 cm
Gevouwen lengte	59 cm
Gevouwen breedte	55 cm
Gevouwen hoogte	92 cm
Wielmaat voor	19 cm
Wielmaat achteraan	19 cm
Totaal gewicht	30 kg
Zwaarste deel	28.1 kg
Gewicht batterij	1.9 kg
Accucapaciteit	24v 10ah Lithium
Wattuur batterij	240 wh
Bereik	16 km
Snelheid	6km/h
Maximaal gewicht gebruiker	133 kg
Breedte zitting	43 cm
Afmeting motor	120w Borstelmotor
Maximale helling	12°
Bodemvrijheid	9 cm
Draaicirkel	157 cm

Motion

www.motionhealthcare.nl

085-2129445