


XCURSION

Handleiding

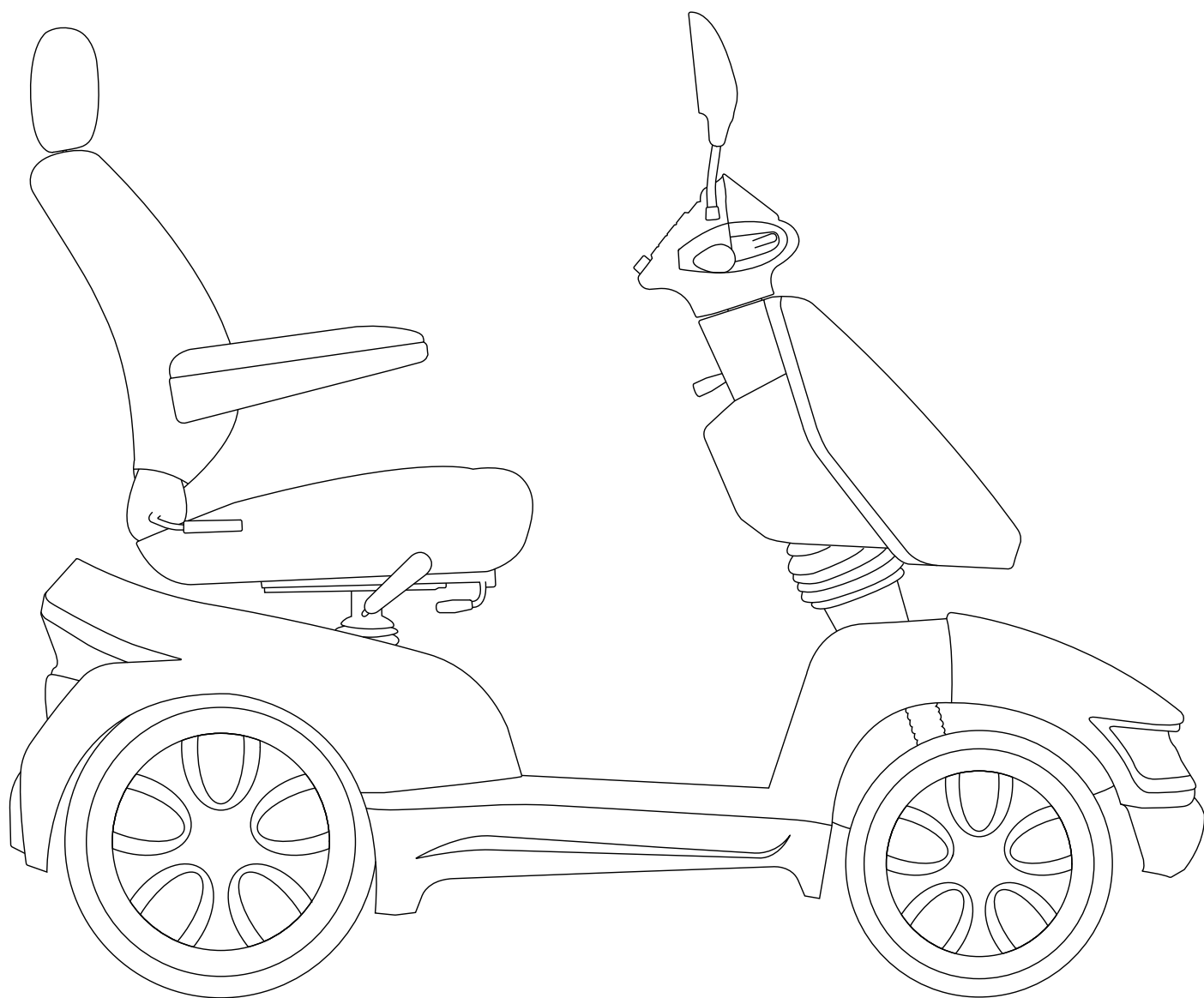

Motion

CE UK
CA

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig opletten tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheidsproblemen of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te gebruiken kunnen beperken of aantasten.
- Raadpleeg uw arts als u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of verminderen.
- Bedien het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, want dit kan uw vermogen om het veilig te bedienen aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichtstraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.
- We raden u ten zeerste af sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, als deze worden aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je ze hebt gekocht om ze zo snel mogelijk te vervangen.
- Pas het apparaat niet aan. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door het toevoegen van accessoires aan je apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in je omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van zuurstof in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat u het apparaat niet langer kunt bedienen.
- Zet het apparaat niet in de "freewheel"-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de "freewheel"-modus inschakelt of uitschakelt.
- Als u verwacht langere tijd stil te zitten, schakel dan de stroom naar het apparaat uit. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om iets anders dan uw apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd uit zichzelf gaat rollen, mag je de step nooit in de "free-wheel" modus zetten op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koorden, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het bedient, vast kunnen komen te zitten rond de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de bediening kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat tijdens het rijden geen voorwerpen achter het apparaat slepen. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen vast komen te zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neemt u contact op met het bedrijf waar u de zekering hebt gekocht.
- Gebruik de armsteunen (indien aanwezig) niet om gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.
- Lees alle belangrijke waarschuwingen en instructielabels op het apparaat zorgvuldig voordat u het in gebruik neemt.



WAARSCHUWING Markeert mogelijke gevaren voor de gebruiker en/of het product.



SUGGESTIE/TIP Algemene suggesties en adviezen voor het gebruik van dit product.

Inhoud

Inleiding	4
Je scooter leren kennen	4
Veilig monteren en demonteren	5
Veilig rijden	6
Veilig transport	7
Accu opladen en onderhoud	7
Besturingselementen	8
Instelmodus	10
Veiligheidsgordels monteren en afstellen	11
Tiller afstellen	11
Stoelverstelling	12
Modus vrijloop	13
Dagelijkse controles	13
Reiniging, onderhoud & afvoer	14
Elektromagnetische compatibiliteit	16
Problemen oplossen	18
Garantie	20
Specificaties	21
Batterij-instructies & onderhoud	22

1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare Xcursion klasse 3 scootmobiel.


Je nieuwe apparaat is ontworpen om vervoer binnen en buiten mogelijk te maken voor een persoon wiens vermogen om te lopen is beperkt, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat is om het apparaat veilig te bedienen.


We zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele producten van hoge kwaliteit en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen. We hopen van harte dat we daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het bedrijf waar je hebt gekocht.

2. Je scooter leren kennen

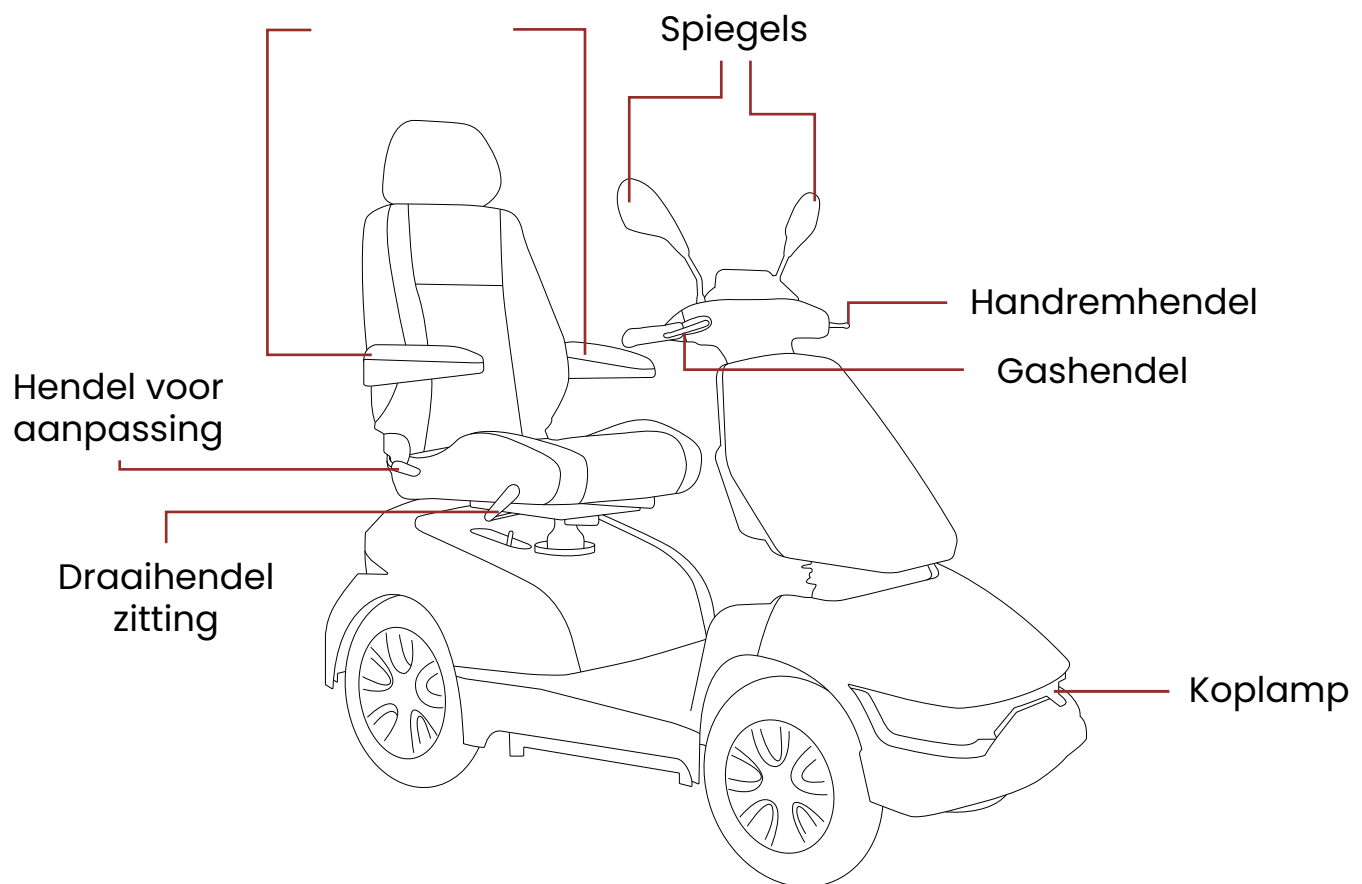

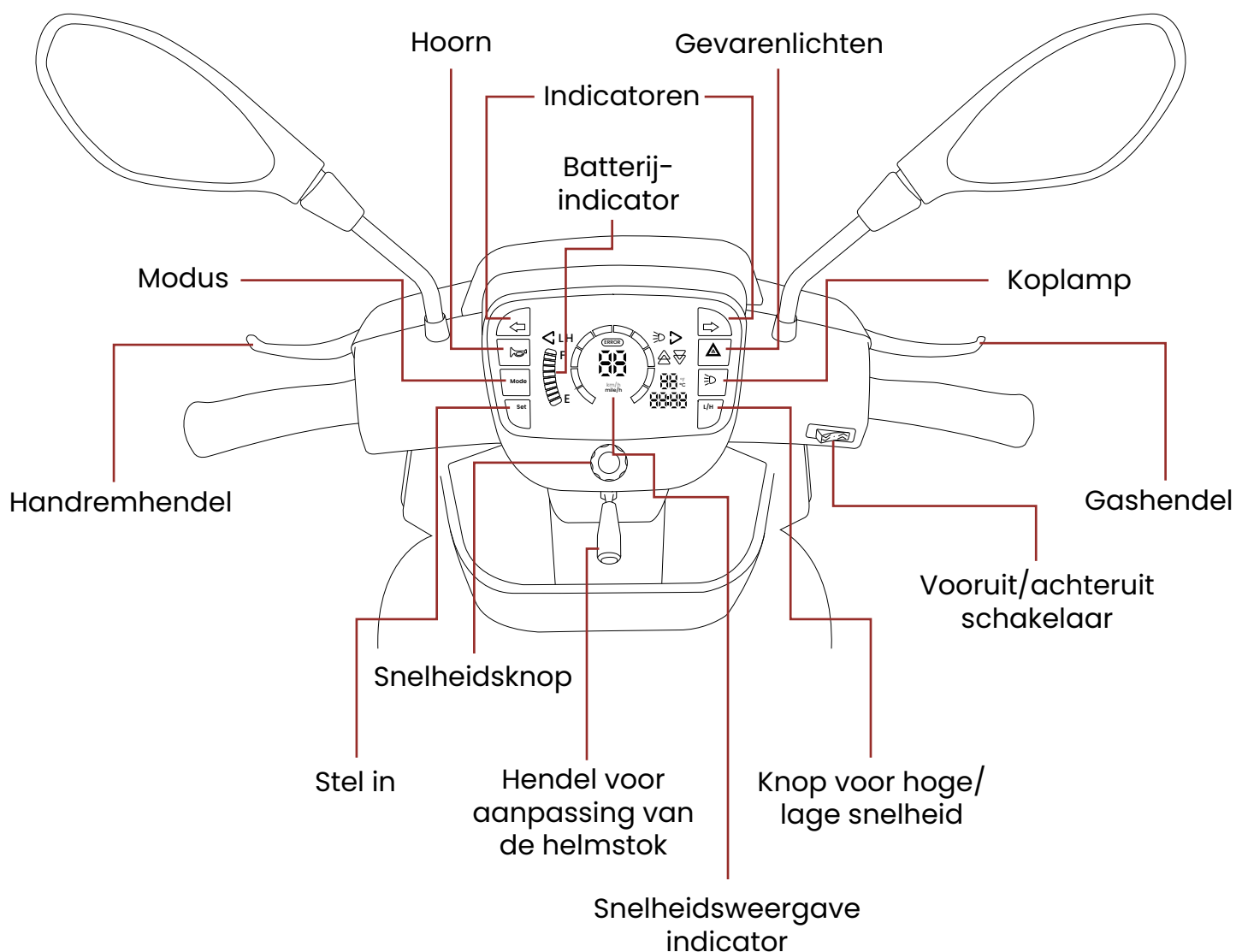

4. Veilig monteren en demonteren

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwacht in beweging komt. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt tijdens het monteren/demonteren.

Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel vanwaar je moet overstappen en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel staan, dit verkleint het risico dat je de stoel mist of valt. De volledig juiste transfermethode varieert afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een transfer.

We raden je ook aan om iemand je te laten helpen totdat je zeker weet dat je zelf veilig kunt overstappen.

5. Veilig rijden

Let bij het besturen van je apparaat altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle plaatselijke regels voor voetgangers en verkeer. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot je pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe dit apparaat aanvoelt voordat je ermee gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je het apparaat gaat gebruiken. Zoek naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Gebruik je apparaat nooit om trappen of roltrappen te nemen.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid tijdens het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd gewichtsverplaatsing in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u over een helling of stoeprand rijdt.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer bij het beklimmen van een helling het apparaat in beweging te houden. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef daarna voorzichtig gas.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan je wilt, laat je de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.
- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van je toestel om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door je gewicht, snelheid en de hoek waarin je de helling nadert.
- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Rijd niet achteruit een helling of helling af om kantelen te voorkomen.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die je zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat beweegt.
- Let op: een vallende stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling kan de voorwielen tegenhouden en ervoor zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig vervoer

Let bij het vervoeren van je apparaat altijd op het volgende:

- Gebruik het apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast tijdens transport. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheidsdrempel overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Batterij opladen en onderhoud

Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren.

De levensduur van een batterij kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het oplaadregime.

Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op wanneer je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat uw batterijen worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde omgeving en niet gedurende langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) worden bewaard, aangezien dit ertoe zal leiden dat de batterij niet kan worden opgeladen en blijvende schade zal veroorzaken.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er zijn explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van accupolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- De batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Transporteer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem contact op met het erkende bedrijf waar u uw batterijen hebt gekocht om ze weg te gooien of te recyclen.
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het niveau van je batterij voordat je aan een reis begint om te voorkomen dat je gestrand raakt.
- Probeer batterijen niet uit hun doosje te halen. Dit mag alleen worden gedaan door een Erkend Partner.

Je batterijen opladen

- Draai de sleutel in de stand 'Uit'.
- Steek de batterijoplader in het stopcontact in de muur.
- Steek de oplader in de aansluiting voor het opladen van de accu op de helmstok. Het LED-lampje wordt blauw als de oplader is ingeschakeld.
- Het LED-lampje op de acculader wordt oranje om aan te geven dat de accu's worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de acculader wordt groen als de accu's volledig zijn opgeladen.

Problemen met opladen oplossen	
Voedings-LED (blauw) brandt niet	Controleer of het stopcontact is aangesloten. Als er geen indicator blijft branden, ga dan terug naar de goedgekeurde partner
Oplaad-LED (oranje) brandt niet	Controleer de aansluitingen en controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als er geen indicator overblijft, ga dan terug naar de goedgekeurde partner
Oplaad-LED (oranje) wordt onmiddellijk (groen)	Controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij niet is opgeladen, retourneer deze dan naar de goedgekeurde partner



TIP Laad de accu's minstens één keer per maand volledig op, of vaker als je de step regelmatig gebruikt. Laad de accu op na elke lange rit (langer dan ~1,8 mijl/3 km).

8. Besturingselementen

In- en uitschakelen

Om je apparaat aan te zetten druk je op de metalen knop aan de rechterkant van de stuurknuppel, de knop zal rood oplichten. Plaats vervolgens de sleutelkaart tegen het paneel, het lampje zal blauw oplichten om aan te geven dat de step nu aan staat.

Druk op de metalen knop om het apparaat uit te schakelen.

De snelheid aanpassen

Zorg er bij het aanpassen van de snelheid van je apparaat altijd voor dat je stilstaat.

Gebruik de snelheidsknop in het midden onderaan de disselknop om de snelheid aan te passen.

Druk op de L/H-knop op het display van de helmstok om te wisselen tussen de modi voor lage en hoge snelheid.

Vooruit & achteruit rijden

Druk op de vooruit/achteruit-schakelaar rechtsonder op de helmstok om te schakelen tussen vooruit en achteruit.

Als je vooruit wilt rijden, druk je op de knop voor vooruit rijden en trek je langzaam de rechter gashendel naar de helmstokhendel toe. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt.

Om achteruit te rijden, druk je op de achteruitknop en trek je langzaam aan de rechter gashendel in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt.

Noodhandrem

Als de gashendel wordt losgelaten, wordt de elektromagnetische rem ingeschakeld. Gebruik indien nodig de handrem aan de linkerkant van de helmstokbediening.

De hoorn blazen

Druk op de knop  op de helmstok om de claxon te laten klinken.

Lampjes en indicatoren

Druk op de knop  op de helmstok om de koplamp in of uit te schakelen.

Om links aan te geven, druk je op de  knop op de helmstok.

Druk op de knop  op de helmstok om rechts aan te geven.

Druk op de  knop op de stuurknuppel om de alarmlichten aan of uit te zetten.

Tijdinstelling

De huidige tijd wordt weergegeven op de helmstok.

Om de tijd in te stellen, zet je de scooter aan, druk je op de [Mode] & [Set] knoppen, het  display zal dan knipperen.

Druk op de knop  om het uur in te stellen (in 24-uurs formaat).

Druk op de knop  om de minuten in te stellen.

Temperatuurinstelling

De huidige temperatuur wordt weergegeven op de helmstok.

Om van eenheid te wisselen, zet u de scooter aan, drukt u tweemaal op de [Mode] knop, het  display zal dan knipperen. Druk op de [Set] knop om de eenheid te wijzigen. Om te bevestigen drukt u op [Mode] of wacht u 5 seconden.

Kilometerteller

Houd  ingedrukt en schakel de scooter in met de sleutelkaart en de [ODO] kilometerstand wordt weergegeven, waarna de scooter na 5 seconden automatisch wordt ingeschakeld.

Instelmodus openen

1. Houd de knop [Mode] 2 seconden lang ingedrukt om naar de instellingsmodus te gaan. De [FF] knippert en geeft de parameterwaarde weer.
2. Druk op [↩] & [↪] om de parameterwaarde te kiezen.
3. Druk op de knop [Set] om de parameterinstelling in te stellen. De [FF] zal knipperen en de instellingswaarde weergeven, druk vervolgens op de [↩] & [↪] om de instellingswaarde te kiezen.
4. Druk op de knop [Set] om terug te keren naar het scherm 'parameterwaarde' of verlaat de parameterinstelling na 5 seconden geen bediening.

Parameterwaarde	Beschrijving	Standaardwaarde	
P1	Vooruit en achteruit hebben tegenovergestelde tekens	F	b
P2	Energiebesparende modus koplamp	op	oF
P3	DRL aan > TOETS AAN/UIT van > Koplamp aan	op	oF
P4	Zijlicht links/rechts aan > TOETS AAN/UIT van > Koplamp aan De linker- en rechterlampjes bewegen mee met de richting	op	oF
P5	Instelling Pruik-Wag - 1 Eenpolig - 2	2	1
P6	Of de richtingaanwijzers en waarschuwingslichten de claxon inschakelen	op	op
P7	FOUTCODE Of de claxon moet worden ingeschakeld wanneer ERROR CODE verschijnt	oF	op
P8	Of het achteruitrijgeluid de claxon aanzet	op	oF
P9	Type batterij	Pb	Li ' Pb
PA	Instellen bandenmaat	16	10, 11, 12, 13, 14, 16
Pb	Type regelaar	PG	PG ' DY



11. Veiligheidsgordels monteren en afstellen

Dit model is standaard uitgerust met een veiligheidsgordel. Om de gordel te verstellen schuif je de kunststof gordelversteller naar voren (langer) of naar achteren (korter) van het gordelslot.

12. Tiller afstellen

Stel voor de veiligheid de dissel alleen af als het apparaat stilstaat en uitgeschakeld is.

Stel bij door de disselafstelhendel omlaag te drukken en de hoek van de dissel af te stellen. Eenmaal in de gewenste positie laat je de verstelhendel los en is de helmstok afgesteld.

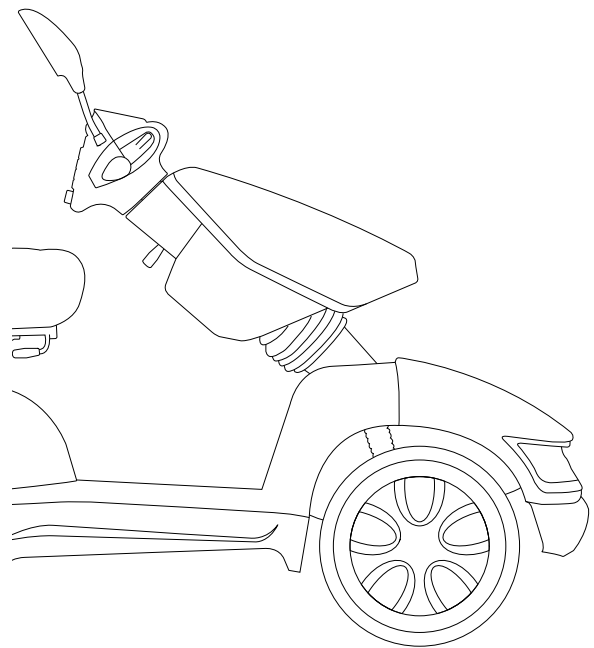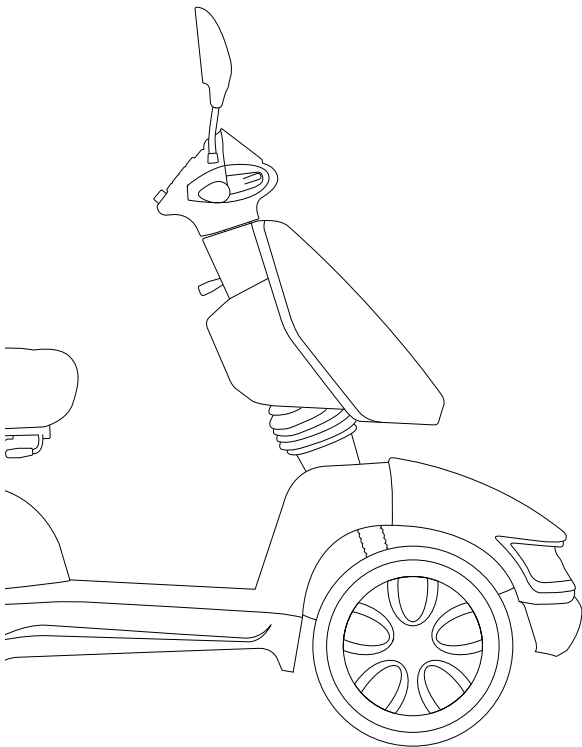

13. Tillerhaak

Het apparaat is uitgerust met een haak voor het vasthouden van voorwerpen, zoals boodschappentassen. Houd er voor de veiligheid rekening mee dat deze haak een maximale capaciteit heeft van 1,5 kg.

14. Stoelverstelling

Verstel de stoel voor de veiligheid alleen als het apparaat stilstaat en uitgeschakeld is.




WAARSCHUWING Ga eenmaal op de step stevig op de zitting zitten, ga niet op de voetsteun staan want dan kan de step omvallen.

Armleuning hoekverstelling

De hoogte van de opklapbare armsteun kan worden aangepast door aan de instelknop aan de onderkant van de armsteun te draaien.



WAARSCHUWING Plaats geen zware voorwerpen op de armleuningen, want dit kan schade veroorzaken.

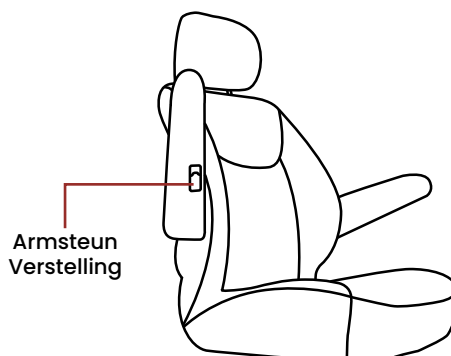


Stoel naar voren en naar achteren verstellen

Duw de voorste hendel aan de zijkant van de stoel omhoog om de stoel naar voren en naar achteren te bewegen.


Stoelrotatie aanpassen

Duw de draaihendel omlaag om de stoel te draaien.

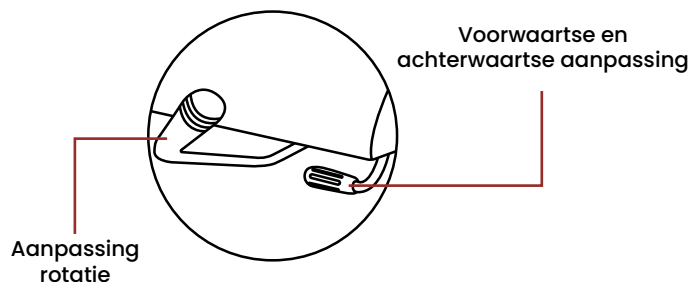

Rugleuning verstellen

Stel de hendel van de rugleuning in voor de hoek van de rugleuning. De maximale rugleuninghoek is 105°.

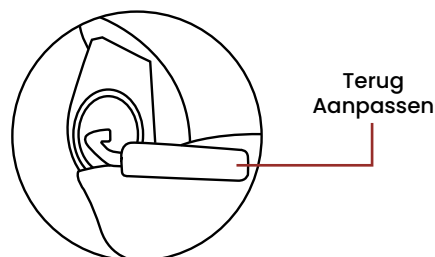

Stoel verwijderen

Om de stoel te verwijderen, duw je op de draaihendel, draai je de stoel en trek je de stoel omhoog.



VOORZICHTIG Gebruik bij het verwijderen van het zadel twee personen om het op te tillen om de kans op letsel te verkleinen.



WAARSCHUWING Houd bij elke mechanische afstelling van de dissel of stoel rekening met beknelling van handen of vingers.


15. Modus vrijloop

Dit apparaat is uitgerust met een elektromagnetische (EM) rem aan de achterkant die is ontworpen om in te schakelen als het apparaat niet wordt gebruikt of als de stroom is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kan de EM-rem worden uitgeschakeld zodat het apparaat handmatig kan worden geduwd (vrijloopmodus).

Zorg er bij het inschakelen van het apparaat altijd voor dat de EM-rem is ingeschakeld.

Om de elektromagnetische rem in te schakelen, duwt u de hendel in de ingeschakelde stand (rijmodus).

Om de elektromagnetische rem uit te schakelen, duwt u de hendel in de uitgeschakelde stand (vrijloopmodus).

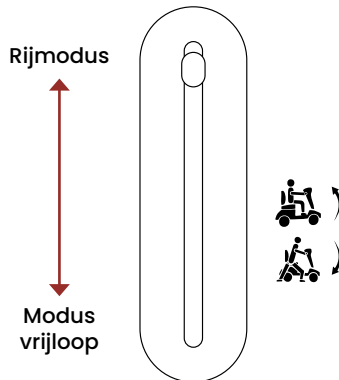

WAARSCHUWING Schakel de elektromagnetische rem alleen uit als de step is uitgeschakeld en op een vlakke ondergrond staat.

16. Dagelijkse controles

Controleer de volgende items voordat u het apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de frees

- Zorg ervoor dat het niet te los zit.
- Zorg ervoor dat het soepel volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Besturingselementen

- Als het apparaat is uitgeschakeld, controleer dan of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat je apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de knoppen trekt.

Snelheidsaanpassing

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat de snelheid van het apparaat verandert zoals het zou moeten.

Batterijmeter

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

Hoorn

- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

Motor, transmissie en elektromagnetische rem

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je apparaat komen.
- Controleer of er geen ongewone geuren uit je apparaat komen.

Wielen

- Als het apparaat is uitgerust met luchtbanden, zorg er dan voor dat deze zijn opgepompt tot de juiste spanning – controleer de vereiste psi op de band zelf (35-40 psi).
- Controleer of er geen scheuren of vervormingen op de banden van je apparaat zitten.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten.
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is.

Batterijhouder

- Controleer of de batterijhouder geen barsten of vervormingen vertoont.

Stoel

- Controleer of er geen ongebruikelijke beweging is wanneer de stoel vergrendeld is.
- Controleer of de stoel beweegt zoals het hoort.

Vrijloophendel

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) in- en uitschakelt zoals het hoort.

17. Reiniging, onderhoud en afvoer

Schoonmaken

Gebruik een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het reinigen.
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen slang, straal of sproei geen water rechtstreeks op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het reinigen.

Onderhoud

Zorg ervoor dat je apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en regelmatige controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om je apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

Onderhoudsbaan	Dagelijks	Wekelijks	Maandelijks	Tweejaarlijks
Elektrisch systeem				
Batterijmeter - controleer de batterijmeter om te bepalen of de batterijen moeten worden opgeladen.	✓			
Controller / displaypaneel - controleer of ze niet gerafeld zijn of blootliggende bedrading hebben.			✓	
Controleer of alle stekkers en bedrading stevig vastzitten.			✓	
Zijn de batterijen volledig opgeladen voor het dagelijkse gebruik?	✓			
Zijn alle houders en schroeven stevig en veilig bevestigd?	✓			
Werken alle elektrische verlichtingssystemen (indien van toepassing)?	✓			
Banden & Wielen				
Is de luchtdruk van de luchtbanden gecontroleerd?	✓	✓		
Voor- en achterwielen moeten soepel kunnen draaien zonder enige interferentie.		✓		
De voor- en achterwielen moeten soepel kunnen draaien zonder te wiebelen.			✓	
Controleer het profiel van de band visueel. Laat banden vervangen door een Erkend Partner als ze minder dan 1 mm (1/32") bedragen.			✓	
Anderen				
Motorborstels. We raden aan dat uw Erkend Partner de borstels elke zes maanden inspecteert als uw apparaat niet soepel werkt. Als bij de inspectie overmatige slijtage wordt vastgesteld, moeten ze worden vervangen omdat anders de motor beschadigd raakt.				✓

18. Elektromagnetische compatibiliteit

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, amateurradiozenders (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van bronnen met radiogolven) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuïteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuïteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuïteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie typen:

1. Draagbare handontvangers (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: CB (Citizens Band) of draagbare radio's (beveiligings-, brandweer- en politietransceivers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers voor middellange afstand, zoals die worden gebruikt in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Langeafstandszenders en -ontvangers, zoals commerciële zenders (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten handapparaten, zoals draadloze telefoons, laptopcomputers, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken voor je elektrische scooter.

Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolffbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals CB-radio's (citizen band), en schakel geen persoonlijke communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in terwijl het apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-stations, en probeer te voorkomen dat je in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als het onbedoeld beweegt of de rem loslaat.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Meld alle incidenten met onbedoelde bewegingen of het loslaten van remmen aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

19. Problemen oplossen

Als er een fout optreedt met je step, raadpleeg dan de foutcodes die worden weergegeven op je bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. De code beschrijft de fout. Op de volgende pagina toont de tabel alle problemen die het apparaat kan melden en leidt u naar een mogelijke oplossing.

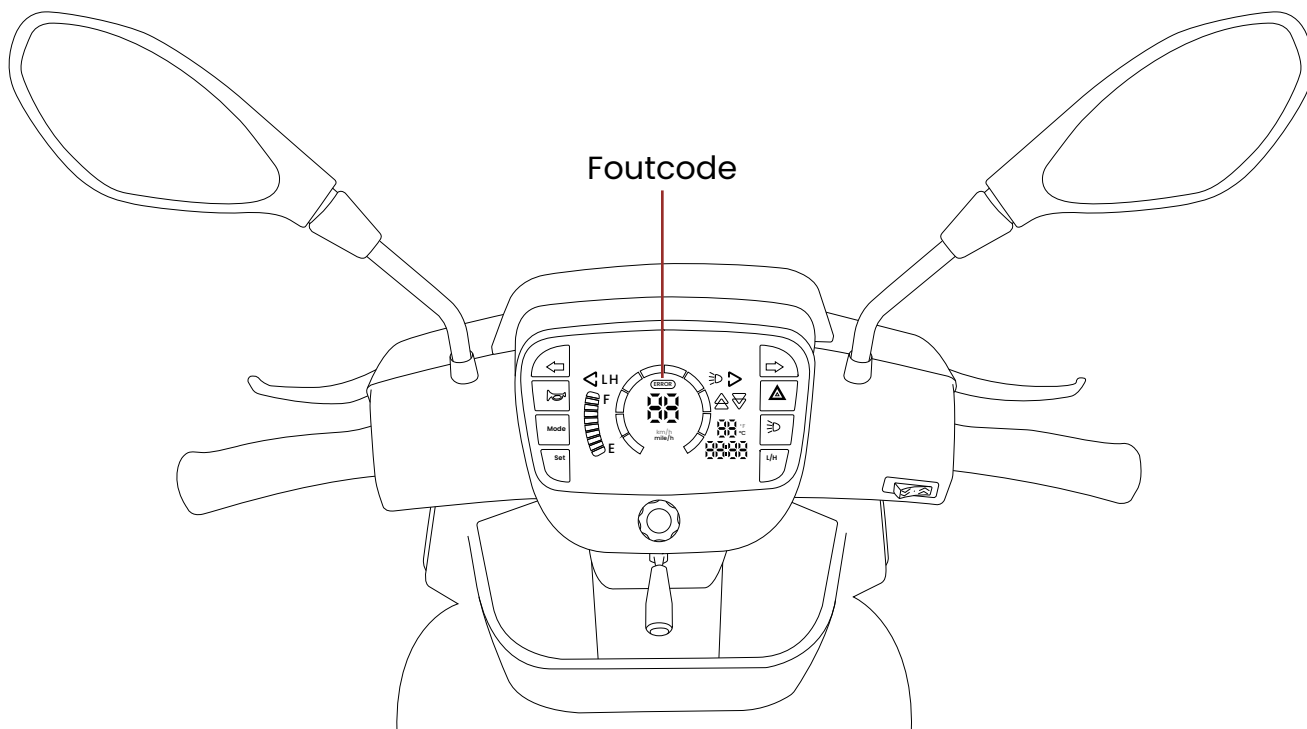

Foutcode	Beschrijving
1	De batterij moet worden opgeladen of er is een slechte verbinding met de batterij. Controleer de aansluitingen op de accu.
2	Slechte verbinding met de motor. Controleer alle verbindingen tussen de motor en de controller.
3	Motor heeft kortsluiting met een accuaansluiting. Neem contact op met een Erkend Partner.
4	De vrijloophendel is ingeschakeld of het handmatige uitschakelmechanisme van de rem wordt bediend. Controleer de positie van de hendel.
5	Niet gebruikt.
6	S-Drive wordt belemmerd om te rijden. Blokkering 2 is actief. Kan komen doordat de acculader is aangesloten.
7	Gasklepstoring wordt aangegeven. Controleer of de gashendel niet is ingeschakeld voordat u de scooter inschakelt.
8	Controllerfout wordt aangegeven. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten.
9	De parkeerremmen hebben een slechte verbinding. Controleer de aansluitingen van de parkeerrem en de motor. Controleer of de aansluitingen van de controller goed vastzitten.
10	Er staat een te hoge spanning op de controller. Meestal veroorzaakt door een slechte batterijverbinding. Controleer de batterijaansluitingen.

Neem contact op met een Erkend Partner als het probleem niet kan worden opgelost met de bovenstaande oplossingen. Houd je serienummer bij de hand om aan de Erkend Partner te geven. Je vindt het op de deksel van de helmstok.

20. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij verkopen op hun beurt het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die je krijgt of om een claim in te dienen, kun je contact opnemen met het bedrijf waar je hebt gekocht.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7, Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Heartway Medische Producten. Co. Ltd.

No. 6, Gongyequ 25th Rd.,
Baoshan Vil., Nantun Dist.
Taichung 408017
Taiwan



SUNGO Europa B.V.

Fascinatio Boulevard 522
Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel
Nederland



Motion Mobility

Noordeinde 136
1121AL Landsmeer
Netherlands

21. Specificaties

Lengte	166,5 cm
Breedte	78 cm
Hoogte	129,5 cm
Wielmaat voor	36 cm
Wielmaat achter	41 cm
Totaalgewicht	148 kg
Zwaarste onderdeel	N.V.T
Gewicht batterij	54 kg
Capaciteit batterij	2x 12v 100ah Carbon
Wattuur batterij	2400 Wh
Bereik (tot)	60 km
Snelheid	18 km/u
Gewichtslimiet	180 kg
Zitbreedte	50,8 cm
Motorgrootte	1300w
Maximale helling	10°
Bodemvrijheid	12 cm
Draaicirkel	200 cm

22. Instructies en onderhoud van batterijen

- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de positieve en negatieve aansluitingen. Kortsluiting kan leiden tot lekken, brand of explosies.
- Gebruik deze batterijen niet samen met batterijen van een ander type, zoals Ni-MH of Ni-Cd enzovoort. Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of explosies van de batterijen en menselijk letsel.
- Als de batterij vlam vat, gebruik dan een brandblusser met droog poeder of kooldioxide. Gebruik geen water om brand te bestrijden.
- Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Dit kan lekkage, brand of explosie van de batterijen veroorzaken.
- Haal batterijen niet uit elkaar, pas ze niet aan en beschadig ze niet. Dit kan lekkage, brand of explosie van de batterijen veroorzaken.
- Vervang batterijen binnen de periode die wordt aanbevolen in de gebruiksaanwijzing van de batterijen of die wordt aangegeven op het apparaat. Overmatig gebruik kan interne kortsluiting of schade aan de batterij veroorzaken, wat kan leiden tot lekkage, brand of explosie van de batterijen.
- Zorg er bij het installeren van batterijen voor dat de positieve en negatieve polariteit correct zijn. Aansluiting met verkeerde polariteit kan leiden tot overstroom, brand en schade aan laders.
- Batterijen bevatten verdund zwavelzuur. Als er zuur uit beschadigde batterijen lekt, moet dit onmiddellijk van kleding of huid worden gespoeld. Als het zuur in contact komt met de ogen, spoel dan met een grote hoeveelheid water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Zuur kan de huid verbranden en blindheid veroorzaken.
- Batterijen die tekenen van corrosie van de aansluitpunten, lekkage, vervorming van de batterijhouder of andere afwijkingen vertonen, mogen niet worden gebruikt. Verder gebruik kan leiden tot lekkage, brand of explosie van de batterijen.
- Gebruik of bewaar batterijen niet in de buurt van transformatoren of andere warmtebronnen, in de auto die u buiten laat staan, in direct zonlicht of in andere omgevingen met hoge temperaturen. Dit kan leiden tot een verhoogde temperatuur van de batterij, wat lekkage, brand of een explosie kan veroorzaken.
- Bij het installeren van accu's in metalen behuizingen moet de ruimte tussen de accu en de behuizing worden opgevuld met zuurbestendig, hittebestendig isolatiemateriaal om contact tussen de accu en de behuizing te voorkomen. Accu's met zuurlekkage kunnen rook en vlammen veroorzaken.
- Draag rubberen handschoenen en rubberen schoenen bij het werken met batterijen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken, brandwonden of brand.
- Plaats batterijen niet op een plek waar ze kunnen worden blootgesteld aan water, omdat een elektrisch lek elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
- Plaats batterijen niet meer dan 90° uit hun rechtopstaande positie, aangezien dit kan leiden tot lekkage, brand of explosie.
- Reinig batterijen niet met droge doeken of plumeaus omdat dit statische elektriciteit kan produceren en explosies kan veroorzaken. Gebruik alleen vochtige doeken.
- Bevestig alle vereiste isolatiedoppen op de accupolen en verbind deze zoals gespecificeerd. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken, brandwonden, kortsluiting, schade aan de batterij, brand of explosie.

- Wanneer het wordt gebruikt in medische apparatuur, moet het niet alleen worden uitgerust met dit batterijsysteem, maar ook met een ander back-upsysteem. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel als dit batterijsysteem uitvalt.
- Sluit batterijen niet rechtstreeks aan op stopcontacten of de sigarettenaansteker in auto's. Dit kan leiden tot brandwonden of oververhitting. Dit kan leiden tot brandwonden of oververhitting.
- Gebruik batterijen binnen het volgende temperatuurbereik. Ontladen (apparatuur in gebruik): -15°C – 45°C ; Opladen: -15°C – 45°C ; Opslag: -15°C – 40°C .
- Gebruik geen thinner, benzine, benzine, smeermiddelen, vetten of andere organische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen. Dit kan leiden tot barsten in de batterijhouder, lekkage en brand.
- Batterijen moeten regelmatig worden gecontroleerd. Batterijen die niet voldoen aan de specificaties in de gebruikershandleiding moeten worden afgesteld volgens de gebruikershandleiding. Voortdurend gebruik zonder afstelling kan leiden tot schade of brandwonden.
- Gebruikte batterijen kunnen worden gerecycled. Gooi ze niet direct weg zonder overleg met het verkoopbedrijf of onze vertegenwoordigers.
- Ontlaad bij het schoonmaken en inspecteren van batterijen eerst de statische elektriciteit van uw lichaam. Statische elektriciteit kan vonken veroorzaken die tot explosies kunnen leiden.
- De maximale ontlaadstroom van batterijen mag de specificaties in de gebruikershandleiding niet overschrijden.
- Een te hoge ontlaadstroom kan lekkage, oververhitting en explosie veroorzaken.
- Indien roest, barsten, vervormingen, oververhitting of andere abnormaliteiten worden vastgesteld, stop dan onmiddellijk na aankoop met het gebruik en neem contact op met het verkoopbedrijf. Verder gebruik kan leiden tot lekkage, oververhitting of een explosie.
- Wanneer meerdere accu's tegelijk worden gebruikt, moeten de accu's zelf goed worden aangesloten voordat ze op de acculader of belasting worden aangesloten. Sluit de positieve pool van de accu stevig aan op de positieve pool van de acculader of de belasting. Een onjuiste polariteit kan leiden tot explosies of brand die de accu's of apparatuur beschadigen en kan mensen verwonden.
- Batterijen niet stoten, laten vallen of er tegen stoten. Batterijen mogen niet worden gebruikt in omgevingen met sterke trillingen, omdat deze de batterijen kunnen beschadigen.
- Gebruik batterijen niet in stoffige omgevingen omdat dit kan leiden tot kortsluiting (als batterijen in stoffige omgevingen moeten worden gebruikt, moeten ze regelmatig worden geïnspecteerd).
- Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten in dezelfde string. Kleine verschillen tussen de accu's kunnen de operationele stabiliteit beïnvloeden en kunnen de levensduur van de accu's aanzienlijk verkorten en leiden tot vervorming en oververhitting. Als de specificaties van de geschikte batterijen voor de apparatuur niet bekend zijn, neem dan vóór gebruik contact op met de fabrikant.
- Koppel de batterijen los van de apparatuur als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Batterijen zijn zwaar; wees voorzichtig bij het hanteren om rugletsel te voorkomen.
- Batterijen zijn zwaar; wees voorzichtig bij het hanteren om rugletsel te voorkomen.

- Apparatuur op batterijen moet worden gescheiden door de afstanden die zijn aangegeven in handleidingen of op labels om storingen te voorkomen. In bepaalde gevallen zijn de minimale afstanden wettelijk bepaald.
- Apparatuur op batterijen moet worden geïnspecteerd zoals aangegeven in de gebruikershandleiding, behalve wanneer inspecties wettelijk zijn voorgeschreven. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.
- Apparatuur op batterijen vereist speciale bekabeling voor stroomdistributie die door professionals moet worden aangelegd. In bepaalde landen moet het werk worden uitgevoerd door nationaal gecertificeerde elektrotechnici.
- Bepaalde landen hebben wetten voor apparatuur op batterijen waaraan moet worden voldaan.
- Gebruik geen batterijen behalve voor de gespecificeerde toepassing. Onjuist gebruik kan leiden tot lekkage, brand of explosie.
- Om te voorkomen dat er een lekcircuit ontstaat door het zuur dat uit de accu's lekt, moet u preventieve maatregelen nemen op het circuit of een isolerende laag of isolerende bak plaatsen tussen de accu's en het frame.

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen



www.motionhealthcare.nl

085-2129445