


CONNEX

Handleiding

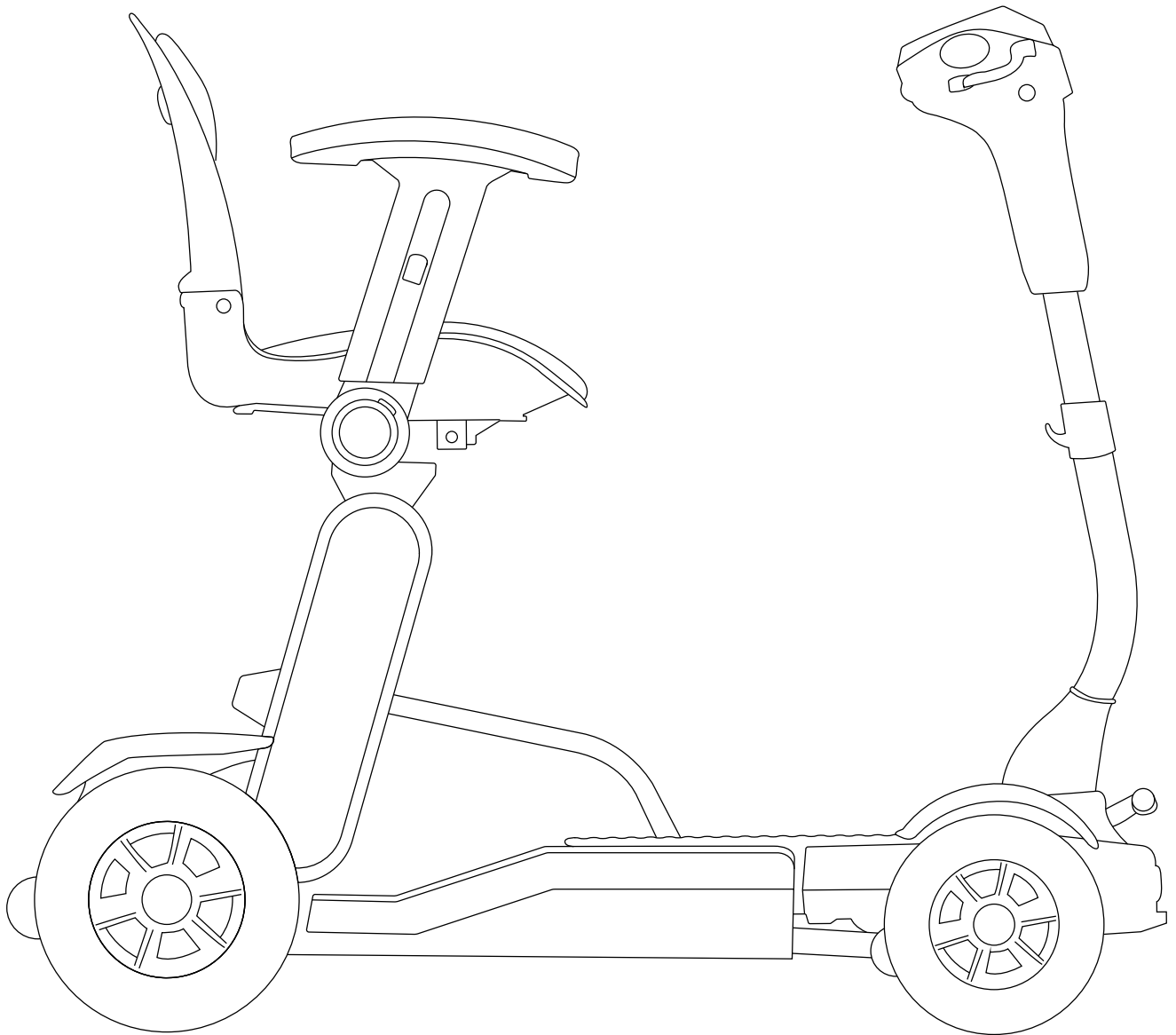

Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare Connex scootmobiel.


Uw nieuwe apparaat is ontworpen om vervoer binnen en buiten te bieden aan een persoon wiens vermogen om te lopen is beperkt, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat is om het apparaat veilig te bedienen.


We zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele en kwalitatief hoogwaardige producten en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen, we hopen van harte dat we dat bereiken en dat u plezier heeft van uw Motion Healthcare apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat heeft gekocht.

2. Je scooter leren kennen

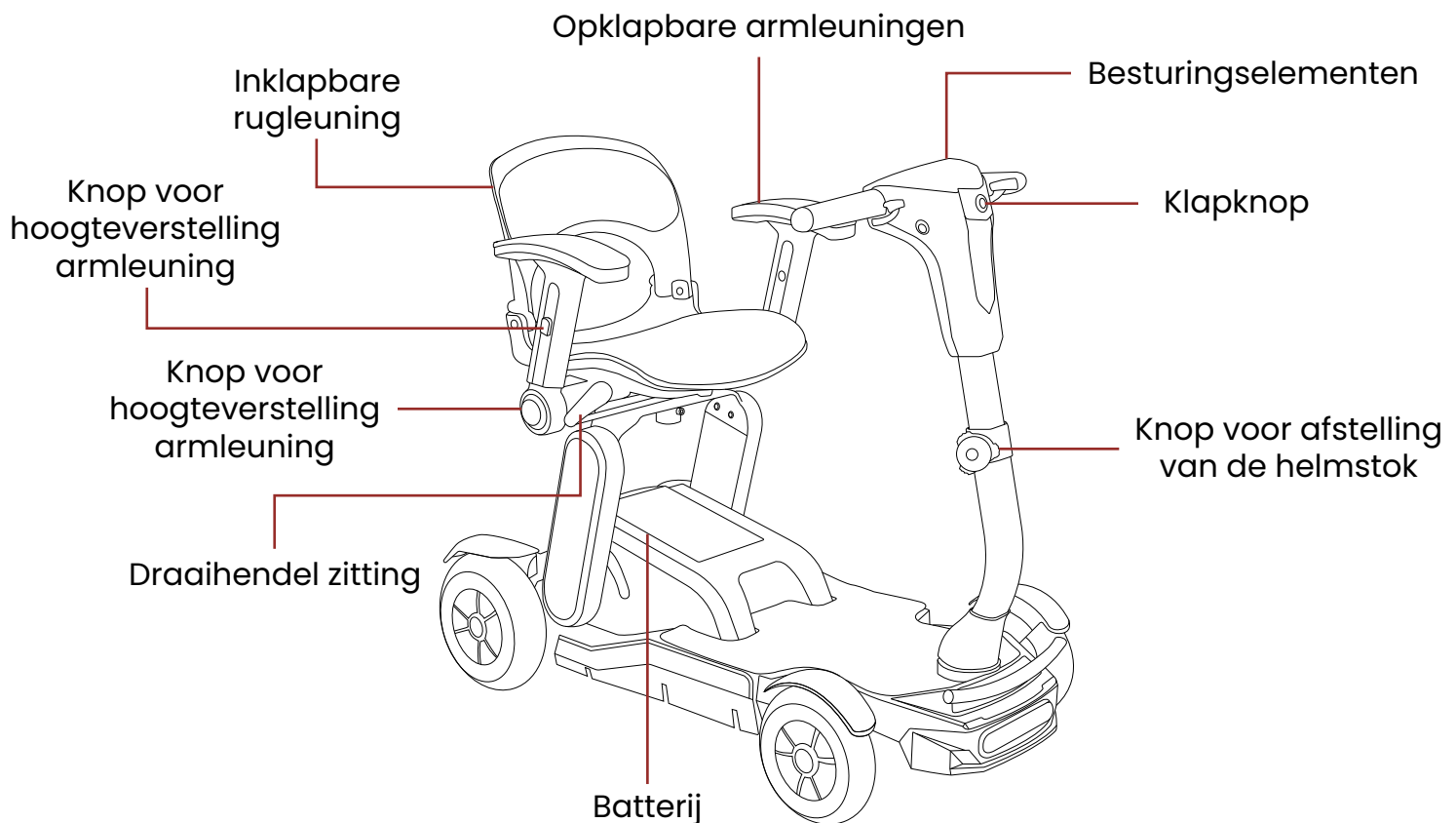

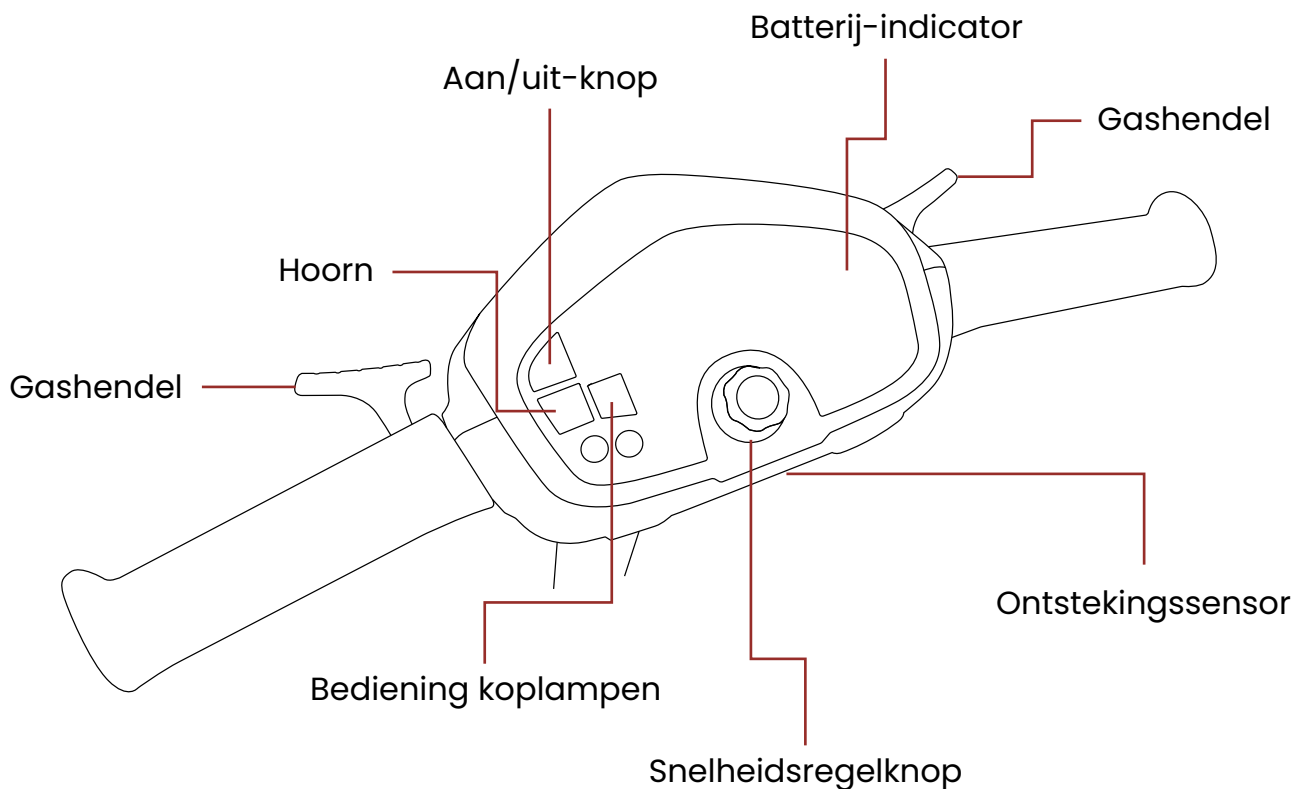

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig oplettend tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheids- of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren
- Raadpleeg uw arts als u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren
- Bedien uw apparaat niet terwijl u onder invloed van alcohol bent, omdat dit uw vermogen om het veilig te bedienen kan belemmeren.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichthtraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor slechts één persoon. We raden u ten zeerste af om te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.

- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer de elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, indien aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht om deze zo snel mogelijk te vervangen.
- Breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- De toevoeging van accessoires aan uw apparaat kan bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u zuurstof gebruikt in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat uw vermogen om het apparaat te bedienen verandert. – Zet het apparaat niet in de “freewheel”-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de “freewheel”-modus inschakelt of uitschakelt.
- Schakel de stroom naar het apparaat uit als u verwacht langere tijd stil te zitten. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd uit zichzelf gaat rollen, dient u de step nooit in de “freewheel”-modus te plaatsen op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koordjes, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het apparaat bedient, vast kunnen komen te zitten rond de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat geen voorwerpen achter het apparaat slepen tijdens het rijden. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen komen.
- Wanneer je het apparaat gebruikt met een takel/takel, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de “freewheel” modus staat en ga NIET op het apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.
- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk omvallen te voorkomen, mag u nooit iets vervoeren of de tas/mand vullen met een inhoud van meer dan 6,8 kg.
- Gebruik de armleuningen (indien aanwezig) niet om het gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.

4. Veilig monteren en demonteren

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwacht in beweging komt. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl je op- of afstapt. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt en stap zo ver mogelijk naar achteren op de stoel.

De volledig juiste transfermethode varieert op basis van uw persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met uw zorgverlener om te leren hoe u uw lichaam moet positioneren en hoe u uzelf moet ondersteunen tijdens een transfer. We raden u ook aan om iemand u te laten helpen totdat u zeker weet dat u zelf veilig kunt transfereren.

5. Veilig rijden

Let bij het besturen van je apparaat altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle plaatselijke regels voor voetgangers en verkeer. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot je pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe het apparaat aanvoelt voordat je gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je van plan bent het apparaat te gebruiken. Let op gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden – Gebruik je toestel nooit om over trappen of roltrappen te rijden.
- Verminder uw snelheid bij het draaien en maak geen scherpe bochten om kantelen te voorkomen. Houd altijd een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en voorkom dat uw gewicht in de tegenovergestelde richting van een bocht wordt verplaatst – Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het nemen van een helling of stoeprand.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren – Probeer het apparaat in beweging te houden wanneer u een helling oprijdt. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef vervolgens voorzichtig gas.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan u wilt, laat u de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.
- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van het apparaat om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waarin u de helling nadert.

- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Om kantelen te voorkomen, mag u niet achteruit een helling of helling afrijden
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is – Wees u ervan bewust dat een gevallen stoeprand of kleine hobbel onderaan een helling de voorwielen kan tegenhouden en ervoor kan zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig vervoer

Let bij het vervoeren van je apparaat altijd op het volgende:

- Gebruik het apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast als het wordt vervoerd. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden
- Ga nooit op het apparaat zitten terwijl het zich in een rijdend voertuig bevindt
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheid overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Vliegreizen

LET OP: Alleen de optionele 10,05ah accu voor de Connex valt onder de regelgeving voor veilig vliegverkeer van de burgerluchtvaart. De standaard 13,4ah accu is te groot.

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door niet-verspreidbare zure of alkalibatterijen. Zie onze opmerkingen in het VET om je te helpen met je apparaat:

Vóór de reis moeten passagiers de vervoerder op de hoogte stellen van het type batterijen in het mobiliteitshulpmiddel en hoe het apparaat kan worden beschermd tegen onbedoeld gebruik. – **De batterijen in uw apparaat zijn lithium-ion batterijen. Om te beschermen tegen onbedoeld gebruik moet u de scootmobiel uitzetten en ervoor zorgen dat de scootmobiel niet in vrijloop staat (zie hoofdstuk 13 voor meer instructies).**

Op de luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij controleren of de:

- de accu moet worden verwijderd en vervoerd in een stevige, stevige verpakking en worden opgeborgen in de laadruimte;
- de accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijv. door blootliggende polen af te plakken); – de accu van uw scootmobiel mag geen blootliggende polen hebben.
- de accu moet worden beschermd tegen beschadiging (bijv. door elke accu in een beschermend zakje te plaatsen); – het verwijderen van de accu uit het scootmobiel moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat.
- De accu kan eenvoudig omhoog worden getild en van de Connex bodemplaat worden verwijderd (zie hoofdstuk 9 voor meer instructies).

- de accu mag niet groter zijn dan 300 Wh – de 10ah accu is 241,2Wh ($25,2\text{v} \times 10,05\text{ah} = 253,26\text{Wh}$)
- let op, de standaard Connex accu is te groot ($25,3\text{v} \times 13,4\text{ah} = 337,68\text{Wh}$)
- er mag maximaal één reserveaccu van maximaal 300 Wh of twee reserveaccu's van elk maximaal 160 Wh worden vervoerd.

Passagiers wordt aangeraden om ten minste 48 uur van tevoren regelingen te treffen met hun luchtvaartmaatschappij.

8. Batterij opladen en onderhoud

Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren. Als dit niet gebeurt, kan de levensduur van de batterijen afnemen. De levensduur van batterijen kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het gebruikte oplaadregime.

Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op als je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat je de batterijen in een droge, goed geventileerde omgeving bewaart en ze niet voor langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) laat liggen, want dan kan de batterij niet meer worden opgeladen en raakt ze permanent beschadigd.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten corrosieve chemicaliën
- Er bestaan explosieve omstandigheden
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah)
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de batterijpolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- Batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem voor het weggooien of recyclen van uw batterijen contact op met het erkende bedrijf waar u ze hebt gekocht.
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde oplader.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de batterijen niet op te laden door kabels rechtstreeks op de batterijterminals of klemmen aan te sluiten
- Controleer altijd het batterijniveau voordat u aan een reis begint om te voorkomen dat u gestrand raakt
- Probeer de batterijen niet uit hun doosjes te halen. Dit mag alleen door een erkend bedrijf worden gedaan.

Je batterijen opladen

- Zet de scooter uit.
- Steek de stekker van de acculader in het stopcontact in de muur.
- Steek de stekker van de acculader in het oplaadstopcontact.
- De LED op de acculader brandt rood tijdens het opladen.
- De LED op de acculader brandt groen wanneer de accu volledig is opgeladen.

9. LED-scherm



Je Connex scooter is uitgerust met een LED-display.

Het groene lampje geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld.

Het koplampsymbool geeft aan dat de koplamp is ingeschakeld.

De batterij-indicator loopt rond aan de rechterkant van het display.

Je snelheid wordt aangegeven rond de snelheidsregelknop.

Er zijn 5 knoppen aan de linkerkant van het scherm:

- Aan/uit-knop - Hiermee zet je het apparaat aan en uit.
- Claxon - Hiermee laat je de claxon horen om mensen om je heen te waarschuwen.
- Koplamp - Hiermee zet je de koplamp aan en uit.
- Modus - Hiermee schakel je tussen de weergave van tijd en temperatuur.
- Instellen - Hiermee kun je instellingen wijzigen.

Tijd instellen

Druk in de tijdweergave tegelijkertijd op mode en set om de tijd aan te passen. De tijdweergave knippert om aan te geven dat de tijd wordt aangepast.

De koplampknop past het uur aan.

De instelknop past de minuten aan.

De modusknop bevestigt de ingestelde tijd.

Temperatuur instellen

Houd in de temperatuurweergave de instelknop ingedrukt om te schakelen tussen de weergave in Celsius en Fahrenheit.

10. Vouw en ontvouwen

Vouwen



1. Duw de rugleuning omlaag, druk vervolgens de stoeldraaihendel omlaag en til de stoel omhoog om deze te verwijderen.



2. Druk op de vouw/ontvouw knop op de stuurknuppel van de step om de elektronische vouwfunctie te starten. Houd er rekening mee dat u twee keer op deze knop moet drukken om deze functie te starten als de step langer dan 2 minuten uit heeft gestaan.



3. De step begint dan met de elektronische vouwfunctie. Dit proces duurt ongeveer 15 seconden.



4. Gebruik indien nodig het zwarte handvat aan de achterkant van de step om de opgevouwen step rechtop te zetten.



5. Om het achterste gedeelte te verwijderen, gebruikt u de rode hendel en trekt u de achterste zwarte stang omhoog totdat het gedeelte is verwijderd.

Ontvouwen



1. Leg de step neer, zodat de twee achterwielen de vloer raken.



2. Druk op de vouw/ontvouw knop op de stuurknuppel van de step om de elektronische vouwfunctie te starten. Houd er rekening mee dat u twee keer op deze knop moet drukken om deze functie te starten als de step langer dan 2 minuten uit heeft gestaan.



3. De step begint dan met de elektronische ontvouwfunctie. Dit proces duurt ongeveer 15 seconden.



4. Plaats de zitting terug in de zittingbasis, duw de draaigreep van de zitting naar beneden en controleer voor gebruik of deze goed vastzit.

Stoelaanpassing



Om de hoogte van de armleuningen te verstellen, druk je op de zilveren knop aan de zijkant van de armleuning en pas je de hoogte aan. Laat de knop los en zorg ervoor dat de armleuning vastzit.



Om de armleuning in te klappen, drukt u op de kleine zilveren knop net boven de oranje reflector. De armleuning kan dan worden ingeklapt. Let op, de armleuning heeft slechts twee vergrendelde posities – rechtop en volledig ingeklapt.



Druk op de kleine zilveren knop net boven de oranje reflector om de armsteun in te klappen. De armleuning kan dan worden ingeklapt. Let op, de armleuning heeft slechts twee vergrendelde posities – rechtop en volledig ingeklapt.

11. Besturingselementen

In- en uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop, rechts van de aan/uit-knop gaat een groen lampje branden.

Plaats de afstandsbediening op de sensor met het symbool op de helmstok – het dichtst bij de stoel. Alle lampjes op de stuurknuppel moeten nu branden en het apparaat is klaar om te rijden.

Om het apparaat uit te schakelen drukt u eenmaal op de aan/uit-knop, hierdoor moeten alle lampjes op de stuurknuppel uitgaan. De step mag niet bewegen als je de knoppen gebruikt.

De snelheid aanpassen

Om de snelheid van je apparaat aan te passen, moet je altijd stilstaan en aan de knop voor het aanpassen van de snelheid draaien. Draai de knop met de klok mee om de snelheid te verhogen en tegen de klok in om de snelheid te verlagen. De geselecteerde snelheid wordt aangegeven door de lampjes boven de knop, wit voor de lagere snelheden, gevolgd door groen en oranje voor de hoogste snelheden.

Vooruit & achteruit rijden

Om vooruit te rijden trek je langzaam aan de rechter gashendel in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de linker gashendel van de disselboom af duwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

Om achteruit te rijden trek je langzaam aan de linker gashendel in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de rechter gashendel van de disselboom wegduwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

Je rijrichting wordt aangegeven door de pijlen op het display van de helmstok.

De hoorn blazen

Druk op de knop op de helmstok om de claxon te laten klinken.

12. Veiligheidsgordels monteren en afstellen

Dit model heeft geen veiligheidsgordel.

13. Tiller afstellen

Om de helmstok af te stellen, houd je de helmstok in één hand en draai je de knop voor de helmstokafstelling tegen de klok in totdat deze los zit. De helmstok kan dan vrij op en neer bewegen.

Als de helmstok in de gewenste stand staat, draai je de knop voor de disselaafstelling met de klok mee tot deze zo strak mogelijk zit.

14. Freewheel Mode

De vrijloophendel bevindt zich aan de achterkant van de step bij het achterwiel. De hendel heeft twee standen:

Omhoog – Neutrale modus (het apparaat kan met de hand worden geduwd of getrokken)

Omlaag – Aandrijfmodus (het apparaat beweegt alleen met de knoppen)

15. Dagelijkse controles

Controleer de volgende items voordat u het apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de frees

- Zorg ervoor dat het niet te los zit.
- Zorg ervoor dat het soepel volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Besturingselementen

- Als het apparaat is uitgeschakeld, controleer dan of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat je apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de knoppen trekt.

Snelheidsaanpassing

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat de snelheid van het apparaat verandert zoals het zou moeten.

Batterijmeter

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

Hoorn

- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

Sleutel

- Zorg ervoor dat je de sleutel bij je hebt en neem hem mee op reis.
- Zorg ervoor dat je apparaat in- en uitschakelt wanneer je de sleutel gebruikt.

Motor, transmissie en elektromagnetische rem

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je apparaat komen.
- Controleer of er geen ongewone geuren uit je apparaat komen.

Wheels

- Controleer of er geen scheuren of vervormingen op de banden van je apparaat zitten.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten.
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is.
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je apparaat komen.

Batterijhouder

- Controleer of de batterijhouder geen barsten of vervormingen vertoont.
- Controleer of de batterijhouder op de juiste manier wordt geplaatst en verwijderd.

Stoel

- Controleer of er geen ongebruikelijke beweging is wanneer de stoel vergrendeld is.
- Controleer of de stoel beweegt zoals het hoort.

Freewheel Lever

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) in- en uitschakelt zoals het hoort.

16. Reiniging, onderhoud en afvoer

Reiniging

Gebruik een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer u het schoonmaakt.
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen slang, straal of spatwater rechtstreeks op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen tijdens het schoonmaken.

Onderhoud

Zorg ervoor dat je apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om je apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

Afvoer

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

17. Elektromagnetische compatibiliteit

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, amateurradiozenders (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van radiogolfbronnen) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuniteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuniteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Het apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuniteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie typen:

1. Draagbare handontvangers (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: CB (Citizens Band) of draagbare radio's (beveiligings-, brandweer- en politietransceivers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers voor middellange afstand, zoals die worden gebruikt in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Langeafstandszenders en -ontvangers, zoals commerciële zenders (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten handapparaten, zoals draadloze telefoons, laptopcomputers, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken voor je elektrische scooter.

Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolfbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals citizen band (CB) radio's, en schakel geen persoonlijke communicatiemiddelen in, zoals mobiele telefoons, terwijl uw apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-zenders, en probeer te voorkomen dat je in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als er een onbedoelde beweging wordt gemaakt of de rem wordt losgelaten.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het wijzigen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Meld alle voorvallen van onbedoelde beweging of loslaten van de rem aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

18. Problemen oplossen

In het geval van een fout met je scooter, zou je een foutsymbool moeten zien knipperen onder de tijd/temperatuur. De tijd/temperatuur wordt dan vervangen door het foutnummer. Op de volgende pagina laat de tabel alle problemen zien die de step kan melden en leidt je naar een mogelijke oplossing.

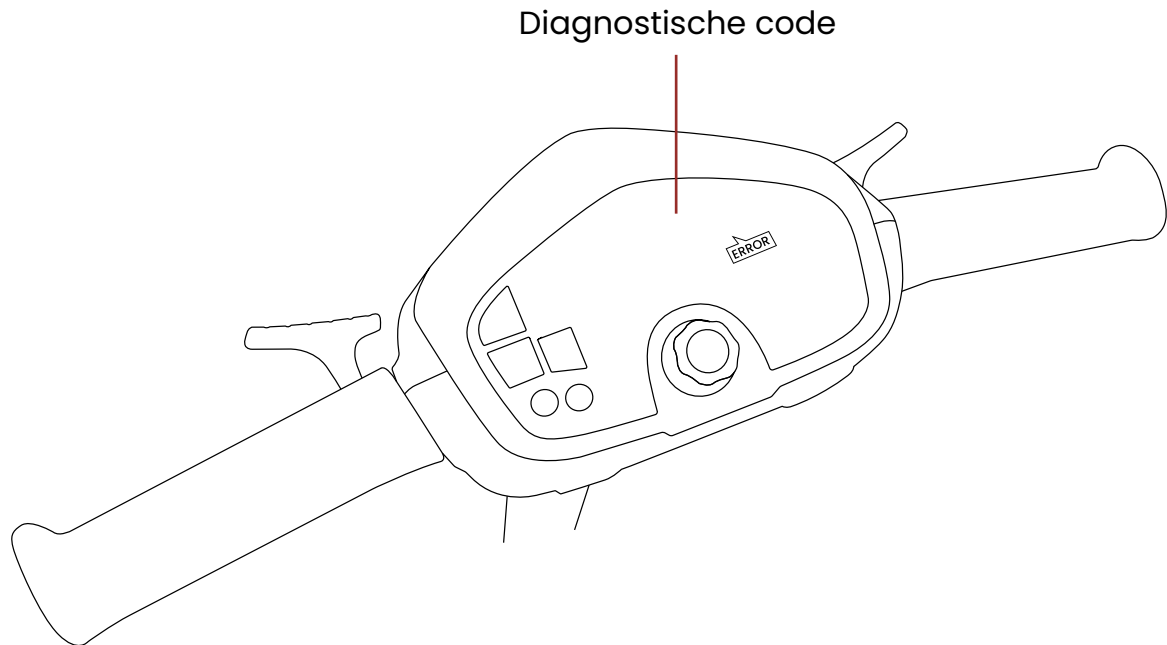

Flash-code	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing(en)
1	De batterij heeft geen stroom of is niet goed aangesloten.	Controleer of de accu goed op zijn plaats zit. Controleer de aansluiting aan de onderkant van de accu. Neem contact op met een erkend verkooppunt voor reparatie.
2	Fout motoraansluiting	Neem contact op met een erkende verkoper voor reparatie.
3	Kortsluiting motor	Neem contact op met een erkende verkoper voor reparatie.
4	Vrijloop ingeschakeld	Schakel de vrijloop uit met de achterste hendel zodat je de bedieningselementen kunt gebruiken.
5	Vastgelopen motor of oververhitte regelaar	Neem contact op met een erkende verkoper voor reparatie.
6	De regelaar mag niet rijden	Zorg ervoor dat de batterijlader niet is aangesloten.
7	Fout controller	Neem contact op met een erkende verkoper voor reparatie.
8	Storing in remaansluiting	Neem contact op met een erkende verkoper voor reparatie.
9	Overmatige spanning	Controleer de batterijaansluitingen. Neem contact op met een erkende verkoper voor reparatie.

19. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij op hun beurt verkopen het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die u ontvangt of om een claim in te dienen kunt u contact opnemen met het bedrijf waar u het product heeft gekocht.v



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Heartway Medical Products Co., Ltd

No. 18, Jingke Central 1st Rd,
Nantun Dist, Taichung City 40852,
Taiwan



Europaischer Bevollmächtigter/Auth Rep

Emergo Europe, Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
Netherlands



FM Hulpmiddelen BV

Argonweg 127
1362AD Almere
Nederland

20. Specificaties

Lengte	103 cm
Breedte	59 cm
Hoogte	90 cm
Wielmaat voor	20 cm
Wielmaat achter	22.8 cm
Totaal gewicht	35.9 kg
Zwaarste onderdeel	17.6 kg
Gewicht batterij	2.5 kg
Accucapaciteit	25.2v 13.4ah Lithium
Wattuur batterij	337.68 wh
Bereik	14 km
Snelheid	6 kph
Maximaal gewicht gebruiker	115kg
Breedte zitting	53 cm
Afmeting motor	270 w
Maximale helling	3°
Bodemvrijheid	3 cm
Draaicirkel	145 cm

Motion

www.motionhealthcare.nl

085-2129445