

Quick Start Guide srpski



Grafikon paljenja
Programiranje peći




Korisnički
uputstvo



SLOJEVITA ESTETIKA - MONOLITNI RAD

MiYO i MiYO pink su jedinstven sistem za završnu obradu koji čine paste opalescentnih i fluorescentnih materijala za bojenje, strukturiranje i glaziranje.

MiYO pink Gingival sistem pruža tehničarima jedinstvenu sposobnost da stvore dubinu, vitalnost i teksturu u prirodnom tkivu, u nezapamćenim debljinama od 0,1 mm - 0,2 mm.

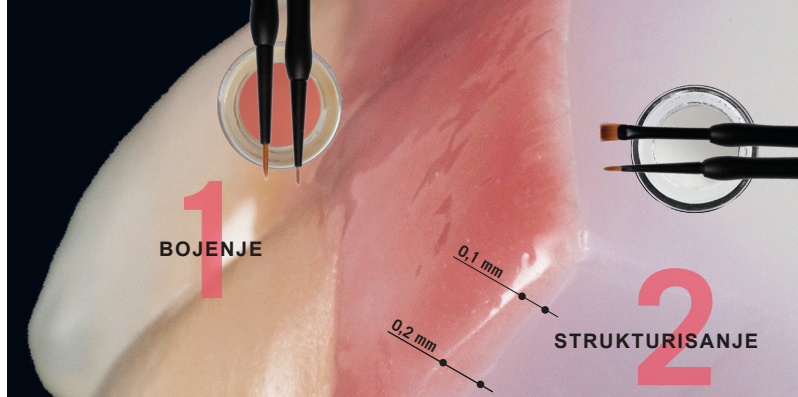

PRIPREMA

- Pre nanošenja materijala, površina mora biti čista i bez masnoće.
- Površina se može peskariti pod pritiskom od 50µm i 2 bara.

UPUSTVO ZA UPOTREBU

- Nemojte izliti višak tečnosti iz pakovanja. Umešajte je nazad u pastu.
- Temeljno izmešajte MiYO Color, MiYO Structure i pastu za glazuru, špatulom bez metala, pre svake upotrebe.
- Paste ne smeju doći u kontakt sa vodom.
- Uvek koristite suhu i čistu četkicu.

OBRADA

- Nanesite materijal na pripremljenu površinu prema njegovoj nameni.

SKLADIŠTENJE

- Na suvom između + 12°C do + 38°C.



PARAMETRI PEČENJA*

COLOR | STRUCTURE | GLAZE PASTE

	ZrO ₂	InSync Zr	LiDi	Press na cirkon
Početna temperatura [°C]	400 - 450	400 - 450	400 - 450	400 - 450
Vreme sušenja [min]	3	3	3	3
Vreme zatvaranja [min]	4	4	4	4
Brzina zagrevanja [°C / min]	45	45	45	45
Vreme zadržavanja 1 [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
Početak vakuuma [°C]	580	580	580	580
Krajnja temperatura [°C]	720	720	710	720
Kraj vakuuma [°C]	720	720	710	720
Vreme zadržavanja 2 [s] **	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Vreme otvaranja [min]	1	1	1	1

* Sledeće temperature pečenja su standardne vrednosti i mogu varirati u zavisnosti od tipa peći.

** U zavisnosti od željenog sjaja, vreme zadržavanja treba da bude 30 - 60 sekundi.

Imajte u vidu podatke o upravljanju vatrom i programiranju peći - KR kod na naslovnoj strani -