



USER INFORMATION

CE 2777



DCK GRUP İÇ DIŞ TİCARET MEDİKAL LTD.ŞTİ

MACUN MAH. BATI BULV.
ATB İŞ MERKEZİ E BLOK 1/108 YENİMAHALLE
ANKARA 06374 TÜRKİYE

+90 312 387 00 17

info@dckgrup.com
www.dckgrup.com.tr

MASTERFUL NİTRİL TEK KULLANIMLIK ELDİVEN KAT III KULLANIM TALİMATI

KULLANIM:

DİKKAT: Ana Malzeme-Nitri Kauçuk. Doğal Kauçuk Lateks içermez.

Eldiven yapımında kullanılan bileşenler bazı kullanıcılarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Serin ve kuru bir yerde saklayın, aşırı ısıdan (40°C, 104°F) kaçının. Açık kutu doğrudan güneşe veya floresan ışığa maruz kalmaktan korunmalıdır.

Yönetmelik (AB) 2016/425 dayalı uygunluk değerlendirmesi ve SATRA Technology Eurpe Limited, (NB 2777) Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, İrlanda'da

Kullanıcı eline uyan boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla

kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiçbir zaman açık eldivenle çalışılmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde ele oturduğundan emin olunmalıdır.

Kullanmadan önce; delikler, iğne delikleri veya yırtılmalar gibi herhangi bir hasar veya kusurakarsı eldivenleri kontrol edin. Eldivenler kullanırken yırtılırsa veya delinirse, eldivenleri derhal bertaraf edin. Şüphelenirseniz eldivenleri kullanmayın ve yeni bir çift alın. Kimyasal

maddelerin, zararsız oldukları düşünüldüğünde bile cilde temas etmemeleri elzemdir.

Kimyasalların manşetten giremeyeceğinden emin olun. Eldiven konsantre pestisitlerin sızması nedeniyle bulaşma olursa, eldiveni elinizden derhal çıkarın. Bulaşma olan eldivenler çıkarılmadan önce temizlenmeli veya yıkanmalı veya kuru olarak silinmelidir. Bulaşma riskli yüzeylere çıplak elle dokunmaktan kaçının. Eldivenler çıplak alevle temas etmemelidir ve ısıdan korunmak için kullanılmaz.

Eldivenler iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunmak amacıyla veya çevreleme muhafazaları içinde kullanılmamalıdır.

Eldiven, potansiyel risk görece düşük olduğunda uygundur. Bu eldivenler konsantre pestisit formülasyonları ile kullanım için ve/veya mekanik risklerin bulunduğu senaryolar için uygundur. Pestisit, giysi kolu ile eldiven arasından nüfuz etme ihtimali olmamalıdır.

Dikkat Beyanı:

Kimyasal direnç, laboratuvar koşullarında yalnızca avuç içinden alınan numunelerle değerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen kimyasalla ilgilidir. Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farklılığı yansıtmaz.

Eldivenlerin kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye edilir çünkü işyerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir.

Kullanıldığında, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerdeki değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasala karşı daha az direnç sağlayabilir. Hareketler, takılma, sürtünme, kimyasal temastan kaynaklanan bozulma vb. gerçek kullanım süresini azaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için bozulma, kimyasallara dayanıklı eldiven seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktör olabilir. Kullanmadan önce eldivenleri herhangi bir kusur veya eksiklik açısından inceleyin. Eldivenler hasar gördüğünde atın.

Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen numune ile ilgilidir.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B	Level	EN ISO 374-4:2019 Degradation%	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B
n-Heptane (J)	1	44.4	 KPT
40% Sodium Hydroxide (K)	6	-26.0	
25% Ammonium hydroxide (O)	1	0.6	
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	18.6	
37% Formaldehyde (T)	5	3.1	
EN ISO 374-5:2016			EN ISO 374-5:2016
Protection against Bacteria and Fungi	Pass		 Virus
Protection against Viruses	Pass		

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeation levels are based on breakthrough times as follows:

Permeation performance level	1	2	3	4	5	6
Measured breakthrough time (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BİLEŞENLER / TEHLİKELİ BİLEŞENLER:

Bazı eldivenler, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilen hassas kişilerde alerji oluşumuna yol açma potansiyeli taşıdığı bilinen maddeler/bileşenler içerebilir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alın. **Uyarı:** Eldivenler doğal lateks içeriyorsa, bu husus ambalaj üzerinde belirtilir. Bu durumda, bu ürün duyarlı insanlarda **ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR**. Daha fazla bilgi için DCK GRUP İÇ DİŞ TİCARET MEDİKAL LTD.ŞTİ. ile irtibata geçiniz

BAKIM TALİMATLARI: DEPOLAMA:

Doğrudan güneş ışığından uzak tutun; serin ve kuru bir yerde muhafaza edin ve orijinal

ambalajında saklayın. Ozon kaynaklarından uzak tutun. Eldivenler yukarıda belirtildiği şekilde uygun biçimde muhafaza edilirse performanslarını kaybetmezler ve özelliklerini önemli ölçüde değiştirmeyeceklerdir. Eldivenler yaşlanma veya muhafaza koşullarından etkilenebilecek olursa, son kullanma tarihi ambalaj malzemeleri üzerinde belirtilir

TEMİZLİK:

Bu eldivenler yalnızca tek kullanımlıktır ve yıkanacak veya yeniden kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Eldivenin tekrar kullanılması kontaminasyon sonrası ve postoperatif

komplikasyonlara neden olabilir. Bu ürün için temizleme ve yeniden sterilizasyon döngüsü

Üretici tarafından doğrulanmamıştır. Kullanılan herhangi bir temizlik veya yeniden sterilizasyon işlemi, ürün bütünlüğünü tehlikeye atabilir

BERTARAF:

Kimyasallarla temas etmiş veya bulaşıcı veya örneğin kalıntı pestisitler gibi diğer zararlı maddelerle kontamine olmuş kullanılmış ürünler, her çalışma vardiyasından sonra atılmalı ve

tekrar kullanılmamalıdır. Ayrıca, kullanım sırasında herhangi bir bozulma belirtisi (eldivenlerin renk değiştirmesi ve zayıflaması gibi) gösterdiklerinde bertaraf edilmelidirler. Yerel Yetkili Makamların Yönetmeliklerine uygun biçimde bertaraf edin. Kontrollü koşullar altında gömün veya yakma fırınında yakın. Ürün bir klinik ortamında kullanılmışsa, kullanımdan sonra klinik atık imha protokolüne göre yakılmalı veya imha edilmelidir

GİYME VE ÇIKARMA TALİMATI:

Eldivenler nasıl giyilir

- Eldiveni kutudan çıkarın.
- Eldiveni kutudan çıkarmak için kullandığınız elinizle manşetinden tutun ve diğer elinizi çalışma yüzeyine dokunmadan eldivenin içine sokun.
- Eldiveni giyen elin üzerindeki eldiveni gerin.
- Eldiveni giyen elinizle kutudan başka bir eldiven alın.
- Eldiveni diğer elinize takın ve düzeltin.

Eldivenler nasıl çıkarılır

- Eldivenli elinizle bir manşetin dış kenarını kavrayın, bileğe dokunmaktan kaçın.
- Eldiveni çekip çıkarın, ters çevirin ve eldivenli elinizle tutun.
- Eldivensiz başparmağınızı kalan eldivenin manşetinin altına kaydırın.
- Eldiveni daha önce çıkarılan eldivenin üzerinden ters çevirerek çıkarın ve her iki eldiveni de poşetleyin.
- Çıkarılan eldivenler, yerel imha yönetmeliklerine göre kullanıldıktan sonra uygun atık imhakabı ile atılmalıdır.



HANDLE WITH CARE




EN ISO 374-1-2016+A1:2018 Chemical Permeation	Level	EN ISO 374-4:2019 Mean Degradation, %
n-Heptane (J)	1	44,4
Sodium Hydroxide 40% (K)	6	-26.0
Formaldehyde 37% (T)	5	3.1
Hydrogen Peroxide 30% (P)	2	18.6
Ammonium Hydroxide 25% (O)	1	0.6

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeation Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough time (minutes)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019

Degradation result indicate the change in puncture resistance of the glove after exposure to challenge chemicals.

EN ISO 374-5:2016	Level
Protection against Bacteria Fungi	Pass
Protection against Viruses	Pass

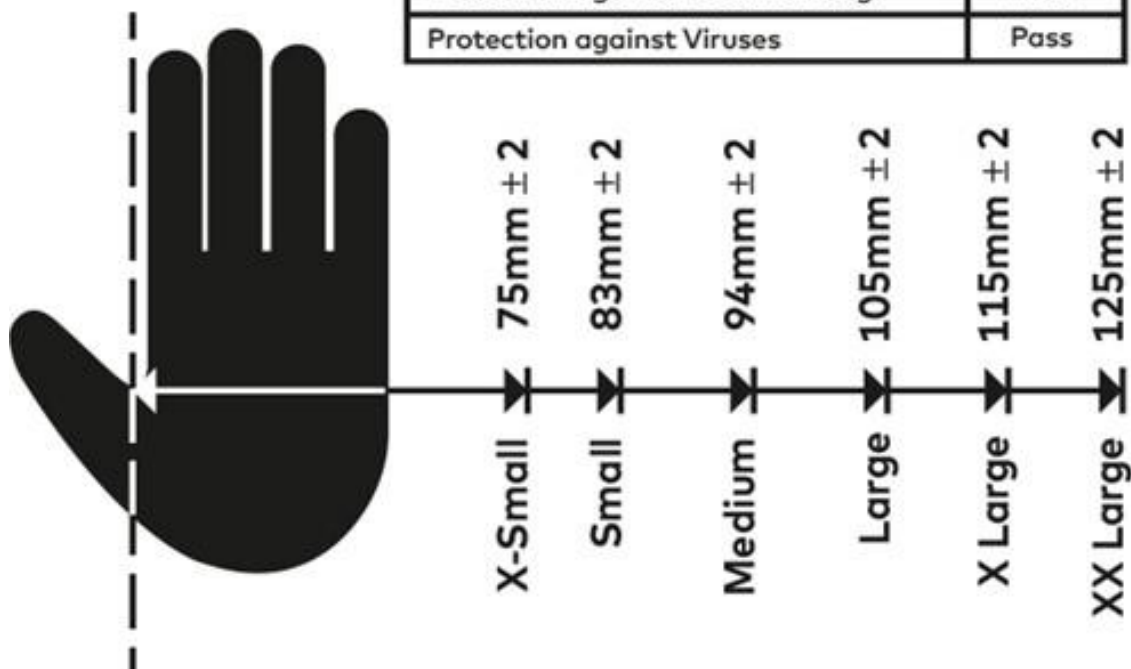

CAUTION: Primary Material-Nitrile Rubber. Does not contain Natural Rubber Latex.Components

used in making gloves may cause allergic reactions in some users.

Good quality nitrile gloves provide an excellent biological barrier.

Store in cool, dry place, avoid excessive heat (40°C, 104°F). Open box should be shielded from exposure to direct sun or fluorescent lighting.

Conformity assessment based on Regulation (EU) 2016/425 and SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland
Instruction for donning and doffing

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

“The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.”

“It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.”

“When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves”

“Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.”

Storage and transport: When not in use, store the product in a well-ventilated area away from extremes of temperature

Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc.)

The glove does not contain any substances that are known to cause allergies.

The Gloves have no mechanical protection offered.

For single use only, do not littering.

Check for damage before use, do not use damaged gloves

How to put the gloves on

- a. Take out glove from the box.
- b. Hold the glove by the cuff with the same hand that you use to pull it out from the box and put the other hand into the glove without touching the working surface.
- c. Stretch the glove on the glove wearing hand.
- d. Take another glove from the box with the glove wearing hand.
- e. Put the glove on the other hand and smooth it out.

How to take the gloves off

- a. Grasp the outside edge of the one cuff with gloved hand, avoid touching the wrist.
- b. Pull the glove off, turning it inside out and hold it with your gloved hand.
- c. Slide the un-gloved thumb under the cuff of the remaining glove.
- d. Peel the glove off inside out over the previously removed glove and bagging both gloves.
- e. Remove gloves should be discarded with appropriate waste disposal container after use according to local disposal regulations.

Caution statement

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. This information does not reflect the actual duration of the protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Discard when the gloves are damaged.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

DCK GRUP İÇ DIŞ TİCARET MEDİKAL LTD.ŞTİ

MACUN MAH. BATI BULV. ATB İŞ
MERKEZİ E BLOK 1/108 YENİMAHALLE ANKARA 06374
TÜRKİYE

+90 312 387 00 17

info@dckgrup.com www.dckgrup.com.tr