



HOMIETEC SMART HEALTH

豪美特健康科技-智能健康

A Cool model of Smart Blood Pressure Monitor Promotion

好消息，豪美特健康 近期计划做一个惠客活动，敬请关注。

智能臂式血压仪，随时随地关注血压健康，型号 HTH-005，本次惠客总数约 950 台，惠完即止；有美国 FDA、欧盟 MDR、中国 NMPA 等医疗器械认证；医疗级别的精度（血压 ± 3 mmHg，心率 $\pm 5\%$ ）和稳定性；英文或中文两种语音播报，有 3 档音量可调节，也可设置为静音模式；测量结果三色（红、蓝、绿）LED 显示及语音播报；有背景音乐；设备带有 120 组记忆和 3 组平均值功能；精巧设计，旅行便携，容易佩戴和使用，带蓝牙 App（Android & iOS），可免费云端数据存取，可分享健康数据或状态给医生、家人、朋友等；精美礼盒，也可当作储藏盒使用。欢迎来信了解更多，电子邮箱是 hometec@outlook.com。

豪美特健康科技营销团队敬献

Good news, HOMIETEC HEALTH plans to do a guest-benefit activity in the near future, so stay tuned.

Smart arm type blood pressure meter, to pay attention to blood pressure health anytime and anywhere, model HTH-005, the total number of benefit customers is about 950 units, while

stocks last; it has medical device certifications such as US FDA, EU MDR, China NMPA, etc.; medical grade accuracy (Blood pressure +/-3mmHg, heart rate +/-5%) and stability; English or Chinese voice broadcast, 3 levels of volume can be adjusted, can also be set to silent mode; measurement results in three colors (red, blue, green) LED display and voice broadcast; background music; device with 120 sets of memory and 3 sets of average functions; exquisite design, travel portable, easy to wear and use, with Bluetooth App (Android & iOS), free cloud data access, You can share health data or status with doctors, family members, friends, etc.; exquisite gift boxes can also be used as storage boxes.

Welcome to write to know more, the e-mail address is homietec@outlook.com.

Courtesy of HOMIETEC HEALTH TECHNOLOGY MARKETING TEAM

豪美特智能血压计与欧姆龙智能血压计的类比


(欧姆龙智能血压计的信息来源于京东商城jd.com)

	 	 
售价	1098 元	438 元
特价	840 元 (7.65 折) , 仅 2021 年 10 月 31 日 20 点至 11 月 3 日 24 点特价, 前 60 名赠送 48 元额温枪	288 元 (6.57 折, 仅限库存数量 950 台, 售完即止)
二次特价	无	218 元 (4.97 折, 仅限库存数量 950 台, 售完即止)

三次特价	无	实名+手机号 一次购买 4 台 198 元 (4.52 折, 仅限库存数量 950 台, 售完即止) 实名+手机号 一次购买 8 台 (最高限购) 178 元 (4.06 折, 仅限库存数量 950 台, 售完即止)
特别关照 1	无	特别享受一个月的体验期, 按出库日+7 天算起到 + 30 日+7 天 (返库日) 计算, 条件是: 返库时 产品和包装无损
特别关照 2	无	自出库日 2 年内: 1 同款或类似款升级, 可免费换新, 用户付往返运费 2 其他款返购或换新, 享受 7 折, 用户付往返运费
功能	高压、低压、心率	高压、低压、心率
精度	医疗级别, $\pm 3\text{mmHg}$ (0.4kPa) / $\pm 5\%$	医疗级别, $\pm 3\text{mmHg}$ (0.4kPa) / $\pm 5\%$
认证	美国医疗器械促进会 (检测协会) AAMI 国际准确性标准, 英国高血压协会 BHS, 欧洲高血压协会 ESH, 中国医疗器械 NMPA (来源: 京东商城)	美国医疗器械 FDA(K172171, 型号 B06T), 欧盟医疗器械 MDR(G2180190084005, 型号 B06T), 中国医疗器械 NMPA (粤械注准 20142200322, 型号 B61T)
警示	无, 机身高压警示	有, 机身高压警示, 1 红色按键警示 2 语音播报警示
语音	无	有, 中文和英文两种语音播报, 3 档音量可调, 可设置静音模式
电池	4 节 7 号干电池	3.7V/600mAh 充电电池, 充满 3-4 个小时, 充满可用 150 次测量 (待机约 7-21 天)
一键测量	有	有
智能加压	有	有
显示	有, 机身有数字显示	无, 机身无数字显示
机身储值	不详	有, 120 组储值, 3 组均值

背景音乐	不详	有
自动关机	不详	60 秒
袖带自检显示	有	无, 但有错误提示 (机身语音播报错误代码提示, App 显示错误代码提示)
不规则脉波显示	有	无
APP	有, 正式版, 安卓 或 苹果	有, 测试版, 安卓 或 苹果
便携包	有	无, 但加硬的彩盒可做收藏盒 (也可旅行携带)
产地	进口	国产, 出口作内销
保质期	2 年	2 年
机身尺寸	长 120*宽 85*高 20mm	长 121*宽 67*高 28mm
重量	240g (不含电池)	237.3g (含充电电池)
臂围	220-420mm	230-360mm

以下实测参数对比, 仅供参考

任意用户实测 3 组均值对比	高压 117, 低压 69, 心率 78 (欧姆龙蓝牙台式血压计 HEM-8732T) 	高压 120 (公差+3mmHg / +2.56%), 低压 64 (公差-5mmHg / -7.81%), 心率 82 (公差+4 / +5.12%)
任意用户实测 6 组均值对比	高压 102.67, 低压 73, 心率: 无 (水银血压计)	高压 103.17 (公差 +0.5mmHg/+0.49%), 低压 66.33 (公差 -6.67mmHg/-10.06%), 心率: 83.67 (无) (豪美特任意血压计设备 1#)
任意用户实测	高压 102.67, 低压 73, 心率: 无 (水银血压计)	高压 102.33 (公差-0.34mmHg/-0.33%), 低压 64.17 (公差-8.83mmHg/-13.76%), 心率: 81.83 (无)

6 组均 值对比		(豪美特任意血压计设备 2#)
任意用 户实测 6 组均 值对比	高压 103.17, 低压 66.33, 心率: 83.67 (豪美特任意血压计设备 1#)	高压 102.33 (公差-0.84mmHg/- 0.82%), 低压 64.17 (公差-2.16mmHg/- 3.37%), 心率: 81.83 (公差-1.84/- 2.24%) (豪美特任意血压计设备 2#)

附 1:

2018 年 11 月 同一用户 任意豪美特血压计设备 与 欧姆龙蓝牙血压计 HEM-8732T 设备 实测值 对比
参考附表 (测量精度还受用户状态、方法、时间等影响, 属于非标准答案, 仅供参考):

2018.11.15测试	测试人	时间	高压	低压	心率
	HOMIETEC 血压计 游文清	16:44	120	64	82
		17:15	116	63	82
		17:39	123	64	83
		极差	7	1	1
		平均值	120	64	82
	欧姆龙 游文清	17:20	114	65	78
		17:27	118	69	80
		17:33	120	72	75
		极差	6	7	5
		平均值	117	69	78

公差: 高压+3mmHg (+2.56%), 低压-5mmHg (-7.81%), 心率+4 (+5.12%)

附 2:

2018 年 11 月 豪美特任意血压计设备 与 水银血压计 对比:

豪美特	水银	豪美特
108 73 94	104 72	109 70 88
105 73 92	104 72	105 72 89
104 71 87	104 72	106 71 88
104 61 75	102 74	99 60 76
100 59 77	100 74	97 56 75
98 61 77	102 74	98 56 75

设备 1#, 6 组均值: 高压 103.17, 低压 66.33, 心率: 83.67

水银仪: 6 组均值: 高压 102.67, 低压 73, 心率: 无

公差 1#: 高压+0.5mmHg (+0.49%), 低压-6.67mmHg (-10.06%), 心率: 无


设备 2#, 6 组均值: 高压 102.33, 低压 64.17, 心率: 81.83


水银仪: 6 组均值: 高压 102.67, 低压 73, 心率: 无

公差 2#: 高压-0.34mmHg (-0.33%), 低压-8.83mmHg (-13.76%), 心率: 无


附 3:



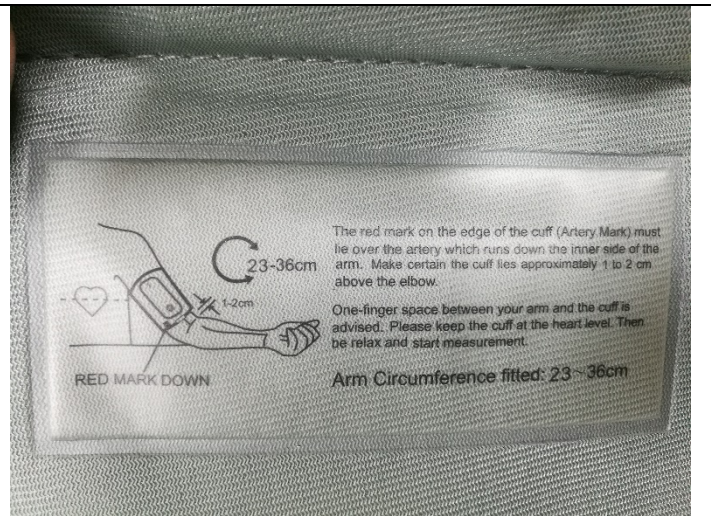

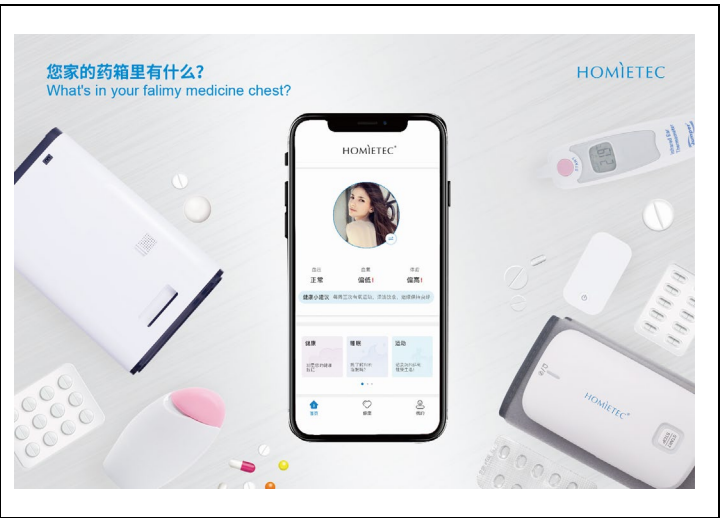

Homietec Enterprise (Xiamen) Co., Ltd. is a comprehensive enterprise integrating Research and Development, Manufacturing, Sales, Retail, Online Shopping, Online expert health clinic and so on. The company was established in 2009 with a registered capital of 20 million yuan (3.5M US Dollars). It has been more than 12 years of development history.

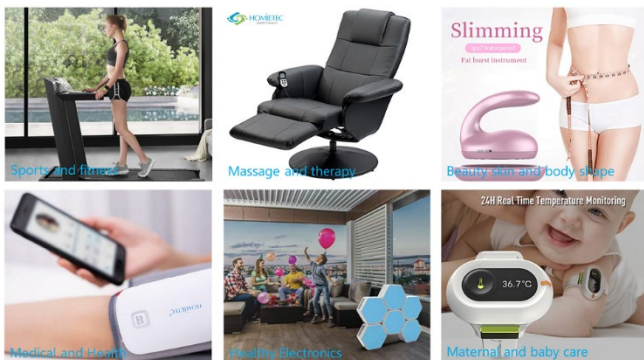

Main products:

- . Medical and health,
- . Massage and therapy,
- . Sports and fitness,
- . Beauty skin and body shape,
- . Maternal and baby care,

. Healthy appliances,



Core products:

- . Smart blood pressure meter,
- . Smart blood glucose meter,
- . Smart blood lipid meter,
- . Smart uric acid meter,
- . Smart body fat management,

Business mode: There are two modes of "Homietec" brand and OEM / ODM customization. The channels include online shopping and off-line stores. The current markets cover more than 30 countries or regions such as China, Europe, and the United States; more partners are welcome to come to discuss cooperation.

Business philosophy: "Smart Health, Assist Healthier" as the development philosophy, "Innovation, Brand, Quality" as the corporate purpose.

We are looking for global brand distributors as well as global OEM/ODM partners.

Welcome to contact us or visit our website www.homietec.com for more details.

Yours Bob

Homietec Technology is a Smart Health Solution

Homietec Enterprise Co., Limited. (www.homietec.hk)

Homietec Enterprise (Xiamen) Co., Ltd. (www.homietec.com)

Homietec Health Technology (Xiamen) Co., Ltd. (www.homietectechnology.cn)

Mobile and Message: +86 13616059395.

Telephone Number: +86 5925601178.

Email and Skype: homietectechnology@outlook.com

Research and Manufacturing Center: Digital Economic Industrial Park, Xiamen, China (Postal Code 361011)

This email contains secret information. Please abide by the obligation of confidentiality and do not disclose it to third parties. If you are not the correct recipient, please delete this message immediately, thank you for your cooperation. Any complaint or suggestion, please kindly mail to homietectechnology@outlook.com

Homietec Technology Smart Health Solution Administration Center

Research and Manufacturing Center Address: Digital Economic Industrial Park, Xiamen, China (Postal Code 361011)