

# 如何采集您的鼻咽拭子样本以进行Covid-19测试

请遵循样品收集工具包中随附的说明。除非工具包中另有说明，否则请仅使用工具包中提供的材料来收集和存储样品。请仅使用医疗機構或檢測中心人員為您提供的获得批准的样品收集工具包。

## 初始步骤


1. 打开样品收集工具包。



2. 用至少60%的酒精搓手液涂满整个手部并揉搓双手，直至双手干燥为止。




3. 从容器中取出拭子，注意不要觸碰到拭子的頂端，這是在用來收集樣本的。

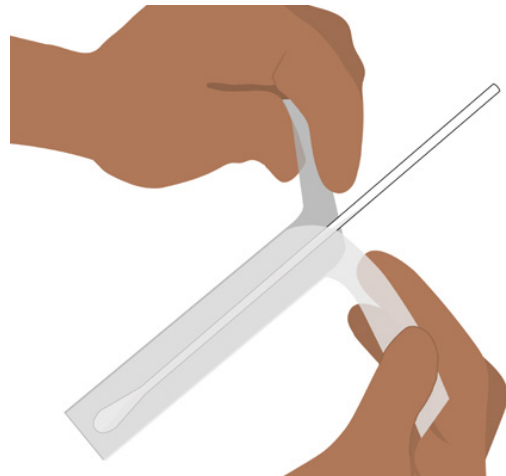


## 样品收集


4. 将整个拭子的顶端插入鼻孔，但不要将棉签插入鼻子超过3/4英寸（1.5厘米）以上。

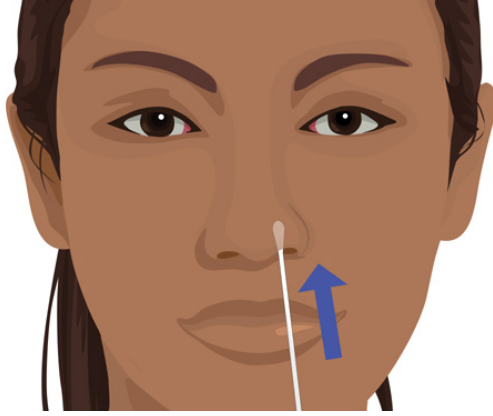


5. 顺着鼻孔内侧打圈缓慢旋转拭子至少4次，停留总共15秒钟。确保收集所有可以被拭子收集的鼻腔引流物。

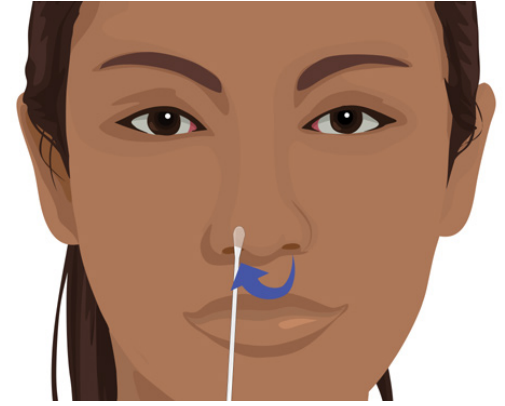

6. 轻轻取出拭子。

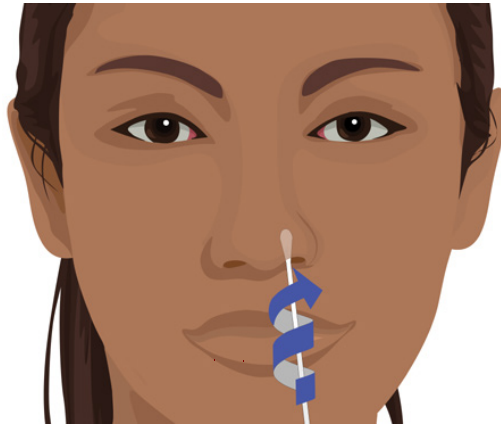


7. 使用相同的棉签，在另一个鼻孔中重复步骤4-6。

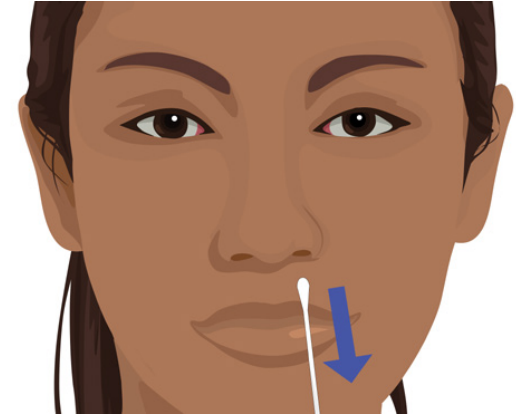

## 准备返还样本

8. 将拭子放在无菌采样管中，并以折断线为分界，折断拭子末端。旋紧管盖。

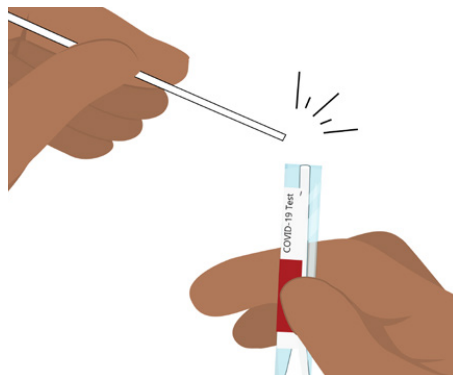


9. 用酒精搓手液再次进行消毒。



## 返还样品并进行清理

10. 将装有拭子的试管放入提供的标有生物危害标识的袋子中，并密封该袋。

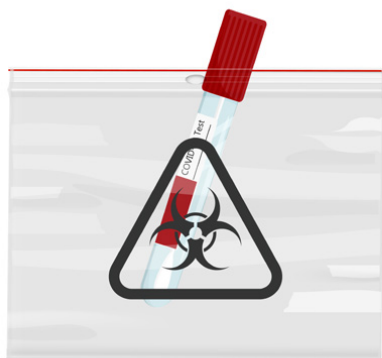

11. 将装有拭子的袋子交给检测人员。



12. 丢弃剩余样品收集工具包的物品。



13. 再次用酒精搓手液洗手。

