


ETIII NH Implant Sistemi


HIOSEN
IMPLANT




Agresif Burgu Yivler

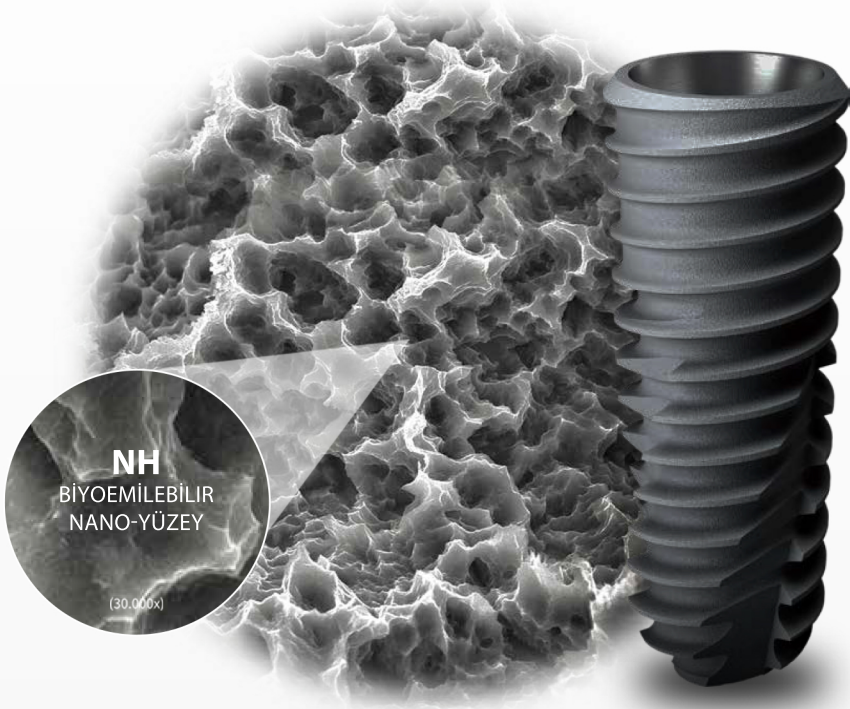

Süper hidrofilik özelliğe sahip, biyo-emilebilir nano yüzey teknolojisi, osseointegrasyonu hızlandırarak kemik iyileşme sürecini destekler.

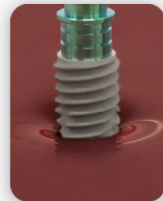

VS

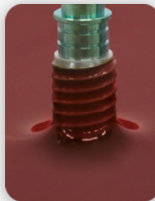

Geleneksel Yüzey

NH

11° Morse Konik Internal hex bağlantıya sahip kemik seviyesi. Üstün ilk stabilite sağlayan burgu tipi yiv yapısına sahip yarı konik gövde. Yumuşak Kemikte, implant yolunun düzeltilmesini kolaylaştıran ve self-tapping yapısı ile başlangıç stabilitesini artıran dar yivler.


Biyo-Emilebilir Apatit Nano Teknolojisi, Yüzeyin Implanttan Ayrılmasını Önler

Nano yüzey kemiğin yeniden iyileşmesini sağlayarak tedavi sürecinde yüzeyin implanttan ayrılmasını önler.

Yüzey kanı absorbe ettikten sonra, implant doğrudan kemikle osseointegrasyon sağlar ve uzun vadeli stabiliteyi güvence altına alır.

Nano-Teknoloji, Tüm Kemik Tiplerinde implantasyonu mümkün kılar

10 nm veya daha ince biyo-emilebilir apatit yüzey, aşırı tork nedeniyle etkilenmez ve yüzey implanttan ayrılmaz. Implant tüm kemik tiplerine yerleştirilebilir.

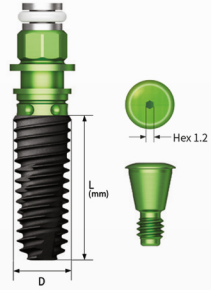

Body Type	Hex Platform	Apical Diameters	Lengths (mm)
 1.5° Morse Tapered	 Mini 2.1mm  Regular 2.5mm	 Mini 2.5mm  Regular 2.8mm, 3.1mm, 3.7mm	 Mini 8.5 10 11.5 13  Regular 6 7 8.5 10 11.5 13

Platform	Mini	Regular			
Hex	Hex 2.1	Hex 2.5			
F	F3.5	F4.0	F4.5	F5.0	
   L					
6mm (Short)	-	-	-	ET3R5006	
7mm	-	ET3R4007	ET3R4507	ET3R5007	
8.5mm	ET3M3508	ET3R4008	ET3R4508	ET3R5008	
10mm	ET3M3510	ET3R4010	ET3R4510	ET3R5010	
11.5mm	ET3M3511	ET3R4011	ET3R4511	ET3R5011	
13 mm	ET3M3513	ET3R4013	ET3R4513	ET3R5013	

