



PICOSECOND LASER PRO

Picoseries

Precisión que eleva el estándar

El modo de operación del **Pico Laser Pro** se basa en la emisión de pulsos de energía ultracortos, que son absorbidos por el tejido diana y generan una onda acústica de alta frecuencia, pulverizando el pigmento en partículas mucho más pequeñas y facilitando su eliminación por el sistema inmunológico.

Aplicaciones

Eliminación de tatuajes complejos

Manchas de la piel y lesiones pigmentadas

Rejuvenecimiento cutáneo

Cicatrices de acné



PICOSECOND LASER PRO

Picoseries



Para clínicas que quieren diferenciarse en tratamientos pigmentarios.

Menos sesiones

El efecto fotoacústico fragmenta el pigmento en partículas más pequeñas, ayudando a resolver tatuajes y manchas con mayor eficiencia.

Interfaz Intuitiva

Modo inteligente y modo profesional, con parámetros preestablecidos para aplicaciones específicas

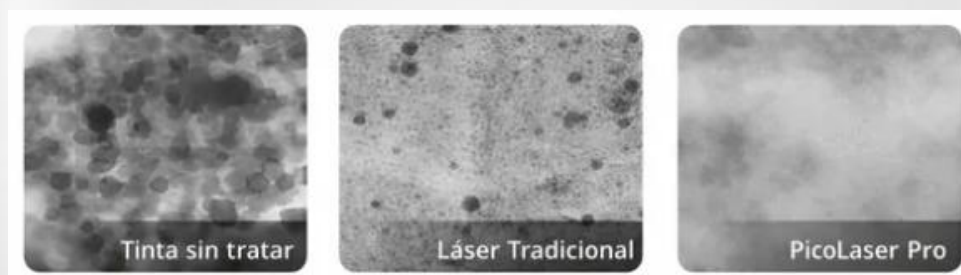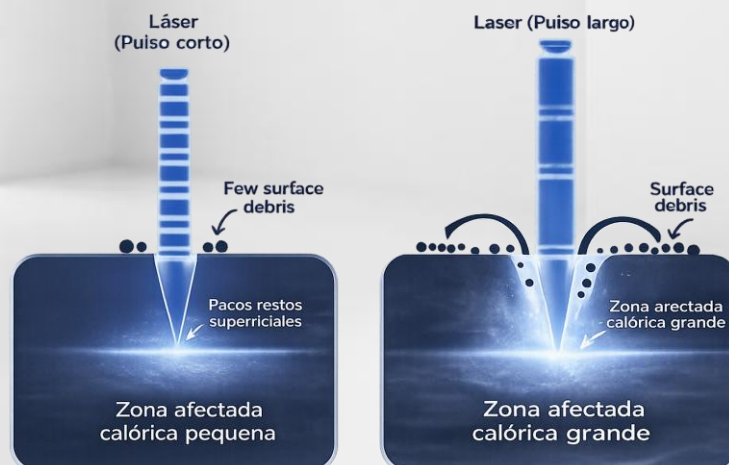

PICOSECOND LASER PRO

Picoseries

Resultados Clínicos



Antes

Después de 1^{er}
tratamientoDespués de 4^o
tratamientoDespués de 5^o
tratamiento

- Paciente: Hombre / Edad: 27 / Fototipo III
- Tipo de pigmentación: Tatuaje
- Edad del tatuaje: 5 años
- Color del tatuaje: Azul y verde



Antes

Después de 1^{er}
tratamientoDespués de 4^o
tratamientoDespués de 6^o
tratamiento

- Paciente: Mujer / Edad: 41 / Fototipo III
- Tipo de pigmentación: Melasma
- Edad de la pigmentación: 5 años
- Color de la pigmentación: marrón
- Veces de tratamiento: 6 veces



PICOSECOND LASER PRO

Picoseries

Tecnología

Picoláser de alta gama con pulsos de 750 ps

Indicaciones

Manchas de edad

Lentigos Solares

Tatuajes multicolores

Rejuvenecimiento

Cicatrices acné

Poros dilatados

Ficha Técnica

Tecnología	Nd:YAG picosegundo
Duración del pulso	750 picosegundos
Energía máxima	500mJ (1064nm) / 250mJ (532nm)
Frecuencia	1-10Hz
Longitudes de onda	1064 / 532 nm
Tamaño del Spot	2-10mm
Pantalla	Táctil Android 16"
Modos de operación	Smart y Professional
Certificación	FDA
Sesiones promedio	4-6 tatuajes/ 6-8 multicolores / 2-4 manchas
Downtime	Enrojecimiento Leve 2-5días
Entrega	15 días desde confirmación de pago

