



**EL FUTURO DE LA
REPRODUCCIÓN
ANIMAL ESTÁ EN
EN NUESTRO ADN**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

DESCONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES

INTO40012



Informaciones:

- Mayor capacidad de descongelación de la categoría hasta 10 pajillas de semen 0,25 o hasta 5 pajillas de semen 0,5.
- Iluminación interna con LED para facilitar la visualización de las pajillas.
- Tapa con sellado para transporte con seguridad.
- Separador interno de pajillas con asa.
- Panel digital de fácil visualización.
- Tecnología digital de punta.
- Confianza en el trabajo.
- Precisión en un ambiente de temperatura controlada.
- Alimentación por batería 12 V automotriz.
- Consumo máximo de la red eléctrica 0,5 A.
- Consumo CC del aparato de semen 3,2 A.
- Ajuste de temperatura: de 25,0°C a 50,0°C.
- Ajuste del cronómetro: de 10 a 240 segundos.
- Resolución 0,5°C.
- Potencia máxima 35 W.
- Acabado en alto brillo.
- Fácil de limpiar.
- Material resistente.
- Aviso sonoro.
- 110 y 220 voltios.


En los colores:



FUNDA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL



*producto desechable

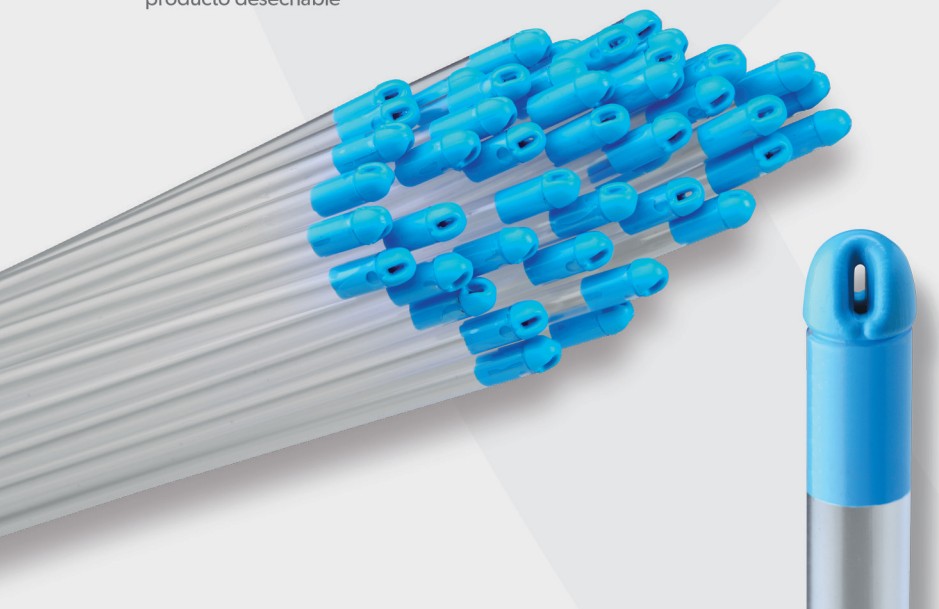

FUNDA DE INSEMINACIÓN INT040001

Informaciones:

- Extremidad de la punta más redondeada y anatómica para disminuir la fricción en el pasaje del cuello del útero y evitar o disminuir los traumas en las mucosas.
- Unión de la funda con la punta en ángulo, sin canto aparente disminuyendo la fricción en la mucosa del aparato reproductor de la hembra, disminuyendo los riesgos de sangrado e infecciones.
- Encaje perfecto para pajillas de 0,25 y/o 0,5, disminuyendo la acumulación y desperdicio de semen.
- Bordes de los agujeros de las salidas de semen redondeadas sin cantos y abiertas para dispersar mejor el semen y promover un flujo mejor para el espermatozoide.

FUNDA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES



FUNDA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIÓN INT040003

Informaciones:

- Punta con formato anatómico redondeado para facilitar el pasaje del cuello del útero.
- Acabado de los bordes del agujero de salida de los embriones redondeado, sin cantos evitando lesiones de la mucosa, mejorando la salida del embrión.
- Parte posterior de la punta con ángulo de salida redondeado para disminuir la fricción con las mucosas, disminuyendo el riesgo de lesiones y posibles infecciones.

*producto desechable





*producto desechable

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE VAQUILLAS

INT040002

Informaciones:

- Diámetro externo más pequeño de la vaina de inseminación del mercado, disminuyendo la molestia del animal a la hora de la inseminación.
- Extremidad de la punta más redondeada y anatómica para disminuir la fricción en el pasaje del cuello uterino y evitar o disminuir las traumas en las mucosas.
- Unión de la vaina con la punta en ángulo, sin canto aparente disminuyendo la fricción en la mucosa del aparato reproductor de la hembra, disminuyendo los riesgos de sangrado e infecciones.
- Encaje perfecto de la pajillas 0,25 junto a la salida del semen disminuyendo la acumulación y desperdicio de semen.
- Bordes de los agujeros de las salidas de semen redondeadas sin cantos y abiertas para dispersar mejor el semen y promover un flujo mejor para el espermatozoide.
- También se puede usar en vacas.



PLATINA TERMICA

INT040020

Informaciones:

- Zona de trabajo con pintura epoxi de alta resistencia
- Precisión para un entorno con temperatura controlada
- Almacenamiento de memoria
- Rango de temperatura de 25°C a 45°C
- Pantalla LED
- Alimentación por batería de 5 A
- Potencia máxima 24 W
- Fácil limpieza
- Material resistente
- Incluye bolso de almacenamiento



CALENTADOR DE APLICADOR

INT040027

Informaciones:

- Capacidad para hasta 6 aplicadores simultáneos
- Precisión para un entorno con temperatura controlada
- Rango de temperatura de 33°C a 37°C
- Almacenamiento de memoria
- Pantalla OLED a color
- Power Bank de alta calidad con duración de hasta 20 horas en modo continuo
- Potencia de 9 W
- Incluye dos guantes de contención



CORTADOR DE PAJILLAS

INT040014

Informaciones:

- Lámina de corte sustituible.
- Lámina de corte en diagonal para hacer un corte más fácil, limpio y preciso.
- Menor desperdicio de semen.
- Cuerpo anatómico para mejorar el manejo.
- Muelles de acero inoxidable.

En los colores:



APLICADOR DE SEMEM PARA VAQUILLAS




APLICADOR DE SEMEN PARA VAQUILLAS CON CIERRE AUTOMÁTICO DE ALUMINIO E INOXIDABLE

INT040008

Informaciones:

- Para pajillas 0,25.
- Cierre automático de funda de inseminación.
- Muelles internas de acero inoxidable.
- Cuerpo del aplicador de aluminio anodizado.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de inseminación de vaquillas.

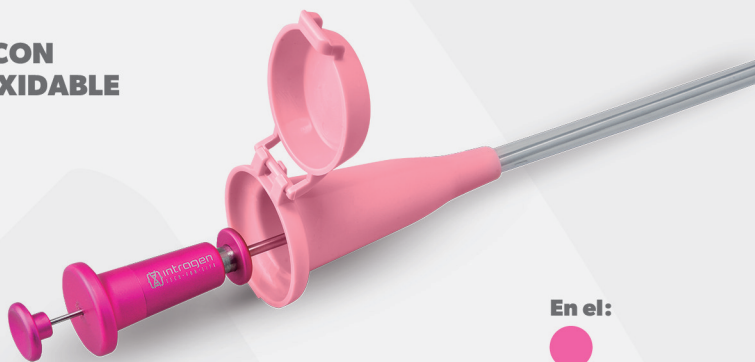

En el:




APLICADOR DE SEMEN PARA VAQUILLAS CON CIERRE AUTOMÁTICO DE PLÁSTICO E INOXIDABLE

INT040007

Informaciones:

- Para pajillas 0,25.
- Cierre automático de funda de inseminación.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Cuerpo del aplicador de plástico.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de inseminación de vaquillas.

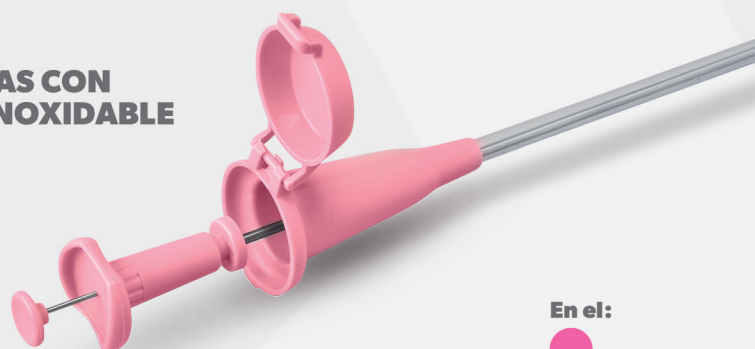

En el:



APLICADOR DE EMBRIÓN



APLICADOR DE EMBRIÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO DE ALUMÍNIO E INOXIDABLE

INT040011

Informaciones:

- Cierre automático de funda de transferencia.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Cuerpo del aplicador de aluminio anodizado.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de transferencia con y sin ranura.



En los colores:




APLICADOR DE EMBRIÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO DE PLÁSTICO E INOXIDABLE

INT040010

Informaciones:

- Cierre automático de funda de transferencia.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Cuerpo del aplicador de plástico.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de transferencia con y sin ranura.

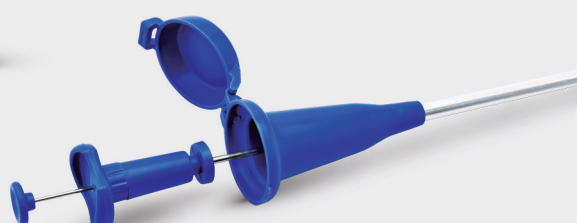

En los colores:



APLICADOR DE SEMEM UNIVERSAL



APLICADOR DE SÊMEN UNIVERSAL CON CIERRE AUTOMÁTICO DE ALUMÍNIO E INOXIDABLE - INT040005

Informaciones:

- Para pajillas 0,25 y 0,50.
- Cierre automático de funda de inseminación.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Centralizador de funda.
- Cuerpo del aplicador de aluminio anodizado.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de inseminación con y sin ranura.



En los colores:



APLICADOR DE SÊMEN UNIVERSAL CON CIERRE AUTOMÁTICO DE PLÁSTICO E INOXIDABLE - INT040004

Informaciones:

- Para pajillas 0,25 y 0,50.
- Cierre automático de funda de inseminación.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Centralizador de funda.
- Cuerpo del aplicador de plástico.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de inseminación con y sin ranura.



En los colores:



APLICADOR DE SEMEM PARA PAJILLAS 0,25




APLICADOR DE SÊMEN PARA PAJILLAS 0,25 CON CIERRE AUTOMÁTICO DE ALUMÍNIO E INOXIDABLE - INT040019

Informaciones:

- Para pajillas 0,25.
- Cierre automático de funda de inseminación.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Centralizador de funda.
- Cuerpo del aplicador de aluminio anodizado.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de inseminación con y sin ranura.

En el:

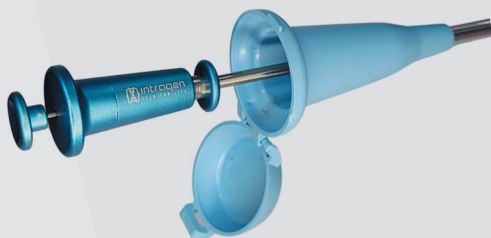


APLICADOR DE SÊMEN PARA PAJILLAS 0,25 CON CIERRE AUTOMÁTICO DE PLÁSTICO E INOXIDABLE - INT040018

Informaciones:

- Para pajillas 0,25.
- Cierre automático de funda de inseminación.
- Muelles internos de acero inoxidable.
- Centralizador de funda.
- Cuerpo del aplicador de plástico.
- Astas de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Para funda de inseminación con y sin ranura.

En el:

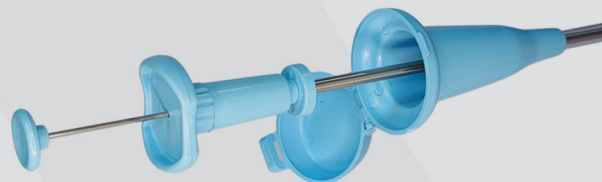

GUANTES DE PALPACIÓN

INT040015

Informaciones:

- Guantes resistentes y flexibles para ofrecer protección total sin perjudicar la sensibilidad táctil del inseminador.
- Producidas en polietileno reciclables y cuando incineradas, no producen gases tóxicos o sustancias corrosivas.





📍 Rua Diógenes Roma, 532 - Jaboticabal - SP

☎ Fone: + 55 16 3200 0202

🌐 www.intragen.com.br

📘 /IntragenTechForLife | 📷 /intragen_