

DECORIA®

İSVEÇ ÜRETİMİ
SAF DERMAL DOLGU

Premium Kalite. Akıllı Estetik.

İskandinav HA'nın Merkezi

- 30+ yıllık yüksek kaliteli HA deneyimi
- Oftalmoloji, ortopedi ve estetik için kaliteli HA geliştirmede öncü
- Ar-Ge ve üretim yeri Strömstad, İsveç
- Kolaylaştırılmış süreçlerle güçlü sürdürülebilirlik odağı

**BOHUS, Decoria® and SHAPE Technology™
(Smart Hyaluronic Acid PurE) are all
trademarks of Bohus Biotech AB.**

BOHUS
SCANDINAVIAN HA

Trädgårdsgatan 4
452 31 Strömstad, Sweden

DECORIA® SAF VE GÜVENLİ DERMAL DOLGU

Decoria®, saflık ve güvenliği ön planda tutarak tasarlanmış yeni nesil dermal dolguları temsil eder.



HA molekülünün sadece %1'lik modifikasyonuyla Decoria®, BDDE* kullanımını en aza indirir - diğer dolguların çoğundaki %3-8'lik modifikasyondan çok daha düşüktür.**

* 1,4-butanediol diglycidyl ether.


** Wu G.T. et al., Hyaluronic Acid Basics and Rheology, Facial Plast Surg Clin North Am. 2022 Aug;30(3):301-308.

MINİMUM ÇAPRAZ BAĞ, MINİMUM YAN ETKİ RİSKİ

Yüksek oranda çapraz bağlı jeller, immünolojik reaksiyon riskini artırabilir ve ayrıca hiyalüronidaz ile çözünmesi daha zor olabilir.*

Decoria®, satılan her 100.000 şırıngada yalnızca 5-7 yan etki (ciddi olmayan) kaydedilerek kanıtlanmış güvenliğiyle öne çıkıyor; bu da hastalarınızın refahına olan bağlılığımızı gösteriyor.


* Wu G.T. et al., Hyaluronic Acid Basics and Rheology, Facial Plast Surg Clin North Am. 2022 Aug;30(3):301-308.

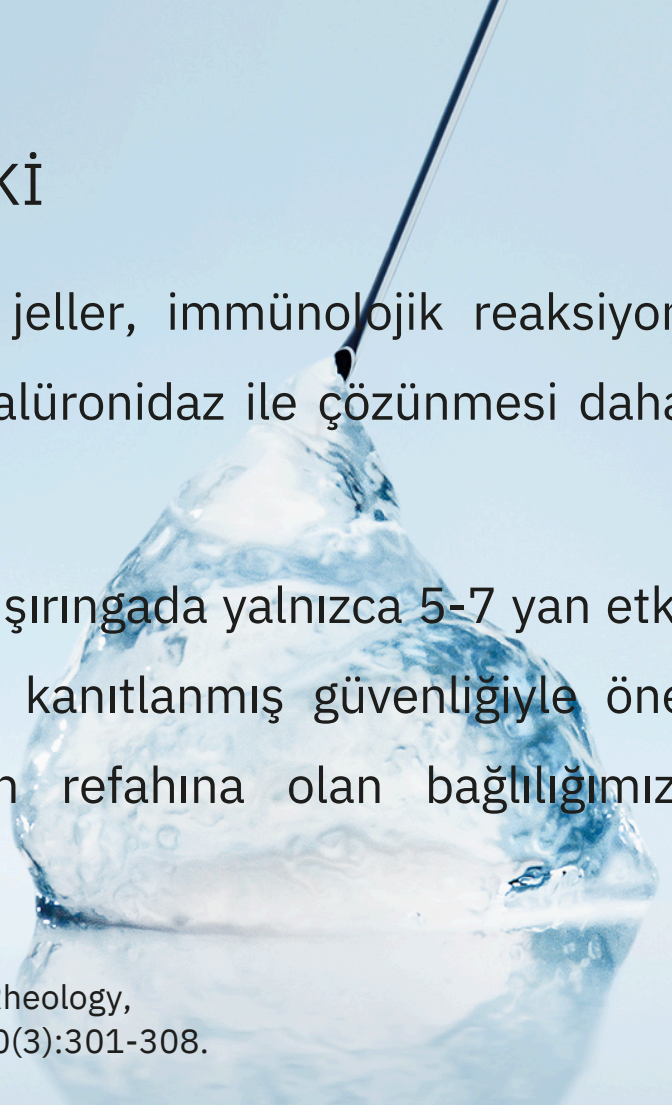

DECORIA farklı, benzersiz bir teknolojiye sahip


Decoria'ya %1'den daha az BDDE (apraz baėlayıcı) ekli, bu nasıl mmkn olabilir?

- Decoria'nın benzersiz teknolojisi, jelin doėal dolaşıklığını kullanır. Spagettiden (apraz baėlanmamış HA'daki gibi) daha ok tagliatelle'e (HA řeritlerinden oluşan karışık bir top) benzer.
- Decoria, jelin doėal dolaşıklığını kullandığı iin, %1'den daha az BDDE (uzun mrl bir dermal dolgu oluřturmak iin gerekli olan aėraz baėlayıcı)'ye ihtiya duyar.
- Decoria'nın benzersiz teknolojisi BOHUS tarafından +35 yıllık HA uzmanlığına dayanarak geliřtirilmiřtir.

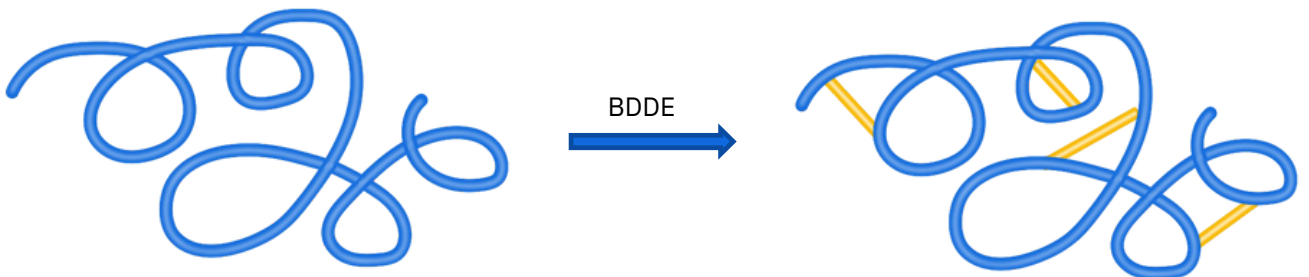


Bir dolgu maddesinin karakteristik özellikleri, jelin parçacık boyutu ve sertliği (sıklık) (G') ile belirlenir.

Sıklık (G') ve parçacık boyutu, kaldırma kapasitesini ve jelin yumuşak dokuya daha iyi entegre olmasını sağlayan temel faktörlerdir.

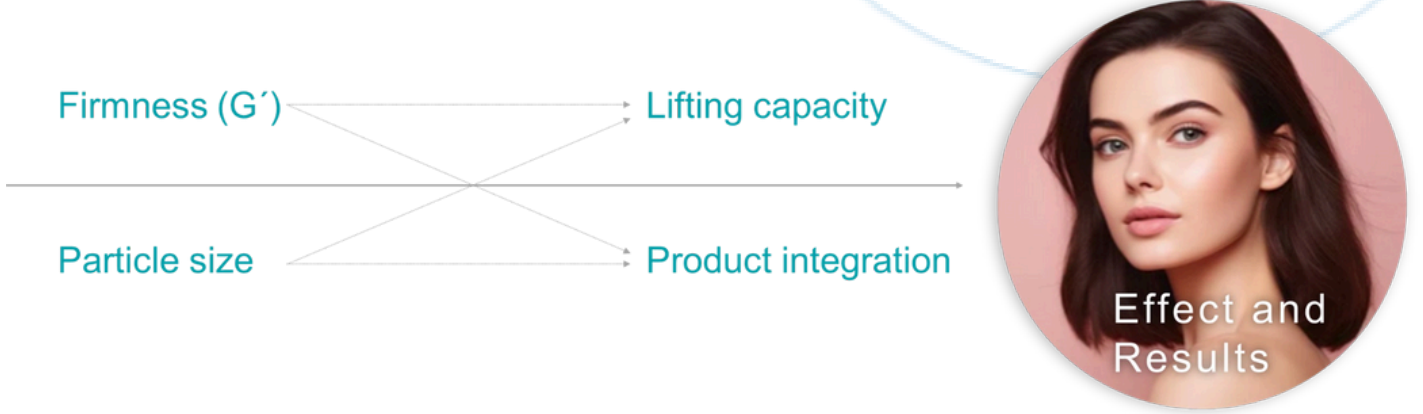

Yumuşak bir jel, dokuya daha fazla entegre olur ve yüzeysel enjeksiyonlar veya hareketli alanlar (dudak, ince çizgiler gibi) için daha uygundur. Sıkı(sert) bir jel, derin enjeksiyon ve daha az hareketli alanlar (çene çizgisi, çene veya elmacık kemiklerini geliştirmek) için daha iyidir.

Decoria, eksiksiz bir portföy için tasarlandı.

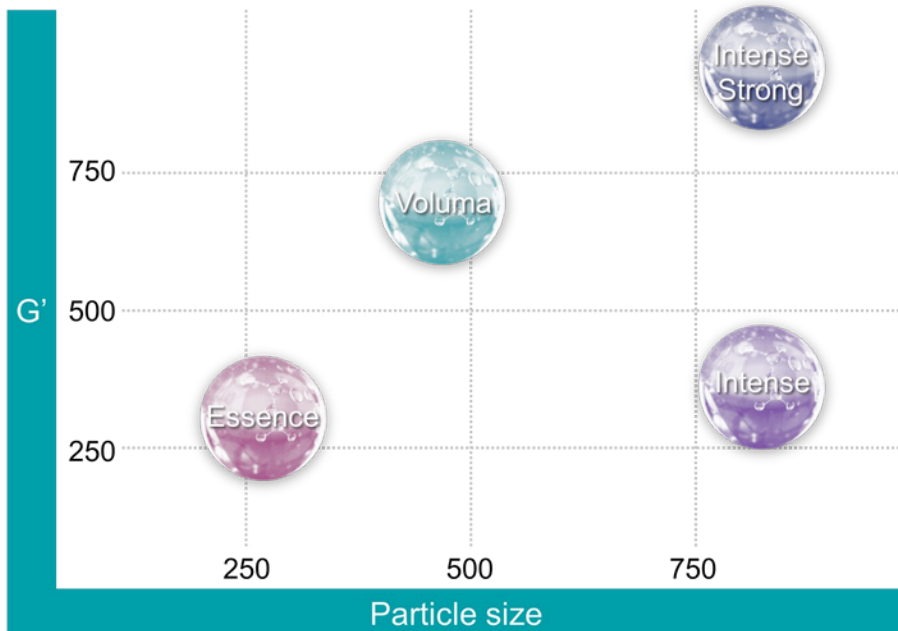

Biocompatible
non-animal HA

BDDE
< 1%

Close to our
body's
natural HA

SHAPE Teknolojisi™ (Küresel HA PrEcision)

- Genç, doğal yüz hatlarının geri kazanılmasına yardımcı olur.
- Pürüzsüz ve enjekte edilmesi kolay, **Hekimlerin**, yaşlanmayla birlikte kaybolan genç, yumuşak hacim ve şekli yeniden yaratmalarına yardımcı olur.

SAF DERMAL DOLGU SERİSİ

DECORIA®
ESSENCE



DECORIA®
INTENSE



DECORIA®
VOLUMA



DECORIA®
INTENSE
STRONG



HA Konsantrasyonu	20 mg/mL	20 mg/mL	20 mg/mL	20 mg/mL
Bileşim	Çaprazbağlı HA	Çaprazbağlı HA	Çaprazbağlı HA	Çaprazbağlı HA
Üretim Teknolojisi	SHAPE*	SHAPE	SHAPE	SHAPE
Çapraz bağ (BDDE)** Modifikasyonu	1%	1%	1%	1%
Jel Özellikleri	Hareketli alanlar için yumuşak hacimli jel	Optimum hacimlendirme için orta sertlikte jel	Orta kaldırma kapasiteli sıkı jel (destekleyici şekil)	Keskin şekil ve özellikler için ekstra sert jel
Fokus Endikasyonları	Dudaklar + İnce dinamik çizgiler	Orta yüz hacmi + Nazolabial kıvrımlar + Daha yüksek hacimli dudaklar	Yanaklar + Nazolabial kıvrımlar + Marionette çizgileri	Çene çizgisi + Çene
Enjeksiyon Derinliği	Yüzeysel: Dermis Labial mukoza	Orta seviye: Subkütan (deri altı) Labial mukoza	Orta ila derin: Derin dermis subkütan dokudan supraperiosteal uygulamaya	Derin: Derin dermis subkütan dokudan supraperiosteal uygulamaya
Enjektör	27G	27G	27G	27G

Uzun süreli kalıcılığın tanımı ve şekli

Klinik Çalışma: Elmacık Kemiği Geliştirme

300 gün. 90 hasta. Maksimum 5ml.

Decoria® Voluma'nın elmacık kemiği iyileştirme konusundaki etkinliği ve dayanıklılığı bir klinik çalışmada değerlendirilmiştir.


- 300. günde elmacık kemiği projeksiyonunda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme.
- 300. günde, dolgu maddesinin sadece küçük bir kısmının geri emilimi 3D görüntüleme ile ölçüldü (başlangıçta 1.18 mL dolgu maddesi çalışmanın sonunda 0.78'e geriledi)*
- Yüksek hasta memnuniyeti

* Torres S., Yeni Bir Stabilize HA Dermal Dolgu (Zygomatic Augmentation through Curved Cannulas with the Use of a New Stabilized Hyaluronic Acid Dermal Filler) (Decoria® Voluma, BohusBioTech AB, Sweden, EC): 10 Aylık Takip (10 Months Follow Up), Medwin Publishers 2018 Nov. 23; Vol 3, Issue 3.



DECORIA® ESSENCE



- Yumuşak Şekil. Yumuşak hacim.
- İğne: Terumo 27G
- HA Konsantrasyonu: 20 mg/ml

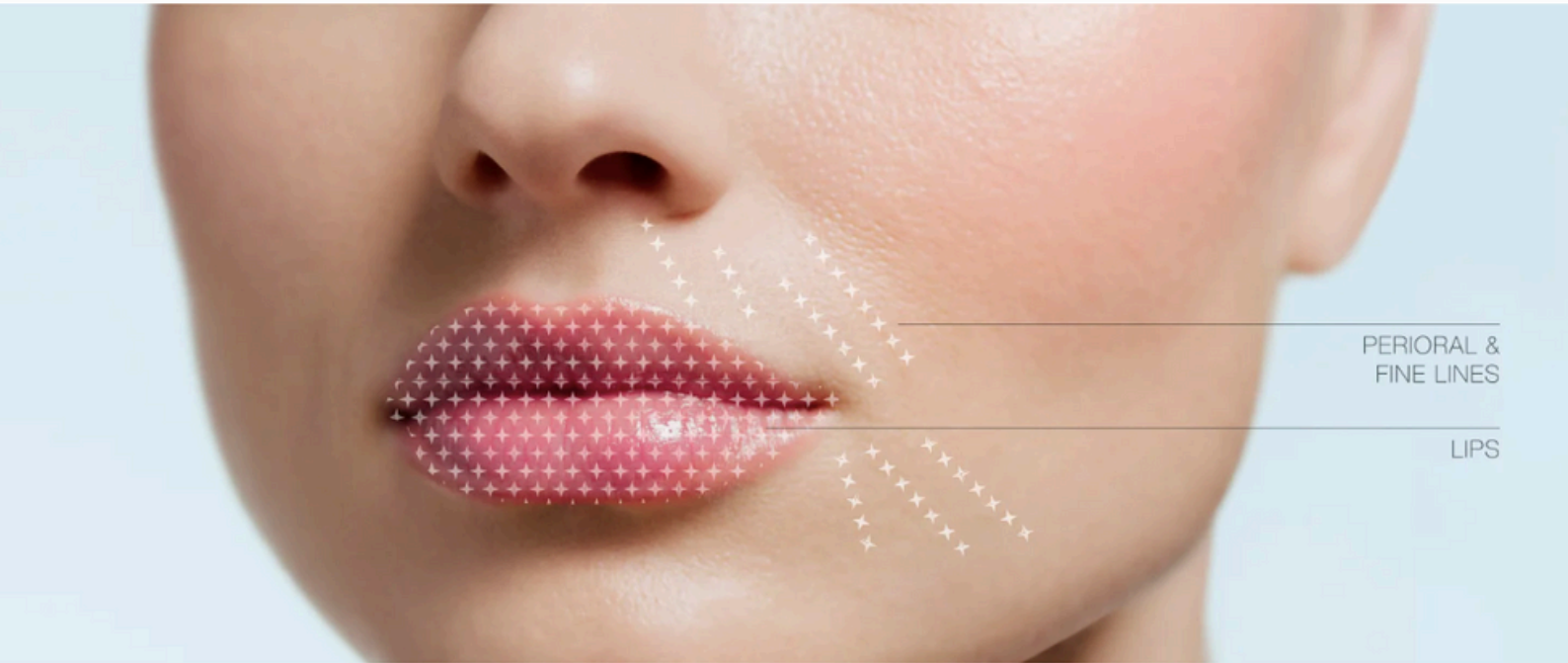

Decoria® Essence dudaklara doğal bir görünüm, his verir ve perioral çizgileri tedavi etmek için de uygundur. Yumuşak hacimli bir jel ve piyasadaki en saf dudak dolgulardan biridir. Perioral çizgilerin düzeltilmesi ve dudakların büyütülmesi veya düzeltilmesi için orta ila derin dermise enjekte edilir.

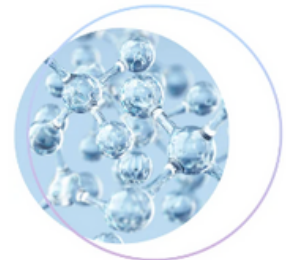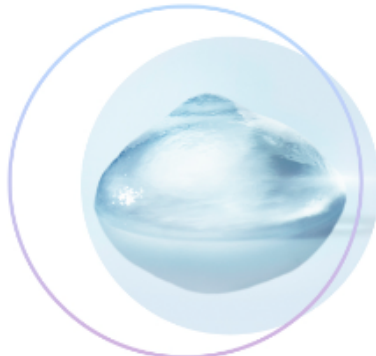

Saf, HA molekülünün yalnızca %1'lik modifikasyonu.

DECORIA® VOLUMA





- Orta sertlikte jel. Genel destek.
- İğne: Terumo 27G
- HA Konsantrasyonu: 20 mg/ml

CHEEKS

NASOLABIAL FOLDS

MARIONETTE LINES

Yanaklar, NLF ve gülme çizgilerini desteklemek için orta güçlü kaldırma kapasitesi (destekleyici şekil). Decoria® Voluma, suprapariostal uygulama için derin dermise veya deri altı dokuya enjekte edilir.

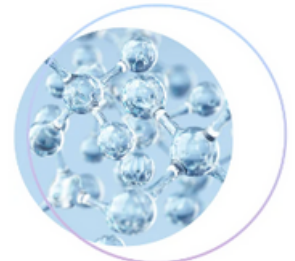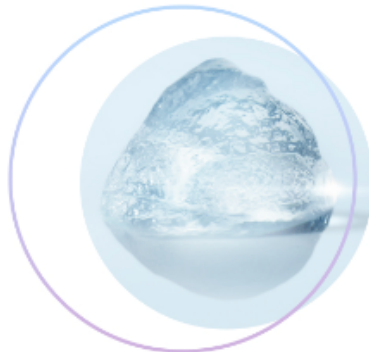

Saf, HA molekülünün yalnızca %1'lik modifikasyonu.

DECORIA® INTENSE





- Yumuşak Şekil. Daha fazla hacim.
- İğne: Terumo 27G
- HA Konsantrasyonu: 20 mg/ml



CHEEKS, MID-FACE

Optimum hacimlendirme, dudaklar ve orta yüz hacmi için büyük partikül boyutu ve orta sıklık (yumuşak ve elastik şekil). Decoria® Intense, dermisin derin tabakasına ve/veya subkutisin yüzey tabakasına enjekte edilir.

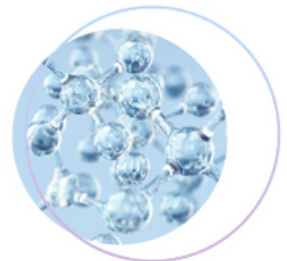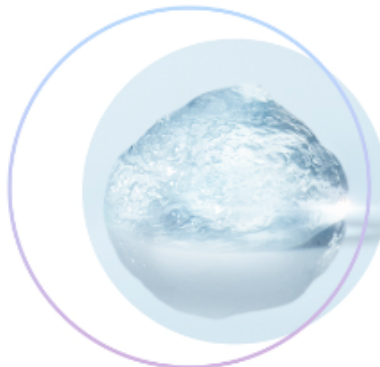

Saf, HA molekülünün yalnızca %1'lik modifikasyonu.




DECORIA® INTENSE STRONG



- Sert jel. Sıkı şekil.
- İğne: Terumo 27G
- HA Konsantrasyonu: 20 mg/ml



Alt çene hattı ve çene bölgesinde keskin konturlar oluşturmak için hacim kazandırmadan güçlü kaldırma kapasitesi (ekstra sıkılık).
Decoria® Intense Strong, supraparietal uygulama için derin dermise veya deri altı dokuya enjekte edilir

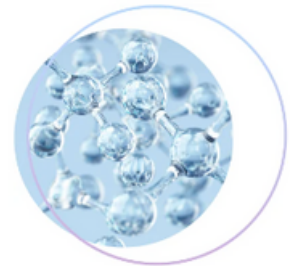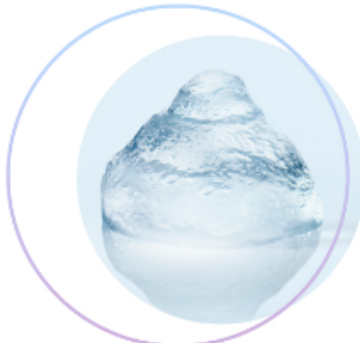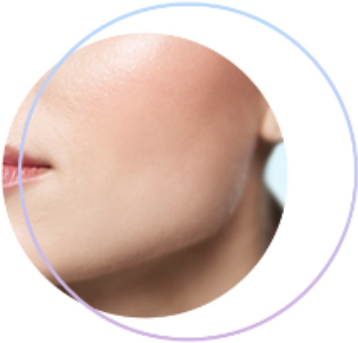

Saf, HA molekülünün yalnızca %1'lik modifikasyonu.

DECORIA®



BOHUS

SCANDINAVIAN^{HA}


BIODERMALIST
• MEDİKAL VE ESTETİK ÜRÜNLERİ •

Türkiye yetkili
distribütörüdür.

