

Operación simple, más conveniente

◇ Ajustable con 2 botones, fácil manejo

Hay 2 botones en el dispositivo que ajustan el volumen y la calibración del audífono que son fáciles de manejar y cómodos de usar.



◇ 3 formas de ajuste, cambia fácilmente

Hay 3 tipos de ajuste auditivo integrados en el dispositivo que son los más convenientes para que el usuario cambie libremente en diferentes ambientes y así garantizar la comodidad y la claridad del sonido.

Esquema del dispositivo




- 1 Encendido / Apagado
- 2 Control de volumen/interruptor de ajuste
- 3 Audífono
- 4 Micrófono
- 5 Tubo de sonido
- 6 Auricular, entrada de sonido (múltiples opciones)

Datos Técnicos



Max OSPL90 (dB)	HFA OSPL90 (dB)	Peak Gain (dB)	HFA FOG (dB)
111.2	108.4	40.9	36.4
Eq. Input Noise Level (dB)	Current Drain (mA)	Attack Time (ms)	Release Time (ms)
23.6	1.59	4	50
THD at			Frequency Range (Hz)
500Hz 0.4%	800Hz 0.3%	1600Hz 0.3%	200Hz-5500Hz

MUNDO AUDITIVO
Escucha y conéctate al mundo.
World Trade Center México.
Montecito 38, Piso 26, Oficina 28.
Colonia Nápoles Benito Juárez, Ciudad de México,
CP 03810.
Tel. 55-9627-7912 Cel. 55-2947-4247
E-mail: sales@aparatos-auditivos.com
ODM for BIONIK EVOLUTION LLC
30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY
82801, Tel +1 (628) 800-6872

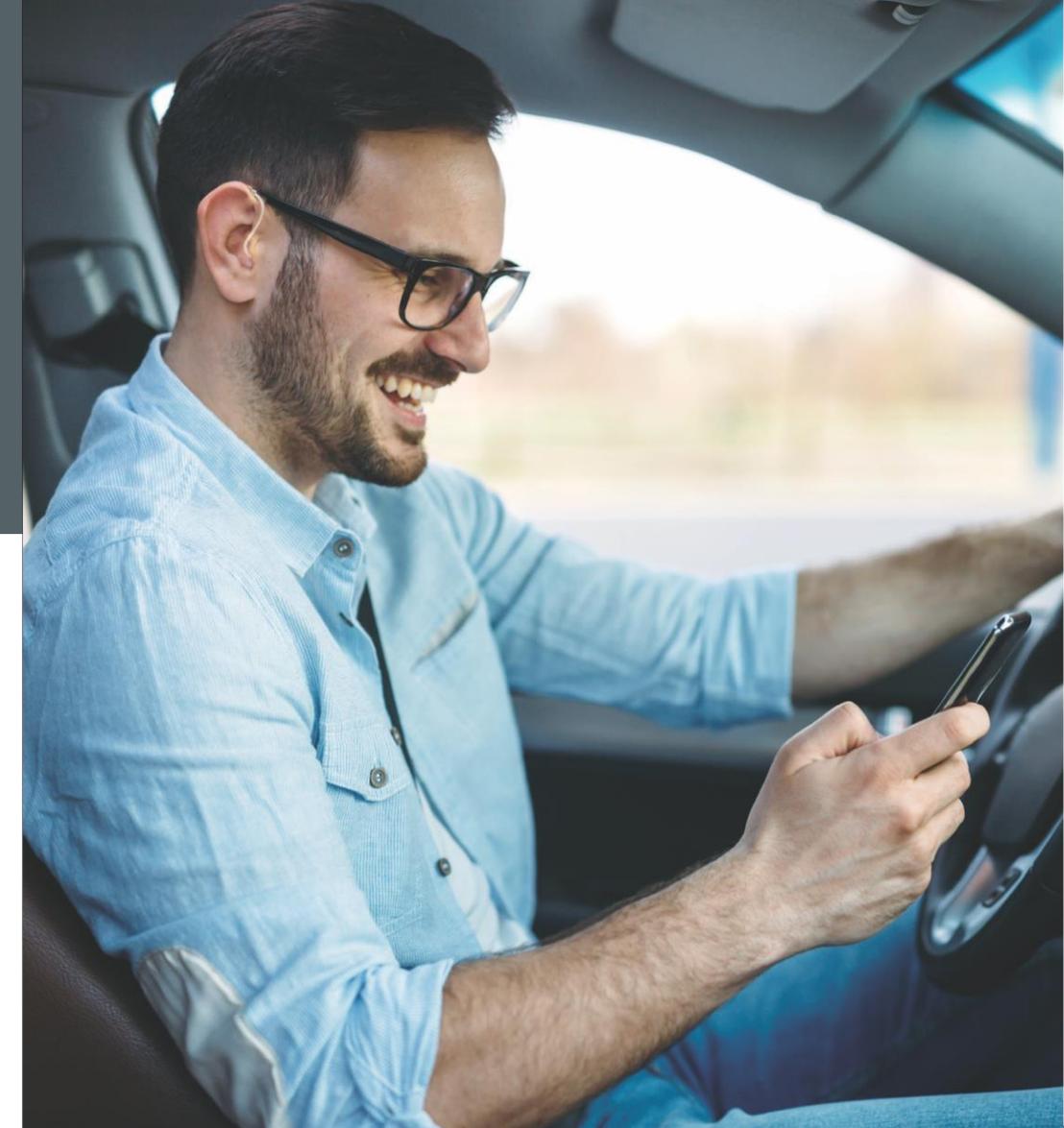

E6

- Nueva Tecnología
- Cargador Portable


Escucha la naturaleza y disfruta de la vida.





Visión general

El E6 es un dispositivo de tipo auditivo con batería recargable, equipado con un sistema avanzado que proporciona un ajuste fino de sonido en 16 canales, con una supresión de ruido ambiental de hasta 12 dB, lo que permite a los pacientes escuchar con claridad en entornos ruidosos.

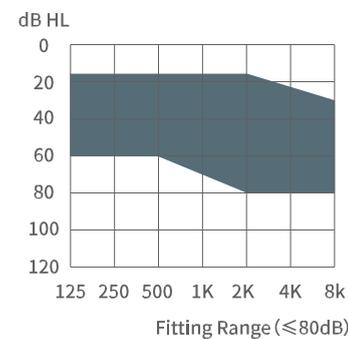

Nuevo sistema con un sonido más claro

Adaptación multicanal

Un nuevo sistema que se retrasa unos 5 milisegundos, eliminando así el ruido excesivo, dividiéndolo finalmente la señal en 16 canales. Cada canal procesa el sonido de voz para mejorar la claridad y calidad del sonido auditivo.



Reducción de ruido para un sonido más claro

La eliminación inteligente digital proporciona una cancelación del ruido ambiental de hasta 128 dB que consigue que las frecuencias de voz sea mas precisas y claras.



Cancelación automática de retroalimentación

Es un sistema automático de retroalimentación que elimina la sobre carga de sonido ambiental, con supresión efectiva de silbidos y reducción de ruido para una fidelidad de sonido auditivo.

Cargador portable, eficiente y económico

El audífono puede funcionar de forma continua aproximadamente 20 horas después de estar completamente cargado, gracias a sus baterías de litio.

Módulo de carga

Este producto auditivo está equipado con sistema de carga, compacta y portátil que trabaja como un banco de energía, que puede cargar los audífonos 3 veces sin enchufar.

Fácil de usar

Existen indicadores de carga para que pueda ver el estado de la batería de inmediato.

Discreto, elegante y cómodo

Material agradable al usar

El tipo de auricular reducen el efecto de oclusión, lo que hace que al escuchar sea más cómodo.

Elegante y compacto

El audífono esta diseñado con un estilo aerodinámico, lo que hace que el auricular sea más imperceptible a la vista. El cargador tiene una forma redondeada para que se pueda sostener mas fácilmente con una mano.

Diferentes colores y un dispositivo de moda

El audífono esta diseñado con un estilo aerodinámico, lo que hace que el auricular sea más imperceptible a la vista. El cargador tiene una forma redondeada para que se pueda sostener mas fácilmente con una mano.

