


H3+

EL NUEVO CONCEPTO DE "PEQUEÑO" EN TÉRMINOS DE GRABACIÓN HOLTER

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Pequeño y ligero**
Sólo 28 gramos (1 onza) y tan pequeño que el paciente apenas notará que está ahí.
- **3 canales de grabación**
Tres canales de grabación; también disponible con dos canales de grabación bipolar. Detección de espigas de marcapasos incluida de serie.
- **Visualización de las ondas**
Pantalla de gráficos para previsualizar las ondas de ECG durante la conexión del paciente.
- **Grabación para 24 y 48 horas**
Con una única pila de AAA, el H3+ ofrece la posibilidad de obtener hasta 2 días de grabación continua.
- **Transferencia de datos USB**
Descarga de la grabación al sistema Holter H-Scribe mediante un cable USB.

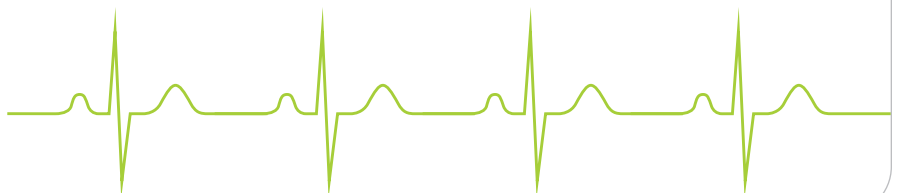

**MORTARA INSTRUMENT, INC.**

7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
EE.UU.

Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Servicio: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

MORTARA RANGONI EUROPE, SRL

(Oficinas europeas)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia

Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

www.mortara.com

ISO 13485 CERTIFIED

**GARANTÍA + SERVICIO**

Mortara Instrument tiene el compromiso de proporcionar asistencia del máximo nivel a sus clientes. Consúltenos sobre el programa que mejor se adapte a sus necesidades.

GRABADORA DIGITAL H3+™

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES*
TIPO DE INSTRUMENTO	Grabadora Holter digital
CANALES DE ENTRADA	Adquisición simultánea de dos o tres canales
DERIVACIONES ESTÁNDAR QUE SE ADQUIEREN	I, II y V modificado o Canales 1 y 2 bipolares
IMPEDANCIA DE ENTRADA RANGO DINÁMICO DE ENTRADA TOLERANCIA A DESVIACIÓN DE ELECTRODOS RESPUESTA A FRECUENCIAS	Iguala o supera los requisitos de la norma ANSI/AAMI EC38
FRECUENCIA DE MUESTREO DIGITAL	180 muestras/segundo/canal para registro y almacenamiento estándar
FUNCIONES ESPECIALES	Detección de marcapasos. Visualización de ECG durante la conexión del paciente
CONVERSIÓN A/D	12 bits
ALMACENAMIENTO	Memoria interna, no volátil
CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO	Piezas a prueba de desfibrilación de tipo CF, con alimentación eléctrica interna
PESO	28 gr (1 onza) sin pila
DIMENSIONES	64 x 25 x 19 mm (2,5 x 1,0 x 0,75 pulgadas)
PILA	Necesita 1 pila alcalina AAA para grabar hasta 48 horas

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

H3+™ y H-Scribe™ son marcas comerciales de Mortara Instrument, Inc.