



MEDIOSTAR
NEXT PRO FAMILY

LOS EQUIPOS ESTRELLA INIGUALABLES PARA LA
DEPILACIÓN LÁSER PROFESIONAL

Folleto no válido para los EE.UU


Asclepion
Laser Technologies



EL NUEVO

MEDIOSTAR NEXT PRO FAMILY

MÁS ALLÁ DE LA DEPILACIÓN PROFESIONAL

MEDIOSTAR NEXT PRO XL

El Spot más grande disponible en el mercado y los tratamientos más rápidos que nunca. Pruebe hoy el poder de la experiencia en depilación más extraordinaria. >>>

MEDIOSTAR NEXT PRO ALEX

La eficacia de la longitud de onda Alejandrita cuenta con lo último en tecnología de diodo. Una combinación única que permite conseguir resultados profesionales incluso en el vello más fino y más claro. >>>

MEDIOSTAR NEXT PRO

La mejor elección para aquellos usuarios que están empezando en el negocio de la depilación y quieren conseguir estar al día en lo último en tecnología láser. Seguro, sin costes de mantenimiento, actualizable: simplemente listo para el éxito. >>>

MEDIOSTAR NEXT PRO XL

TAMBIÉN EQUIPABLE CON

+ CABEZAL ESTÁNDAR

+ CABEZAL ALEX



**EXTRA POTENTE
EXTRA RÁPIDO
EXTRA GRANDE**

MÁS RÁPIDO QUE NUNCA

El nuevo MeDioStar NeXT PRO XL se caracteriza por tener el spot más grande disponible en el mercado y ofrecer una extraordinaria experiencia en depilación a la máxima velocidad. Gracias al Modo SmoothPulse el tratamiento es indoloro y más rapido que nunca. El nuevo sistema de refrigeración 360° de la piel permite el más alto y eficiente preenfriamiento de la epidermis, protegiéndola del riesgo de quemaduras y permitiendo el movimiento del cabezal en cualquier dirección. Esto garantiza el mejor confort tanto para el paciente como para el profesional. El spot XL-S y XL-L están diseñados especialmente para poder tratar tanto áreas pequeñas como grandes. La especial longitud de onda que mezcla 810 y 940 nm permite alcanzar incluso los folículos más profundos, para conseguir los tratamientos más eficientes y efectivos.

TODA LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITA EN TAMAÑO XL.

- + EL SPOT MÁS GRANDE DEL MERCADO
- + TRATAMIENTO DE TODOS LOS TIPOS DE PIEL, DURANTE CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO
- + TRATAMIENTOS MÁS RÁPIDOS
- + SISTEMA INTEGRADO DE REFRIGERACIÓN CUTÁNEA 360°
- + SIN CONSUMIBLES



XL-S* CABEZAL

Tamaño de Spot
3.0cm²

Fluencia
Hasta 60J/cm²

Frecuencia
Hasta 12Hz

XL-L* CABEZAL

Tamaño de Spot
9.1cm²

Fluencia
Hasta 20J/cm²

Frecuencia
Hasta 10.5Hz



REALICE EL TRATAMIENTO
EN UNA ESPALDA EN MENOS
DE 4 MINUTOS

MEDIOSTAR **NEXT PRO ALEX**

TAMBIÉN EQUIPABLE CON

+ CABEZAL ESTÁNDAR

+ CABEZAL XL



EL ALEJANDRITA YA ERA BUENO.
NOSOTROS LO HEMOS HECHO TODAVÍA MEJOR

LA NUEVA GENERACIÓN ALEJANDRITA

El MeDioStar NeXT PRO ALeX nos brinda la posibilidad de utilizar un cabezal de Alejandrita con la última tecnología de diodo incorporada, combinando la eficacia de la alta absorción de la melanina con el láser Alejandrita junto con todos los beneficios del Diodo. Gracias a la longitud de onda de 755nm altamente selectiva, incluso el vello más fino y delgado puede ser tratado con los mejores resultados. El modo SmoothPulse permite tratamientos más rápidos e indoloros y el sistema integrado de refrigeración cutánea garantiza la más alta seguridad. La fiabilidad probada de la Tecnología de Diodo asegura la optimización del procedimiento en los tratamientos (no precisa tiempo de calentamiento) y no tiene costes de mantenimiento.

RECUPERAR SU INVERSIÓN NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL.

- + ALTAMENTE EFECTIVO EN PELO FINO Y CLARO
- + TRATA HASTA LA PIEL DEL TIPO V
- + SISTEMA INTEGRADO DE REFRIGERACIÓN CUTÁNEA
- + MODO SMOOTHPULSE PARA TRATAMIENTOS INDOLOROS
- + LA INVERSIÓN CON EL REEMBOLSO MÁS RÁPIDO



ALEX CABEZAL

Tamaño de Spot
1.4 cm²

Fluencia
Hasta 35 J/cm²

Frecuencia
Hasta 12 Hz



FINALMENTE LA LONGITUD DE ONDA ALEJANDRITA CON TODOS LOS BENEFICIOS DEL DIODO

MEDIOSTAR NEXT PRO

TAMBIÉN EQUIPABLE CON

+ CABEZAL XL

+ CABEZAL ESTÁNDAR

**LA SOLUCIÓN
ACTUALIZABLE.
PREPÁRATE PARA
EL ÉXITO!**



CONSIGA ESTAR A LA ÚLTIMA EN TECNOLOGÍA

El MeDioStar NeXT PRO es la solución más adecuada para nuevos usuarios que quieren empezar en el negocio de la depilación con la tecnología más avanzada. Gracias a la alta fiabilidad de la Tecnología Diodo y el interfaz fácil de manejar, incluso aquellos usuarios con menos experiencia pueden llegar a sentirse seguros con la tecnología en depilación más avanzada en unos simples pasos. El modo SmoothPulse y el sistema integrado de refrigeración cutánea permite rapidez, seguridad y tratamientos efectivos. La longitud de onda especial que mezcla 810 y 940 nm permite alcanzar incluso los folículos más profundos, para tratamientos eficientes y efectivos. Además de esto, el dispositivo permite **realizar múltiples tratamientos** incluyendo **tratamiento del acné, rejuvenecimiento y blanqueamiento de la piel** y además es fácilmente actualizable también para **tratamientos vasculares**.

ES EXACTAMENTE TODO LO QUE NECESITA PARA CONSEGUIR UN BUEN INICIO.


- + **RÁPIDO, SEGURO Y EFECTIVO**
- + **TRATAMIENTO DE TODOS LOS TIPOS DE PIEL, DURANTE CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO**
- + **SISTEMA INTEGRADO DE REFRIGERACIÓN CUTÁNEA**
- + **MODO SMOOTHPULSE PARA TRATAMIENTOS INDOLOROS**
- + **MÚLTIPLES OPCIONES DE TRATAMIENTO**

ESTÁNDAR CABEZAL

Tamaño de Spot
1.4 cm²

Fluencia
Hasta 47 J/cm²

Frecuencia
Hasta 12Hz

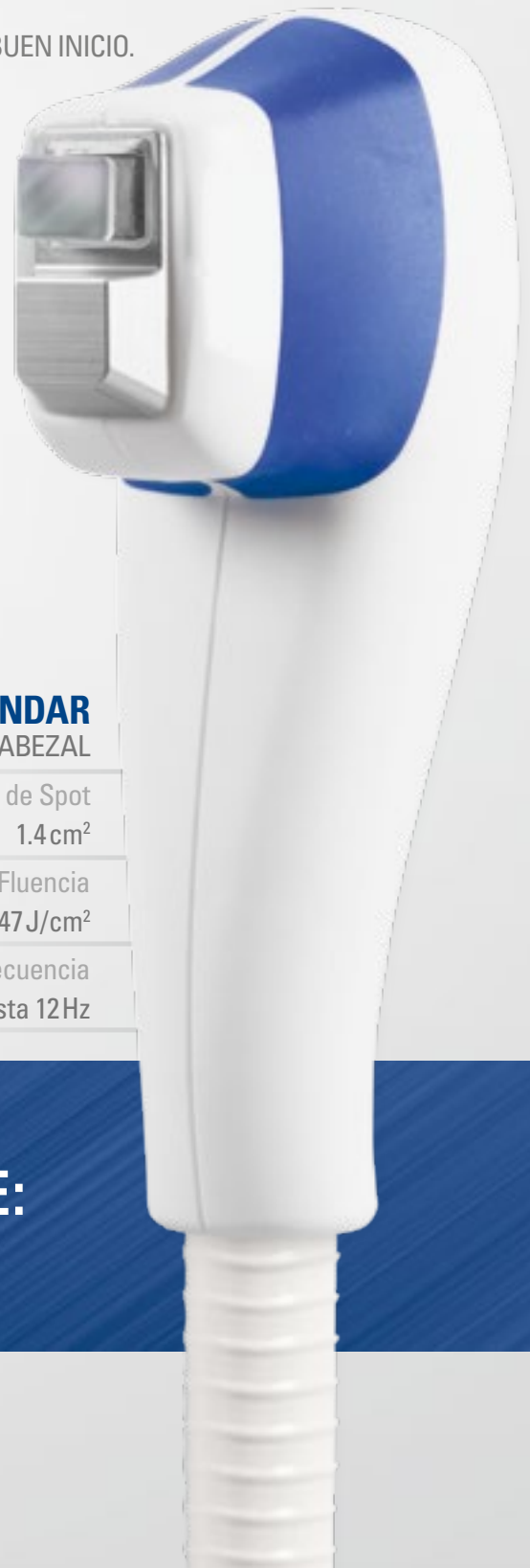

ACTUALIZABLE Y FLEXIBLE:
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TU NEGOCIO

ACTUALIZACIONES*

APROVECHE AL MÁXIMO SU EQUIPO

MÁS ALLÁ DE LA DEPILACIÓN CABEZAL VASCULAR

MeDioStar NeXT PRO va más allá de la simple depilación, con versatilidad y facilidad de uso en otras aplicaciones, tanto en el tratamiento de las venas de las piernas, hemangiomas y ectasias venosas. El cabezal vascular caracterizado por una longitud de onda de 940 nm, permite tratamientos rápidos y no invasivos, normalmente sin necesidad de anestésicos.



VASCULAR CABEZAL


Tamaño de Spot
0.12cm²

Fluencia
Hasta 210J/cm²

Frecuencia
Hasta 4Hz

LA POTENCIA ESTÁ EN TUS MANOS CABEZAL DE ALTA POTENCIA

Los pacientes con fototipos oscuros y vello muy fino pueden ser casos muy complicados de tratar. El cabezal High Power ofrece la posibilidad de tratar estos casos con la mayor eficacia y absoluta seguridad, gracias a la tecnología de diodo que alcanza hasta 90J/cm² con pulsos muy cortos.

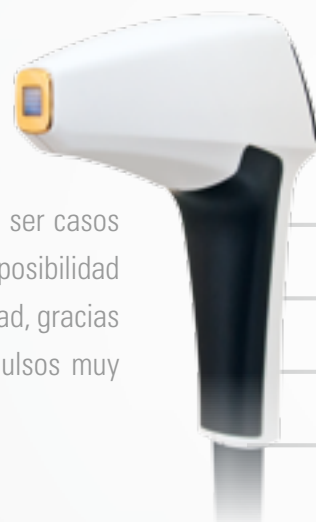

ALTA POTENCIA CABEZAL

Tamaño de Spot
1 cm²

Fluencia
Hasta 90J/cm²

Frecuencia
Hasta 12Hz

LA SOLUCIÓN PORTÁTIL CARRITO

El carrito diseñado exclusivamente permite el transporte más fácil y la optimización al máximo del espacio, incluyendo un espacio de almacenamiento trasero para el pedal y el cable de potencia. Una característica adicional con estilo, para todos aquellos a quienes les gusta el máximo confort.



*
OPCIONAL
DISPONIBLE PARA
TODOS LOS
EQUIPOS
DE LA FAMILIA

ASCLEPION

COMPETENCIA, EXPERIENCIA, ÉXITO

Asclepion Laser Technologies ha estado operando durante más de 40 años como líder en el sector del láser médico como productor de sistemas láser avanzados para dermatología, medicina estética y cirugía. Fundado en el Valle Óptico de Jena, famoso en todo el mundo como tierra de la industria óptica alemana, la empresa invierte continuamente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy, clientes en más de 70 países confían en la tecnología de Asclepion hecha en Alemania y su probada experiencia científica.

MeDioStar NeXT PRO, la 5ª generación en tecnología de depilación de Asclepion, presume de un éxito sin igual por todo el mundo, prueba de su efectividad, seguridad y alta calidad.



Alta calidad es para nosotros también una filosofía orientada a nuestros clientes. Es por eso que trabajamos duro todos los días con el fin de proporcionar no sólo la mejor tecnología sino también una amplia gama de servicios, para dar un soporte 360°.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN



Formaciones a nivel regional o internacional se organizan constantemente en nuestro centro de formación en Jena. De esta forma proporcionamos a todos nuestros clientes todo el conocimiento que ellos necesitan para utilizar con seguridad y eficacia nuestros equipos láser.

Encuentre más información en:
www.asclepion.com/academy

MARKETING Y WEBCLUB



Hay un amplio abanico de herramientas de marketing disponible en el WEBCLUB de Asclepion, una plataforma online diseñada para darle acceso en tiempo real a todas las últimas noticias y documentos importantes para el éxito en su práctica.

Encuentre más en:
www.asclepion.com/webclub

SERVICIO TÉCNICO



Contamos con asistencia técnica altamente especializada, que puede ser proporcionada tanto directamente como a través de una red de distribuidores locales, que siguen al cliente desde la instalación, asistencia en caso necesario y entrega de repuestos.

Encuentre más información en:
www.asclepion.com/service

Asclepion

Laser Technologies

ESPECIFICACIONES

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| Modelo Láser | MeDioStar NeXT PRO Láser de Diodo de alta potencia, clase 4 | Tamaño de spot | 9.1, 3.0, 1.4 o 1.0 cm ² (depilación)* 0.12 cm ² (tratamientos vasculares) |
| Potencia | max. 2400 W | Frecuencia | Hasta 12 Hz* |
| Longitud de onda | 755 – 950 nm* | Longitud de pulso | 6 – 400 ms* |
| Fluencia | max. 20 J/cm ² (Cabezal XL-L) max. 60 J/cm ² (Cabezal XL-S) max. 35 J/cm ² (Cabezal ALX) max. 47 J/cm ² (Cabezal ESTÁNDAR) max. 90 J/cm ² (Cabezal ALTA POTENCIA) max. 210 J/cm ² (Cabezal VASCULAR) | Pantalla | Pantalla LCD 8.4" |
| | | Dimensiones | Equipo: 36.5 x 56 x 46.5 cm Equipo con carrito**: 36.5 x 56 x 93 cm |
| | | Peso | Aprox 35 kg |

*dependiendo del cabezal // Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



NÃO DESTINADO À VENDA NOS EUA

PATENTS
DE 197 10 676
US 6,162,218



MADE IN GERMANY

| | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| treatment laser | wavelength | 755 – 950 nm |
| | pulse energy | ≤ 200 J |
| | pulse duration | ≤ 400 ms |
| | laser class | 4 |
| classified | acc. to | EN 60825-1: 2014 |



Asclepion Laser Technologies GmbH | Brüsseler Str. 10 | 07747 Jena | Germany | www.asclepion.com

MEDIOSTAR NEXT PRO FAMILY

SÍGANOS EN

