





ADVANCING
THE **HEALTH OF**
HEALTHCARE.[™]

NUESTRA META ES SANAR.

El manejo eficaz de las heridas crónicas exige aplicar nuevas estrategias y poner a prueba el *statu quo*. Medline se propone ayudarle a enfrentar ese reto y para ello le ofrece la más amplia variedad comercial de productos de cuidados avanzados de heridas y un surtido integral de recursos educativos. Esta estrategia nos permite garantizarle que su institución dispondrá de las herramientas y pericia necesarias para poder tratar heridas crónicas difíciles de sanar.

Distintas maneras de ver las cosas

Medline tiene un largo historial de rápida innovación en el campo del cuidado de heridas y ninguna intención de reducir la marcha. Los retos que nuestros clientes enfrentan en el manejo de heridas crónicas son nuestro aliciente para crear nuevas soluciones en pro de la calidad y eficiencia de los cuidados.

Últimas innovaciones de Medline

- » TheraHoney®: apósitos de miel para heridas
- » Opticell® con tecnología Chytoform
- » Optifoam® Gentle: espuma superabsorbente con cara y borde en silicona



PODER PARA LOS PROFESIONALES CLÍNICOS MEDIANTE EL APOYO INDIVIDUALIZADO.

Los recursos educativos de Medline le ofrecen el apoyo necesario para elevar el estándar de la atención. En su condición de cliente valioso, le invitamos a explorar los recursos disponibles en compañía de su representante de Medline para que, juntos, desarrollen un plan de apoyo especialmente adaptado a sus necesidades.

» **Especialistas en productos para el cuidado avanzado de heridas y de la piel**

Los especialistas en productos Medline están capacitados para ayudarle a aprovechar al máximo el apoyo que le ofrece Medline, conforme usted trabaja para optimizar la calidad de los cuidados.

» **Empaque educativo**

El galardonado empaque educativo de Medline asegura que los cuidadores dispongan de instrucciones pormenorizadas y completas al alcance de sus manos.

» **Medline University**

Medline University le brinda el poder de asumir, asignar y monitorear sus progresos mediante cursos en línea gratuitos diseñados para mejorar sus destrezas.

» **Herramienta de evaluación de heridas NE1**

Esta herramienta patentada para la evaluación de heridas está diseñada para mejorar radicalmente la exactitud, uniformidad y transparencia del proceso de evaluación de heridas.

» **Videos en línea de aplicación de los productos**

Una exhaustiva biblioteca de videos educativos de aplicación ayuda a capacitar a los nuevos integrantes del personal sobre la aplicación correcta de los productos.

Visite www.medline.com/awcvideos para ver cómo se aplican los productos.



DIMES: SU NAVEGADOR EN EL CUIDADO DE LAS HERIDAS

DIMES: PARA EL CUIDADO EFICAZ DE HERIDAS CRÓNICAS

Los profesionales del cuidado de heridas se enfrentan a una serie de dificultades variadas y complejas. Por eso Medline ofrece una amplia variedad de productos y programas que ayudan a los profesionales clínicos a ofrecer una atención de fama mundial, individualizada para cada contexto clínico específico.

A lo largo de este catálogo encontrará productos*, información y recursos fundamentados en la evidencia, todos organizados en torno al sistema DIMES de preparación y tratamiento del lecho de la herida.

*Si desea información sobre los productos aquí mencionados, comuníquese con Medline Industries, Inc.

D

Desbridamiento (autolítico)

Eliminación del tejido inviable mediante la creación de un entorno húmedo óptimo alrededor de la herida.

8 TheraHoney®

12 Plurogel®

I

Infección/inflamación

Abordaje de la contaminación microbiana y la inflamación de la herida.

16 Opticell® Ag+

20 Maxorb® II Ag+

22 Optifoam® Gentle Ag+

24 Optifoam® Ag+

26 Optifoam® Ag+ Post-Op Strip

28 Silvasorb®

30 Ag+ Powder

M

Mantenimiento del equilibrio de la humedad

Logro y mantenimiento del equilibrio de la humedad dentro y alrededor de la herida.

34 Optifoam® Gentle

38 Optifoam®

40 Opticell®

42 Qwick™

44 Optilock®

46 Maxorb®

48 Exuderm®

50 Apósitos de hidrogel

E

Entorno/borde

Tratamiento de heridas estancadas en ausencia de migración epitelial.

54 Puracol®

S

Productos de soporte, servicios y educación

Productos que complementan el sistema DIMES pero que no encajan en ninguna de las otras categorías.

60 Marathon®

64 Sureprep®

66 Fourflex y Threeflex®

68 Medigrip™

70 Unna-Z® Stretch

72 Versatel® y Versatel One


74 Apósitos de cobertura

76 Cinta de retención de apósitos

78 Limpiadores de heridas

80 NE1®

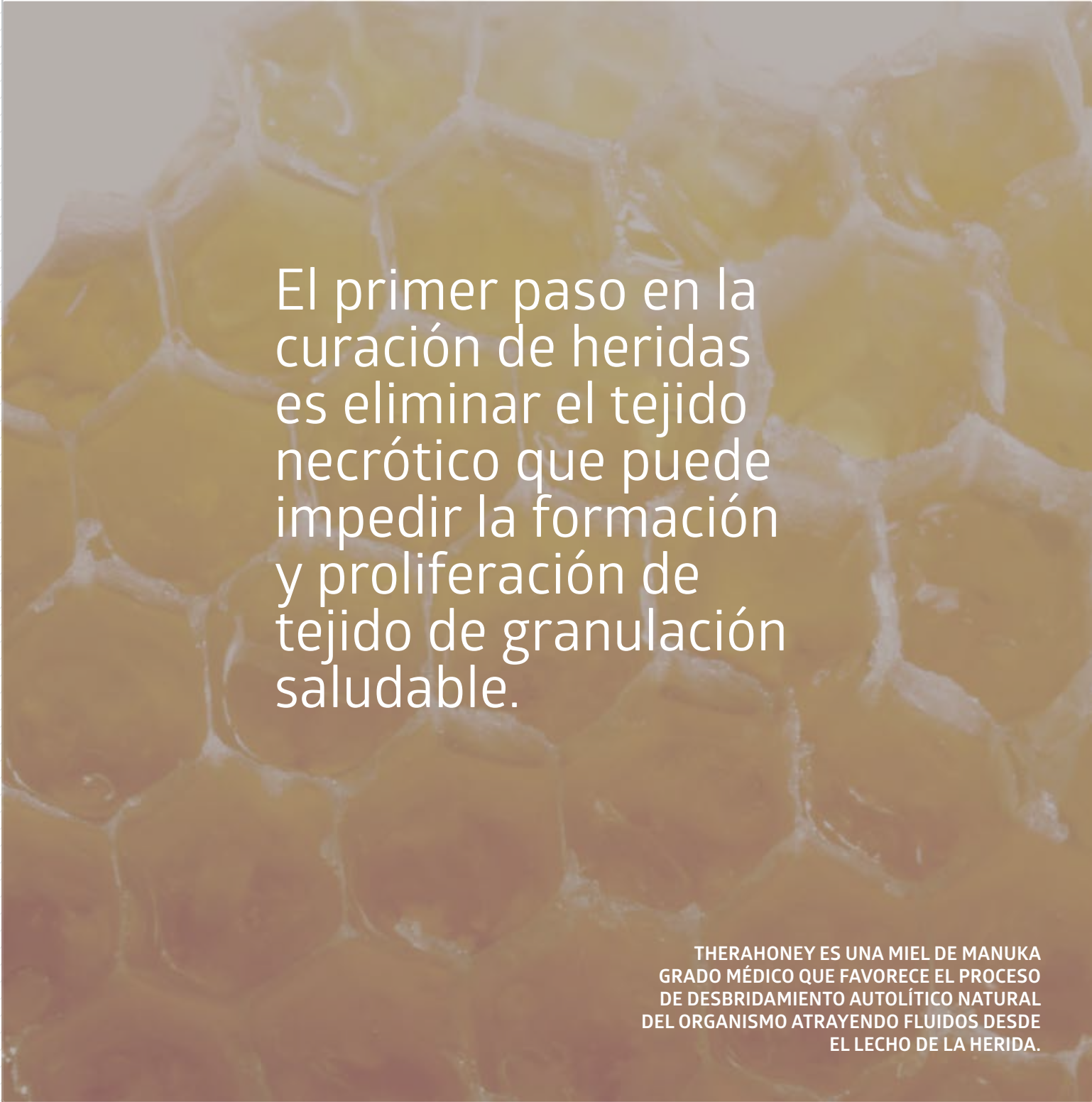

A background image showing a close-up, microscopic view of honeycomb cells. The cells are hexagonal and filled with a golden-brown substance, likely honey. The image is slightly blurred, giving it a soft, organic feel. It occupies the lower two-thirds of the page, behind the main text.

D

DESBRIDAMIENTO (autolítico)

El primer paso en la curación de heridas es eliminar el tejido necrótico que puede impedir la formación y proliferación de tejido de granulación saludable.

THERAHONEY ES UNA MIEL DE MANUKA GRADO MÉDICO QUE FAVORECE EL PROCESO DE DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO NATURAL DEL ORGANISMO ATRAYENDO FLUIDOS DESDE EL LECHO DE LA HERIDA.



Adentro encontrará...

TheraHoney®	8
PluroGel®	12

THERAHONEY®

Apósitos de miel para heridas




La dulce ciencia de la miel...

Fabricado con miel de Manuka grado médico 100% estéril, TheraHoney es un potente agente promotor del desbridamiento autolítico natural. Sus altos niveles de azúcar (87%) estimulan la acción osmótica que contribuye a eliminar el tejido necrótico, a mantener un entorno húmedo en la herida que favorece su curación, y a reducir el olor de la herida. Los estudios han demostrado que los apósitos de miel de Manuka pueden también reducir significativamente el pH de la herida y ayudar a reducir su tamaño¹.

...y sus dulces resultados

El uso de los apósitos de miel de Manuka está asociado a una reducción estadísticamente significativa del pH de la herida y a una reducción de su tamaño¹.



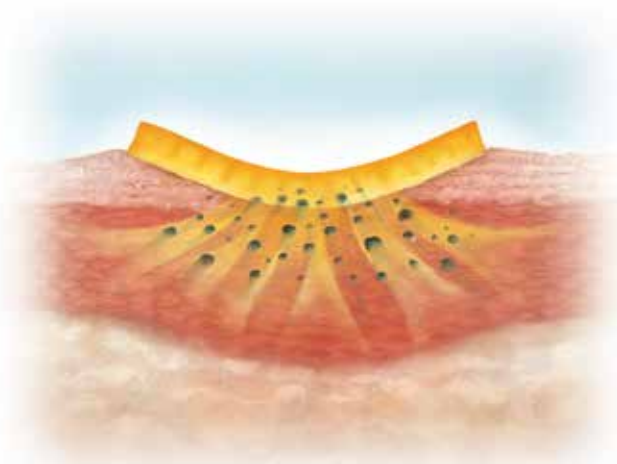

La figura muestra cómo la acción de la miel de Manuka atrae el exudado desde el tejido subcutáneo hacia la superficie de la herida, eliminando los residuos, los esfacelos y el tejido necrótico.

¹Gethin GT, Cowman S, Conroy RM. The impact of Manuka honey dressings on the surface pH of chronic wounds. International Wound Journal. 2008; 5(2):185-194. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494624>. Consultado el 6 de noviembre de 2014.

THERAHONEY®

100% de miel de Manuka grado médico

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » OptiLock®
- » Qwick™



INDICACIONES

- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Lesiones por presión
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Úlceras de pie diabético
- » Heridas quirúrgicas y por traumatismos
- » Leves abrasiones, laceraciones y cortaduras
- » Leves escaldaduras y quemaduras

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » TheraHoney puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas con sensibilidad confirmada a la miel o al veneno de abejas

ACERCA DE THERAHONEY

- » Fabricado en un 100% con miel (*Leptospermum scoparium*)¹ de grado médico
- » Estimula el desbridamiento autolítico mediante la aplicación de altos niveles de azúcar (87%)^{2,3,4}
- » Ayuda a reducir rápidamente el olor^{2,4}
- » Crea un entorno húmedo para la curación de la herida⁴
- » Debe usarse junto con un apósito absorbente⁵
- » Compatible con apósitos de plata y surfactantes para limpieza de heridas⁶

¿SABÍA USTED?

TheraHoney atrae el fluido desde el lecho de la herida y así estimula el desbridamiento autolítico. Use TheraHoney junto con Qwick para lograr una absorberencia óptima. Para obtener más información sobre Qwick, remítase a la pág. 42.



Referencias bibliográficas

1. Datos archivados. 2. Cimolai, N. Sweet success? Honey as a topical wound dressing BCMJ. Vol. 49, n.º 2, marzo de 2007: 64-67. 3. Green AE. Wound healing properties of honey. Br J Surg 1988; 75(12): 1278. 4. Molan P. Debridement of Wounds with Honey, J Wound Technology 2009: 12-17. 5. Tovey FI. Honey and healing. J R Soc Med 1991; 84(7): 447. 6. Schultz, G; Gibson, D. "The Impact of Silver Impregnated Dressings and Wound Cleansers on the Osmotic Strength of 100% Manuka Honey Gel Dressing". Department of Obstetrics and Gynecology; Institute of Wound Research; Universidad de Florida; Gainesville, FL. 2013.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

THERAHONEY® GEL

Ideal para heridas de espesor parcial y total con exudado mínimo.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MNK0005	Tubo de 14.2 g (0.5 onzas)	A4649	10/caja
MNK0015	Tubo de 42.5 g (1.5 onzas)	A4649	12/caja



THERAHONEY FOAM FLEX

Apósito de espuma impregnado, ideal para la absorción.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MNK1344	Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja



THERAHONEY SHEET

Ideal para facilitar el manejo y la aplicación.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MNK0077	Lámina de 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	A4649	10/caja



THERAHONEY HD

200% más miel que TheraHoney Sheet.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MNK0082	Lámina de 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A4649	10/caja
MNK0087	Lámina de 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	A4649	10/caja



THERAHONEY RIBBON

200% más miel que TheraHoney Sheet.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MNK0089	Cuerda de 2.5 x 30.5 cm (1 x 12 pulg.)	A4649	10/caja



PLUROGEL®

Apósito para quemaduras y heridas

USOS RECOMENDADOS

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Heridas con exudado de leve a moderado
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam Gentle
- » Stratasorb Composite

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Laceraciones, abrasiones y desgarros de la piel
- » Zonas donantes y heridas de injerto
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Heridas quirúrgicas

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Para mantener húmeda la herida, se recomienda hacer un cambio diario o según sea necesario o esté recomendado por un médico. Puede permanecer sobre la herida hasta 3 días.

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas con sensibilidad confirmada a los componentes del apósito



ACERCA DE PLUROGEL

- » No daña las células y es 100% soluble en agua, biocompatible y no iónico
- » Los residuos más suaves de la herida se enjuagan más fácilmente con los cambios de apósito
- » Ayuda a crear y mantener un microambiente húmedo
- » Ofrece mejor protección porque se mantiene en el lecho de la herida

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.


APÓSITO PARA QUEMADURAS Y HERIDAS PLUROGEL

N.º del artículo	Descripción	Empaque
PGL050	Frasco de 50 gramos (1.75 onzas)	50/caja, 10 cajas/cartón
PGL050TUBE	Tubo de 50 gramos (1.75 onzas)	25/caja, 5 cajas/cartón
PGL400	Frasco de 400 gramos (14 onzas)	25/caja, 4 cajas/cartón
PGL020	Tubo de 20 gramos (0.70 onzas)	35/caja



Aspecto clínico destacado

Herida por traumatismo de espesor total en talón derecho

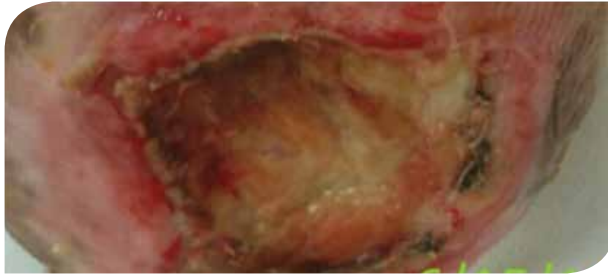

Prácticamente todas las heridas se contaminan con microorganismos posiblemente perjudiciales. La clave para el manejo eficaz de las heridas es el manejo activo del riesgo de contaminación microbiana e infección.

LOS APÓSITOS ANTIMICROBIANOS CON PLATA
MANEJAN LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA
Y ASÍ AYUDAN A EVITAR LAS DEMORAS EN LA
CURACIÓN POR CAUSAS DE INFECCIÓN.

Adentro encontrará...

Opticell® Ag+	16
Maxorb® II Ag+	20
Optifoam® Gentle Ag+	22
Optifoam Ag+	24
Optifoam Ag+ Post-Op Strip	26
Silvasorb®	28
Ag+ Powder	30

OPTICELL® Ag+

Fibra gelificante antimicrobiana con quitosano

APROVECHAMOS EL PODER DEL OCÉANO.

Opticell Ag+ utiliza Chytoform, la tecnología de fibra gelificante con quitosanos de Medline que ofrece excelentes beneficios a las heridas. Opticell Ag+ tiene una gran capacidad de absorción y se puede humedecer para los cuidados de heridas secas o con exudado ligero.




Opticell Ag+ ofrece eficacia antimicrobiana de amplio espectro sin dañar las células cutáneas (no citotóxico).



UN ENTORNO ÓPTIMO PARA LA CURACIÓN.

Opticell Ag+ tiene una alta capacidad de amoldamiento y conserva su forma y tamaño en la herida con más eficacia que otras fibras gelificantes. Esta calidad garantiza que el apósito Opticell Ag+ mantenga un contacto óptimo y completo con la herida, incluso a medida que absorbe la humedad.

Opticell con tecnología Chytoform

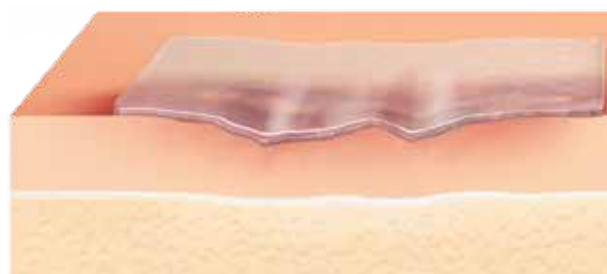


El perfil liso, delgado y amoldable facilita un contacto estrecho con la herida.

Competencia (fibra gelificante cosida)



Las nervaduras del apósito podrían dar lugar a irregularidades en la superficie de contacto con la herida.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ABSORCIÓN¹

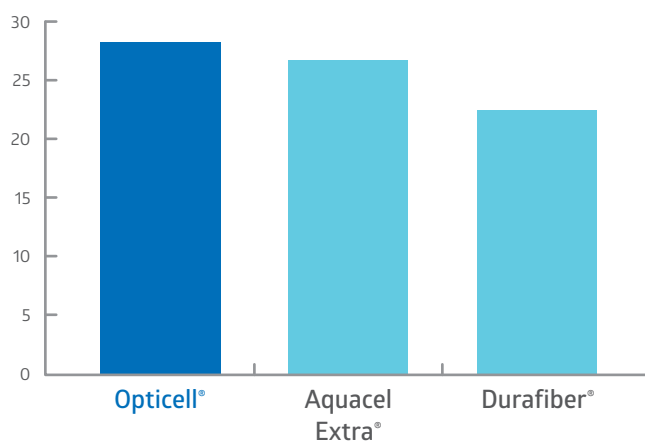

Promedio de fluido absorbido (g/100 cm²)

En pruebas *in vitro* de tres apósitos, Opticell logró en promedio el máximo nivel de absorbencia.

La excepcional capacidad de absorción de Opticell ayuda a reducir la frecuencia de cambios del apósito y limita la maceración.

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

OPTICELL® Ag+

Fibra gelificante antimicrobiana con quitosano

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » Bordered Gauze
- » Stratasorb® Composite

INDICACIONES

- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras por insuficiencia venosa
- » Lesiones / úlceras por presión
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Úlceras de pie diabético
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas por traumatismos
- » Zonas donantes
- » Úlceras arteriales y úlceras en la pierna de origen mixto

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Personas sensibles a la plata o al quitosano, que se obtiene de los mariscos
- » Quemaduras de tercer grado

EFICACIA ANTIBACTERIANA *IN VITRO* DE OPTICELL Ag+

Se ha demostrado que Opticell Ag+ destruye eficazmente, durante lapsos de hasta 7 días, microorganismos como¹:

- » *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) ATCC 33591: bacterias grampositivas
- » *Escherichia coli* ATCC 8739: bacterias gramnegativas
- » *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027: bacterias gramnegativas
- » *Candida albicans* ATCC 10231: levaduras
- » *Enterococcus faecium* resistente a la vancomicina (ERV) ATCC 51575: bacterias grampositivas
- » *Staphylococcus aureus* ATCC 6538: bacterias grampositivas

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.



ACERCA DE OPTICELL Ag+

- » Tecnología de fibra gelificante Chytoform™
- » Acción antimicrobiana de amplio espectro propia de la plata iónica
- » Alta capacidad de amoldamiento
- » Versátil: puede usarse con cualquier nivel de exudado
- » Resistencia cuando el apósito está húmedo 3 veces mayor que la de la fibra gelificante convencional en Aquacel®¹
- » El fluido no se difunde en sentido lateral, lo cual reduce la maceración
- » Gran capacidad de absorción¹
- » Mantiene un entorno húmedo para la curación de la herida
- » Memoria de superficie corporal (MSC): conserva su tamaño
- » Se quita suavemente de la herida
- » Diseñado para minimizar el dolor al quitarse

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

LÁMINAS DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL Ag+

Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9822EP	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6196	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9845EP	10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	A6197	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC9866EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6197	5/caja, 10 cajas/cartón
MSC98812EP	20.32 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.)	A6198	5/caja, 10 cajas/cartón



CUERDA DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL Ag+

Ideal para el llenado de heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9818R	1.9 x 30.5 cm (0.75 x 18 pulg.)	A6199	5/caja, 10 cajas/cartón



MANEJO DEL DOLOR EN LA ZONA DONANTE

Al humedecerse con fluidos y exudado, las fibras absorbentes se transforman en un gel.

Una vez cultivada la piel donante, se coloca el Opticell sobre la zona donante.

La acción gelificante permite un eficaz manejo del exudado y eliminación del tejido muerto.



¿Qué hay en su interior?

Chytoform es la tecnología de fibra gelificante con quitosanos que se encuentra en el interior de Opticell. Los quitosanos se obtienen de los mariscos, lo que lleva la ciencia del océano al cuidado de las heridas.

MAXORB® II Ag+

Apósitos antibacterial de alginato

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Niveles de exudado de moderados a abundantes
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » Stratasorb® Composite
- » Bordered Gauze

INDICACIONES

- » Lesiones por presión^{6,7}
- » Úlceras en la pierna
- » Quemaduras de primer y segundo grado⁸
- » Heridas de espesor parcial y total con exudado de moderado a abundante
- » Úlceras de pie diabético
- » Heridas quirúrgicas
- » Zonas donantes y de injerto
- » Heridas por traumatismos

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Maxorb II Ag+ puede dejarse en su sitio hasta 7 días⁹
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Heridas secas o con exudado ligero
- » Pacientes con sensibilidad confirmada al alginato o la plata
- » Para controlar hemorragias profusas
- » Como implante quirúrgico



ACERCA DE MAXORB Ag+

- » Ayuda a manejar la contaminación bacteriana^{1,2}
- » Liberación controlada de iones de plata
- » Rentable⁴
- » Fáciles cambios de apósito
- » Gran capacidad de absorción⁵
- » Reduce los olores⁶
- » El fluido no se difunde en sentido lateral
- » Hasta 21 días de protección antimicrobiana^{1,3}
- » Cuerda reforzada de alginato y plata
- » La cuerda es ideal para heridas con tunelizaciones o socavaciones

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.

Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

MAXORB II Ag+

Apósito antibacteriano 100% alginato de calcio

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC9922EP	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 in)	En trámite	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9945EP	10.2 x 12.1 cm (4 x 4.75 in)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC9948EP	10.2 x 20.3 cm (4 x 8 in)	En trámite	5/caja, 10 cajas/cartón
MSC9966EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in)	En trámite	5/caja, 10 cajas/cartón
MSC99812EP	20.3 x 30.5 cm (8 x 12 in)	En trámite	5/caja, 10 cajas/cartón



CINTA REFORZADA MAXORB II Ag+

Apósito antibacteriano 100% alginato de calcio reforzado para facilitar su retirada.

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC9912EP	2.5 x 30.5 cm (1 x 12 in)	En trámite	5/caja, 10 cajas/cartón
MSC9918EP	2.5 x 45.7 cm (1 x 18 in)	En trámite	5/caja, 10 cajas/cartón



Referencias bibliográficas

1. Chakravarthy D, Falconio-West M. A comparison of the antimicrobial efficacy of two silver ion containing absorptive fiber dressings. Presentado en SAWC. Las Vegas, NV, EE. UU. 2006. 2. Chakravarthy D, Fleck C, Falconio-West M. An evaluation of two polysaccharide-silver based high absorbency wound dressings. Presentado en SAWC. Las Vegas, NV, EE. UU. 2006. 3. DeLeon J, Nagel M, Hill D, Fudge M, Lucius A, Garcia B. Cost comparison of silver impregnated Hydrofiber® and alginate dressings. Presentado en SAWC. Las Vegas, NV, EE. UU. 2006. 4. Datos archivados. 5. Serena T, Chakravarthy D. Maxorb® Ag in the treatment of burn wounds. Symposium on Advanced Wound Care. Tampa, FL EE. UU. 2007. 6. Bradford C, Freeman R, Percival SL. in vitro study of sustained antimicrobial activity of a new silver alginate dressing. The Journal of the American College of Certified Wound Specialists, volumen 1, ejemplar 4, páginas 117-120.

OPTIFOAM® GENTLE Ag+

Apósitos antimicrobianos de espuma de silicona

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Heridas con cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario o secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS**

- » Cinta adhesiva Gentac™
- » Red elástica
- » Venda tubular Medigrip™

*Puede usarse como apósito secundario para heridas profundas

**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y superficiales de espesor total
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas con colonización
- » Úlceras en la pierna
- » Úlceras de pie diabético
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Optifoam Gentle Ag+ puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa
- » Personas con sensibilidad confirmada a la plata

ACERCA DE OPTIFOAM GENTLE Ag+

- » Apósito siliconizado que se adhiere suavemente
- » Alta capacidad de amoldamiento¹
- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » La plata iónica actúa como una barrera antimicrobiana¹
- » Protección continua con barrera antimicrobiana¹
- » Ayuda a mantener un entorno húmedo para la curación de la herida
- » Capa exterior impermeable
- » Gran capacidad de absorción¹
- » No mancha
- » Capa exterior de bajo cizallamiento y fricción

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM GENTLE Ag+ CARA Y BORDE EN SILICONA

Ideal para el manejo de heridas con contaminación bacteriana. El núcleo superabsorbente absorbe, atrapa y aleja el exudado, y el diseño de cinco capas mejora el rendimiento.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9644EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9666EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM GENTLE Ag+ ESPUMA CON CARA EN SILICONA – SIN BORDE

Ideal para una adhesión suave y el manejo de la contaminación bacteriana en las heridas. La cara en silicona ayuda en la colocación del apósito; la suave espuma amoldable puede recortarse a la medida.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9544EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9566EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9588EP	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM® Ag+

Apósitos de espuma antimicrobianos

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Heridas con exudado de leve a moderado
- » Apósito primario o secundario

*Como apósito secundario

**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS**

- » Cinta adhesiva Medfix™
- » Cinta adhesiva Gentac™
- » Venda tubular Medigrip™



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas con colonización
- » Ideal para el manejo de la contaminación bacteriana en heridas postoperatorias
- » Úlceras en la pierna
- » Úlceras de pie diabético
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Debajo de vendas compresivas

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Optifoam Ag+ puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa
- » Personas con sensibilidad confirmada a la plata

ACERCA DE OPTIFOAM Ag+

- » La plata iónica actúa como una barrera antimicrobiana¹
- » Protección antimicrobiana continua¹
- » Absorbente¹
- » Amoldable¹
- » Puede manejar la introducción reiterada de bacterias
- » No mancha
- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » Ayuda a crear un entorno ideal para la curación
- » Capa exterior impermeable
- » Capa exterior de bajo cizallamiento y fricción

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM Ag+ ADHESIVE

Para heridas con piel perilesional íntegra.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9604EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9606EP	Sacro: 15.2 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón




OPTIFOAM Ag+ NON-ADHESIVE

Para heridas con piel perilesional frágil.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9614EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón



Exposición de 4 cm² de cada apósito durante 4 h a 37 °C
Población inicial: 10⁶ - 10⁷ unidades formadoras de colonias (UFC)

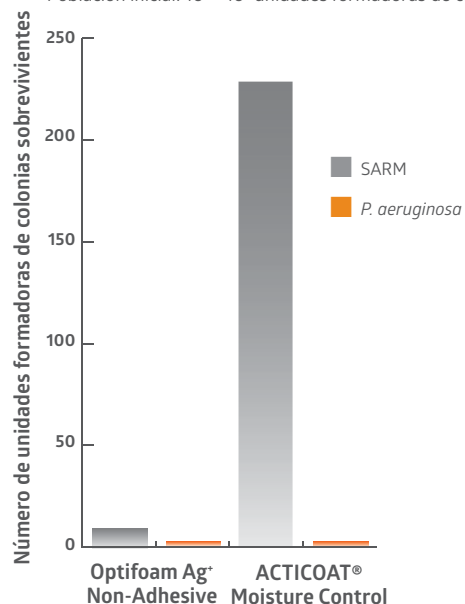

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EFECTO ANTIMICROBIANO¹

Optifoam Ag+ produce el mínimo número de unidades formadoras de colonias sobrevivientes al cabo de 4 horas.

OPTIFOAM® Ag+ POST-OP

Apósito de espuma antimicrobiana para uso postoperatorio

USO RECOMENDADO

- » Zonas de incisión quirúrgica
- » Exudado de leve a moderado
- » Como apósito primario o secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde



INDICACIONES

- » Zonas de incisión quirúrgica

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Optifoam Ag+ Post-Op Strip puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado


CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa
- » Personas con sensibilidad confirmada a la plata

ACERCA DE OPTIFOAM Ag+ POST-OP

- » La plata iónica actúa como barrera antimicrobiana¹ sobre las zonas de incisión quirúrgica
- » Protección antimicrobiana continua¹
- » Delgado, bordes adhesivos amoldables
- » Puede manejar la introducción reiterada de bacterias
- » No mancha

Exposición de 4 cm² de cada apósito durante 4 h a 37 °C
Población inicial: 10⁶ - 10⁷ unidades formadoras de colonias (UFC)

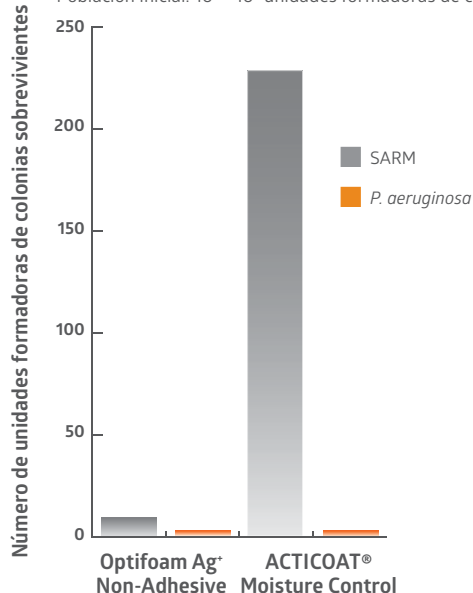

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EFECTO ANTIMICROBIANO¹

Optifoam Ag+ produce el mínimo número de unidades formadoras de colonias sobrevivientes al cabo de 4 horas.

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM GENTLE Ag+ POST-OP

Cara y borde en silicona para una suave adhesión. Diseño superabsorbente de múltiples capas.

N.º del artículo	Descripción	HCPSCS	Empaque
MSC9746	4 x 6" (10.2 x 15.2 cm), 2 x 3" (5.1 x 7.6 cm) Pad	A6254	10/bx, 10 bx/cs
MSC9748	10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.), Compresa de 5.1 x 15.2 cm (2 x 6 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MMSC97410	10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.), Compresa de 5.1 x 20.3 cm (2 x 8 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC97412	10.2 x 30.5 cm (4 x 12 pulg.), Compresa de 5.1 x 25.4 cm (2 x 10 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC97414	4 x 14" (10.2 x 35.6 cm), 2 x 12" (5.1 x 30.5 cm) Pad	A6255	10/bx, 10 bx/cs



OPTIFOAM Ag+ POST-OP

Ideal para el manejo de la contaminación bacteriana en heridas postoperatorias. Borde acrílico.

N.º del artículo	Descripción	HCPSCS	Empaque
MSC9636	8.9 x 15.2 cm (3.5 x 6 pulg.), Compresa de 3.8 x 10.2 cm (1.5 x 4 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC96310	8.9 x 25.4 cm (3.5 x 10 pulg.), Compresa de 3.8 x 20.3 cm (1.5 x 8 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC96314	8.9 x 35.6 cm (3.5 x 14 pulg.), Compresa de 3.8 x 30.5 cm (1.5 x 12 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón



SILVASORB®

Apósitos de hidrogel antimicrobianos

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Heridas con exudado de leve a moderado
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Stratasorb® Composite
- » Bordered Gauze
- » Optifoam® Gentle

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Úlceras de pie diabético
- » Zonas donantes y heridas de injerto
- » Desgarros de la piel
- » Heridas quirúrgicas
- » Laceraciones y abrasiones
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » El gel amorfo puede dejarse en su sitio hasta 3 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Personas con sensibilidad confirmada a la plata




ACERCA DE SILVASORB

- » Ayuda a manejar la contaminación bacteriana^{1,2}
- » Plata iónica
- » Protección antimicrobiana continua^{1,3}
- » No mancha¹
- » Suave para el paciente^{4,5}
- » Manejo avanzado de los fluidos¹
- » Tiempo de uso prolongado^{3,6,7}

Clinical Highlight

CURVA DE SUPERVIVENCIA CON SILVASORB¹

SilvaSorb posee una potente actividad antimicrobiana (*in vitro*): produce una reducción logarítmica de 6 a 8 en cuestión de 4 horas.

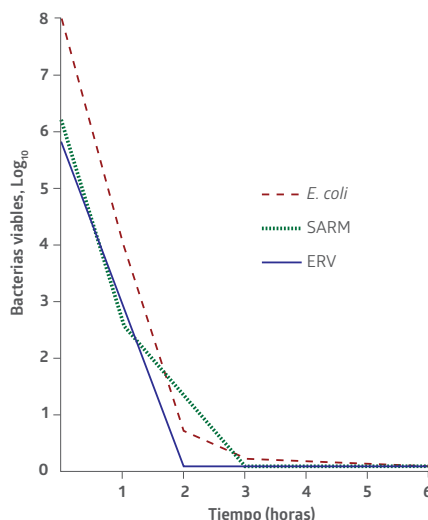

Referencias bibliográficas

1. Datos archivados 2. Castellano JJ, Shafil SM, Ko F, Donate G, Wright TE, Mannari RJ, Payne WG, Smith DJ, Robson MC. Comparative evaluation of silver containing antimicrobial dressings and drugs. *Int Wound Journal*. 4: 114-122. 3. Nametka M. Silver antimicrobial hydrophilic dressing benefits management of recurrent non-healing wounds. Symposium on Advanced Wound Care. Baltimore, EE. UU. 2002. 4. Copty T, Kiran R, Glat P. Assessing the risk of skin irritation with the use of a silver based site dressing on pediatric patients. Symposium on Advanced Skin and Wound Care. Orlando, FL EE. UU. 2007. 5. Nametka M. Antimicrobial silver polymer contact layer for treatment of venous leg ulcers. Symposium on Advanced Wound Care. Las Vegas, EE. UU. 2001. 6. Nametka M. A hydrophilic silver antimicrobial wound dressing for site preparation and maintenance of human skin equivalent grafts to venous leg ulcers: Technical and clinical considerations. Clinical Symposium on Advances in Skin & Wound Care, Nashville, EE. UU. 2000. 7. Nametka M. Silver antimicrobial absorbent wound dressing can contribute to cost control in home care. Annual Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care. Dallas, EE. UU. 2002. 8. Patente estadounidense 6,605,751

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

SILVASORB GEL

Para heridas con exudado leve que requieren una barrera antimicrobiana.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC93025EP	Tubo de 0.25 onzas	A6248	25/caja
MSC9301EP	Tubo de 1.5 onzas	A6248	12/caja
MSC9303EP	Tubo de 3 onzas	A6250	12/caja
MSC9308EP	Tubo de 8 onzas	A6248	6/caja
MSC9316EP	Frasco de 16 onzas (peso neto)	A6248	6/caja

Para hacer pedidos unitarios, agregue una "H" al final de cada número del artículo.



SILVASORB SITE

Apósito con plata antimicrobiana para el sitio de la herida

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC9310EP	Redondel de 2.5 cm (1 in) con abertura	A6242	30/cartón

Para hacer pedidos unitarios, agregue una "H" al final de cada número del artículo.



SILVASORB SHEET

Apósito en lámina de hidrogel con plata antimicrobiana

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC9344EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 in)	A6243	25/cartón

Para hacer pedidos unitarios, agregue una "H" al final de cada número del artículo.



Aspecto clínico destacado

Estudio de caso de úlcera por presión

Un varón de 93 años de edad en silla de ruedas sin déficit nutricional significativo desarrolló una úlcera por presión trocantérica crónica. La úlcera se trató con diversas terapias de cuidado de heridas durante cuatro meses sin éxito. El lecho de la herida era friable y, por lo tanto, presumía una alta biocarga. Se decidió iniciar un proceso de curación con un apósito antimicrobiano junto con la descarga de la cadera afectada. La cicatrización se logró en un plazo de cuatro semanas.



Antes



Después de 4 semanas

Fuente: Mary Nametka, RN, MSN, CS, CWS, CWCN, Adventist Medical Center, Portland OR, Study Site Avamere LTC Facility, Portland OR. Presentado en el Annual Symposium on Advanced Wound Care, el 27-29 de abril de 2002

Ag+ POWDER

Polvo antimicrobiano

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Heridas con exudado de leve a abundante
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Stratasorb® Composite
- » Bordered Gauze

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Úlceras de pie diabético²
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Tratamiento de heridas con presión negativa
- » Heridas injertadas
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Arglaes Powder puede dejarse en su sitio hasta 5 días
- » La frecuencia de cambios del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Pacientes con sensibilidad confirmada a la plata
- » Como implante quirúrgico
- » No deben emplearse antibióticos tópicos junto con Arglaes



ACERCA DE ARGLAES POWDER

- » Maneja la contaminación bacteriana¹
- » Protección antimicrobiana continua¹
- » Tiempo de uso prolongado¹
- » No mancha
- » Puede aplicarse sobre otros apósitos para facilitar la reducción microbiana

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por botella, agregue una "H" al final del número del artículo.




ARGLAES POWDER

Ideal para heridas difíciles de vendar.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9202	Botella de 2 g	A6262	5/caja, 4 cajas/cartón
MSC9205	Botella de 5 g	A6262	5/caja, 4 cajas/cartón
MSC9210	Botella de 10 g	A6262	5/caja, 4 cajas/cartón



LIBERACIÓN SOSTENIDA³

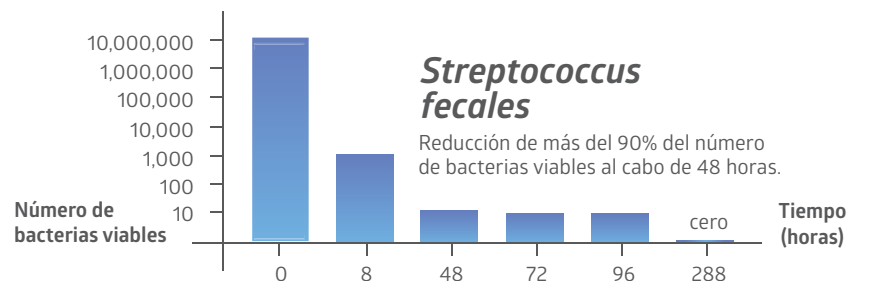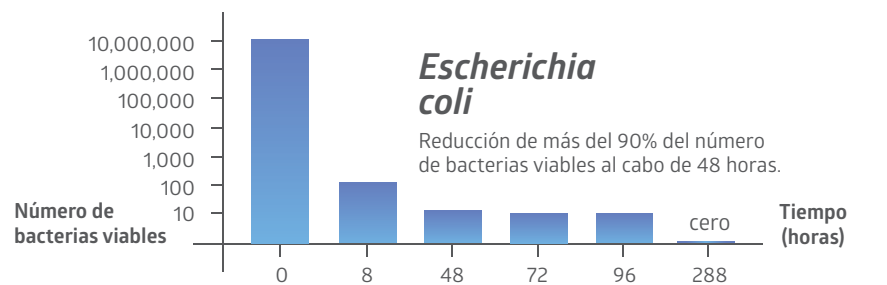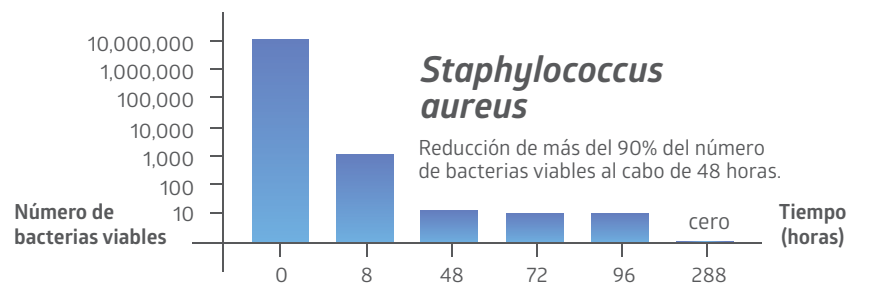

Potente actividad antimicrobiana: reducción logarítmica de hasta 6 (estudios *in vitro*)

Estudio independiente realizado por Wickham Laboratories Limited, Hampshire, Inglaterra.

Referencias bibliográficas

1. Informe interno archivado. 2. LaJoie J. Improving diabetic foot ulcer outcomes with hyperbaric oxygen and ionic silver powder. Presentado en SAWC. San Diego, CA EE. UU. 2005. 3. Estudio independiente realizado por Wickham Laboratories Limited, Hampshire, Inglaterra.

M

MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO DE LA HUMEDAD

Lograr un equilibrio perfecto de la humedad no es cosa fácil: en exceso puede ocasionar maceración perilesional y desintegración de la piel, pero en cantidades insuficientes puede impedir las actividades celulares y promover la formación de escaras, con consecuentes deficiencias en el proceso de curación de la herida.

PRODUCTOS ABSORBENTES Y
HUMECTANTES QUE AYUDAN A
ASEGURAR UN ÓPTIMO ENTORNO PARA
LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS.



Adentro encontrará...


Optifoam® Gentle	34
Optifoam®	38
Opticell®	40
Qwick™	42
Optilock®	44
Maxorb®	46
Exuderm®	48
Apósitos de hidrogel	50

OPTIFOAM® GENTLE

Apósitos de espuma absorbente con adhesivo siliconizado

OPTE POR LA SUAVIDAD.

Optifoam Gentle ayuda a reducir el dolor y los traumatismos asociados a los cambios de apósitos. Diseñado con un adhesivo de silicona de formulación especial que ayuda a mantenerlo en su sitio, el apósito de espuma absorbente Optifoam retiene los fluidos, protege contra las infecciones y ayuda a prevenir el cizallamiento y la fricción.

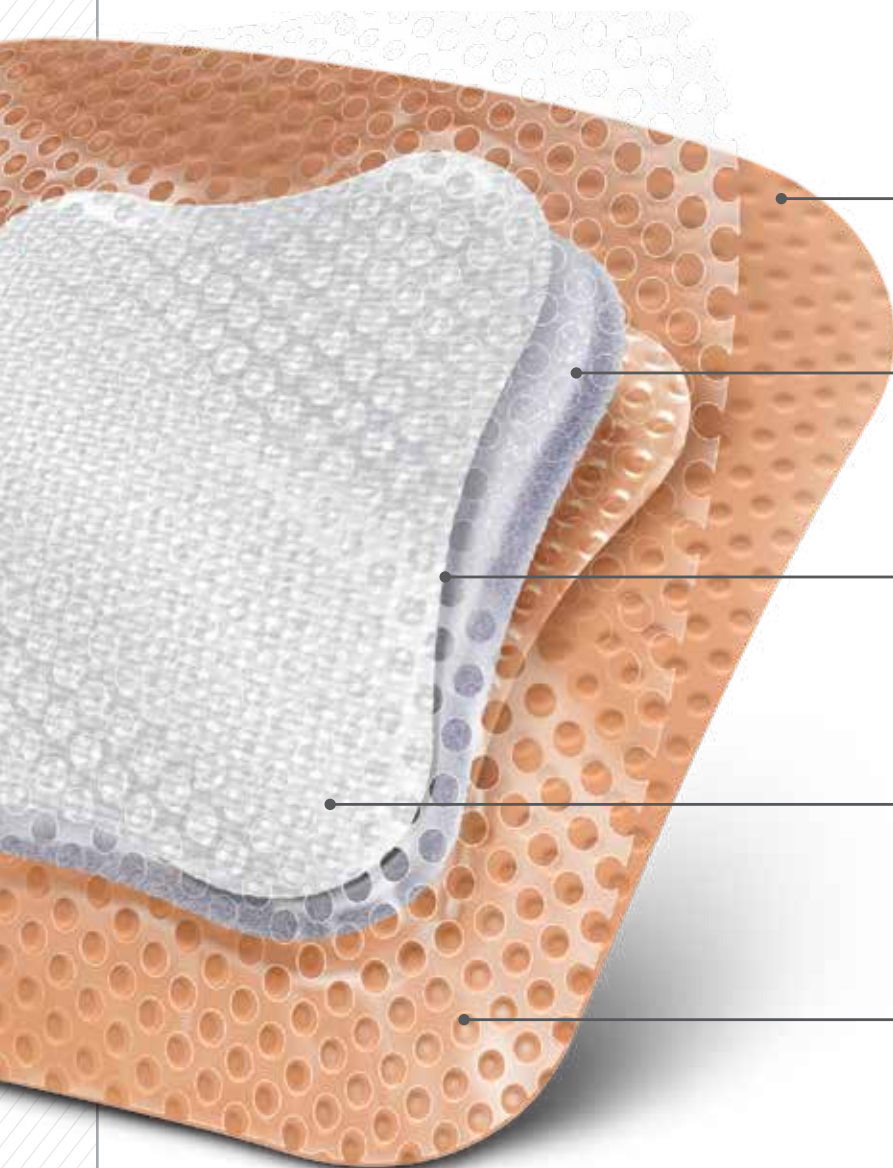

Película muy transpirable que actúa como barrera antibacteriana impermeable y segura.

La capa superabsorbente absorbe y retiene el exudado en el apósito, lo que minimiza el riesgo de maceración.

La capa de transferencia situada entre la capa de espuma disipadora y la capa superabsorbente garantiza que el exudado se transfiera a la capa superabsorbente de la manera más eficiente posible.

La capa de espuma inicia la absorción vertical del exudado para alejarlo del lecho de la herida y dirigirlo hacia las capas de transferencia y superabsorbencia. De esa manera, se reduce la acumulación del exudado en la superficie de la herida.

El adhesivo de silicona minimiza los traumatismos a la herida y reduce el dolor por desgaste o al quitarlo.



ABSORBENCIA Y RETENCIÓN

Moderada
Fuerte
Extrafuerte

UBICACIÓN DE LA SILICONA

Cara
Borde
Cara y borde

PERSONALIZABLE

Corte a la medida
Capacidad de
amoldamiento

ANTIMICROBIANO

FORMA

Sacra
Cuadrado
Rectángulo

**MÁS
OPCIONES.
MÁS SUAVIDAD
EN EL CUIDADO.**

LOS APÓSITOS DE ESPUMA AYUDAN A REDUCIR LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN HOSPITALARIAS.

Los estudios de evaluación del uso de un apósito de espuma con borde en silicona en pacientes con riesgo de formación de úlceras por presión hospitalarias demostraron una considerable reducción de dichas úlceras en un plazo de 3 meses, con menor incidencia mensual y mejor prevención¹.

1. Fuente: Butcher M., Thompson G. Can the use of dressing materials actually prevent pressure ulcers; presenting the evidence. Wounds UK. 2010; 6(1): 119-125.

OPTIFOAM® GENTLE

Apósitos de espuma

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Heridas con cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario o secundario

*Puede usarse como apósito secundario para heridas profundas

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS†

- » Cinta adhesiva Gentac
- » Red elástica
- » Venda tubular Medigrip

†Corresponde únicamente a la espuma con cara en silicona Optifoam



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Optifoam Gentle puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA, CON NÚCLEO LIQUITRAP™

El núcleo Liquitrap superabsorbente atrae y retiene grandes cantidades del exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC2333EP	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.), Compresa de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2344EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2366EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2377EP	Sacro: 17.8 x 17.8 cm (7 x 7 pulg.)	A6213	5/caja, 8 cajas/cartón
MSC2399EP	Sacro: 22.8 x 22.8 cm (9 x 9 pulg.)	A6213	5/caja, 5 cajas/cartón

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

ACERCA DE OPTIFOAM GENTLE

- » Adhesivo siliconizado que se adhiere suavemente
- » Apósito con alta capacidad de amoldamiento¹ que puede quitarse y reaplicarse
- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » Gran capacidad de absorción¹
- » Ayuda a crear un entorno ideal para la curación
- » La capa exterior impermeable protege la herida e impide el paso de las bacterias
- » Capa exterior de bajo cizallamiento y fricción



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

APÓSITO DE ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA

El núcleo superabsorbente absorbe el exudado y mejora el control de los fluidos.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC2133EP	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.), Compresa de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2144EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2166EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2177EP	Sacro: 17.8 x 17.8 cm (7 x 7 pulg.)	A6213	5/caja, 8 cajas/cartón
MSC2199EP	Sacro: 22.8 x 22.8 cm (9 x 9 pulg.)	A6213	5/caja, 5 cajas/cartón



APÓSITO DE ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA LIGERO

Espuma delgada, amoldable.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC28162B	4.0 x 5.0 cm (1.6 x 2 pulg.), Compresa de 2.0 x 3.0 cm (0.8 x 1.2 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2833B	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.), Compresa de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2844B	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2866B	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM GENTLE POST-OP

Silicone faced and bordered post operative foam dressing with superabsorbent core and flexible design.

Item No.	Description	HCPCS	Pkg.
MSC2148	4 x 8" (10.2 x 20.3 cm) 2 x 6" (5.1 x 15.2 cm) Pad	A6254	10/bx, 10 bx/cs
MSC21410	4 x 10" (10.2 x 25.4 cm) 2 x 8" (5.1 x 20.3 cm) Pad	A6254	10/bx, 10 bx/cs
MSC21412	4 x 12" (10.2 x 30.5 cm) 2 x 10" (5.1 x 25.4 cm) Pad	A6255	10/bx, 10 bx/cs



APÓSITO DE ESPUMA CON CARA EN SILICONA SIN BORDE

Espuma absorbente suave y amoldable que puede recortarse a la medida.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC2244EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2266EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2288EP	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.)	A6211	5/caja, 5 cajas/cartón



APÓSITO DE ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA LIGERO SIN BORDE

Espuma amoldable flexible que puede recortarse a la medida.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC2944NB	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2966NB	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM®

Apósitos de espuma

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Exudado de leve a moderado
- » Como apósito primario o secundario

*Como apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS**

- » Cinta adhesiva Medfix™
- » Cinta adhesiva Gentac™
- » Venda tubular Medigrip™

**Únicamente se aplica a Optifoam Non-Adhesive, Optifoam Basic y Optifoam Heel



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado


CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa

ACERCA DE OPTIFOAM

- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » Absorbente
- » Ayuda a crear un entorno ideal para la curación
- » La capa exterior impermeable protege la herida e impide el paso de las bacterias (salvo Optifoam Basic)
- » Optifoam Heel está diseñado específicamente para utilizarse en el talón


COEFICIENTE DE FRICCIÓN DEL REFUERZO DE PELÍCULA¹

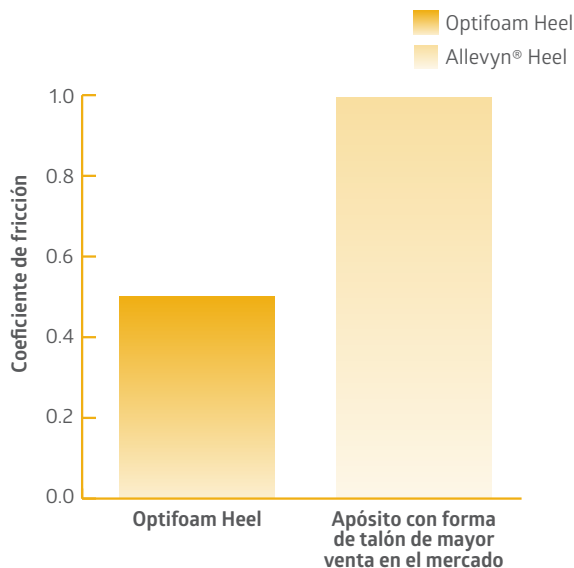

Optifoam Heel produce un 50% menos de fricción que el apósito con forma de talón de mayor venta en el mercado.

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN BAJO COMPRESIÓN¹

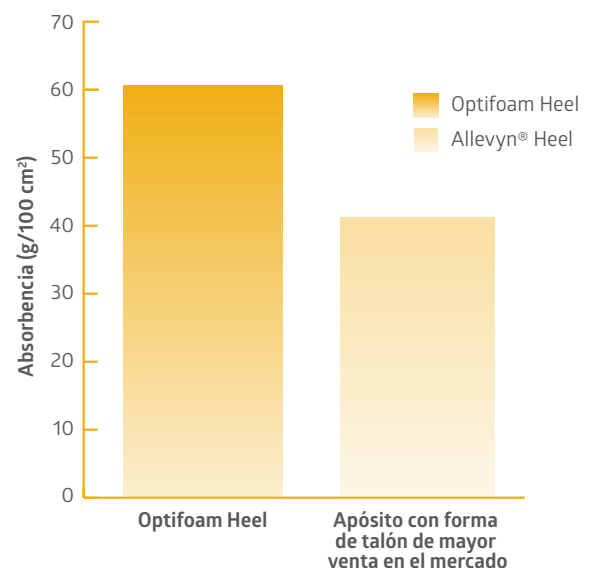

Optifoam Heel absorbe un 44% más bajo compresión que el apósito con forma de talón de mayor venta en el mercado.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM ADHESIVE

Apósito todo-en-uno para el manejo de fluidos.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1044EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1066EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1065EP	Sacro: 15.5 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM NON-ADHESIVE

Apósito versátil para una diversidad de aplicaciones.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1244EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1266EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM HEEL

Diseñado para heridas en el talón.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1200EP	Con forma de talón	A6210	5/caja, 8 cajas/cartón



OPTIFOAM BASIC

Para heridas generales o cuidados de zonas de intubación, sin refuerzo impermeable.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1133	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1133F	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.) con fenestración	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1145	10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM SITE

Diseñado específicamente para zonas de intubación; cuenta con una abertura radial y con forma estrellada.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1104	Apósito con adhesivo de 10.2 cm (4 pulg.), compresa de 5.1 cm (2 pulg.)	A6212	30/bolsa, 4 bolsas/cartón
MSC1102	Compresa sin adhesivo de 5.1 cm (2 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM THIN

Alta capacidad de amoldamiento que aumenta la comodidad del paciente.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1523EP	5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1544EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón



OPTICELL®

Fibra gelificante con quitosano

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » Bordered Gauze
- » Stratasorb® Composite

INDICACIONES

- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras por insuficiencia venosa
- » Lesiones por presión
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Úlceras de pie diabético
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas por traumatismos
- » Zonas donantes
- » Úlceras arteriales y úlceras en la pierna de origen mixto
- » Heridas oncológicas

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Opticell® puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » Opticell puede dejarse en su sitio hasta 14 días en el contexto del tratamiento de quemaduras
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas sensibles al quitosano, que se obtiene de los mariscos



ACERCA DE OPTICELL

- » Tecnología de fibra gelificante Chytoform™
- » Alta capacidad de amoldamiento
- » Versátil: puede usarse con cualquier nivel de exudado
- » Tres veces más resistente que el Aquacel convencional¹
- » El fluido no se difunde en sentido lateral, lo cual reduce la maceración
- » Gran capacidad de absorción¹
- » Mantiene un entorno húmedo para la curación de la herida
- » Memoria de superficie corporal (MSC): conserva su tamaño
- » Se quita suavemente de la herida
- » Controla hemorragias menores
- » Diseñado para reducir al mínimo el dolor al quitarse



Tecnología de fibra gelificante con quitosano

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

LÁMINAS DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL

Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7822EP	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6196	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC7844EP	10.8 x 10.8 cm (4.25 x 4.25 pulg.)	A6197	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC7866EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6197	5/caja, 10 cajas/cartón




CUERDA DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL

Ideal para rellenar heridas con cualquier nivel de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7818R	1.9 x 45.7 cm (0.75 x 18 pulg.)	A6199	5/caja, 10 cajas/cartón




RESULTADOS DE MEMORIA DE SUPERFICIE CORPORAL (MSC)¹

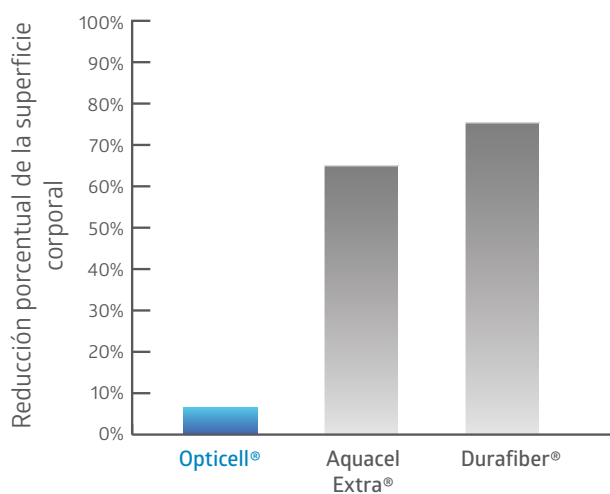

Conserva su forma y tamaño para mantener cubierta toda la herida¹.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ABSORCIÓN¹

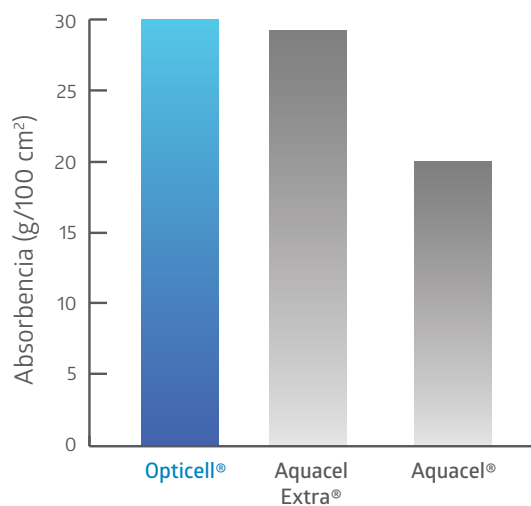

Opticell ofrece las mejores capacidades de absorción de su clase¹.

Referencias bibliográficas

1. Datos de pruebas de laboratorio archivados.

QWICK™

Apósitos superabsorbentes

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Exudado de moderado a abundante
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Bordered Gauze
- » Optifoam Gentle
- » Red elástica

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Laceraciones y abrasiones
- » Heridas bajo compresión

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Qwick puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado



ACERCA DE QWICK

- » Su diseño de múltiples capas aleja y retiene el fluido para proteger la piel contra la maceración
- » Puede recortarse a la medida
- » Flexible
- » Superabsorbente
- » Atrae los fluidos por acción capilar
- » Con tecnología Aquaconductive™

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

APÓSITO SUPERABSORBENTE QWICK AQUACONDUCTIVE™


Con tecnología Aquaconductive™.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC5822	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6196	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC5844	10.8 x 10.2 cm (4.25 x 4 pulg.)	A6197	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC5868	15.56 x 20.321 cm (6.125 x 8 pulg.)	A6198	10/caja, 5 cajas/cartón



La tecnología Aquaconductive

La tecnología Aquaconductive es un mecanismo mediante el cual las tres capas del apósito Qwick para heridas atraen el exudado para sacarlo o alejarlo de la herida, y así crear un entorno óptimo y húmedo de curación de la herida.

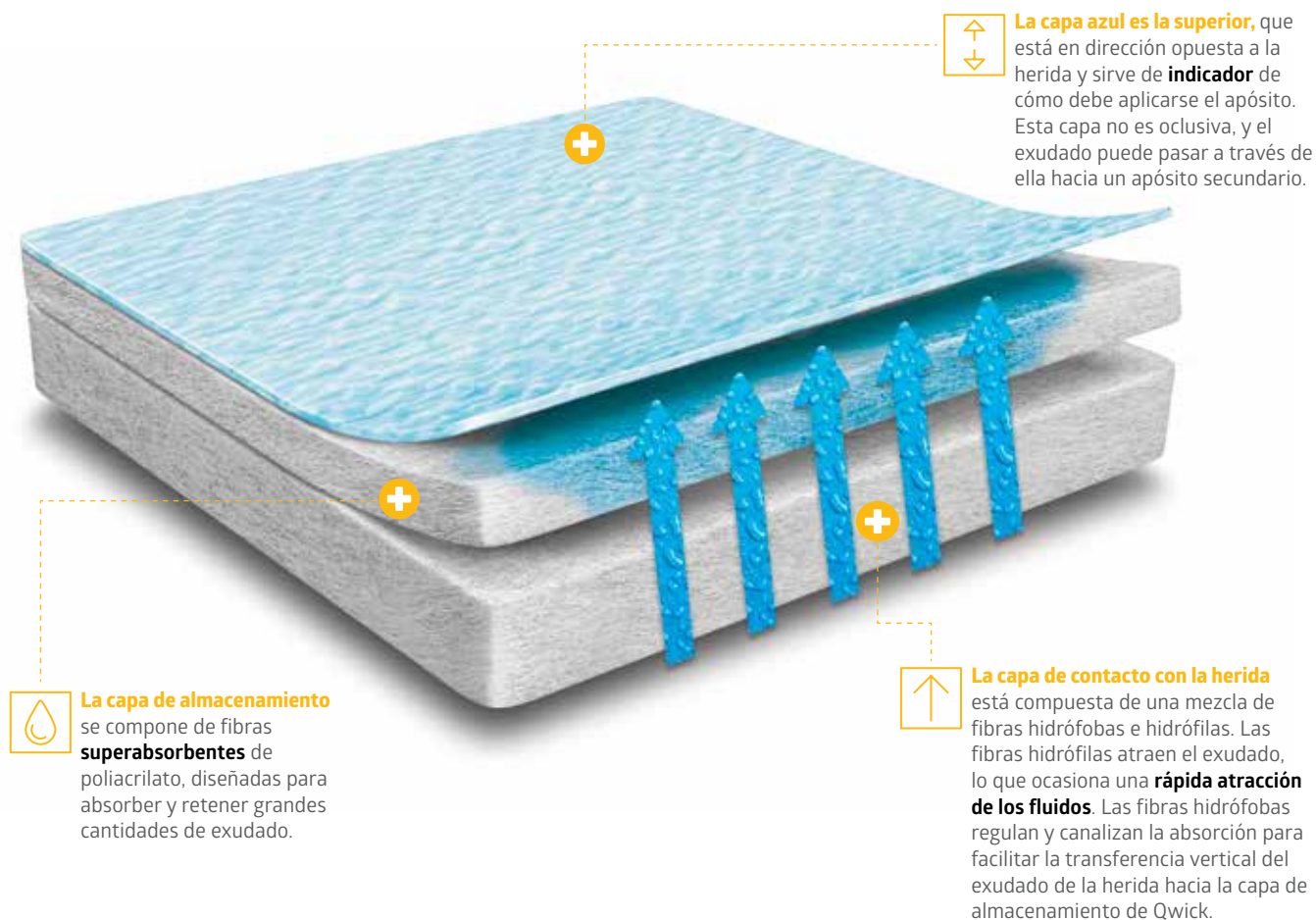

OPTILOCK®

Apósitos superabsorbentes

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Exudado de moderado a abundante
- » Como apósito primario

*Como apósito secundario para heridas profundas

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Cinta adhesiva Medfix™
- » Red elástica
- » Cinta adhesiva Gentac®

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Laceraciones y abrasiones
- » Heridas bajo compresión

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » OptiLock puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas con sensibilidad confirmada al producto en sí o a sus componentes



ACERCA DE OPTILOCK

- » Núcleo polimérico superabsorbente
- » Atrapa el exudado bajo compresión
- » Ajusta la absorción a la cantidad de exudado
- » Protege la piel contra la maceración
- » La capa de contacto no se adhiere a la herida

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTILOCK SUPERABSORBENT DRESSING

No adherente y superabsorbente.


N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC6433EP	7.5 x 7.5 cm (3 x 3 pulg.)	A6196	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC6444EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6196	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC6455EP	12.7 x 14 cm (5 x 5.5 pulg.)	A6197	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC64610EP	16.5 x 25.4 cm (6.5 x 10 pulg.)	A6198	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC64812EP	20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.)	A6198	10/caja, 8 cajas/cartón



OptiLock absorbe y retiene más fluido


En pruebas de laboratorio del fabricante, el rendimiento de los apósitos OptiLock de Medline superó al de un apósito de espuma con capa de contacto de silicona de mayor venta en el mercado. Las extraordinarias capacidades de absorción y retención de fluido de OptiLock elevan las expectativas en cuanto al cuidado suave de heridas.

Capacidad de absorción bajo compresión¹

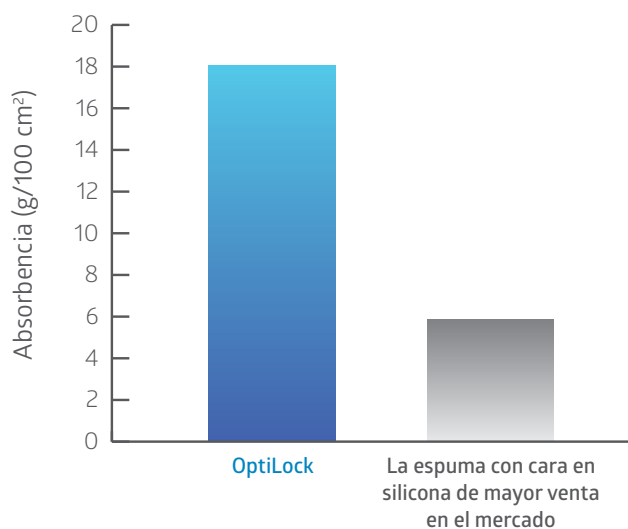

OptiLock absorbe alrededor de tres veces más fluido que un apósito de espuma con cara en silicona de mayor venta en el mercado.

Pérdida de fluido bajo compresión¹

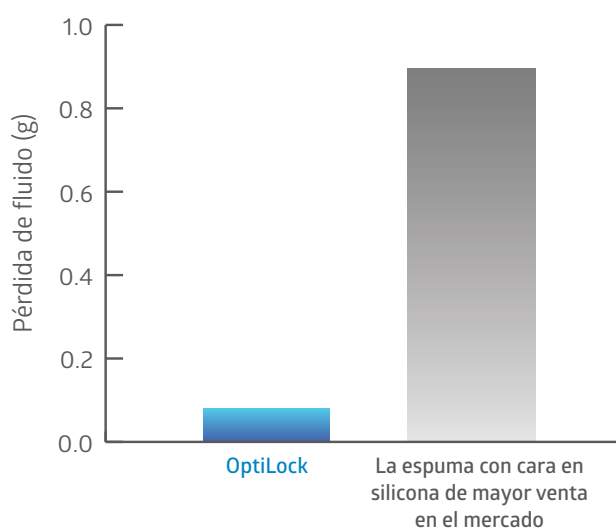

Los apósitos OptiLock retienen mucho más fluido bajo compresión que un apósito de espuma con capa de contacto de silicona de mayor venta en el mercado.

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

MAXORB®

Alginatos

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Exudado de moderado a abundante
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » Bordered Gauze
- » Stratasorb® Composite

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Úlceras diabéticas
- » Heridas quirúrgicas
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Personas con sensibilidad confirmada a los alginatos
- » Quemaduras de tercer grado
- » Para controlar hemorragias profusas
- » Como esponja quirúrgica
- » Heridas secas o con exudado ligero




ACERCA DE MAXORB

- » Maxorb es un apósito de alginato al 100%
- » Maxorb Extra es una mezcla de fibras de CMC y alginato
- » Maxorb ES está reforzado para facilitar su retiro de heridas con tunelizaciones
- » Excelente manejo de fluidos¹
- » Alta resistencia a la rotura cuando está húmedo: se quita en una pieza
- » El fluido no se difunde en sentido lateral
- » Capacidad gelificante mejorada

Aspecto clínico destacado

Comparación de absorbencia con Maxorb II¹

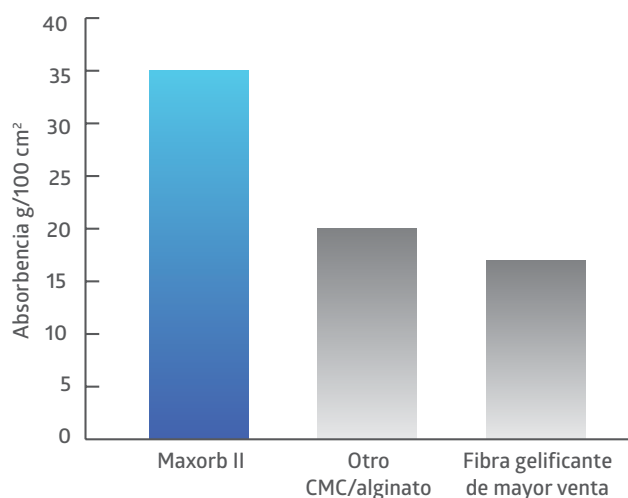

Referencias bibliográficas: 1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

MAXORB® II (100% ALGINATO) SHEET

Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7322EP	5 x 5 cm (2 x 2 pulg.)	A6196	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC7344EP	10 x 10 cm (4 x 4 pulg.)	A6196	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC7366EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)		5/caja, 10 cajas/cartón
MSC7348EP	10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.)		5/caja, 10 cajas/cartón



MAXORB II (100% ALGINATO) RIBBON

Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7312EP	2.5 x 30.5 cm (1 x 12 pulg.)	A6199	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC7318EP	2.5 x 45.7 cm (1 x 18 pulg.)		10/caja, 5 cajas/cartón



MAXORB ES (CMC/ALGINATO) RIBBON

Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7918EP	1.9 x 45.7 cm (0.75 x 18 pulg.), ES	A6199	5/caja, 10 cajas/cartón



EXUDERM®

Apósitos hidrocoloides

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario

*Como apósito secundario para heridas profundas

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Zonas donantes
- » Heridas con exudado de leve a moderado
- » Laceraciones y abrasiones
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Los apósitos Exuderm pueden dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado




ACERCA DE EXUDERM

- » Maneja el exudado¹
- » Tiempo de uso más prolongado
- » Barrera oclusiva protectora
- » Refuerzo con acabado satinado

Aspecto clínico destacado

Absorción de agua¹

Porcentaje de absorción en 24 horas

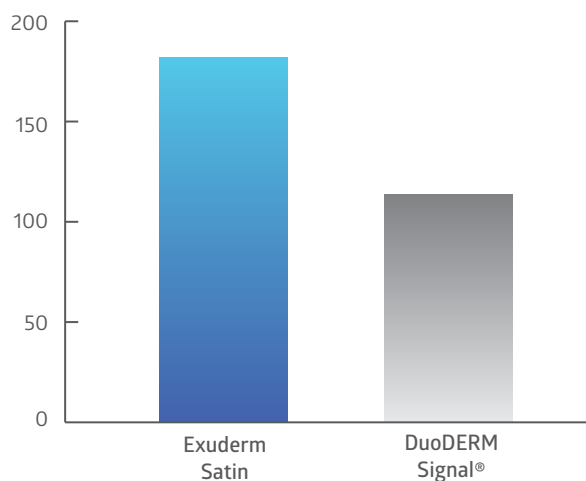

Referencias bibliográficas: 1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

EXUDERM SATIN HYDROCOLLOID

Apósito hidrocoloide para heridas, con refuerzo de acabado satinado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC5422	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6234	20/caja
MSC5444	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6234	10/caja
MSC5466	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6235	5/caja
MSC5488	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.)	A6236	5/caja
MSC5470	Sacro: 10.2 x 9.1 cm (4 x 3.6 pulg.)		10/caja
MSC5475	Sacro: 16.3 x 16.5 cm (6 x 6.5 pulg.)		5/caja

EXUDERM ODORSHIELD® HYDROCOLLOID

Apósito hidrocoloide para heridas con control del olor.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC5522	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6234	10/caja
MSC5544	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6234	10/caja
MSC5566	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6235	5/caja
MSC5588	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.)	A6236	5/caja
MSC5570	Sacro: 10.2 x 9.1 cm (4 x 3.6 pulg.)	A6234	10/caja
MSC5575	Sacro: 16.3 x 16.5 cm (6 x 6.5 pulg.)	A6235	5/caja

EXUDERM LP LOW PROFILE HYDROCOLLOID

Apósito hidrocoloide delgado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC5100	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6234	10/caja
MSC5125	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6235	5/caja

EXUDERM RCD TRADITIONAL HYDROCOLLOID

Apósito hidrocoloide para heridas, con refuerzo de espuma.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC5200	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6234	5/caja
MSC5225	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6235	5/caja



APÓSITOS DE HIDROGEL

Hidrogeles, gasa impregnada de hidrogel y láminas de hidrogel

USOS RECOMENDADOS

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Exudado mínimo o ninguno
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Stratasorb® Composite
- » Bordered Gauze



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Heridas quirúrgicas
- » Laceraciones, abrasiones y desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Skintegrity puede dejarse en su sitio hasta 3 días
- » Derma-Gel puede dejarse en su sitio hasta 5 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Pacientes con sensibilidad confirmada a los componentes del gel
- » Heridas con exudado abundante

ACERCA DE LOS HIDROGELES

- » Hidrata
- » Se enjuaga fácilmente de la herida
- » El envase en forma de fuelle de Skintegrity de 1 onza reduce el desperdicio y facilita la aplicación
- » Hydrogel Impregnated Gauze es una gasa con hidrogel que facilita la aplicación
- » Carrasyn Hydrogel está disponible en botella con rociador de 8 onzas

Prueba de citotoxicidad del Skintegrity Hydrogel¹

Se usó el ensayo Murine L929 Embryo Fibroblasts Agar Overlay Neutral Red

Material de prueba	IDRCC n.º 278 (gel para heridas)	Control negativo	Control positivo
Concentración	100%	N/C	100%
Exposición (tiempo)	21 horas	21 horas	21 horas
Zona de inhibición (mm)	0	0	0
Comentarios/ observaciones (grado y reactividad)	0 / ninguna	0 / ninguna	El disco completo estaba limpio/ células destruidas

Skintegrity Hydrogel no es dañino para el tejido.

Referencias bibliográficas

1. Estudio de toxicidad independiente realizado por Thomas J. Stephens & Associates, Inc. Estudio n.º 93-0070 (AOL).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos unitarios, agregue una "H" al final del número del artículo.

SKINTEGRITY® HYDROGEL

Ideal para heridas limpias con un mínimo de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC6102	Skintegrity®, envase con forma de fuelle: 29.5 ml (1 onza)	A6248	30/caja
MSC6104	Skintegrity, tubo: 118 ml (4 onzas)	A6248	12/caja
CRR101023CS	Carrasyn V® Viscous, tubo: 85 g (3 onzas)	A6248	12/caja
CRR101030	Carrasyn, tubo: 85 g (3 onzas)	N/C	12/caja
CRR101080	Carrasyn, en rociador: 236 ml (8 onzas)	N/C	6/caja
CRR106042	Apósito para heridas RadiaGel, tubo: 85 g (3 onzas)	N/C	12/caja



SKINTEGRITY® HYDROGEL IMPREGNATED GAUZE

Ideal para heridas cavitarias.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC6022	Gasa tejida Skintegrity, 12 láminas: 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6231	1/envase, 50 envases/caja
MSC6044	Gasa tejida Skintegrity, 12 láminas: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6231	1/envase, 30 envases/caja
MSC6144	Gasa tejida Skintegrity, 12 láminas: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6231	2/envase, 30 envases/caja
CRR101015	CarraGauze no tejido, 4 láminas: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	N/C	15/caja, 6 cajas/cartón



Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

DERMA-GEL® HYDROGEL SHEET

Hecho con 65% de glicerina que brinda un efecto refrescante y amortiguador.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
NON8000	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6242	25/caja, 4 cajas/cartón




CARRADRES Y RADIADRES HYDROGEL SHEETS

Contienen 89.5% de agua y 10.5% de óxido de polietileno.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
CRR101052	RadiaDres: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	N/C	10/caja, 6 cajas/cartón
CRR101053	CarraDres: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	N/C	10/caja, 6 cajas/cartón



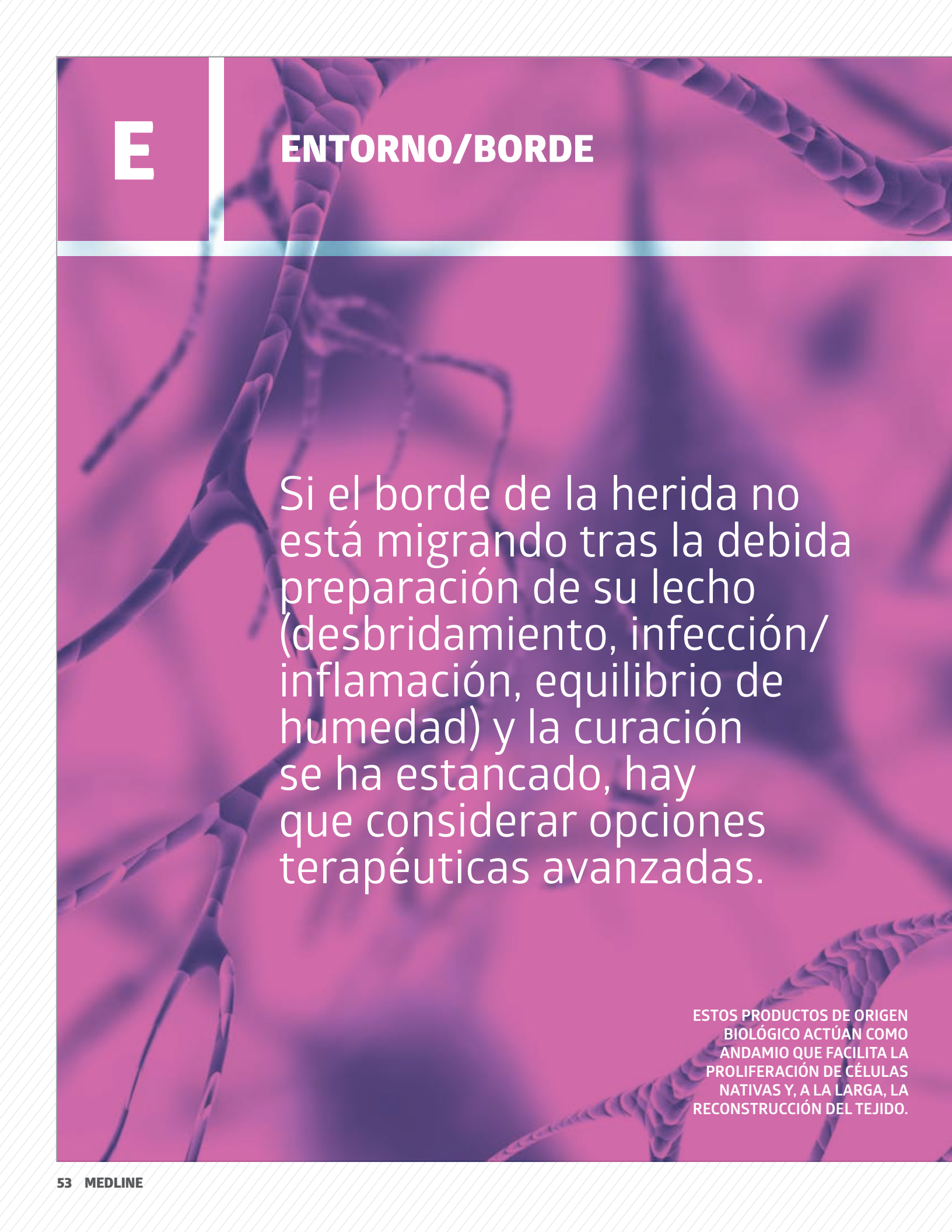

E

ENTORNO/BORDE

Si el borde de la herida no está migrando tras la debida preparación de su lecho (desbridamiento, infección/inflamación, equilibrio de humedad) y la curación se ha estancado, hay que considerar opciones terapéuticas avanzadas.

ESTOS PRODUCTOS DE ORIGEN BIOLÓGICO ACTÚAN COMO ANDAMIO QUE FACILITA LA PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS NATIVAS Y, A LA LARGA, LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO.

Adentro encontrará...

Puracol®

54


PURACOL®

Apósitos de colágeno para heridas

PROMUEVEN LA CICATRIZACIÓN NATURAL EN HERIDAS ESTANCADAS.


Nuestros apósitos Puracol para heridas promueven la cicatrización natural con colágeno 100% nativo de tipo I. Nuestra exclusiva tecnología de delicada fabricación preserva la estructura natural del colágeno creando una mayor área de superficie en contacto con el sitio de la herida.

VISTA MICROSCÓPICA*

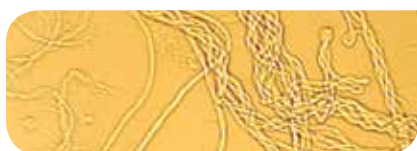


La superestructura intacta ofrece pruebas contundentes de que se mantiene la conformación nativa de triple hélice del colágeno.

PURACOL PLUS MICROSCAFFOLD™¹

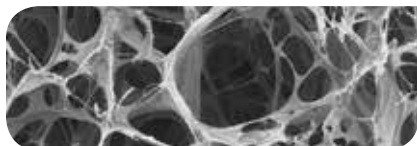

La estructura porosa abierta aumenta el área de superficie interna para maximizar la interacción con los fluidos de la herida.

MEDIDA DE LA CONFORMACIÓN NATIVA DEL COLÁGENO PURACOL PLUS

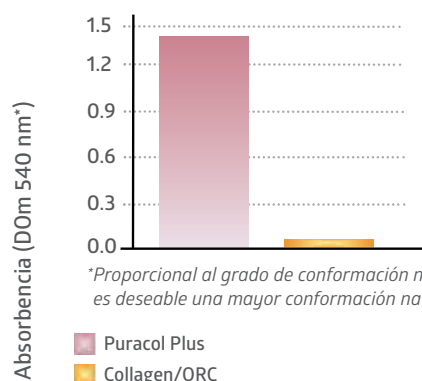


*Proporcional al grado de conformación nativa; es deseable una mayor conformación nativa^{2,4}.

■ Puracol Plus
■ Collagen/ORC

PROTEÍNAS DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

Puracol Ultra ECM presenta el andamio más sofisticado hasta ahora

Esta robusta matriz biológica, derivada de la membrana peritoneal porcina, consiste principalmente en colágeno de tipo I con proteínas de matriz extracelular (ECM) adicionales. Se descelulariza, irradia con rayos gamma y liofiliza para producir un producto estable al almacenamiento que proporciona un entorno para el manejo de heridas.

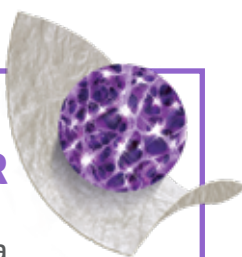

BIEN ESTABLECIDO. BIEN DOCUMENTADO.

El colágeno es la principal proteína estructural que soporta las células y los tejidos del cuerpo humano. Debido a esto, el colágeno es la proteína más abundante que se encuentra en humanos y mamíferos. Por lo tanto, no es raro ver el colágeno utilizado en diversos campos médicos, incluido el cuidado de heridas. Sin embargo, no todos los apósitos de colágeno para heridas disponibles en el mercado son iguales.

Nuestra exclusiva tecnología de delicada fabricación de apósitos Puracol para heridas hechos de colágeno 100% nativo, preserva la estructura de triple hélice natural del colágeno para promover la cicatrización. Al mantener la integridad del colágeno nativo, Puracol puede ayudar en la regulación de la proteasa de amplio espectro y actuar como un microandamio (MicroScaffold) tridimensional para que las propias células del cuerpo puedan vivir, prosperar y reconstruir el tejido.



ESTUDIO CLÍNICO

Evaluación de un colágeno bovino 100% nativo para el tratamiento de heridas crónicas¹

Después de tratar las heridas con un colágeno de tipo I, 100% nativo de origen bovino, el 83% logró el cierre de la herida en 90 días. (15 de 18 pacientes)¹

1. Shah SS, Chakravarthy D. Evaluation of a bovine 100% native collagen for the treatment of chronic wounds. J Wound Ostomy Continence Nursing. 2015;42(3):226-234.

PURACOL®

Apósitos de colágeno

RECOMENDADO EN HERIDAS CON CONDICIÓN

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » Stratasorb® Composite
- » Bordered Gauze
- » Optifoam® Adhesive

INDICACIONES

- » Úlceras por presión, venosas, diabéticas
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras causadas por vasculopatías de origen mixto
- » Zonas donantes y otras heridas superficiales
- » Abrasiones
- » Curación de heridas traumáticas por segunda intención
- » Heridas quirúrgicas dehiscentes

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Puracol Plus y Puracol Plus Ag+ pueden dejarse en su sitio hasta 7 días o cambiarse a criterio de un profesional de la salud.
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Vasculitis activa o pacientes con sensibilidad confirmada al colágeno
- » Puracol Plus Ag+ únicamente: pacientes con sensibilidad confirmada a la plata
- » Quemaduras de tercer grado

Aspecto clínico destacado

Reducción de las concentraciones bacterianas con Puracol Plus Ag+

Organismo de prueba	Reducción logarítmica con Puracol Plus Ag+
<i>Staphylococcus aureus</i> (SARM)	5.20
<i>Enterobacter cloacae</i>	5.08
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5.18
<i>Enterococcus faecalis</i> (ERV)	5.11
<i>Escherichia coli</i>	5.20
<i>Staphylococcus epidermidis</i> (negativo a la coagulasa)	5.08

Se observó una reducción logarítmica de las concentraciones bacterianas (*in vitro*) en las pruebas de grandes poblaciones de microorganismos selectos, incluso SARM, que entraron en contacto con el apósito Puracol Plus Ag+. (Método: AATCC-100)



ACERCA DE PURACOL PLUS

- » 100% colágeno con un alto grado de conformación nativa^{1,2}
- » Gel de alta integridad³
- » Ayuda a formar un entorno natural que facilita la curación de la herida
- » Biodegradable
- » Se puede usar junto con un tratamiento de heridas con presión negativa⁴

ACERCA DE PURACOL ULTRA POWDER

- » Mantiene un alto grado de conformación nativa
- » Aumenta el área de superficie en contacto con el sitio de la herida
- » Se adapta a sitios de heridas de forma irregular

ACERCA DE PURACOL PLUS Ag+

Además de todas las ventajas de Puracol Plus:

- » La plata iónica actúa como barrera antimicrobiana^{5,6}
- » No mancha

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

NUEVO

PURACOL ULTRA ECM

Colágeno 100% nativo y otras importantes proteínas de la matriz extracelular

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC8822EP	Lámina de 5 x 5 cm (2 x 2 in)	A6021	10/caja
MSC8845EP	Lámina de 10 x 12 cm (4 x 5 in)	A6022	10/caja
MSC8822F	Lámina fenestrada de 5 x 5 cm (2 x 2 in)	A6021	10/caja
MSC8845F	Lámina fenestrada de 10 x 12 cm (4 x 5 in)	A6022	10/caja



PURACOL ULTRA POWDER

Colágeno 100% nativo en polvo

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC8801EP	Bolsa de 1 g	A6010	10/caja, 10 cajas/cartón



COLÁGENO PURACOL PLUS

Colágeno 100% nativo

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC8622EP	5.1 x 5.7 cm (2 x 2.25 in)	A6021	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8622EPF	Lámina fenestrada de 5.1 x 5.7 cm (2 x 2.25 in)	N/C	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8644EP	10.8 x 11.4 cm (4.2 x 4.5 in)	A6022	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8644EPF	Lámina fenestrada de 10.8 x 11.4 cm (4.2 x 4.5 in)	N/C	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC861X8EP	Cordón de 2.5 x 20.3 cm (1 x 8 in)	A6021	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8588	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in)	N/C	10/caja, 5 cajas/cartón



COLÁGENO PURACOL PLUS AG+

Colágeno 100% nativo con plata antimicrobiana

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
MSC8722EP	5.1 x 5.7 cm (2 x 2.25 in)	A6021	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8722EPF	Lámina fenestrada de 5.1 x 5.7 cm (2 x 2.25 in)	A6021	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8744EP	10.8 x 11.4 cm (4.2 x 4.5 in)	A6022	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8744EPF	Lámina fenestrada de 10.8 x 11.4 cm (4.2 x 4.5 in)	A6022	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC871X8EP	Cordón de 2.5 x 20.3 cm (1 x 8 in)	A6021	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8488	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in)	A6023	10/caja, 5 cajas/cartón



Referencias bibliográficas

1. Datos archivados. 2. Picrosirius Assay to Determine Relative Nativity of Two Collagenous Dressings. Informe interno. 3. Comparative Physical Properties of Two Collagenous Dressings, Promogran® and Puracol Plus. Datos archivados. 4. Scott, R; Chakravarthy, D. "The use of a 100% native MicroScaffold™ Collagen in conjunction with NPWT therapy". LifeCare Hospitals de Plano; Plano, TX, EE. UU. Presentado en el curso de otoño de SAWC en Baltimore, MD, EE. UU., septiembre de 2012. 5. Sibbald RG et al, Increased bacterial burden and infection, the story of NERDS and STONES, Advances in Skin and Wound Care 19: 447-61, 2006. 6. The antimicrobial benefits of silver and the relevance of Microlattice® technology. Ostomy/Wound Management. 49 (2A), 4-7, 2003.

S

PRODUCTOS DE SOPORTE

Los sistemas de compresión, protectores cutáneos, apósitos de cobertura, cintas y limpiadores de heridas suelen desempeñar una función crítica en el contexto de los cuidados de heridas crónicas.

PRODUCTOS DE COMPRESIÓN QUE
PROMUEVEN UN FLUJO VENOSO
SALUDABLE PARA REDUCIR EL
EDEMA Y FAVORECER LA CURACIÓN.

Adentro encontrará...

Marathon®	60
Sureprep®	64
Fourflex® y Threeflex®	66
Medigrip™	68
Unna-Z® Stretch	70
Versatel® y Versatel One	72
Apósitos de cobertura	74
Cinta de retención de apósitos	76
Limpiadores de heridas	78
NE1®	80

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

NOVEDOSA PROTECCIÓN CUTÁNEA CON TECNOLOGÍA DE CIANOACRILATO

El protector cutáneo de cianoacrilato Marathon que no causa ardor proporciona una barrera resistente y duradera que defiende la piel dañada o íntegra contra la desintegración causada por humedad, fricción, cizallamiento y abrasión por adhesivo.

Este producto se adhiere a la piel a través del proceso de polimerización, convirtiéndose en una adicional capa cutánea que se va despegando conforme ocurre la renovación natural de la epidermis.



**PROTECCIÓN
CUTÁNEA
TRANSPIRABLE**



DURADERA




SIN ARDOR

EVALUADO Y COMPROBADO.

Un estudio independiente en 12 sujetos mayores de 60 años comparó cómo la piel descubierta, la piel con una aplicación de MARATHON y la piel con una aplicación de Cavilon® resistieron a la exposición a un fluido corrosivo (orina sintética).

RESULTADOS:

Las zonas donde se aplicó MARATHON mostraron una mayor resistencia después de cada uno de los cinco ciclos de orina y lavado, en comparación con las áreas donde se aplicó Cavilon o no se aplicó ningún producto.

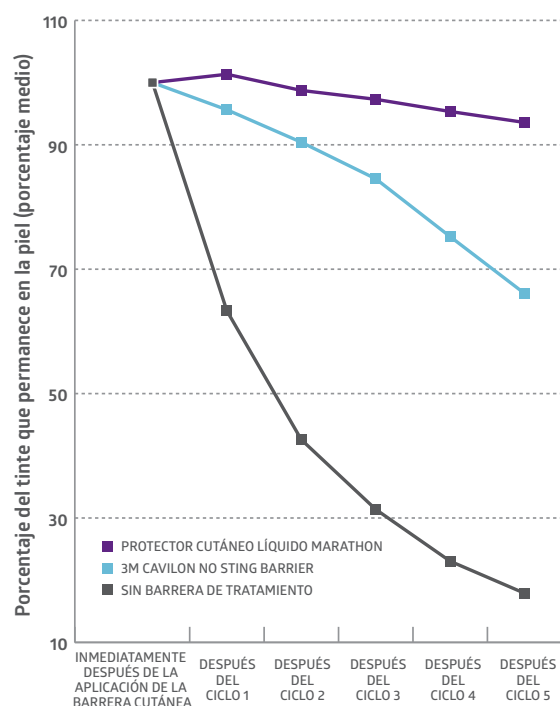

Porcentaje de tinte retenido después de los cinco ciclos de orina y lavado (porcentaje medio)¹

Comparación	Porcentaje
MARATHON	94%
Cavilon	66%
Piel sin tratamiento	18%

Comparación	valor de P
Cavilon vs. MARATHON	< 0.05
Cavilon vs. ningún tratamiento	> 0.05
MARATHON vs. ningún tratamiento	< 0.001



“Hoy fue un día emocionante: Marathon funcionó para una de mis pacientes que usa cinta adhesiva. Ya no tendrá que usar la cinta adhesiva para su ostomía. Marathon se mantiene firme, y ella está muy feliz”.

—Carrie Dean RN, CWCN

1. Study to Compare the Wash-off Resistance of Two Barrier Films Exposed to Synthetic Urine. Datos archivados.

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

USOS RECOMENDADOS

- » Protección contra los daños cutáneos asociados a la humedad
- » Protección contra la fricción y el cizallamiento
- » Protección contra traumatismos causados por adhesivos

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

Protege la piel íntegra o lesionada contra:

- » Fluidos corporales
- » Humedad
- » Fricción y cizallamiento
- » Abrasión por el adhesivo

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Hasta 3 días; reaplicar según la necesidad

CONTRAINDICACIONES

No debe aplicarse directamente en los siguientes casos:

- » Heridas profundas, abiertas, sangrantes o crónicas
- » Quemaduras de segundo o tercer grado
- » Zonas infectadas



ACERCA DE MARATHON

- » Resistente, flexible y duradero
- » No causa ardor: no contiene solventes ni activadores
- » Protege contra los efectos de la fricción
- » Protege la piel contra daños asociados a la humedad causados por orina, exudado, transpiración y otros fluidos corporales
- » Se puede usar tanto en piel íntegra como lesionada
- » Secado rápido
- » Transpirable

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PROTECTOR CUTÁNEO DE CIANOACRILATO MARATHON SIN ARDOR

Para una potente protección de la piel.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC093001	Ampolla de 0.5 g	A6250 (protector) A5120 (preparación de la piel)	5/caja
MSC093005	Ampolla de 0.5 g	A6250 (protector) A5120 (preparación de la piel)	10/caja
MSC093001XL	Ampolla de 1.5 g		5/caja



SUREPREP®

Protector cutáneo

USOS RECOMENDADOS

- » Protección contra fluidos corrosivos
- » Protección contra traumatismos causados por adhesivos

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

Aplíquelo a piel íntegra o lesionada a fin de crear una barrera primaria contra:

- » Fluidos corporales
- » Abrasión por el adhesivo

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Hasta 72 horas o con cada cambio de apósito

CONTRAINDICACIONES


- » En zonas infectadas de la piel
- » Cerca de los ojos
- » Como único material de recubrimiento en situaciones que requieren la protección adicional de un apósito contra la contaminación/penetración bacteriana, p. ej. accesos de catéter de tratamiento intravenoso y heridas de espesor total o parcial



ACERCA DE SUREPREP

- » Protege contra la abrasión por el adhesivo^{1,2}
- » Apto para piel delicada³
- » Su rendimiento superó al de 3M Cavilon® en un estudio controlado⁴
- » Secado rápido⁵
- » Permeable al vapor
- » Crea una barrera impermeable sobre la piel perilesional
- » Protección contra la fricción y los fluidos corporales
- » Transparente

Pérdida transepidérmica de agua (PTEA)⁴

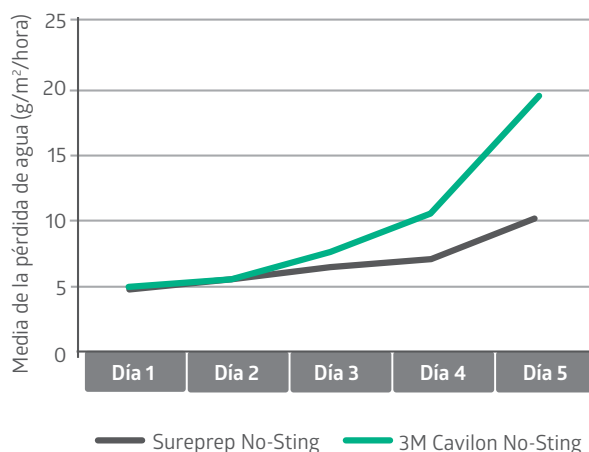

El día 4 y el día 5, los sujetos que usaban Sureprep No-Sting presentaron una pérdida de agua considerablemente menor que los que usaban 3M Cavilon No-Sting.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos unitarios, agregue una "H" al final del número del artículo.

SUREPREP NO-STING

Para pieles dañadas o delicadas; no contiene alcohol.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1505	Toallitas protectoras que no causan ardor	A5120, A6250	50/caja, 10 cajas/cartón
MSC1506	No-Sting Foam Wipes	A5120, A6250	50/caja, 10 cajas/cartón
MSC1510	Hisopo aplicador que no causa ardor, 1 ml	A5120, A6250	25/caja, 5 cajas/cartón
MSC1513	Hisopo aplicador que no causa ardor, 3 ml	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón



SUREPREP RAPID DRY

Para pieles dañadas o íntegras; no causa ardor ni contiene alcohol.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1605	Toallitas protectoras de secado rápido	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón
MSC1610	Hisopo aplicador de secado rápido, 1 ml	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón
MSC1613	Hisopo aplicador de secado rápido, 3 ml	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón
MSC1528	En rociador, no causa ardor, 28 ml	A4369, A6250	12/caja



SUREPREP

Ideal para protección estándar de piel perilesional; contiene alcohol.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1500	Toallitas protectoras de la piel	A5120, A6250	50/caja, 20 cajas/cartón
MSC1500PK	Toallitas protectoras de la piel	A5120, A6250	10/envase



Referencias bibliográficas

1. Chakravarthy D, Falconio-West M. A Randomized, Controlled Trial of Two Sting-Free Polymeric Skin Barrier Products, One Water Based, the Other Solvent Based. Presentado en Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care. Nashville, TN, EE. UU. 2007. 2. Datos de prueba archivados (laboratorio independiente). 3. 510(k) K051082, WOVE, 2005. 4. Shannon RJ, Chakravarthy D. Effect of a water-based no-sting, protective barrier formulation and a solvent containing similar formulation on skin protection from medical adhesive trauma. Int Wound J. 2009 Feb;6(1):82-8. 5. Datos archivados.

FOURFLEX® Y THREEFLEX®

Sistema de vendas compresivas de múltiples capas

USO RECOMENDADO

- » Úlceras venosas en la pierna

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No se requiere un apósito secundario



INDICACIONES

- » Para la aplicación de compresión en el manejo de venopatías y el edema asociado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Las vendas compresivas de múltiples capas pueden dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Pacientes con arteriopatía grave

ACERCA DE FOURFLEX Y THREEFLEX

- » Compresión terapéutica eficaz
- » Tiempo de uso prolongado
- » Absorbe el exudado
- » Empaque educativo
- » Kit de tamaño extralargo para piernas más grandes
- » Fourflex y Fourflex XL aplican 30–40 mm Hg de compresión
- » Threeflex aplica 20–30 mm Hg de compresión

Tabla de ITB

Para determinar el índice tobillo-brazo (ITB), divida la presión sistólica del tobillo por la presión sistólica del brazo.

$$\frac{\text{Presión del tobillo}}{\text{Presión del brazo}} = \text{ITB}$$

Interpretación del índice tobillo-brazo

Mayor de 1.3	Intervalo anormalmente alto (se requieren más estudios)
0.8 a 1.3	Intervalo normal
0.50 a 0.80	Indica arteriopatía de leve a moderada; puede usarse compresión solo bajo supervisión médica directa.
Menos de 0.5	Insuficiencia arterial grave; está contraindicado aplicar compresión.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por kit, agregue una "H" al final del número del artículo.

SISTEMA COMPRESIVO DE TRES CAPAS THREEFLEX

Para compresión más ligera o de origen mixto.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
Kit de Threeflex			
MSC4300	1) Relleno 10 cm x 3.6 m (4 pulg. x 4 yardas)	A6441	8 kits/cartón
	2) Amoldable leve 10 cm x 4.5 m (4 pulg. x 4.9 yardas), estirada	A6449	
	3) Cohesiva 10 cm x 6.3 m (4 pulg. x 6.9 yardas), estirada	A6454	



SISTEMA COMPRESIVO DE CUATRO CAPAS FOURFLEX

Para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
Kit de Fourflex			
MSC4400	1) Relleno 10 cm x 3.6 m (4 pulg. x 4 yardas)	A6441 + A6449 + A6443 + A6454	8 kits/cartón
	2) Amoldable leve 10 cm x 4.5 m (4 pulg. x 4.9 yardas), estirada		
	3) Compresión 10 cm x 8.7 m (4 pulg. x 9.5 yardas), estirada		
	4) Cohesiva 10 cm x 6.3 m (4 pulg. x 6.9 yardas), estirada		
Kit de Fourflex XL			
MSC4400XL	1) Relleno 10 cm x 4.6 m (4 pulg. x 5 yardas) 25% más larga	N/C	8 kits/cartón
	2) Amoldable 10 cm x 5.7 m (4" x 6.3 yardas), estirada. 29% más larga	N/C	
	3) Compresión 10 cm x 11.2 m (4 pulg. x 12.3 yardas), estirada. 29% más larga	N/C	
	4) Cohesiva 10 cm x 8.1 m (4 pulg. x 8.9 yardas) estirada. 29% más larga	N/C	



MEDIGRIP™

Vendas tubulares elásticas

USOS RECOMENDADOS

- » Retención de apósitos
- » Compresión ligera

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

- » Edema
- » Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica
- » Luxaciones
- » Esguinces
- » Como apósito de retención

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Medigrip puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Ninguna*



ACERCA DE MEDIGRIP

- » Brinda un excelente apoyo a las articulaciones
- » Fácil de aplicar y reaplicar
- » Amplia gama de aplicaciones
- » Eficaz para fijar apósitos
- » Se puede usar como compresión ligera si se enrolla dos veces
- » También viene en versión sin látex

Aspecto clínico destacado

Pruebas de compresión de vendas

A partir de los principios contenidos en BS 6612¹

Material de prueba	Prueba	Circunferencia de la extremidad (cm)	Presión arterial (mm Hg)
Medigrip	1	17.2	7.2
Tubigrip	1	17.2	5.8
Medigrip	2	18.7	7.0
Tubigrip	2	18.7	6.1

Resumen:

Aunque el análisis estadístico indicó que las presiones producidas por ambos productos son distintas, es improbable que esta diferencia resulte significativa en la situación clínica.

¹ British Standards Institution, "Graduated Compression Hosiery", BS6612, (1985, 1993)
Estudio independiente realizado por SMTL, Bridgend, Gales

***CUIDADO:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede producir reacciones alérgicas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

VENDA TUBULAR MEDIGRIP™

10 metros (11 yardas) de largo.

N.º del artículo	Tamaño	Ancho	Aplicación	HCPCS	Empaque
MSC9500	A	4.5 cm (1.75 pulg.)	Pies y brazos de infantes	A6457	1 rollo/caja
MSC9500LF	A	1.75" (4.5 cm)	Infant feet and arms	N/A	1 roll/bx
MSC9501	B	6.3 cm (2.5 pulg.)	Manos y extremidades de pequeño tamaño	A6457	1 rollo/caja
MSC9501LF	B	2.5" (6.3 cm)	Small hands and limbs	N/A	1 roll/bx
MSC9502	C	6.8 cm (2.625 pulg.)	Manos, brazos o piernas de adultos	A6457	1 rollo/caja
MSC9502LF	C	2.625" (6.8 cm)	Adult hands, arms or legs	N/A	1 roll/bx
MSC9503	D	7.5 cm (3 pulg.)	Brazos o piernas de gran tamaño	A6457	1 rollo/caja
MSC9503LF	D	3" (7.5 cm)	Large arms or legs	N/A	1 roll/bx
MSC9504	E	8.75 cm (3.5 pulg.)	Piernas o muslos de pequeño tamaño	A6457	1 rollo/caja
MSC9504LF	E	3.5" (8.75 cm)	Legs or small thighs	N/A	1 roll/bx
MSC9505	F	10 cm (4 pulg.)	Rodillas o muslos de gran tamaño	A6457	1 rollo/caja
MSC9505LF	F	4" (10 cm)	Large knees or thighs	N/A	1 roll/bx
MSC9506	G	12 cm (4.75 pulg.)	Muslos de gran tamaño	A6457	1 rollo/caja
MSC9506LF	G	4.75" (12 cm)	Large thighs	N/A	1 roll/bx
MSC9507	J	6.75" (17.1 cm)	Small trunks	Pending	1 roll/bx
MSC9507LF	J	6.75" (17.1 cm)	Small trunks	N/A	1 roll/bx
MSC9507	J	6.75" (17.1 cm)	Small trunks	Pending	1 roll/bx
MSC9507LF	J	6.75" (17.1 cm)	Small trunks	N/A	1 roll/bx
MSC9508	K	8.25" (20.1 cm)	Medium trunks	Pending	1 roll/bx
MSC9508LF	K	8.25" (20.1 cm)	Medium trunks	N/A	1 roll/bx



VENDA TUBULAR MEDIGRIP

0.91 m (1 yarda) de longitud.

Para hacer pedidos por unidad individual, agregue una "H" al final del número del artículo.

N.º del artículo	Tamaño	Ancho	Aplicación	HCPCS	Empaque
MSC9504YD	E	8.75 cm (3.5 pulg.)	Piernas o muslos de pequeño tamaño	A6457	30/caja
MSC9505YD	F	10 cm (4 pulg.)	Rodillas o muslos de gran tamaño	A6457	30/caja
MSC9506YD	G	12 cm (4.75 pulg.)	Muslos de gran tamaño	A6457	30/caja

TABLA DE SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE MEDIGRIP

Para fines de compresión, use una doble capa de Medigrip.

DIMENSIÓN DE LA EXTREMIDAD*		COMPRESIÓN**		
Pulgadas	Centímetros	Baja	Mediana	Alta
4-5.3125 pulg.	10-13.5 cm		B	
5.3125-5.906 pulg.	13.5-15 cm	C	B	
5.906-9.625 pulg.	15-24.5 cm	D	C	B
9.625-14 pulg.	24.5-35.5 cm	E	D	C
14-17.6875 pulg.	35.5-45 cm	F	E	D
17.6875-19.875 pulg.	45-50.5 cm	G	F	E
19.875-23.875 pulg.	50.5-60.7 cm		G	F
23.875-27.6875 pulg.	60.7-70.3 cm			G

*Si se requiere cubrir el brazo entero, mida la parte más grande del antebrazo. Si se requiere cubrir la pierna entera o por debajo de la rodilla, mida la parte más ancha de la pantorrilla. Para la mano, mida alrededor de la articulación metacarpofalángica.

**Baja: 5-10 mm Hg (para edema general); mediana: 10-20 mm Hg (para afecciones varicosas/cicatrices posquemadura); alta: 20-30 mm Hg (para lesiones en tejidos blandos/derrames articulares)

UNNA-Z™ STRETCH

Vendas de bota de Unna

USO RECOMENDADO

- » Úlceras venosas en la pierna

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Compression CoFlex LF2
- » Bulkee® Gauze Wrap

INDICACIONES

- » Úlceras venosas en la pierna

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Unna-Z puede dejarse en su sitio hasta 7 días, según el exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Pacientes con sensibilidad confirmada a los componentes (zinc y/o calamina)



ACERCA DE UNNA-Z

- » Diseño tejido mejorado
- » Mantiene un entorno de curación húmedo
- » Impregnada con óxido de zinc
- » Los artículos NONUNNA130 y NONUNNA140 contienen calamina y óxido de zinc
- » Ofrece compresión ligera
- » Núcleo interior de plástico que facilita la aplicación
- » Unna-Z Stretch proporciona mayor elasticidad

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por apóposito, agregue una "H" al final del número del artículo.

UNNA-Z STRETCH

Venda elástica impregnada de zinc

N.º de artículo	Descripción	HCPCS	Paquete
NONUNNAS130	7.6 cm x 9.1 m (3 in x 10 yardas), elástica	A6456	12/cartón
NONUNNAS140	10.2 cm x 9.1 m (4 in x 10 yardas), elástica	A6456	12/cartón
NONUNNAS30	7.6 cm x 9.1 m (3 in x 10 yardas), elástica, con calamina	A6456	12/cartón
NONUNNAS40	10.2 cm x 9.1 m (4 in x 10 yardas), elástica, con calamina	A6456	12/cartón



¿SABÍA USTED?

Unna Z-Stretch brinda elasticidad para una mejor capacidad de amoldamiento y una aplicación más fácil.



VERSATEL® Y VERSATEL ONE

Apósitos de capa de contacto

USOS RECOMENDADOS

- » Para evitar la adhesión del apósito secundario a la herida

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Stratasorb® Composite
- » Optifoam® Adhesive
- » Maxorb® Extra

INDICACIONES

- » Abrasiones con exudado desde ninguno hasta abundante
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras venosas o lesiones por presión
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Ampollas, cortaduras y laceraciones
- » Heridas quirúrgicas y por traumatismos

FRECUENCIA DE CAMBIO


- » Versatel puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas con sensibilidad confirmada a la silicona
- » No apto para su implantación quirúrgica

Fluido transferido a través de Versatel

Versatel está diseñado para facilitar la transferencia de los fluidos de heridas a un apósito secundario¹.

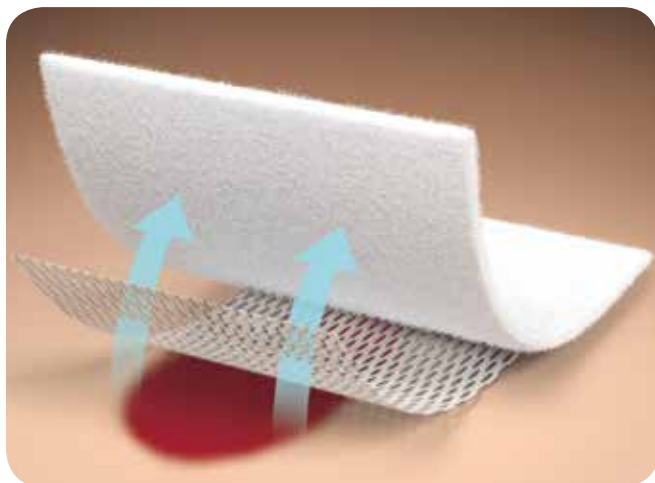

Referencias bibliográficas

1. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados. 2. Mulder GD. Quantifying wound fluids for the clinician and researcher. Ostomy Wound Manage. 1994;40(8):66-69. 3. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados.



ACERCA DE VERSATEL

- » Adhesivo atraumático de silicona
- » Flexible y maleable, para adaptarse a las curvas del cuerpo y aumentar la comodidad
- » Versatel One ofrece un contacto de silicona unilateral para facilitar el manejo
- » Reduce los posibles traumatismos por adhesión del apósito secundario a la herida
- » Reduce al mínimo el dolor al quitarse
- » Con canales que facilitan la transferencia de fluido a un apósito absorbente
- » Traslúcido, para facilitar la observación de la herida

Típicamente, una herida con exudado abundante descarga más de 10 ml de fluido al día². En un estudio *in vitro* que simuló el exudado de una herida, se demostró que Versatel constituye una capa de transferencia eficiente del fluido. En promedio, Versatel permitió el paso de 16.2 ml de fluido durante 2.5 horas, lo que equivale a 155.52 ml al día³.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

VERSATEL

Capa de contacto bilateral con silicona.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1723EP	5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.)	A6206	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1734EP	7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.)	A6206	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1747EP	10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.)	A6207	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC17812EP	20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.)	A6208	5/caja, 5 cajas/cartón




VERSATEL ONE

Silicona unilateral para mayor facilidad de manejo.


N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1823EP	5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1834EP	7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1845EP	10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1847EP	10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC18812EP	20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.)	En trámite	5/caja, 5 cajas/cartón




Instrucciones de aplicación sencillas

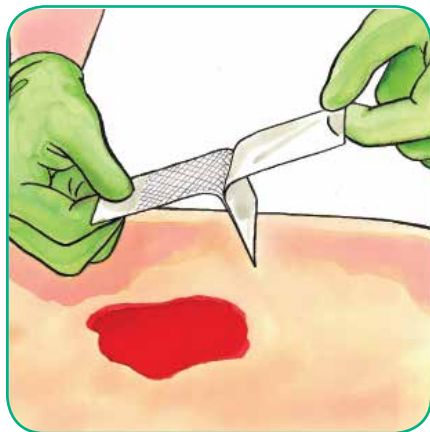

Paso 1: Limpie y seque la herida y la zona perilesional. Extraiga Versatel de su envase. Retire el recubrimiento de uno de los lados del apósito.

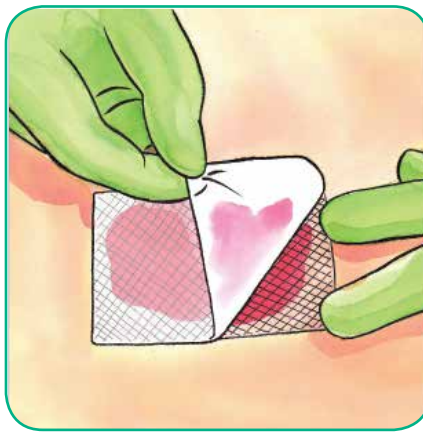

Paso 2: Coloque el apósito directamente sobre la herida y alíselo para fijarlo bien.
NOTA: Versatel puede cubrir la piel perilesional y se puede también recortar, si es necesario.

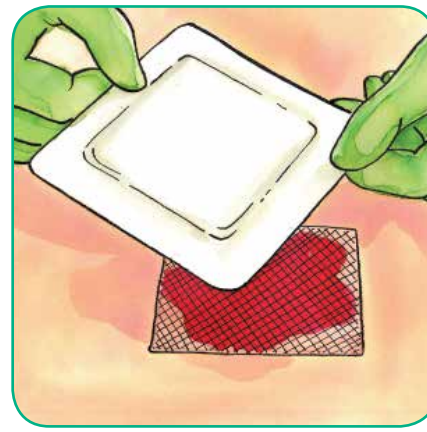

Paso 3: Retire el segundo recubrimiento, si corresponde (únicamente Versatel). Cubra con un apósito secundario absorbente adecuado, como Stratasorb®. Versatel se puede usar bajo apósitos compresivos.

APÓSITOS DE COBERTURA

Apósitos adhesivos tipo isla para heridas

RECOMENDADO EN HERIDAS CON CONDICIÓN:

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Cualquier nivel de exudado
- » Apósito primario
- » Apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Zonas de incisión quirúrgica

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » El apósito se debe cambiar según lo indique la cantidad de exudado o con la frecuencia indicada por el apósito primario
- » Puede dejarse en su sitio hasta 7 días

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Pacientes con sensibilidad confirmada a los componentes del apósito



ACERCA DE LOS APÓSITOS DE COBERTURA

- » Compresa absorbente de lujo no adherente
- » Borde adhesivo no tejido
- » Refuerzo impermeable (Stratasorb)
- » Refuerzo resistente al agua (Bordered Gauze)
- » Ideal para zonas de incisión quirúrgica

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

APÓSITO DE COBERTURA STRATASORB COMPOSITE

Apósito secundario práctico e impermeable.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC3044	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 5.1 cm (2.5 x 2 pulg.)	A6203	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC3066	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6203	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC3068	15.2 x 19.1 cm (6 x 7.5 pulg.), Compresa de 10.2 x 15.2 cm (4 x 6 pulg.)	A6204	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC30410	10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.), Compresa de 5.1 x 20.3 cm (2 x 8 pulg.)	A6203	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC30414	10.2 x 35.6 cm (4 x 14 pulg.), Compresa de 5.1 x 30.5 cm (2 x 12 pulg.)	A6204	10/caja, 10 cajas/cartón



APÓSITO DE COBERTURA DE GASA CON BORDE

Apósito secundario resistente al agua, de fácil uso.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC3222	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.), Compresa de 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 pulg.)	A6219	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC3244	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6219	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC3245	10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.), Compresa de 5.1 x 6.4 cm (2 x 2.5 pulg.)	A6219	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC3248	10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.), Compresa de 5.1 x 15.2 cm (2 x 6 pulg.)	A6219	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC3266	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6220	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC32410	10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.), Compresa de 5.1 x 20.3 cm (2 x 8 pulg.)	A6219	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC32414	10.2 x 35.6 cm (4 x 14 pulg.), Compresa de 5.1 x 30.5 cm (2 x 12 pulg.)	A6220	15/caja, 10 cajas/cartón
MSC3236	3 x 6" (7.6 x 15.2 cm), 1 x 4" (2.5 x 10.2 cm) Pad	Pending	15/bx, 10 bx/cs



CINTA DE RETENCIÓN DE APÓSITOS

Cintas de: tela no tejida, silicona y zinc

USO RECOMENDADO

- » Retención de apósitos

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

- » Para fijar apósitos primarios
- » Para fijar sondas de gastrostomía y otras sondas de alimentación

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » La frecuencia de cambio del apósito depende del apósito primario y de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Contraindicado como apósito primario



ACERCA DE LAS CINTAS

- » MedFix posee un recubrimiento impreso de liberación con forma de "s"
- » MedFix EZ no tiene recubrimiento y es perforado
- » Las cintas adhesivas MedFix son resistentes al agua
- » Gentac es transparente
- » Gentac está hecho de un adhesivo de silicona suave y reposicionable
- » La cinta adhesiva Gentac es impermeable
- » La cinta adhesiva Pinc se compone de zinc y se adhiere bien, incluso en condiciones de humedad

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

Cinta adhesiva Pinc™

- » Pinc emplea un adhesivo de óxido de zinc
- » La cinta adhesiva Pinc es impermeable
- » La cinta adhesiva Pinc se adhiere bien en entornos húmedos



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MEDFIX TAPE

Aporta flexibilidad y permite personalizar el tamaño.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC4002	5.1 cm x 10 m (2 pulg. x 11 yardas)	A4452	1 rollo/caja
MSC4004	10.2 cm x 10 m (4 pulg. x 11 yardas)	A4452	1 rollo/caja
MSC4006	15.2 cm x 10 m (6 pulg. x 11 yardas)	A4452	1 rollo/caja



MEDFIX EZ TAPE

Sin recubrimiento, con perforaciones de 5.1 cm (2 pulg.).

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC4102	5.1 cm x 10 m (2 pulg. x 11 yardas)	A4452	12 rollos/caja
MSC4104	10.2 cm x 10 m (4 pulg. x 11 yardas)	A4452	12 rollos/caja
MSC4106	15.2 cm x 10 m (6 pulg. x 11 yardas)	A4452	12 rollos/caja
MSC4124	10.2 cm x 1.8 m (4 pulg. x 2 yardas)	A4452	12 rollos/caja

Para hacer pedidos de la cinta adhesiva Medfix EZ por rollo, agregue "H".



GENTAC SILICONE TAPE

Ideal para la fijación en piel frágil.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1583	2 cm x 3 m (0.8 pulg. x 3.3 yardas)	A4452	12 rollos/cartón
MSC1585	5.1 cm x 12.7 m (2 pulg. x 5 yardas)	A4452	6 rollos/cartón

Para hacer pedidos de la cinta adhesiva Gentac por rollo, agregue "H".



PINC™ TAPE

Cinta adhesiva con óxido de zinc.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
OMAM55CS	1.3 cm x 4.57 m (0.5 pulg. x 5 yardas)	En trámite	1/caja, 36 cajas/cartón
OMAM111CS	2.54 cm x 4.57 m (1 pulg. x 5 yardas)	En trámite	1/caja, 36 cajas/cartón
OMAM222CS	5.1 cm x 4.57 m (2 pulg. x 5 yardas)	En trámite	1/caja, 36 cajas/cartón

*Para hacer pedidos de la cinta adhesiva Pinc por rollo, quite las letras "CS" del código del producto



LIMPIADORES DE HERIDAS

USOS RECOMENDADOS

- » Limpieza de todo tipo de heridas

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

Para limpiar una amplia diversidad de heridas, tales como:

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Heridas infectadas y sin infección

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Con cada cambio de apósito

CONTRAINDICACIONES

- » Pacientes con sensibilidad confirmada a los componentes del limpiador de heridas



ACERCA DE LOS LIMPIADORES DE HERIDAS

- » Limpieza fácil
- » Gatillo ajustable (PSI de 8.6 a 3 pulg.)
- » Cumple con las pautas de AHCPR
- » MicroKlenz es antimicrobiano
- » Prophase contiene PHMB como conservante

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

Limpiador de heridas Prophase™

- » Contiene PHMB como conservante
- » Formulación de pH bajo
- » Disponible en una práctica botella apretable de 2 onzas



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por botella, agregue una "H" al final del número del artículo.

LIMPIADOR DE HERIDAS SKINTEGRITY

Para la limpieza de heridas.

N.º del artículo	Descripción	Empaque
MSC6008	Botella con rociador: 236 ml (8 onzas)	6/caja
MSC6016	Botella con rociador: 472 ml (16 onzas)	6/caja



LIMPIADOR DE HERIDAS PROPHASE

Contiene PHMB como conservante.

N.º del artículo	Descripción	Empaque
MSC8008	Botella con rociador: 236 ml (8 onzas)	6/caja
MSC8002	Botella apretable: 59 ml (2 onzas)	12/caja



ANTISÉPTICO DE PRIMEROS AUXILIOS MICROKLENZ™

Ayuda al manejo de la contaminación bacteriana en heridas dérmicas.

N.º del artículo	Descripción	Empaque
CRR108008	Botella con rociador: 236 ml (8 onzas)	6/caja





Evaluación de heridas

USOS RECOMENDADOS

- » Medición y evaluación de heridas de todo tipo

INDICACIONES

- » Herramienta de ayuda para la evaluación de heridas



FRECUENCIA DE CAMBIO


- » De uso único, durante cada evaluación de heridas
- » Como mínimo, al ingreso y al alta

CONTRAINDICACIONES

- » Ninguna

ACERCA DE NE1

- » Técnica de igualación de colores fácil de usar
- » Reduce los errores y facilita la evaluación precisa de las heridas
- » Normaliza la documentación sobre las heridas
- » Educación gratuita por Internet

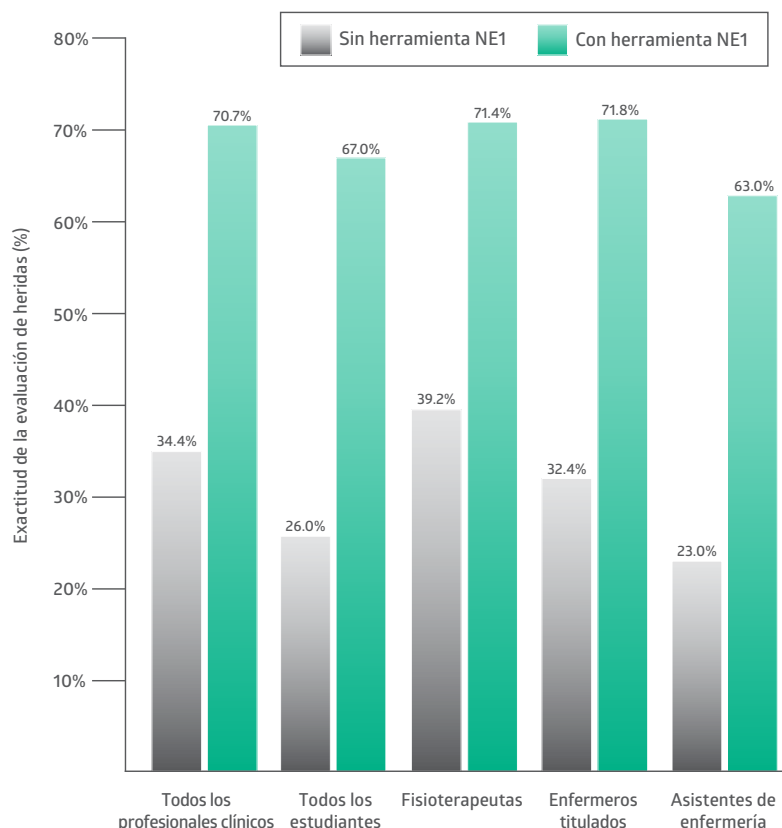

El estudio reveló una mejoría estadísticamente significativa en la evaluación de heridas. En general, los médicos mejoraron su exactitud a más del doble con la ayuda de la herramienta de evaluación de heridas NE1¹.

Referencias bibliográficas

1. Young DL, Estocado N, Landers MR, Black J. A Pilot Study Providing Evidence for the Validity of a New Tool to Improve Assignment of National Pressure Ulcer Advisory Panel Stage to Pressure Ulcers. *Advances in Skin & Wound Care*. Abril de 2011; (24)4:168-75

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE HERIDAS NE1

Identificación precisa, documentación uniforme.

N.º del artículo	Descripción	Empaque
MSCNE1TOOL	Herramienta de evaluación de heridas	100/caja
MSCNE1TOOLPK	Herramienta de evaluación de heridas	10/envase



Guía de documentación fotográfica de heridas NE1

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA DE HERIDAS NE1®

Antecedentes de la herida:

ZONA ANATOMICA (PARTE DEL CUERPO):

Marque la ubicación de la herida

Ante los siguientes datos en la herramienta:

- Fecha
- Iniciales del paciente
- Hora
- N.º habitación/lugar
- Ubicación de la herida
- Firma del miembro del personal clínico

1. Enmarque la herida con la herramienta de evaluación de heridas NE1 (posición de las 12 del reloj).

2. No envuelva el cuerpo con la herramienta. Mantenga plana la herramienta para conservar su ángulo de 90°.

3. Coloque la cámara en posición perpendicular a la herida y tome la fotografía.

4. Imprima la fotografía.

5. Borne las fotografías de la cámara inmediatamente después de imprimirlas.

6. En cada foto, marque el borde de los dermis del tejido con líneas horizontales y verticales, tal como se muestra arriba, posteriormente mida la longitud y la anchura.

7. Multiplique la longitud por la anchura para calcular el área de superficie.

8. Fije la foto en este recuadro.

9. Coloque este documento en la historia clínica del paciente.

3. Clasificación de la herida:

Úlcera por presión:

○ Cerrada ○ Prestado / (entorno que palidece) ○ Estado I
 ○ Estado II ○ Estado III ○ Estado IV
 ○ Sospecha de lesión en tejido profundo ○ Estado desconocido
 ○ Úlcera por presión en la mucosa (UPPM) ○ BIEN

4. Detalles sobre tamaño:

Calcule el área de superficie

Tamaño (cm) (L x A): _____ Profundidad (cm): _____

5. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

6. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

7. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

8. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

9. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

10. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

11. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

12. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

13. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

14. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

15. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

16. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

17. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

18. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

19. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

20. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

21. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

22. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

23. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

24. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

25. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

26. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

27. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

28. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

29. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

30. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

31. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

32. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

33. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

34. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

35. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

36. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

37. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

38. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

39. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

40. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

41. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

42. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

43. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

44. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

45. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

46. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

47. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

48. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

49. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

50. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

51. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

52. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

53. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

54. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

55. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

56. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

57. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

58. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

59. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

60. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

61. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

62. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

63. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

64. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

65. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

66. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

67. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

68. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

69. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

70. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

71. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

72. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

73. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

74. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

75. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

76. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

77. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

78. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

79. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

80. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

81. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

82. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

83. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

84. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

85. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

86. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

87. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

88. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

89. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

90. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

91. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

92. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

93. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

94. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

95. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

96. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

97. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

98. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

99. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

100. Exudado:

Mal olor: ○ Si ○ No

TASA DE EVOLUCIÓN DE LA CICATRIZACIÓN NE1®

La tasa de evolución de la cicatrización NE1® emplea dos variables independientes para proporcionar un estado preciso del entorno de la herida. Estas dos variables son el peor tipo de tejido (PTT) y el valor del área de superficie (VAS).

VARIABLE 1

Peor tipo de tejido (PTT)

Este valor se determina mediante la casilla marcada en la sección 1 del formulario de documentación de heridas NE1, con la etiqueta "Peor tipo de tejido". Determine el peor tipo de tejido con la herramienta de evaluación de heridas NE1.

Nota: Incluso si solo una pequeña parte de la herida tiene un color "peor", se calificará la herida en función del tipo de tejido de esa parte.

Peor tipo de tejido (PTT):

0 ← Mejor → 7 Peor

VARIABLE 2

Valor del área de superficie (VAS)

En esta tabla se determina el VAS con el área de superficie de la herida. Calcule el área de superficie multiplicando la longitud x la anchura del lecho de la herida. Seguidamente determine el valor mediante esta tabla.

Nota: Obtenga las mediciones de L x A directamente de la fotografía de la herida, con ayuda de la regla en ángulo recto NE1. Mida desde uno de los bordes del tejido de la herida al otro. Incluya en sus mediciones la zona perilesional.

* La longitud se mide en la dirección de las 12 a las 6.

* La anchura se mide en la dirección de las 3 a las 9.

Valor	Área de superficie	Valor	Área de superficie	Valor	Área de superficie
0	0.0 cm² (Normal/cerrada)	7	4.1 a 7.0 cm²	14	75.1 a 100.0 cm²
1	0 a 0.5 cm²	8	7.1 a 10.0 cm²	15	100.1 a 125.0 cm²
2	0.6 a 1.0 cm²	9	10.1 a 15.0 cm²	16	125.1 a 150.0 cm²
3	1.1 a 1.5 cm²	10	15.1 a 20.0 cm²	17	150.1 a 175.0 cm²
4	1.6 a 2.0 cm²	11	20.1 a 35.0 cm²	18	175.1 a 200.0 cm²
5	2.1 a 3.0 cm²	12	35.1 a 50.0 cm²	19	200.1 a 225.0 cm²
6	3.1 a 4.0 cm²	13	50.1 a 75.0 cm²	20	Por encima de 225.1 cm²

Valor del área de superficie (VAS):

0 ← Mejor → 20 Peor



Medline Industries, Inc.
One Medline Place
Mundelein, IL 60060, EE. UU.

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca | canada@medline.com

Medline México
01-800-531-0999
www.medline.com.mx | mexico@medline.com

© 2011 Medline Industries Inc. Medline y NE1 son marcas registradas de Medline Industries, Inc. Información sobre patentes: www.medline.com/patents/ART154561 / LIT866324

Este exhaustivo formulario simplifica el proceso de evaluación y documentación. Encontrará un PDF en www.MedlineNE1.com

SUPERFICIES DE SOPORTE TERAPÉUTICO

USOS RECOMENDADOS

- » Redistribución de la presión
- » Reducción de la fricción
- » Reducción del cizallamiento
- » Distribución del calor

ACERCA DE LAS SUPERFICIES DE SOPORTE TERAPÉUTICO

- » A fin de brindar soluciones para todo el espectro de la atención médica, Medline pone a la disposición una gama completa de productos de redistribución de la presión para cuidados de urgencia, a largo plazo y domiciliarios.

ATENCIÓN DE URGENCIA

Para más información, consulte nuestro folleto sobre superficies de soporte en la atención de urgencia (*Acute Care Support Surfaces Brochure*, LIT58R)



COLCHÓN THERATECH Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2

Las resistentes celdas de soporte de carga se amoldan al cuerpo de forma independiente para redistribuir la presión y reducir el cizallamiento; los canales de aire reducen el calor y la humedad.



COLCHÓN EQUALIZAIRE Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Este dinámico colchón no motorizado y de ajuste automático puede convertirse en un colchón de presión alternante con la adición de la bomba opcional.



MESA DE QUIRÓFANO ADVANTAGE Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2

Superficies avanzadas que optimizan la redistribución de la presión durante intervenciones sobre la mesa de quirófano.



PROTECTORES DE CAMILLA Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2

Con superficies avanzadas que optimizan la redistribución de la presión durante el traslado de ida y vuelta al quirófano.



PROTECCIÓN DEL TALÓN Para la prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Innovadores dispositivos que elevan los talones y reducen considerablemente la presión, la fricción y las fuerzas de cizallamiento.

CUIDADOS A LARGO PLAZO

Para obtener más información, consulte nuestro folleto sobre superficies de soporte en cuidados a largo plazo (*Long-Term Care Support Surfaces*; LIT162)



COLCHONES ADVANTAGE CONTOUR

Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2


La exclusiva forma moldeada de la espuma de alta resistencia permite que el colchón se adapte perfectamente al cuerpo de la persona y proteja zonas de alto riesgo.



COLCHONES/CUBRECOLCHONES MOTORIZADOS

Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Elija entre una amplia variedad de opciones para cada modalidad terapéutica importante; por ejemplo, tratamientos con presión alternante, baja pérdida de aire, baja pérdida de aire verdadera y ajuste automático.

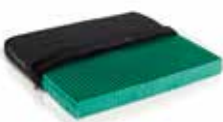

COJINES PARA SILLAS DE RUEDAS

Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Desde los productos Medline a los de otras marcas de uso difundido, ofrecemos una amplia variedad de cojines diseñados para satisfacer las necesidades especiales de los residentes de las instituciones de cuidado modernas.



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL TALÓN

Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Medline ofrece dispositivos de la más alta calidad para la protección del talón, que elevan los talones y reducen considerablemente la presión, la fricción y las fuerzas de cizallamiento.

DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS MÉDICOS DOMICILIARIOS

Para más información, consulte nuestro folleto sobre superficies de soporte para distribuidores de equipos médicos domiciliarios (*HME Dealer Support Surfaces*, LIT459)



PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DEL GRUPO 1

Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2

Adaptados específicamente para distribuidores de equipos médicos domiciliarios, estos variados productos para prevención abarcan cubrecolchones de aire estático, de presión alternante y de gel, así como colchones para cuidados terapéuticos en el hogar.



PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DEL GRUPO 2

Tratamiento de heridas en estadio 2 a 4 y heridas quirúrgicas

Diseñados para satisfacer las necesidades de los distribuidores de equipos médicos domiciliarios; comprenden productos de tratamiento con presión alternante, baja pérdida de aire, baja pérdida de aire verdadera y ajuste automático.



COJINES PARA SILLAS DE RUEDAS/SEGURIDAD A LA CABECERA/ACCESORIOS

Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Amplio surtido de cojines Medline y de marcas de uso difundido diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los actuales distribuidores de equipos médicos domiciliarios.

Clasificación de la destrucción del tejido en las lesiones por presión

Una úlcera por presión es una lesión localizada en la piel y/o el tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea o relacionada con dispositivos médicos o de otros tipos. La lesión se puede presentar como piel íntegra o una úlcera abierta, y puede ser dolorosa. La lesión se produce como resultado de una presión intensa y/o prolongada, o por la combinación de presión y cizallamiento. Factores como el microclima, la nutrición, las comorbilidades y las condiciones de perfusión y del tejido blando pueden afectar la tolerancia de dicho tejido a la presión y el cizallamiento. NPUAP, 2016

ESTADIO 1



Lesión por presión de estadio 1: Eritema que no palidece de piel íntegra Piel íntegra con un eritema localizado que no palidece (o de aspecto diferente, en pieles de pigmentación muy oscura). Antes de los cambios visuales podría

observarse un eritema que no palidece o haber cambios en la sensibilidad, temperatura o firmeza. Los cambios de color no incluyen una coloración violácea/granate (que podría indicar lesiones por presión de tejidos profundos).

ESTADIO 3



Lesión por presión de estadio 3: Pérdida cutánea de espesor total

Pérdida cutánea de espesor total del tejido, en la que se observa adiposidad (grasa) en la úlcera y en la que suele haber presencia de tejido de granulación y bordes enroscados

en la herida. Puede que se observen esfacelos y/o escaras. La profundidad del daño del tejido varía según la región anatómica afectada; las zonas de adiposidad considerable pueden dar paso a la formación de heridas profundas. Puede haber socavamientos y tunelizaciones. No hay exposición de fascia, músculo, tendón, ligamento, cartílago ni hueso. Si hay esfacelos o escaras que encubren la magnitud de la pérdida de tejido, se dice que es una "lesión por presión de estadio desconocido".

LESIÓN POR PRESIÓN EN TEJIDO PROFUNDO



Lesión por presión en tejido profundo: Coloración anormal persistente violácea, granate o en tonalidades de rojo vivo, que no palidece Piel íntegra o no íntegra con zona localizada de coloración anormal persistente violácea, granate o en tonalidades de

rojo vivo, que no palidece, o separación epidérmica que revela un lecho de herida oscuro o ampolla sanguinolenta. Antes de los cambios en el color de la piel suelen producirse cambios en el dolor y la temperatura. El aspecto de la coloración extraña podría ser diferente en pieles de pigmentación muy oscura. Esta lesión resulta de la aplicación de presión y fuerzas de cizallamiento intensas y/o prolongadas en la interfaz hueso-músculo. La herida podría evolucionar rápidamente y exponer la magnitud real de la lesión tisular, o bien curarse sin pérdida del tejido. La presencia de tejido necrótico, tejido subcutáneo, tejido de granulación, fascia, músculo u otras estructuras subyacentes indica una lesión por presión de espesor total (de estadio desconocido o de estadio 3 o 4). Las lesiones vasculares, traumáticas, neuropáticas o dermatológicas no son lesiones por presión de tejido profundo.

ESTADIO 2



Lesión por presión de estadio 2: Pérdida parcial del espesor cutáneo con dermis expuesta

El lecho de la herida es viable, rosado o rojo y húmedo, y también se puede presentar en forma de una ampolla íntegra o rota llena de suero. No se observan

adiposidad (grasa) ni tejidos de mayor profundidad. No hay tejido de granulación, esfacelos ni escaras. Estas lesiones suelen ser el resultado de microclimas adversos y cizallamiento en la piel de la pelvis y cizallamiento en el talón. No debe utilizarse este estadio para describir las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH), incluida la dermatitis asociada a incontinencia (DAI), la dermatitis intertriginosa (DI), las lesiones cutáneas relacionadas con adhesivos de uso sanitario o las heridas traumáticas (desgarros cutáneos, quemaduras, abrasiones).

ESTADIO 4



Lesión por presión de estadio 4: Pérdida de tejido y pérdida cutánea de espesor total Pérdida de tejido y pérdida cutánea de espesor total en la que se palpan directamente fascia, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos o huesos en la úlcera.

Puede que se observen esfacelos y/o escaras. A menudo se forman bordes enroscados, socavamientos y/o tunelizaciones. La profundidad depende de la región anatómica afectada. Si hay esfacelos o escaras que encubren la magnitud de la pérdida de tejido, se dice que es una "lesión por presión de estadio desconocido".

ESTADIO DESCONOCIDO



Lesión por presión de estadio desconocido: Pérdida de tejido y pérdida cutánea de espesor total encubiertas

Pérdida de tejido y pérdida cutánea de espesor total en la que no es posible confirmar la magnitud del daño tisular dentro de la úlcera porque está oculta

por esfacelos o escaras. Si se eliminan los esfacelos o las escaras se expondrá una lesión por presión de estadio 3 o estadio 4. No se deben eliminar las escaras estables (es decir, secas, adherentes, íntegras sin eritema ni purulencia) en una extremidad isquémica o los talones.

EMPAQUE EDUCATIVO

S

PRODUCTOS DE SOPORTE

Muchos profesionales de la enfermería se enfrentan diariamente a situaciones en que pierden valioso tiempo buscando el apósito más adecuado. En muchas ocasiones el apósito seleccionado es incorrecto o no se usa de la forma correcta. A raíz de las peticiones de nuestros clientes, Medline ha encontrado un modo de mejorar este proceso y garantizar que el personal de enfermería disponga de la información que necesita: se llama "Empaque educativo". El paquete se centra en la seguridad del paciente y la aplicación correcta del producto. Cada paquete equivale a un curso de 2 minutos sobre el cuidado de heridas (2-Minute Course on Wound Care™).



Las cajas y los prospectos informativos de los apósitos suelen quedarse guardados en closets o almacenes de provisiones. Por tal motivo, Medline ofrece un empaque educativo que ofrece apoyo instantáneo al enfermero, al paciente y a la familia.

Esta información educativa es esencial no solo para el personal clínico sino también para sus pacientes y familiares. Para lograr un tratamiento satisfactorio de las heridas, es esencial asegurarse de que los pacientes y sus cuidadores aprendan los resultados que pueden esperarse y el plan para lograrlos.

Nombre del producto

Información clave
Aclara el uso indicado.

Información básica
Breve descripción técnica de los atributos del producto: tamaño, cantidad, etc.



Subtítulo

Definición general del producto.

Categoría
Desglose más detallado del producto.

Fotografía del producto
Imagen ultranítida del apósito.

Información adicional

Instrucciones de aplicación; las indicaciones y contraindicaciones se encuentran en la parte opuesta del empaque.



EDUCACIÓN POR INTERNET

MEDLINE UNIVERSITY®

Medline University ofrece programas de educación continua y oportunidades acreditadas de educación continuada en enfermería. Brindamos una amplia gama de oportunidades educativas sobre temas de actualidad e importancia para su personal. Los cursos se presentan en un formato en línea para que puedan tomarse en el momento adecuado. El único requisito necesario es una conexión con Internet. El contenido de los cursos, el examen y el certificado CE están disponibles en línea. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.medlineuniversity.com.



- » Acceso gratuito a 250 cursos clínicos aprobados como créditos de educación continua por juntas de enfermería con reconocimiento nacional
- » Lleve la cuenta de todos sus créditos educativos de Medline University u otros créditos educativos en un mismo lugar práctico
- » Sitio web fácil de usar; no requiere usar aplicaciones

Todo esto... ¡**ABSOLUTAMENTE GRATIS!**

SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS EN www.medline.com/advancedwoundcare

El sitio web de Medline es otra manera de obtener información actualizada sobre los productos. Encontrará los folletos más recientes así como videos de aplicaciones en www.medline.com/advancedwoundcare. El selector interactivo de productos también puede ayudarle a elegir el mejor producto en función de las condiciones de la herida.

2-Minute Course on Wound Care, Aquaconductive, Chytoform, Liquitrap, Qwick, MicroScaffold, Pinc, Medigrip y Prophase son marcas comerciales; y Bulkee, Derma-Gel, Educare, Exuderm, Exuderm OdorShield, Fourflex, Gentac, Marathon, Maxorb, Medfix, Medline, Medline University, NE1, Opticell, Optifoam, OptiLock, Plurogel, Puracol, Skintegrity, Stratasorb, Sureprep, TheraHoney, Threelflex y Versatel son marcas registradas de Medline Industries, Inc. Arglas es una marca registrada de Covidien LP. Cavilon es una marca registrada de 3M Company. DuoDerm Signal y Kaltostat son marcas registradas de Convatec Inc. Aquacel, Aquacel Extra son marcas registradas de E.R. Squibb & Sons, Inc. HYAFF es una marca registrada de Anika Therapeutics S.R.L. SilvaSorb es una marca registrada de Acrymed, Inc. Acticoat, Allevyn y Durafiber son marcas registradas de T.J. Smith & Nephew Limited Corporation.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

- 30 Ag+ Powder
- 74 Apósitos de cobertura
- 50 Apósitos de hidrogel

B

- 76 Bordered Gauze

C

- 51 Carragauze™
- 51 Carrasyn™
- 76 Cinta
- 77 Cinta adhesiva Medfix™
- 77 Cinta adhesiva Pinc™
- 84 Clasificación de la destrucción de tejidos

E

- 86 Educación por Internet
- 85 Empaque educativo
- 48 Exuderm®

F

- 66 Fourflex®

G

- 76 Gentac®

H

- 80 Herramienta de evaluación de heridas NE1®

L

- 78 Limpiador de heridas Skintegrity®
- 78 Limpiadores de heridas

M

- 60 Marathon®
- 46 Maxorb®
- 20 Maxorb® II Ag+
- 86 Medline University®
- 68 Medigrip™
- 78 Microklenz™

O

- 40 Opticell®
- 16 Opticell® Ag+
- 38 Optifoam®
- 24 Optifoam® Ag+
- 26 Optifoam® Ag+ Post-Op Strip
- 34 Optifoam® Gentle
- 22 Optifoam® Gentle Ag+
- 44 OptiLock®

P

- 78 Prophase®
- 54 Puracol®

ÍNDICE ALFABÉTICO

Q

42 Qwick™

R

51 Radiadres™

51 Radiagel™

S

28 Silvasorb®

51 Skintegrity® Hydrogel

72 Stratasorb®

82 Superficies de soporte
terapéutico

64 Sureprep®

T

8 TheraHoney®


66 Threeflex®

U

70 Unna-Z® Stretch

V

72 Versatel®

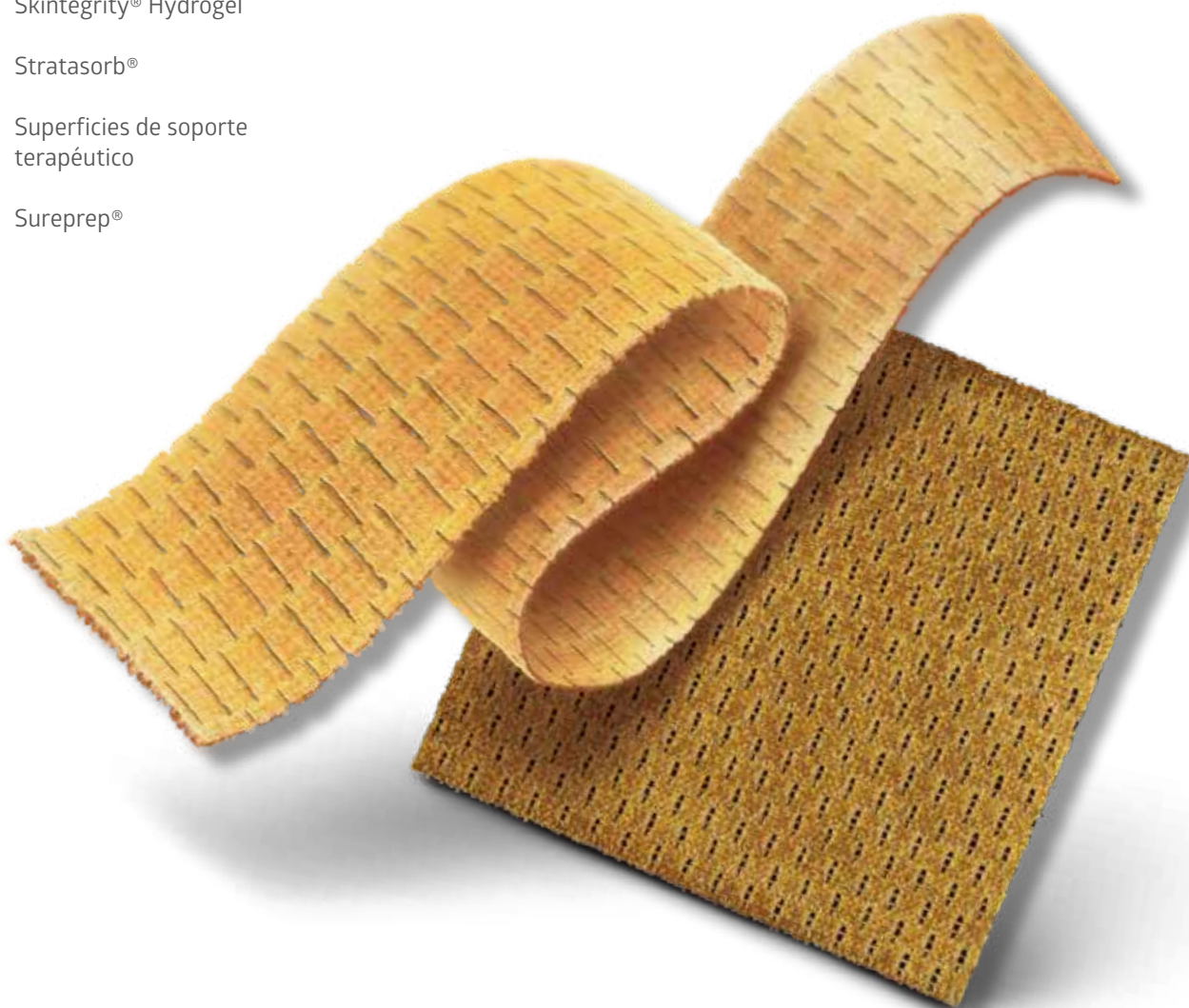

[illegible]

NOTAS

[illegible]

[illegible]

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

medline.com/advancedwoundcare



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales. Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT19118671 / LIT049ESLA / 2.5M / PP / 55