


Central Sterile Product Guide

Comprehensive product selection and support.



STARTAG

Change Lives, Together

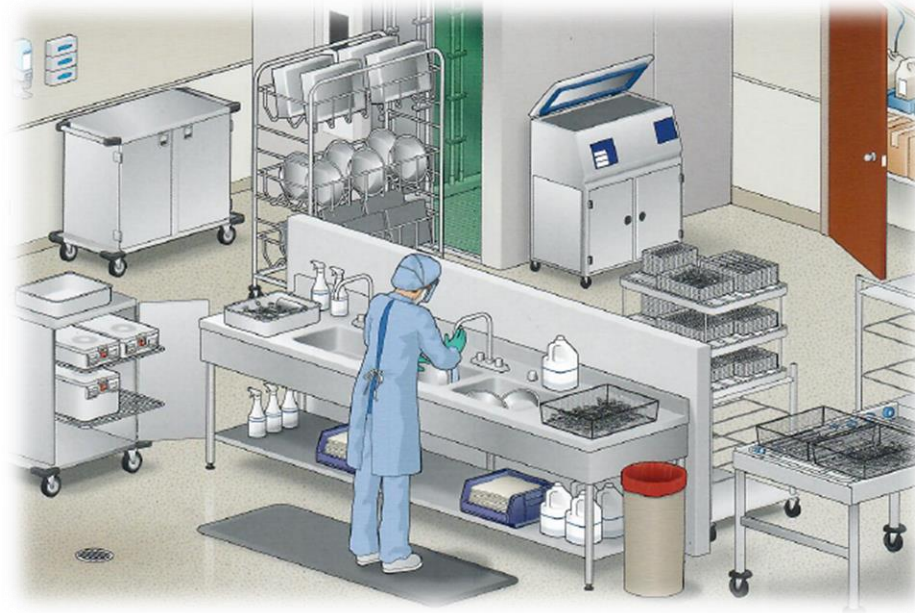




MDS880PA28
MDS880PASTP

Glutaraldehyde High-Level Semi / Critical Device
Disinfectant

- Alto nivel de desinfección eficiente en un proceso de 10 minutos, completando más ciclos por hora a temperatura de quirófano 25° Grados.
- Es Bactericida, Fungida y Tuberculocida
- Es más eficaz que las principales marcas teniendo una duración de hasta 28 días en OPA (Orthoparaldehído y el Glutaraldehído).
- Endoscopía flexible e instrumentos ortopédicos.
- Por su efectividad y concentración ofrece 1 ciclo de lavado mas que sus competidores.

CLEANING CYCLES.

Regain an extra disinfection cycle per hour with Medline OPA/28's fast cycling time². This can expand your operational efficiencies and reduce medical instrument downtime.

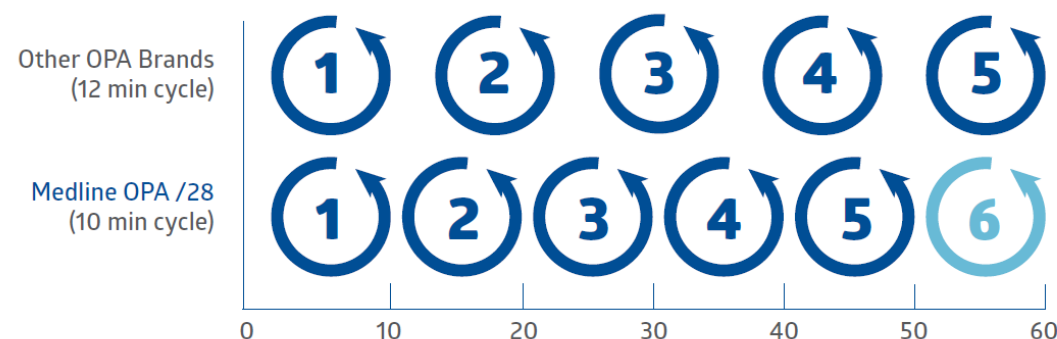



MDS88128ME

Detergente enzimático Multi propósito.

Fabricado: Medline

- Detergente Enzimático “Multi”, esta formulado para una limpieza profunda y eficaz protegiendo tu inversión.
- Esta compuesto por: Proteínas (Protease), Carbohidratos (Amylase) y enzimas celulosas y surfactantes selectos trabajan en conjunto para limpiar endoscopios e instrumentos quirúrgicos.
- No corrosivo protegiendo las superficies vulnerables de los instrumentos.
- Usos: Indicado para uso manual, maquinas de lavado ultrasónica y sistemas automáticos de limpieza.
- Formulado con pH Neutral para uso en manos e instrumentos.



MDS88000B1

Detergente para lavadoras automáticas Baja espuma.

Fabricado: Medline

- Uso recomendado para lavadoras automáticas y maquinas ultrasónicas con instrumental pre limpiado.
- Detergente Hemolítico que remueve sangre y grasa, con enjuague sin manchas no dejando residuos contienen agentes quelantes y anticorrosivos que ayuda a prolongar la vida de los instrumentos.
- Altamente concentrado que ayuda a aumentar los ahorros.
- El pH neutral es suave para uso manual.
- Formulado con pH Neutral para uso en manos e instrumentos.



Detergente para uso manual de Alta espuma.

Fabricado: Medline

- Uso recomendado para lavado manual de los instrumentos.
- Detergente Hemolítico que remueve sangre y aceite, con enjuague sin manchas no dejando residuos.
- Contienen agentes anticorrosivos que ayuda a prolongar la vida de los instrumentos.
- El pH neutral es suave para uso manual.
- No recomendado para maquinas.

MDS88000B2



MDS88000T2



MDS88000T32

Lubricante de instrumental en Spray o Galón.

Fabricado: Medline


- Lubricante que penetra en las bisagras y uniones mejorando la función y previene la corrosión de los instrumentales.
- Libre de aceites minerales y libre de silicón.
- Compatible con todos los metales grado médico incluyendo el Acero inoxidable, titanio, aluminio, latón y piezas de plástico.
- El pH neutral es suave para uso manual.
- No recomendado para maquinas.
- Galón y Spray.



MDS200846 (AZUL)
MDS200856 (VERDE)

Exposure Control

Las cintas testigo Medline ofrecen seguridad en la esterilización y detectan la temperatura correcta en color verde o azul .

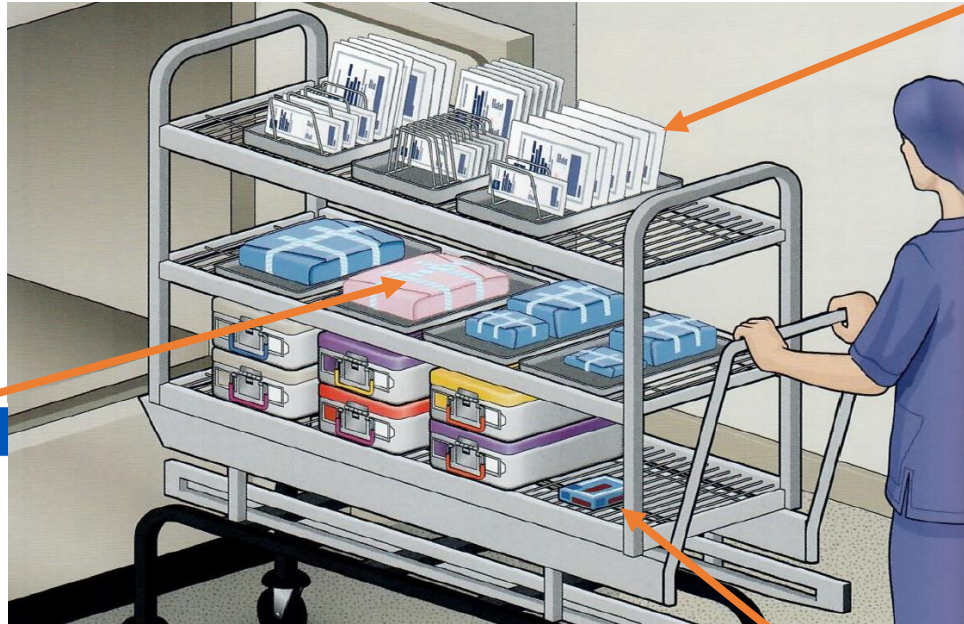

Pack Control

Los indicadores testigo Medline aseguran internamente la apropiada esterilización de los paquetes, bolsas y bultos.



MDS200100
MDS200615



Load Control

Determina si las condiciones de esterilización son adecuadas para matar bacterias y esporas resistentes con una carga.

MDS200405



STARTAG
Change Lives, Together

Pack Monitoring

Type 5 Indicadores

Indicadores químicos.

Migrating Ink Integrator Strip – MDS200615




- Ventana mas larga para confirmar si la carga es rechazada o aceptada comparando con otras marcas donde se queda en duda.
- 4 Pulgadas de Longitud.



Processed
Reject



Processed
Accept

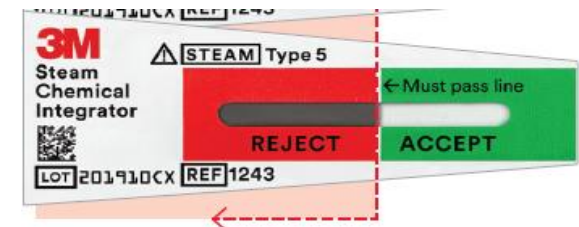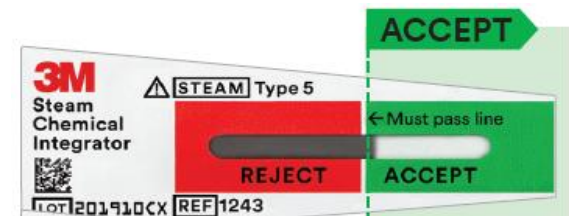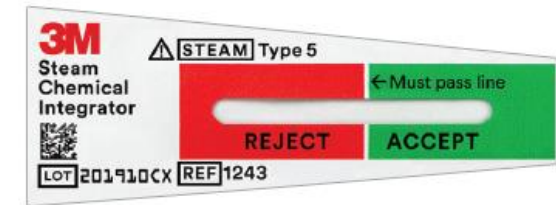

TARJETA AVANZADA DE DETECCION

- Con esta tecnología diagnostica fugas de aire, humedad y sobrecalentamiento y la presencia de gases no condensables.
- Indicador de color de Morado (RECHAZO) a Verde (APROBADO)
- Tamaño pequeño
- Genera ahorros.



MDS200450



Unprocessed



PASS *No Fault*



Fail *Small Fault*



PASS *Water Droplets*




Fail *Medium Fault*



PASS *Severe Wetness*



Fail *Large Fault*

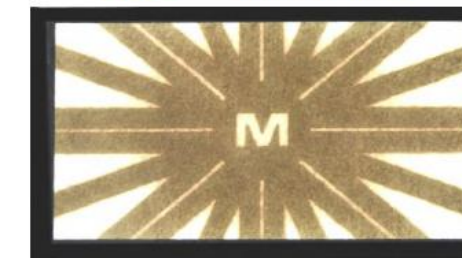

PASS *Extreme Dry Time*



Oficinas:

Tlalnepantla Sentura Piso 10

5529125165

5554310532

Monterrey

818 3967663

Guanajuato

477 2230513