

Conexão Interna



EEE[®]

DENTAL COMPONENTES



Exports to Germany since 2011

Aperfeiçoando tecnologias



Aperfeiçoando tecnologias

O aperfeiçoamento constante nos aproxima da perfeição. Por isso, os componentes para prótese sobre implantes da EFF Dental são minuciosamente estudados antes de serem produzidos para trazer soluções de alta performance e assim, facilitar o seu dia a dia, com qualidade e inteligência.

Toda a linha de produtos foi planejada e desenvolvida por dentistas e técnicos em prótese a partir de situações vivenciadas na clínica e no laboratório, incorporando tecnologia nipo-germânica para oferecer o melhor. Os componentes são produzidos no Brasil, garantindo uma vantagem extra: excelente custo-benefício para seus trabalhos.

Obrigado por escolher a EFF Dental


Diretor técnico:
Flavio Rosa de Oliveira
CROSP-CD 90026




Controle de Qualidade

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer alto controle de qualidade para que você ofereça a seus pacientes segurança os tratamento. Realizamos estudos constantes nos componentes para garantir a mesma excelência dos produtos nacionais e importados.

Controle de Adaptação

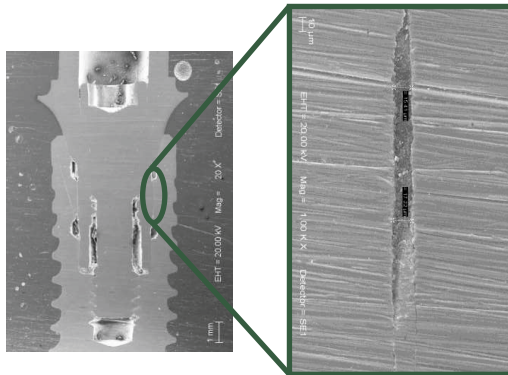

* Adaptação do pilar cimentável EFF Dental, realizada em MEV

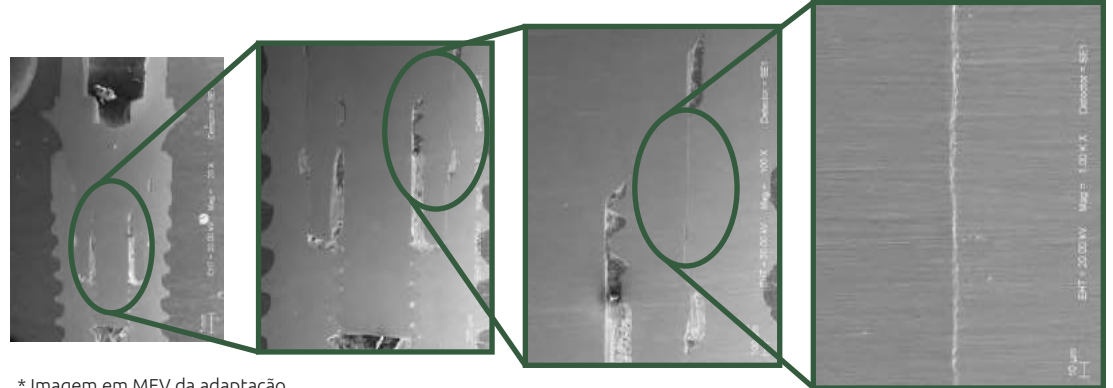

* Imagem em MEV da adaptação entre o pilar protético da EFF Dental e o implante.


Controle de Fadiga

Ensaio Estáticos

Os dados e gráficos abaixo demonstram os resultados obtidos dos ensaios estáticos e as curvas de força versus deslocamento.

Amostra	Carga Máxima (N)
MET140232 - 1	621,10
MET140232 - 2	601,05
MET140232 - 3	611,07
MET140232 - 4	567,89
MET140232 - 5	548,51
Média	589,92
Desvio Padrão	30,59


* Tabela - Os componentes da EFF Dental aguentaram uma carga média de 589,92N

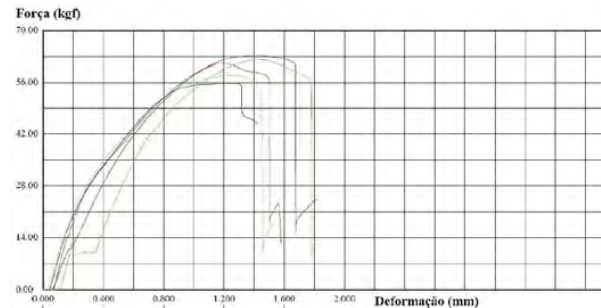


* Figura -Curva de ensaio estático

Ensaio Dinâmicos

A figura abaixo contém a curva de carga versus número de ciclos, onde se verifica que a resistência à fadiga corresponde a 30% (176,98N) da carga de referência (589,92N).

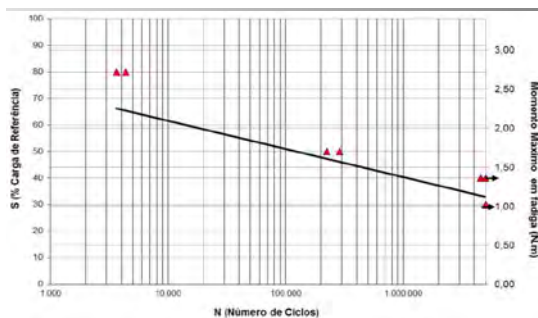



* Figura - Curva SxN do ensaio de fadiga
* Fonte CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, 04/2014

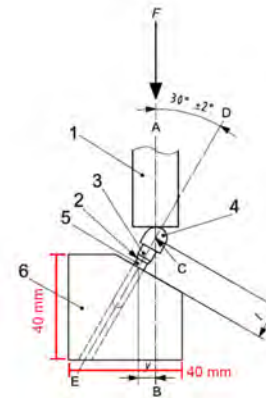

* Figura - Ilustração da montagem do ensaio - equipamento EMIC modelo DL1000, segundo instrução do IMP 320 e norma ISO14801: 2007

Controle em todos os processos

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer sempre o melhor para os seus clientes, e para isso se preocupa com a qualidade da produção desde o momento do armazenamento da matéria prima, até a embalagem final, garantindo a rastreabilidade para o cliente.

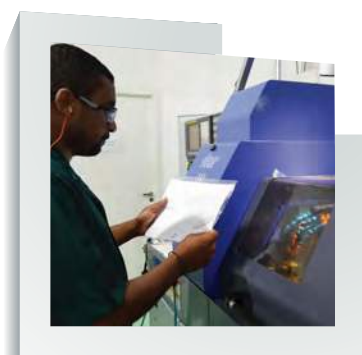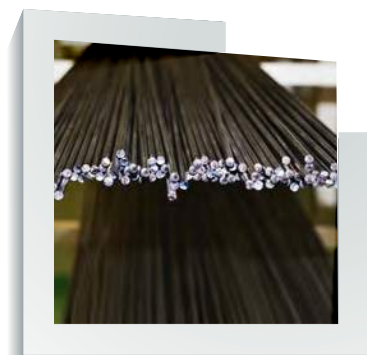

Entenda o que significa cada certificado

A EFF Dental possui certificações anualmente processadas pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais e todo ano, auditores alemães visitam a EFF Dental para analisar os processos da fábrica.



Certificado de Boas Práticas Anvisa



ISO13485 Certificação Médica Internacional
ISO9001 Certificação Administrativa de Processos



Certificado da Comunidade Européia

S.M.P. (Sistema Multi Plataforma)

Para melhor compreender a sistemática e características dos seus produtos, a EFF Dental desenvolveu uma terminologia que simplificará a identificação dos produtos similares do mercado.

O Sistema Multi Plataforma (S.M.P.), é uma nomenclatura única para identificar componentes que utilizam vários sistemas de implantes do mercado que exercem a mesma função, facilitando assim a seleção do componente ideal para o tratamento.




Como identificar o seu componente

A EFF Dental produz componentes protéticos para a maioria dos sistemas e marcas de implantes do mercado internacional e nacional e pensando na facilidade da busca por itens necessários para o tratamento dos seus pacientes, oferecemos o manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma) onde você encontra a peça certa para cada tratamento.

Com a embalagem do implante em mãos, verifique a marca comercial¹, código do produto², diâmetro do implante e plataforma protética³. Com essas informações, você identifica no manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma), a S.M.P. EFF e a página onde estão localizados os componentes.

Exemplo (CM): Implante Nobel Biocare® de 3.0mm de diâmetro e 3.0mm de plataforma protética tem o código S.M.P. EFF K3.1 e está na página 10 do catálogo.

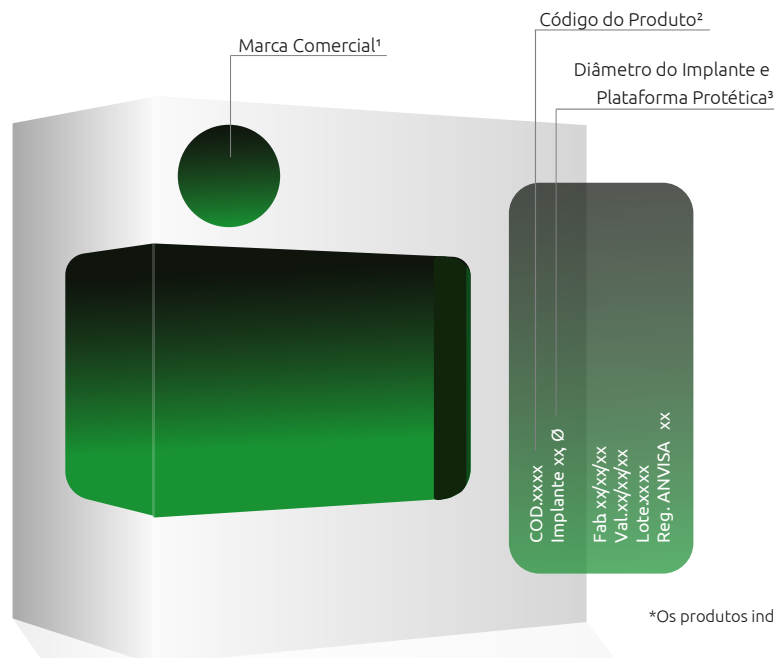

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Aplicação	Especificação	Implante	Plataforma Protética	S.M.P. EFF	Página
Nobel Biocare® N P.		3.5	3.5	K2.1	8
Nobel Biocare® R P.		4.3	4.3	K2.2	9
Nobel Biocare® W P		5.0	5.0	K2.3	10
Frialit®		3.8	3.8	O2.2	11
Frialit®		4.5	4.5	O2.3	12
Frialit®		5.5	5.5	O2.4	13
Biomet 3i™		3.25	3.4	L2.1	14
Biomet 3i™		4.0	4.1	L2.2	15
Biomet 3i™		5.0	5.0	L2.3	16
NEO		3.75/4.3/5.0	4.3/5.0	A2.1	17
SIN®		3.8	3.8	B2.1	11
SIN®		4.0/4.3	4.5	B2.2	12
SIN®		4.0/5.0	5.5	B2.3	13
Conexão®		3.75/4.0/4.3/5.0	4.1/4.3/5.0/6.0	C2.1/C2.2/C2.3	18
Implacil®		3.3/3.5	3.5	D2.1	19
Implacil®		3.75/4.3	4.0	D2.2	20
Implacil®		4.75/5.0	5.0	D2.3	21
Dentoflex®		3.75	3.75	G2.3	22
Diamond®		3.3/3.5	3.5	D2.1	19
Diamond®		3.75/4.3	4.0	D2.2	20
Diamond®		4.75/5.0	5.0	D2.3	21
Implac®		3.75/4.0/4.0/5.0	4.1/4.3/5.0/6.0	C2.1/C2.2/C2.3	18
Derig®		3.5	3.5	K2.1	8
Derig®		4.3	4.3	K2.2	9
Mini Pilar				M.P.	23
Chaves Digitais					24
Chaves para Torquímetro					25
Kits Protéticos					26
Informações da Etiqueta					27



Rosca Interna
Ø1.80
Plataforma
Ø3.50
Implante
Ø3.50

Componentes para Implantes Replace Select Tri-Channel® Ø3.5 - NP



K2.1

Componentes para prótese aparafusada e cimentada




Tapa Implante
EFF 152 . 01



Cicatrizador
EFF 102 . 01A cinta 3.0mm
EFF 102 . 01B cinta 5.0mm
EFF 102 . 01C cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 202 . 01A . CJ

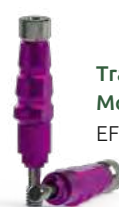

Transfer Moldeira Fechada
EFF 202 . 01B . CJ



Análogo do Implante
EFF 302 . 01



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 402 . 01A
Rotacional
EFF 402 . 01B



Munhão Cimentável
EFF 502 . 01A cinta 1.0mm
EFF 502 . 01B cinta 2.0mm
EFF 502 . 01C cinta 3.0mm
EFF 502 . 01D cinta 4.0mm



Ucla Plástica
Anti Rotacional
EFF 702 . 01A
Rotacional
EFF 702 . 01B



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 802 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 802 . 01B . CJ



EFF 2103 . 03C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 03F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2103 . 03C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 03F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2103 . 03C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 03F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2103 . 03C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 03F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1102 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1102 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1102 . 01C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 01D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado
17° EFF 1102 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1102 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 01 . 1C . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm

30° EFF 1102 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 01 . 2B . CJ cinta 4.0mm



EsthetiOne
EFF 902 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 902 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 902 . 01C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 302 . 01 . D



Abut. Rollings*
EFF 1502 . 01A . T
EFF 1502 . 01A . C



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6802 . 01A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 01A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 01A . 3 cinta 3.0mm



Interface para Zircônia
EFF 6902 . 01A



EFF 2103 . 03C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 03F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2103 . 03C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 03F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



Scan Intraoral
EFF 9202 . 01A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A

Componentes para Implantes Replace Select Tri-Channel® Ø4.3 RP

Rosca Interna


Ø2.00

Plataforma

Ø4.30

Implante

Ø4.30

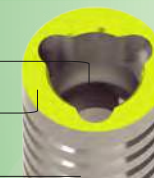

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 152 . 02



Cicatrizador
EFF 102 . 02A cinta 3.0mm
EFF 102 . 02B cinta 5.0mm
EFF 102 . 02C cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 202 . 02A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 202 . 02B . CJ



Análogo do Implante
EFF 302 . 02



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 402 . 02A
Rotacional
EFF 402 . 02B



Munhão Cimentável
EFF 502 . 02A cinta 1.0mm
EFF 502 . 02B cinta 2.0mm
EFF 502 . 02C cinta 3.0mm
EFF 502 . 02D cinta 4.0mm



Ucla Plástica
Anti Rotacional
EFF 702 . 02A
Rotacional
EFF 702 . 02B



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 802 . 02A . CJ
Rotacional
EFF 802 . 02B . CJ



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Torque 32Ncm

Mini Pilar Reto
EFF 1102 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1102 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1102 . 02C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 02D . CJ cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

Mini Pilar Angulado
EFF 1102 . 02 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1102 . 02 . 1B . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 02 . 1C . CJ cinta 4.0mm

17°

30°
EFF 1102 . 02 . 2A . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 02 . 2B . CJ cinta 4.0mm
EFF 1102 . 02 . 2C . CJ cinta 5.0mm

Pilar para prótese parafusada unitária



Torque 32Ncm

EsthetiOne
EFF 902 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 902 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 902 . 02C . CJ cinta 3.0mm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 302 . 02 . D



Abut. Rollings*
EFF 1502 . 02A . T
EFF 1502 . 02A . C



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6802 . 02A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 02A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 02A . 3 cinta 3.0mm



Interface para Zirconia
EFF 6902 . 02A



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 04C ★
Parafuso Unigrip para Zirconia
Torque 32Ncm



Scan Intraoral
EFF 9202 . 02A . P . CJ



Scan-Body Large
EFF 9700 . A



Componentes para Implantes Replace Select Tri-Channel® Ø5.0 WP

SMP
Sistema Multi-Protótipo
K2.3

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 152 . 03



Cicatrizador
EFF 102 . 03A cinta 3.0mm
EFF 102 . 03B cinta 5.0mm
EFF 102 . 03C cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 202 . 03A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 202 . 03B . CJ



Análogo do Implante
EFF 302 . 03



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 402 . 03A
Rotacional
EFF 402 . 03B



Munhão Cimentável
EFF 502 . 03A cinta 1.0mm
EFF 502 . 03B cinta 2.0mm
EFF 502 . 03C cinta 3.0mm
EFF 502 . 03D cinta 4.0mm



Ucla Plástica
Anti Rotacional
EFF 702 . 03A
Rotacional
EFF 702 . 03B



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 802 . 03A . CJ
Rotacional
EFF 802 . 03B . CJ



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1102 . 03A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1102 . 03B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1102 . 03C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1102 . 03D . CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm



Mini Pilar Angulado
17° EFF 1102 . 03 . 1A . CJ cinta 2.0mm
30° EFF 1102 . 03 . 2A . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm



EsthetiOne
EFF 902 . 03A . CJ cinta 1.0mm
EFF 902 . 03B . CJ cinta 2.0mm
EFF 902 . 03C . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 302 . 03 . D



Abut. Rollings*
EFF 1502 . 03A . T
EFF 1502 . 03A . C



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6802 . 03A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 03A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 03A . 3 cinta 3.0mm



Interface para Zircônia
EFF 6902 . 03A



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 04C ★
Parafuso Unigrip para Zircônia
Torque 32 Ncm



Scan Intraoral
EFF 9202 . 03A . P . CJ



Scan-Body Large
EFF 9700 . A



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

Parafuso Ø1.6
EFF 104 . 05 . 1A cinta 2.0mm
EFF 104 . 05 . 1B cinta 4.0mm
EFF 104 . 05 . 1C cinta 6.0mm
Parafuso Ø1.8
EFF 104 . 05 . 2A cinta 2.0mm
EFF 104 . 05 . 2B cinta 4.0mm
EFF 104 . 05 . 2C cinta 6.0mm



Transfer Moldeira Aberta

Rosca Ø 1.60
EFF 204 . 05 . 1A . CJ
Rosca Ø 1.80
EFF 204 . 05 . 2A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

Rosca Ø 1.60
EFF 204 . 05 . 1B . CJ
Rosca Ø 1.80
EFF 204 . 05 . 2B . CJ



Análogo do Implante

Rosca Ø 1.60
EFF 304 . 05
Rosca Ø 1.80
EFF 304 . 05 . 1



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 404 . 05A
Rotacional
EFF 404 . 05B



Munhão Cimentável

EFF 504 . 05A cinta 1.0mm
EFF 504 . 05B cinta 2.0mm
EFF 504 . 05C cinta 3.0mm
EFF 504 . 05D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 704 . 05A
Rotacional
EFF 704 . 05B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 804 . 05A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 05B . CJ



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 14A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 15A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 14A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 15A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 14A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 15A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 14A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 15A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

Rosca de Ø1.6

EFF 1104 . 05 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 05 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 05 . 01C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 05 . 01D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm

Rosca de Ø1.8

EFF 1104 . 05 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 05 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 05 . 02C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 05 . 02D . CJ cinta 4.0mm



Mini Pilar Angulado 17°

Rosca de Ø1.6

EFF 1104 . 05 . 1A . 1 . CJ cinta 2.0mm
Rosca de Ø1.8
EFF 1104 . 05 . 1A . 2 . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 05 . 1B . 2 . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Mini Pilar Angulado 30°

Rosca de Ø1.6

EFF 1104 . 05 . 2A . 1 . CJ cinta 3.0mm
Rosca de Ø1.8
EFF 1104 . 05 . 2A . 2 . CJ cinta 3.0mm



EsthetiOne

Rosca de Ø1.6

EFF 904 . 05 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 05 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 05 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Rosca de Ø1.8

Torque 20Ncm

EFF 904 . 05 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 05 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 05 . 2C . CJ cinta 3.0mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital

Rosca Ø 1.60

EFF 304 . 05 . D
Rosca Ø 1.60
EFF 304 . 05 . 1 . D



Abut. Rollings*

EFF 1504 . 05A . T
EFF 1504 . 05A . C



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 14A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 15A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM

Large

EFF 6804 . 05A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 05A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 05A . 3 cinta 3.0mm



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 14A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 15A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional

EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia

EFF 6904 . 05A



Scan Intraoral

Rosca de Ø1.6

EFF 9204 . 05A . 1 . P . CJ

Rosca de Ø1.8

EFF 9204 . 05A . 2 . P . CJ



Scan-Body

Large

EFF 9700 . A



Rosca de Ø1.6
EFF 2102 . 15A
Rosca de Ø1.8
EFF 2103 . 11A
Parafuso Hexagonal para Zircônia

Torque 20Ncm

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø1.60/1.80
Plataforma
Ø4.50
Implante
Ø4.00/4.30

Componentes para Implantes Hexágono Interno Longo Ø4.5



O2.3/B2.2

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador
Parafuso Ø1.60
EFF 104 . 06 . 1A cinta 2.0mm
EFF 104 . 06 . 1B cinta 4.0mm
EFF 104 . 06 . 1C cinta 6.0mm
Parafuso Ø1.80
EFF 104 . 06 . 2A cinta 2.0mm
EFF 104 . 06 . 2B cinta 4.0mm
EFF 104 . 06 . 2C cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
Rosca Ø 1.60
EFF 204 . 06 . 1A . CJ
Rosca Ø 1.80
EFF 204 . 06 . 2A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
Rosca Ø 1.60
EFF 204 . 06 . 1B . CJ
Rosca Ø 1.80
EFF 204 . 06 . 2B . CJ



**Análogo
do Implante**
Rosca Ø 1.60
EFF 304 . 06
Rosca Ø 1.80
EFF 304 . 06 . 1



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 404 . 06A
Rotacional
EFF 404 . 06B



Munhão Cimentável
EFF 504 . 06A cinta 1.0mm
EFF 504 . 06B cinta 2.0mm
EFF 504 . 06C cinta 3.0mm
EFF 504 . 06D cinta 4.0mm




Ucla Plástica
Anti Rotacional
EFF 704 . 06A
Rotacional
EFF 704 . 06B



**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 804 . 06A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 06B . CJ



Torque 20Ncm

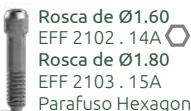

Torque 20Ncm



Torque 20Ncm



Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 20Ncm

Mini Pilar Reto
Rosca de Ø1.60
EFF 1104 . 06 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 06 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 06 . 01C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 06 . 01D . CJ cinta 4.0mm

Rosca de Ø1.80
EFF 1104 . 06 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 06 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 06 . 02C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 06 . 02D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

Mini Pilar Angulado 17°
Rosca de Ø1.60
EFF 1104 . 06 . 1A . 1 . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 06 . 1B . 1 . CJ cinta 3.0mm
Rosca de Ø1.80
EFF 1104 . 06 . 1A . 2 . CJ cinta 2.0mm
Mini Pilar Angulado 30°
Rosca de Ø1.60
EFF 1104 . 06 . 2A . 1 . CJ cinta 3.0mm
Rosca de Ø1.80
EFF 1104 . 06 . 2A . 2 . CJ cinta 3.0mm



Torque 20Ncm

EsthetiOne
Rosca de Ø1.60
EFF 904 . 06 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 06 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 06 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Rosca de Ø1.80
EFF 904 . 06 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 06 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 06 . 2C . CJ cinta 3.0mm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
Rosca de Ø1.60
EFF 304 . 06 . D
Rosca de Ø1.80
EFF 304 . 06 . 1 . D



Abut. Rollings*
EFF 1504 . 06A . T
EFF 1504 . 06A . C



Torque 20Ncm



**Link para CAD/CAM
Large**
EFF 6804 . 06A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 06A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 06A . 3 cinta 3.0mm



Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia
EFF 6904 . 05A



Scan Intraoral
Rosca de Ø1.60
EFF 9204 . 06A . 1 . P . CJ
Rosca de Ø1.80
EFF 9204 . 06A . 2 . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



Rosca de Ø1.60
EFF 2102 . 15A
Rosca de Ø1.80
EFF 2103 . 11A
Parafuso Hexagonal para Zircônia
Torque 20Ncm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

Parafuso Ø1.0
EFF 104 . 07 . 1A cinta 2.0mm
EFF 104 . 07 . 1B cinta 4.0mm
EFF 104 . 07 . 1C cinta 6.0mm
Parafuso Ø1.80
EFF 104 . 07 . 2A cinta 2.0mm
EFF 104 . 07 . 2B cinta 4.0mm
EFF 104 . 07 . 2C cinta 6.0mm



Transfer Moldeira Aberta

Rosca Ø 1.60
EFF 204 . 07 . 1A . CJ
Rosca Ø 1.80
EFF 204 . 07 . 2A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

Rosca Ø 1.60
EFF 204 . 07 . 1B . CJ
Rosca Ø 1.80
EFF 204 . 07 . 2B . CJ



Análogo do Implante

Rosca Ø 1.60
EFF 304 . 07
Rosca Ø 1.80
EFF 304 . 07 . 1



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 404 . 07A
Rotacional
EFF 404 . 07B



Munhão Cimentável

EFF 504 . 07A cinta 1.0mm
EFF 504 . 07B cinta 2.0mm
EFF 504 . 07C cinta 3.0mm
EFF 504 . 07D cinta 4.0mm




Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 704 . 07A
Rotacional
EFF 704 . 07B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 804 . 07A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 07B . CJ

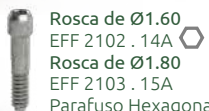

Torque 20Ncm



Torque 20Ncm



Torque 20Ncm



Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

Rosca de Ø1.60
EFF 1104 . 07 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 07 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 07 . 01C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 07 . 01D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm

Rosca de Ø1.80
EFF 1104 . 07 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 07 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 07 . 02C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 07 . 02D . CJ cinta 4.0mm

Pilar para prótese parafusada unitária



EsthetiOne

Rosca de Ø1.60
EFF 904 . 07 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 07 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 07 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Rosca de Ø1.80
EFF 904 . 07 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 07 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 07 . 2C . CJ cinta 3.0mm

Componentes para CAD/CAM




Análogo Digital

Rosca de Ø1.60
EFF 304 . 07 . D
Rosca de Ø1.80
EFF 304 . 07 . 1 . D



Abut. Rollings*

EFF 1504 . 07A . T
EFF 1504 . 07A . C

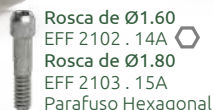

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM (Switching)

Large
EFF 6804 . 06A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 06A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 06A . 3 cinta 3.0mm



Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia

EFF 6904 . 05A



Scan Intraoral (Switching)

Rosca de Ø1.60
EFF 9204 . 06A . 1 . P . CJ
Rosca de Ø1.80
EFF 9204 . 06A . 2 . P . CJ



Scan-Body

Large
EFF 9700 . A



Rosca de Ø1.60
EFF 2102 . 15A
Rosca de Ø1.80
EFF 2103 . 11A
Parafuso Hexagonal para Zircônia
Torque 20Ncm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Rosca Interna
Ø1.60
Plataforma
Ø3.40
Implante
Ø3.25

Componentes para Implantes Hexágono Interno Longo Ø3.4



L2.1

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 104 . 01A cinta 2.0mm
EFF 104 . 01B cinta 4.0mm
EFF 104 . 01C cinta 6.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 204 . 01A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 204 . 01B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 304 . 01



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 404 . 01A
Rotacional
EFF 404 . 01B



Munhão Cimentável

EFF 504 . 01A cinta 1.0mm
EFF 504 . 01B cinta 2.0mm
EFF 504 . 01C cinta 3.0mm
EFF 504 . 01D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 704 . 01A
Rotacional
EFF 704 . 01B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 804 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 01B . CJ



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1104 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 01C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 01D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1104 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 304 . 01 . D



Abut. Rollings*
EFF 1504 . 01A . T
EFF 1504 . 01A . C



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large

EFF 6804 . 01A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 01A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 01A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zircônia
EFF 6904 . 01A



Scan Intraoral
EFF 9204 . 01A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2102 . 15A 
Parafuso Hexagonal para Zircônia

Torque 20Ncm

Componentes para Implantes Hexágono Interno Longo Ø4.1

Rosca Interna

Ø1.60

Plataforma

Ø4.10

Implante

Ø4.00



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 104 . 02A cinta 2.0mm
EFF 104 . 02B cinta 4.0mm
EFF 104 . 02C cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 204 . 02A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 204 . 02B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 304 . 02



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 404 . 02A
Rotacional
EFF 404 . 02B



Munhão Cimentável

EFF 504 . 02A cinta 1.0mm
EFF 504 . 02B cinta 2.0mm
EFF 504 . 02C cinta 3.0mm
EFF 504 . 02D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 704 . 02A
Rotacional
EFF 704 . 02B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 804 . 02A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 02B . CJ



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada

Pilar para prótese parafusada unitária



Mini Pilar Reto

EFF 1104 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 02C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 02D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1104 . 02 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 02 . 1B . CJ cinta 3.0mm
30° EFF 1104 . 02 . 2A . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 02 . 2B . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne

EFF 904 . 02A cinta 1.0mm
EFF 904 . 02B cinta 2.0mm
EFF 904 . 02C cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 304 . 02 . D



Abut. Rollings*
EFF 1504 . 02A . T
EFF 1504 . 02A . C

EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM

Large
EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia

EFF 6904 . 02A



Scan Intraoral
EFF 9204 . 02A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



EFF 2102 . 15A 
Parafuso Hexagonal para Zircônia


Torque 20Ncm

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

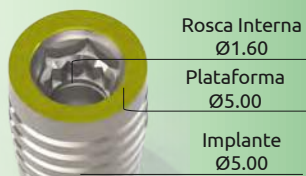

Componentes para Implantes Hexágono Interno Longo Ø5.00



L2.3

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 104 . 03A cinta 2.0mm
EFF 104 . 03B cinta 4.0mm
EFF 104 . 02C cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 204 . 03A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 204 . 03B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 304 . 03



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 404 . 03A
Rotacional
EFF 404 . 03B



Munhão Cimentável

EFF 504 . 03A cinta 1.0mm
EFF 504 . 03B cinta 2.0mm
EFF 504 . 03C cinta 3.0mm
EFF 504 . 03D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 704 . 03A
Rotacional
EFF 704 . 03B




Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 804 . 03A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 03B . CJ




EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm




EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1104 . 03A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 03B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 03C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 03D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1104 . 03 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 03 . 1B . CJ cinta 3.0mm

30° EFF 1104 . 03 . 2A . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM


* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 304 . 03 . D



Abut. Rollings*
EFF 1504 . 03A . T
EFF 1504 . 03A . C

EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM (Switching)

Large
EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm

EFF 2102 . 06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia
EFF 6904 . 02A



Scan Intraoral
EFF 9204 . 03A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A




EFF 2102 . 15A 
Parafuso Hexagonal para Zircônia
Torque 20Ncm

Componentes para Implantes Hexágono Interno Longo Ø4.3/Ø5.0

Rosca Interna
Ø1.60

Plataforma
Ø4.30/5.00

Implante
Ø4.00/4.30/5.00

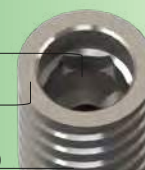

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 104 . 09A cinta 2.0mm
EFF 104 . 09B cinta 3.0mm
EFF 104 . 09C cinta 4.0mm
EFF 104 . 09D cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 204 . 09A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 204 . 09B . CJ



**Análogo
do Implante**
Ø4.30
EFF 304 . 09
Ø5.00
EFF 304 . 10



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 404 . 09A
Rotacional
EFF 404 . 09B



Munhão Cimentável

EFF 504 . 09A cinta 1.0mm
EFF 504 . 09B cinta 2.0mm
EFF 504 . 09C cinta 3.0mm
EFF 504 . 09D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 704 . 09A
Rotacional
EFF 704 . 09B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 804 . 09A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 09B . CJ



EFF 2102 . 06A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 06A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1104 . 09A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 09B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 09C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 09D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1104 . 09 . 1A . CJ cinta 2.0mm
30° EFF 1104 . 09 . 2A . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne

EFF 904 . 09A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 09B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 09C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 304 . 09 . D



Abut. Rollings*
EFF 1504 . 09A . T
EFF 1504 . 09A . C

EFF 2102 . 06A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large

EFF 6804 . 09A . 1 cinta 1.0mm

EFF 2102 . 06A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia

EFF 6904 . 09A



Scan Intraoral
EFF 9204 . 09A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2102 . 20A
Parafuso Hexagonal para Zircônia

Torque 20Ncm



Rosca Interna
Ø1.80
Plataforma
Ø4.10/4.30/5.00/6.00
Implante
Ø3.75/4.00/4.30/5.00

Componentes para Implantes

Hexágono Interno Longo Ø4.1/Ø4.3 Ø5.0/Ø6.0



C2.1/C2.2
C2.3

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador
EFF 104 . 11A cinta 2.0mm
EFF 104 . 11B cinta 4.0mm
EFF 104 . 11C cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 204 . 11A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 204 . 11B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 304 . 11



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 404 . 11A
Rotacional
EFF 404 . 11B



Munhão Cimentável
EFF 504 . 11A cinta 1.0mm
EFF 504 . 11B cinta 2.0mm
EFF 504 . 11C cinta 3.0mm
EFF 504 . 11D cinta 4.0mm




Ucla Plástica
Anti Rotacional
EFF 704 . 11A
Rotacional
EFF 704 . 11B




**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 804 . 11A . CJ
Rotacional
EFF 804 . 11B . CJ




EFF 2103 . 18A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm




EFF 2103 . 18A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 18A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2103 . 18A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada

Pilar para prótese parafusada unitária



Mini Pilar Reto
EFF 1104 . 11A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1104 . 11B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 11C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1104 . 11D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado
17° EFF 1104 . 11 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1104 . 11 . 1B . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne
EFF 904 . 11A . CJ cinta 1.0mm
EFF 904 . 11B . CJ cinta 2.0mm
EFF 904 . 11C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.




Análogo Digital
EFF 304 . 11 . D



Abut. Rollings*
EFF 1504 . 11A . T
EFF 1504 . 11A . C




EFF 2103 . 18A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6804 . 11A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6804 . 11A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6804 . 11A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2103 . 18A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia
EFF 6904 . 10A




Scan Intraoral
EFF 9204 . 11A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2103 . 11A 
Parafuso Hexagonal para Zircônia
Torque 20Ncm

Componentes para Implantes Hexágono Interno Curto Ø3.5

Rosca Interna

Ø1.80

Plataforma

Ø3.50

Implante

Ø3.30/3.50



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 103 . 01A cinta 2.0mm
EFF 103 . 01B cinta 3.0mm
EFF 103 . 01C cinta 4.0mm
EFF 103 . 01D cinta 5.0mm
EFF 103 . 01E cinta 6.0mm
EFF 103 . 01F cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta

EFF 203 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

EFF 203 . 01B . CJ



Análogo do Implante

EFF 303 . 01



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 403 . 01A
Rotacional
EFF 403 . 01B



Munhão Cimentável

EFF 503 . 01A cinta 1.0mm
EFF 503 . 01B cinta 2.0mm
EFF 503 . 01C cinta 3.0mm
EFF 503 . 01D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 703 . 01A
Rotacional
EFF 703 . 01B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 803 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 803 . 01B . CJ



EFF 2103 . 02A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 02A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 02A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 02A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1103 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1103 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1103 . 01C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1103 . 01D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1103 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne

EFF 903 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 903 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 903 . 01C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital

EFF 303 . 01 . D



Abut. Rollings*

EFF 1503 . 01A . T
EFF 1503 . 01A . C



EFF 2103 . 02A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM

Large
EFF 6803 . 01A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6803 . 01A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6803 . 01A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2103 . 02A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia

EFF 6903 . 01A



EFF 2103 . 08A
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 20Ncm



Scan Intraoral

EFF 9203 . 01A . P . CJ



Scan-Body

Large
EFF 9700 . A

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø2.00

Plataforma
Ø4.00

Implante
Ø3.75/4.30

Componentes para Implantes Hexágono Interno Curto Ø4.0

SMP
Sistema Multi Plataformad
D2.2

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 103 . 02A - cinta 2.0mm
EFF 103 . 02B - cinta 3.0mm
EFF 103 . 02C - cinta 4.0mm
EFF 103 . 02D - cinta 5.0mm
EFF 103 . 02E - cinta 6.0mm
EFF 103 . 02F - cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta

EFF 203 . 02A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

EFF 203 . 02B . CJ



Análogo do Implante

EFF 303 . 02



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 403 . 02A
Rotacional
EFF 403 . 02B



Munhão Cimentável

EFF 503 . 02A - cinta 1.0mm
EFF 503 . 02B - cinta 2.0mm
EFF 503 . 02C - cinta 3.0mm
EFF 503 . 02D - cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 703 . 02A
Rotacional
EFF 703 . 02B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 803 . 02A . CJ
Rotacional
EFF 803 . 02B . CJ



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal


Torque 32Ncm



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 32Ncm

Mini Pilar Reto

EFF 1103 . 02A . CJ - cinta 1.0mm
EFF 1103 . 02B . CJ - cinta 2.0mm
EFF 1103 . 02C . CJ - cinta 3.0mm
EFF 1103 . 02D . CJ - cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

Mini Pilar Angulado

17° EFF 1103 . 02 . 1A . CJ - cinta 2.0mm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital

EFF 303 . 02 . D



Abut. Rollings*

EFF 1503 . 02A . T
EFF 1503 . 02A . C



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



Link para CAD/CAM

Large
EFF 6803 . 02A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6803 . 02A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6803 . 02A . 3 - cinta 3.0mm



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zirconia

EFF 6903 . 02A



Scan Intraoral

EFF 9203 . 02A . P . CJ



Scan-Body

Large
EFF 9700 . A



EFF 2104 . 03A 
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 32Ncm

Componentes para Implantes Hexágono Interno Curto Ø5.0

Rosca Interna


Ø2.00

Plataforma

Ø5.00

Implante

Ø4.75/5.00

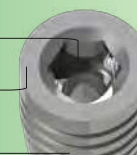

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

EFF 103 . 03A cinta 2.0mm
EFF 103 . 03B cinta 3.0mm
EFF 103 . 03C cinta 4.0mm
EFF 103 . 03D cinta 5.0mm
EFF 103 . 03E cinta 6.0mm
EFF 103 . 03F cinta 7.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 203 . 03A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 203 . 03B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 303 . 03



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 403 . 03A
Rotacional
EFF 403 . 03B



Munhão Cimentável

EFF 503 . 03A cinta 1.0mm
EFF 503 . 03B cinta 2.0mm
EFF 503 . 03C cinta 3.0mm
EFF 503 . 03D cinta 4.0mm



Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF 703 . 03A
Rotacional
EFF 703 . 03B



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 803 . 03A . CJ
Rotacional
EFF 803 . 03B . CJ



EFF 2104 . 01A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 01A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 01A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 01A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1103 . 03A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1103 . 03B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1103 . 03C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1103 . 03D . CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1103 . 03 . 1A . CJ cinta 2.0mm

Torque 32Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.



Análogo Digital
EFF 303 . 03 . D



Abut. Rollings*
EFF 1503 . 03A . T
EFF 1503 . 03A . C



EFF 2104 . 01A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



Link para CAD/CAM

Large
EFF 6803 . 03A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6803 . 03A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6803 . 03A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2104 . 01A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zirconia

EFF 6903 . 03A



EFF 2104 . 03A
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 32Ncm



Scan Intraoral
EFF 9203 . 03A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



Rosca Interna
Ø2.00
Plataforma
Ø3.75
Implante
Ø3.75

Componentes para Implantes Hexágono Interno Ø3.75



G2.3

Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 203 . 10A . CJ

Componentes para CAD/CAM




Análogo Digital
EFF 303 . 10 . D



**Link para CAD/CAM
Large**
EFF 6803 . 10A . 1 - cinta 1.0mm



EFF 2104 . 01A 
Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6903 . 08A




Scan Intraoral
EFF 9203 . 10A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



EFF 2104 . 13A 
Parafuso Hexagonal para Zirconia
Torque 32Ncm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 23.

Componentes para Prótese Parafusada Mini Pilar - Plataforma Regular



Capa de Proteção
EFF 111 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 211 . 01A . L . CJ
EFF 211 . 01A . C . CJ




Transfer Moldeira Fechada
EFF 211 . 01B . CJ



Análogo
EFF 311 . 01



Coping Provisório
EFF 411 . 01

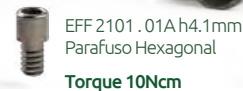

EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal
Torque 17Ncm



Coping Provisório (Laser)
EFF 411 . 01 . LR



Coping Plástico
EFF 711 . 01



Coping Plástico Base CrCo
EFF 811 . 01 . CJ




Análogo Digital
EFF 311 . 01 . D




Scan Intraoral
EFF 9211 . 01A . P . CJ




Link para CAD/CAM
EFF 6811 . 01

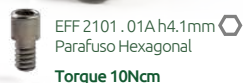


EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm

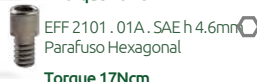

EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal
Torque 17Ncm

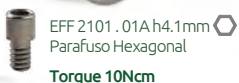


EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm

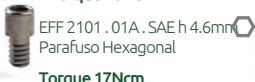


EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal
Torque 17Ncm




EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm

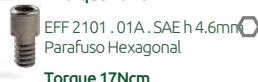

EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal
Torque 17Ncm

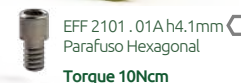

EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm

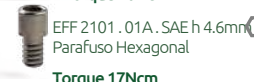

EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal
Torque 17Ncm

Componentes para Prótese Parafusada Pilar EsthetiOne



Capa de Proteção
EFF 118.01A cinta 1.5mm
EFF 118.01B cinta 2.5mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 218 . 01A . 1 . CJ




Transfer Moldeira Fechada
EFF 218 . 01B . 1 . CJ



Análogo do Implante
EFF 318 . 01



Munhão Provisório
EFF 418 . 01A C/AR
EFF 418 . 01B S/AR

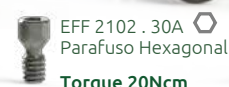

EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



Coping Plástico base CrCo
EFF 818 . 01A C/AR
EFF 818 . 01B S/AR




Análogo Digital
EFF 318 . 01 . D



Link para CAD/CAM
EFF 6818 . 01A C/AR
EFF 6818 . 01B S/AR




Scan Intraoral
EFF 9218 . 01A . P . CJ

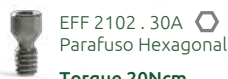

EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

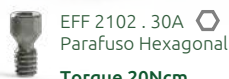

EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm













































EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Chaves Digitais

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
 17.50mm EFF 7001 . A	 17.50mm EFF 7006 . A	 17.50mm EFF 7002 . A	 17.50mm EFF 7003 . A	 17.50mm EFF 7004 . A	 17.50mm EFF 7005 . A	 17.50mm EFF 7007 . A	 17.50mm EFF 7008 . A	 17.50mm EFF 7009 . A	 17.50mm EFF 7010 . A	 17.50mm EFF 7021 . A	 17.50mm EFF 7022 . A
 23.00mm EFF 7001 . B	 23.00mm EFF 7006 . B	 23.00mm EFF 7002 . B	 23.00mm EFF 7003 . B	 23.00mm EFF 7004 . B	 23.00mm EFF 7005 . B	 23.00mm EFF 7007 . B	 23.00mm EFF 7008 . B	 23.00mm EFF 7009 . B	 23.00mm EFF 7010 . B	 23.00mm EFF 7021 . B	 23.00mm EFF 7022 . B
 29.20mm EFF 7001 . C	 29.20mm EFF 7006 . C	 29.20mm EFF 7002 . C	 29.20mm EFF 7003 . C	 29.20mm EFF 7004 . C	 29.20mm EFF 7005 . C	 29.20mm EFF 7007 . C	 29.20mm EFF 7008 . C	 29.20mm EFF 7009 . C	 29.20mm EFF 7010 . C	 29.20mm EFF 7021 . C	 29.20mm EFF 7022 . C
 1.4MM 29.20mm EFF 7016 . A	 1.6MM 29.20mm EFF 7016 . B	 1.7MM 29.20mm EFF 7016 . C	 1.8MM 29.20mm EFF 7016 . D	 2.0MM 29.20mm EFF 7016 . E	 2.5MM 29.20mm EFF 7016 . F						

ANÁLOGO DIGITAL

Chaves do Torquímetro



Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	---------	-------	--	--	-----	------------------

CURTA

 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm
EFF 7101 . A	EFF 7106 . A	EFF 7102 . A	EFF 7103 . A	EFF 7104 . A	EFF 7105 . A	EFF 7107 . A	EFF 7108 . A	EFF 7109 . A	EFF 7110 . A	EFF 7121 . A	EFF 7122 . A

MÉDIA

 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm
EFF 7101 . B	EFF 7106 . B	EFF 7102 . B	EFF 7103 . B	EFF 7104 . B	EFF 7105 . B	EFF 7107 . B	EFF 7108 . B	EFF 7109 . B	EFF 7110 . B	EFF 7121 . B	EFF 7122 . B

LONGA

 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm			 29.20mm	 29.20mm
EFF 7101 . C	EFF 7106 . C	EFF 7102 . C	EFF 7103 . C	EFF 7104 . C	EFF 7105 . C	EFF 7107 . C	EFF 7108 . C			EFF 7121 . C	EFF 7122 . C

TORQUÍMETRO



EFF 7600 . CJ



EFF 000453

Kits Protéticos

EFF00455 – Kit Protético ALL IN ONE FULL

EFF00455.CP – Estojo p/Kit Protético

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta

EFF7108.A – Chave para Torquímetro Fenda curta

EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm curta

EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7110.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.50mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7101.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm média

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7108.B – Chave para Torquímetro Fenda média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7110.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.50mm

EFF000453 – Torquímetro



EFF00455.1 – Kit Protético ALL IN ONE

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF000453 – Torquímetro



EFF00456 – Kit Protético EASY

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média



Kits Scan Intraoral

EFF00459 – Kit Scan Intraoral

*confira kit completo com 18 Scan Intraorais a escolher.



Etiqueta

eee
DENTAL COMPONENTES

Registro/Register/Grabar ANVISA:

Código do Produto REF

Sistema Multi Plataforma

Contêm/Contains/Contiene:

Matéria-prima/feedstock/Materia prima:

Responsável Técnico/Technical Manager/Responsable Técnico: Dr. Flavio Rosa de Oliveira | CRO-SP 90026

Fabricante

Representante Técnico

Representante Europeu

Número ANVISA

Lote do Produto

Produto Não Estéril

Data de Fabricação

Data de Validade

Atenção! Consultar instrução
Não Reutilizar
Não Estocar
Mantenha ao Abrigo do Sol
Conserve Seco

Consultar Instruções de Uso

EFF DENTAL COMPONENTES LTDA
RUA/STREET/CALE: CAIO GRACO, 105/109 | VL. ROMANA | CEP: 05044-000
SÃO PAULO - SP - BRASIL | CNPJ: 14.776.044/0001-12
I.E.: 146.829.212.110 | Indústria Brasileira
☎ +55 11 3059.2200

Obelis SA
Boulevard Général Wahit 53, 1030 Brussels, BELGIUM
✉ mail@obelis.net ☎ +32 2.732.59.54

E2 - 7.3.01 R01 - 22/01/2021

eee
DENTAL COMPONENTES

Registro/Register/Grabar ANVISA:

Código do Produto REF

Sistema Multi Plataforma

Contêm/Contains/Contiene:

Matéria-prima/feedstock/Materia prima:

Responsável Técnico/Technical Manager/Responsable Técnico: Dr. Flavio Rosa de Oliveira | CRO-SP 90026

Fabricante

Representante Técnico

Representante Europeu

Número ANVISA

Lote do Produto

Produto Estéril

Data de Fabricação

Data de Validade

Atenção! Consultar instrução
Não Reutilizar
Não Estocar
Mantenha ao Abrigo do Sol
Conserve Seco

Consultar Instruções de Uso

EFF DENTAL COMPONENTES LTDA
RUA/STREET/CALE: CAIO GRACO, 105/109 | VL. ROMANA | CEP: 05044-000
SÃO PAULO - SP - BRASIL | CNPJ: 14.776.044/0001-12
I.E.: 146.829.212.110 | Indústria Brasileira
☎ +55 11 3059.2200

Obelis SA
Boulevard Général Wahit 53, 1030 Brussels, BELGIUM
✉ mail@obelis.net ☎ +32 2.732.59.54

E1 - 7.3.01 R11 - 22/01/2021

Informações Adicionais:

- * Observe sempre o torque máximo para cada parafuso.
- * Consulte o site da EFF Dental e saiba mais sobre a política de troca e devolução de produtos: <https://effdental.com.br/troca-e-devolucao>.
- * Consulte os vendedores e distribuidores da EFF Dental e saiba mais sobre a política de preços e parcelamento dos produtos.



EEEF[®]

DENTAL COMPONENTES

www.efdental.com.br

EFF DENTAL_CATÁLOGO DE PRODUTOS HI_R05 DATA 08/06/2021

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

☎ 11 3059.2200 | @ atendimento@efdental.com.br | 🌐 www.efdental.com.br

📘 facebook.com/efdental | 📷 instagram.com/efdental